










GB	Instructions for use	NL	Gebruiksaanwijzing	DE	Gebrauchsanweisung
AR	تعليمات الاستخدام	BA	Uputstvo za upotrebu	CZ	Návod k použití
DK	Brugsanvisning	ES	Instrucciones de uso	FI	Käyttöohje
FR	Mode d'emploi	GR	Οδηγίες χρήσης	HR	Upute za uporabu
ID	Petunjuk Penggunaan	LT	Naudojimo instrukcijos	LV	Lietošanas instrukcija
NO	Bruksanvisning	PL	Instrukcja użycia	PT	Instruções de uso
RO	Instructiuni de folosire	SE	Bruksanvisning	SI	Navodila za uporabo
SK	Inštrukcie na používanie	UA	Інструкція із застосування		

REF

C2B4	C2B5	C2B6	C2B7
C2B8	C2C6	N2B5	C2B4V
C2B5V	C2B6V	C2B7V	C2B8V
C2B4-6	C2B4V-6	C2B5-6	C2B5V-6
C2B6-6	C2B7-6	C2B7V-6	C2B6V-6
N2B5-6	N2B4	N2B6	



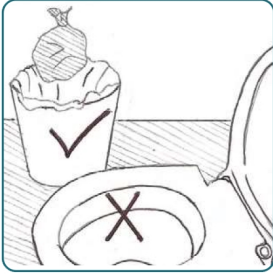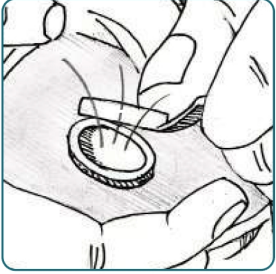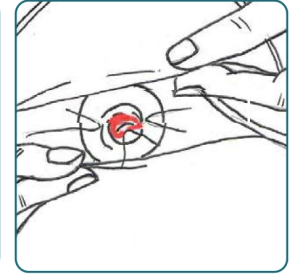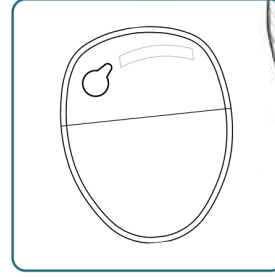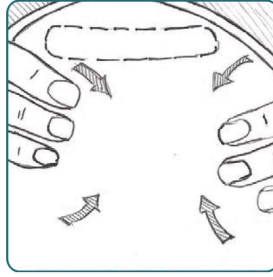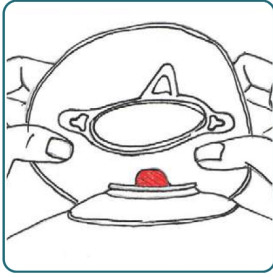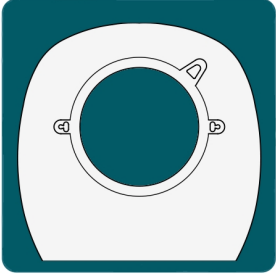

GB - Instructions for use


Intended Use, Product Description and Material Information

Ostomy pouches are used to collect waste from the body and are usually attached to the skin over a surgically made stoma.

Zensiv Ostomy products are a range of 1-piece and 2-piece ostomy pouches and 2-piece flanges in various sizes and shapes. All 1-piece pouches and 2-piece flanges feature a skin friendly hydrocolloid wafer for adhesion to the body and this is protected before use with a release film that shows a cutting guide. The product pouch is manufactured from odour barrier film with a comfort non-woven layer and a carbon filter for odour control (for ileostomy and colostomy). Ileostomy pouches have either a roll up drain port secured with an integral 'velcro' type closure or there are clamps and soft ties supplied in each box. For urostomy the pouches carry a soft polymer tap for easy drainage. All pouches have a viewing window to inspect the stoma if needed. Some ranges feature a vent with lid for venting the pouch if required.

All ZenSiv Ostomy products are latex-free and do not contain ingredients of animal origin. The products are non-sterile and can be used in any appropriate circumstances where the attending physician or healthcare professional decides a non-sterile product may be applied.

Warnings-Precautions

- 
- Each pouch is for single use only. Do not re-use. Re-use can lead to cross-contamination.
 - Use only as directed by your healthcare professional.
 - Read the instructions prior to use.
 - Discontinue use and contact your healthcare professional if you experience any allergic reactions or problems when using the pouches.

Contra-indications

These devices should not be used by anyone with a known sensitivity to: polyethylene, polyamide, medical charcoal, synthetic polymer, ethylene vinyl acetate, polypropylene, polyester, polyisobutylene, carboxymethylcellulose, pectin or glycerine.

Storage Conditions

It is best to store your products in a cool dry place with a guidance of temperature from 0°C to 27°C as is noted on the product label.

Serious Incidents

Should a serious incident arise as a result of using the product please report this immediately to the manufacturer and the Competent Authority in the country where you reside.

Shelf Life

Use by the expiry date noted on the label.

Collect your materials

Make sure that all necessary materials are ready for use. Collect a measuring guide, a pair of scissors, a pen, wet and dry gauze and a stoma pouch and flange.

Choose the right size

Measure your stoma with a measuring guide and cut (if necessary) the flange to the right size of the stoma. Make sure that you choose the right size so that the stoma and surrounding skin will stay healthy. Allow a maximum of 2 mm of space between your stoma and flange for a safe and correct fit. If the size is too big, your faeces will damage the skin. If the size is too small, the flange will damage the stoma. Over time your stoma may change shape or size, so periodically measurements may be required again to prevent any leakage.

Prepare your skin

Support the skin and remove the flange carefully, do not tear off but push the skin back from the flange, use a wet gauze if necessary. Wash the skin surrounding your stoma with warm and unperfumed water. Do not use anything that contains alcohol, perfume or ether to clean your skin as it can cause damage. Do not rub the skin too hard as this might lead to skin damage. Dry the skin carefully and thoroughly to ensure that your pouch adheres well.

Optional: If your skin is irritated and sore you can use skin barrier cream, hydrocolloid powder or skin barrier wipes. Apply the powder, skin barrier cream or wipe gently to the surrounding skin.

Fit your base plate

Remove the release paper of the base plate. Stretch the skin of your abdomen with a flat hand and place the base plate over your stoma into the right position (start at the bottom and work your way to the top). Work your fingers around the base plate so that the hydrocolloid bonds well onto the skin and make sure that the plate is secure.

Apply your pouch

Take your pouch and click the pouch onto the ring of base plate. Work your way from the bottom to the top of the ring. Make sure that your pouch is secure and control the complete seal of the pouch with your fingers.

Vent

If the pouch is full of gasses (ballooning) or if there is no air in the pouch (a vacuum) the vent can be used to let air in or out of the pouch. Make sure that the pouch is not full of faeces when opening the vent. If the pouch is full than empty the pouch or change it for a fresh one. The vent can be opened by taking off the lid. Carefully close the lid after venting.

Viewing window

The ostomy pouch includes a viewing window which makes it possible to inspect the stoma as well as the output from the stoma. It is also very helpful when applying the pouch to make sure it is located correctly over the stoma. Lift up the non-woven of the viewing window for inspection.

Disposal of your pouch

Remove your pouch and dispose of it in the trash. Do not flush your used pouch down the toilet because this will block your sewage system.

Frequency of pouch change

Change/empty your pouch as advised by your healthcare professional.

Beoogd gebruik, productbeschrijving en materiaal informatie

Stomamaterialen worden gebruikt om afvalstoffen uit het lichaam op te vangen en worden meestal aan de huid bevestigd rondom een chirurgisch gemaakte stoma.

Zensiv producten zijn een reeks van 1-delige en 2-delige stomamaterialen en 2-delige huidplaten in verschillende maten en vormen. Alle 1-delige zakjes en 2-delige huidplaten hebben een huidvriendelijke hydrocolloïde huidplaat voor hechting aan het lichaam. De hydrocolloïde huidplaat is voorzien van een beschermfolie met maataanduiding voor het uitknippen op de juiste maat. Het stomazakje is vervaardigd van een folie met geurbarrière met een comfortabele non-woven laag en een koolstoffilter voor geurneutralisatie (voor ileostomie en colostomie). Ileostomiezakjes hebben ofwel een oprolbare sluiting met een geïntegreerde klittenband sluiting of er zijn klemmen en zachte metalen strips meegeleverd in elke doos. De urostomiezakjes zijn uitgerust met een zacht kunststof kraantje voor eenvoudige leging van het zakje. Alle zakjes hebben een kijkvenster om indien nodig de stoma te kunnen inspecteren. Sommige producten zijn voorzien van een ventiel voor het eventueel ontluchten van het zakje.

Alle ZenSiv producten zijn latexvrij en bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong. De producten zijn niet-steriel en kunnen worden gebruikt in alle geschikte omstandigheden waarin de behandelend arts of zorgverlener besluit dat een niet-steriel product mag worden toegepast.

Waarschuwingen-voorzorgsmaatregelen

- Elk product is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting.
- Gebruik alleen zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.
- Lees vóór gebruik de instructies.
- Stop het gebruik en neem contact op met uw arts als u allergische reacties of problemen ervaart tijdens het gebruik van het product.

Contra-indicaties

Deze producten mogen niet worden gebruikt door iemand met een bekende gevoeligheid voor: polyethyleen, polyamide, medische houtskool, synthetisch polymeer, ethyleenvinylacetaat, polypropyleen, polyester, polyisobutyleen, carboxymethylcellulose, pectine of glycerine.

Opslagcondities

Producten bewaren op een koele, droge plaats en bij een temperatuur van 0°C tot 27°C, zoals vermeld op het productetiket.

Ernstige incidenten

Mocht er zich een ernstig incident voordoen als gevolg van het gebruik van het product, meldt dit dan onmiddellijk aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in het land waar u woont.

Houdbaarheid

Te gebruiken tot de vervaldatum vermeld op het etiket.

Verzamel je materialen

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaar zijn voor gebruik: een maatkaart (mal), een schaar, een pen, nat en droog gaas en een stomazakje en huidplaat.

Kies de juiste maat

Meet uw stoma met een maatkaart en/of mal en knip (indien nodig) de huidplaat op de juiste maat van de stoma. Zorg ervoor dat u de juiste maat kiest, zodat de stoma en de omliggende huid gezond blijven. Laat maximaal 2 mm ruimte tussen uw stoma en de huidplaat voor een veilige en correcte pasvorm. Als de maat te groot is, beschadigt de ontlasting de huid. Als de maat te klein is, zal de huidplaat de stoma beschadigen. Na verloop van tijd kan uw stoma van vorm of grootte veranderen, dus periodieke metingen kunnen opnieuw nodig zijn om lekkage te voorkomen.

Vorbereiding van de huid

Ondersteun de huid en verwijder de huidplaat voorzichtig, ruk niet af maar duw de huid terug van de huidplaat, gebruik indien nodig een nat gaasje. Was de huid rondom uw stoma met warm en ongeparfumeerd water. Gebruik niets dat alcohol, parfum of ether bevat om uw huid te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken. Wrijf niet te hard over de huid, dit kan leiden tot huidbeschadiging. Droog de huid zorgvuldig en grondig om ervoor te zorgen dat de huidplaat goed hecht.

Optioneel: als uw huid geïrriteerd en pijnlijk is, kunt u huidbeschermingscrème, hydrocolloïde poeder of huidbeschermingsdoekjes gebruiken. Breng de poeder, de huidbeschermende crème of de huidbeschermingsfilm aan op de omliggende huid.

Aanbrengen van de huidplaat

Verwijder de beschermfolie van de huidplaat. Strek de huid van de buik met een platte hand en plaats de huidplaat over de stoma in de juiste positie (begin onderaan en werk zo verder naar boven). Druk de hydrocolloïde huidplaat goed aan rondom de stoma, zodat deze goed hecht en zorg er voor dat de huidplaat goed vastzit. Plaats uw hand over de huidplaat en zorg ervoor dat een goede hechting ontstaat.

Aanbrengen van het zakje

Neem het zakje en klik het zakje op de ring van de huidplaat. Werk van onder naar boven. Zorg ervoor dat uw zak veilig is aangesloten en controleer de volledige connectie van de zak op de huidplaat met uw vingers.

Ventiel

Als het zakje vol is met gas (ballooning) of als er geen lucht in de zak zit (een vacuüm), kan het geïntegreerde ventiel worden gebruikt om lucht in of uit het zakje te laten. Zorg ervoor dat het zakje niet vol zit met ontlasting bij het openen van de ventiel. Als het zakje vol is, leeg dan eerst het zakje of vervang het voor een nieuwe. Het ventiel kan worden geopend door het dopje eraf te halen. Sluit het dopje zorgvuldig na het ontluchten.

Kijkvenster

Het stomazakje heeft een kijkvenster dat het mogelijk maakt om zowel de stoma als de output van de stoma te inspecteren. Het is ook erg handig bij het aanbrengen van het zakje om te controleren of de huidplaat goed geplaatst is rondom de stoma. Til het non-woven van het kijkvenster omhoog voor inspectie.

Verwijderen van het zakje

Verwijder uw zak en gooi deze in de prullenbak. Spoel het gebruikte zak niet door het toilet, omdat de riolering hierdoor verstopt kan raken.

Vervangen van het zakje

Vervang en/of leeg het zakje zoals geadviseerd door uw zorgverlener.


Verwendungszweck, Produktbeschreibung und Materialangaben

Stomabeutel werden zur Sammlung von Körperausscheidungen verwendet und werden gewöhnlich über einem chirurgisch angelegten Stoma auf der Haut angebracht.

Zensiv Stomaprodukte sind eine Reihe von 1- und 2-teiligen Stomabeuteln und 2-teiligen Flanschen in verschiedenen Größen und Formen. Alle 1-Beutel und 2-teiligen Flanschen sind mit einer hautfreundlichen Hydrokolloid-Platte zur Haftung auf dem Körper ausgestattet, die vor der Anwendung mit einem Trennfilm mit Schneidföhrung geschützt ist. Der Produktbeutel wird aus einer geruchsneutralisierenden Folie mit einer Vliesschicht und einem Aktivkohlefilter zur Geruchskontrolle (für Ileostomie und Kolostomie) hergestellt. Ileostoma-Beutel haben entweder einen aufrollbaren Auslass, der mit einem integrierten Klettverschluss verschlossen wird, oder es befinden sich in jeder Schachtel Klemmen und weiche Bänder. Für Urostoma sind die Beutel mit einem weichen Polymer-Hahn zur einfachen Drainage ausgestattet. Alle Beutel sind mit einem Sichtfenster ausgestattet, um das Stoma gegebenenfalls zu inspizieren. Bestimmte Reihen haben eine Entlüftung, um den Beutel gegebenenfalls zu entlüften.

Alle ZenSiv Stomaprodukte sind latexfrei und enthalten keine Inhaltsstoffe tierischer Herkunft. Die Produkte sind nicht steril und können unter allen gegebenen Umständen genutzt werden, wenn der behandelnde Arzt oder die medizinische Fachkraft entscheidet, dass ein nicht-steriles Produkt angewendet werden kann.

Warnungen-Vorsorgemaßnahmen

- 
- Jeder Beutel dient nur der einmaligen Anwendung. Nicht wiederverwenden. Wiederverwendung kann Kreuzkontamination verursachen.
 - Nur nach Anweisung Ihrer medizinischen Fachkraft anwenden.
 - Vor der Anwendung die Anleitung lesen.
 - Stellen Sie die Nutzung der Beutel ein und wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft, wenn die Anwendung Beutel allergische Reaktionen auslöst oder sonstige Probleme verursacht.

Kontraindikationen

Diese Produkte sollten nicht von Personen mit einer bekannten Empfindlichkeit vor folgenden Stoffen verwendet werden: Polyethylen, Polyamid, Medizinalkohle, synthetische Polymere, Ethylen-Vinylacetat, Polypropylen, Polyester, Polyisobuten, Carboxymethylcellulose, Pektin oder Glycerin.

Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte an einem kühlen, trockenen Ort, bei einer Temperatur zwischen 0°C bis 27°C gelagert werden, wie es auch auf dem Produktetikett verzeichnet ist.

Schwerer Zwischenfall

Falls sich in Folge der Anwendung dieses Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, bitte sofort den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Heimatland informieren.

Haltbarkeit

Bis zum auf dem Etikett angezeigten Verfallsdatum verwenden.

Sammeln Sie Ihre Materialien

Sorgen Sie dafür, dass alle benötigten Materialien gebrauchsfertig sind. Legen Sie eine Lineal oder Maßband, eine Schere, einen Stift, eine befeuchtete und eine trockene Mullbinde, sowie einen Stomabeutel und Flansch zurecht.

Wählen Sie die richtige Größe

Messen Sie Ihr Stoma mit einem Lineal oder Maßband und schneiden Sie (falls erforderlich) den Flansch je nach Größe des Stomas zu. Achten Sie darauf, die richtige Größe zu wählen, damit das Stoma und die das Stoma umgebende Haut gesund bleiben. Lassen Sie maximal 2 mm Zwischenraum zwischen Ihrem Stoma und dem Flansch, damit es sicher und genau passt. Wenn der Flansch zu groß ist, kann Ihr Kot die Haut beschädigen. Wenn er zu klein ist, kann der Flansch die Haut beschädigen. Im Laufe der Zeit kann sich die Form oder Größe des Stomas verändern, daher können regelmäßige neue Messungen erforderlich sein, um Leckagen zu vermeiden.

Bereiten Sie Ihre Haut vor

Stützen Sie die Haut und entfernen Sie den Flansch vorsichtig, nicht abreißen, sondern die Haut vom Flansch wegdrücken, gegebenenfalls eine befeuchtete Mullbinde verwenden. Die Haut um Ihr Stoma mit warmem und nicht parfümiertem Wasser waschen. Zur Reinigung Ihrer Haut keine Mittel verwenden, die Alkohol, Parfüm oder Ether enthalten, da diese die Haut beschädigen können. Reiben Sie die Haut nicht zu fest, das kann die Haut beschädigen. Trocknen Sie die Haut vorsichtig und gründlich, damit Ihr Beutel gut haftet.

Optional: Wenn Ihre Haut gereizt und strapaziert ist, können Sie Skin Barrier Creme, Hydrokolloid-Pulver oder Skin Barrier Wipes verwenden. Das Pulver, die Skin Barrier Creme oder die Wipes sanft auf die das Stoma umgebende Haut auftragen.

Ihre Basisplatte anbringen

Das Trennpapier der Basisplatte abnehmen. Die Haut des Bauches mit flacher Hand straffen und die Basisplatte in die korrekte Position über dem Stoma platzieren (unten anfangen und nach oben hin arbeiten). Drücken Sie die Basisplatte mit den Fingern an, damit das Hydrokolloid gut auf der Haut haftet und vergewissern sie sich, dass die Platte gut befestigt ist.

Ihren Beutel anlegen

Den Beutel auf den Ring der Basisplatte klicken. Arbeiten Sie dabei von unten am Ring nach oben. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Beutel korrekt befestigt ist und prüfen Sie mit den Fingern die gesamte Dichtung des Beutels.

Entlüften

Wenn sich viel Gas im Beutel angesammelt hat (Aufblähen) oder wenn sich keine Luft im Beutel befindet (Vakuum), kann die Entlüftung verwendet werden, um Luft in den Beutel zu lassen oder entweichen zu lassen. Achten Sie darauf, dass der Beutel beim Öffnen der Entlüftung nicht mit Kot gefüllt ist. Den Beutel entleeren, oder durch einen frischen Beutel ersetzen, wenn er voll ist. Die Entlüftung kann durch Abnehmen des Deckels geöffnet werden. Den Deckel nach dem Entlüften vorsichtig schließen.

Sichtfenster

Im Stomabeutel befindet sich ein Sichtfenster, das die Möglichkeit bietet, das Stoma und dessen Ausscheidungen zu inspizieren. Das Sichtfenster ist auch beim Anlegen des Beutels sehr hilfreich, da man sich so vergewissern kann, dass er korrekt über dem Stoma positioniert wird. Heben Sie zur Inspektion das Vlies des Sichtfensters an.

Entsorgung Ihres Beutels

Entfernen Sie Ihren Beutel und entsorgen Sie ihn im Müll. Spülen Sie Ihren gebrauchten Beutel nicht durch die Toilette, da es sonst zur Verstopfung der Kanalisation kommt.

Häufigkeit des Beutelwechsels

Wechseln bzw. entleeren Sie Ihren Beutel gemäß den Empfehlungen Ihrer medizinischen Fachkraft.

تعليمات الاستخدام - AR

الاستخدام المقصود وصف المنتج ومعلومات المواد

تُستخدم أكياس الاستوما لجمع الفضلات من الجسم وعادة ما يتم ربطها بالجسد فوق فتحة الفغر ستوما المصنوعة جراحياً.

منتجات الاستوما زينسيف هي عبارة عن مجموعة من أكياس فغر ستوما قطعة واحدة وقطعتين وحلقه من قطعتين بأحجام وأشكال مختلفة. تحتوي جميع الأكياس ذات القطعة الواحدة والقطعتين على رقاقة مائية غروانية صديقة للبشرة للالتصاق بالجسم وهذا محمي قبل الاستخدام مع فيلم إطلاق يظهر دليل القطع. يتم تصنيع كيس المنتج من فيلم حاجز الرائحة مع طبقة مريحة غير منسوجة وفلتر كربون للتحكم في الرائحة (فغر اللانفاقي البوستومي وفغر القولون كولوستومي). تحتوي أكياس فغر اللانفاقي البوستومي إما على منفذ تصريف متدرج مؤمن بإغلاق متكامل من نوع "الفيلكرو" أو توجد مشابه وروابط لينة في كل صندوق. بالنسبة إلى فغر البول ، تحمل الأكياس حنفية بوليمر ناعمة لسهولة التصريف. تحتوي جميع الأكياس على نافذة عرض لفحص الشغرة إذا لزم الأمر. تحتوي بعض النطاقات على فتحة تهوية مع غطاء لتنفيس الحقيبة إذا لزم الأمر.

جميع منتجات زينسيف للمفاغره خالية من اللاتكس ولا تحتوي على مكونات من أصل حيواني. المنتجات غير معقمة ويمكن استخدامها في أي ظروف مناسبة يقرر فيها الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية منتجاً غير معقم.

تحذيرات - احتياطات

- كل كيس للاستخدام الفردي فقط - لا تعد الاستخدام - يمكن أن تؤدي إعادة الاستخدام إلى التلوث المتبادل.
- استخدم فقط حسب توجيهات أخصائيي الرعاية الصحية الخاص بك.
- اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.
- توقف عن الاستخدام واتصل بأخصائيي الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت أي ردود فعل أو حساسية عند استخدام الأكياس.



موانع الاستخدام

لا ينبغي استخدام هذه الأجهزة من قبل أي شخص لديه حساسية معروفة تجاه: البولي إيثيلين أو البولي أميد أو الفحم الطبي أو البوليمر الصناعي أو أسيتات فينيل الإيثيلين أو البولي بروبيلين أو البوليستر أو بولي أيزوبوتيلين أو كربوكسي ميثيل سلولوز أو البكتين أو الجلوسرين.

شروط التخزين

من الأفضل تخزين منتجاتك في مكان بارد وجاف مع توجيه درجة الحرارة من 0 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية كما هو موضح على ملصق المنتج.

حوادث خطيرة

في حالة وقوع حادث خطير نتيجة لاستخدام المنتج ، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في البلد الذي تقيم فيه على الفور.

مدة الصلاحية

الاستخدام بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق.

اجمع موادك

تأكد من أن جميع المواد الضرورية جاهزة لجمع دليل القياس ، ومقص ، وقلم ، وشاش رطب وجاف وكيس الفغر والقاعده.

اتر المقاس المناسب

قم بقياس فتحة الفغر ستوما باستخدام دليل قياس وقص (إذا لزم الأمر) الحافة إلى الحجم الصحيح للفتحة. تأكد من اختيار الحجم المناسب بحيث تبقى الفتحة والجلد المحيط بصحة جيدة. اترك مسافة لا تقل عن 2 مم بين الفتحة وحافة القاعده من أجل ملائمة آمنة وصحيحة. إذا كان الحجم كبيراً جداً ، فإن برازك سيتلف الجلد. إذا كان الحجم صغيراً جداً ، فسوف تتلف حافة القاعده فتحة الفغر ستوما- بمرور الوقت قد يتغير شكل الفتحة أو حجمها ، لذا قد يلزم إجراء قياسات دورية مرة أخرى لمنع أي تسرب.

تجهيز جلدك

دعم الجلد وإزالة القاعده بعناية ، لا تنزعها ولكن ادفع الجلد للخلف من الحافة ، استخدم الشاش الرطب إذا لزم الأمر. اغسل الجلد المحيط بفتحة الفغرسوما بالماء الدافئ وغير المعطر. لا تستخدم أي شيء يحتوي على الكحول أو العطور أو الأثير لتنظيف بشرتك لأنها يمكن أن تسبب الضرر. لا تترك الجلد بشدة لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الجلد. جفف الجلد بعناية ودقة للتأكد من أن الكيس يلتصق بشكل جيد. اختياري: إذا كان جلدك متهيجاً ومتقرحاً ، يمكنك استخدام كريم حماية البشرة أو مسحوق هيدروكولويد أو مناديل حماية الجلد. ضع المسحوق أو كريم حماية البشرة أو امسح برفق على الجلد المحيط.

تناسب القاعده

قم بإزالة ورقة تحرير القاعده. مدد جلد بطنك بيد مسطحة وضع القاعده فوق بطنك في الموضع الصحيح (ابتداءً من الأسفل وشق طريقك إلى الأعلى). مرر أصابعك حول القاعده بحيث يتم لصقها جيداً على الجلد وتأكد من أن القاعده آمنة.

تركيب الكيس

ضع حلقة الكيس على حلقة القاعده وشق طريقك من الأسفل إلى أعلى الحلقة. تأكد من أن الكيس الخاص بك آمن وتحكم في إغلاق تام للكيس على القاعده بأصابعك.

فتحة التهويه

إذا كان الكيس مليئاً بالغازات (بالونات) أو إذا لم يكن هناك هواء في الكيس (فراغ) ، يمكن استخدام فتحة التهوية للسماح بدخول الهواء أو الخروج منه. تأكد من أن الكيس ليس ممتلئاً بالبراز عند فتح الفتحة. إذا كانت الكيس ممتلئاً يفضل إفراغه أو تغييره بكيس جديد. يمكن فتح فتحة التهوية بخلع الغطاء. أغلق الغطاء بحرص بعد التهويه.

شباك المشاهده

يحتوي كيس الفغر ستوما على نافذة مشاهدة تجعل من الممكن فحص فتحة الفغر ستوما وكذلك الإخراج من الفتحة. كما أنه مفيد جداً عند تطبيق الكيس للتأكد من وضعها بشكل صحيح فوق الفتحة ارفع الطبقة غير المنسوجة من نافذة العرض للمشاهده.

التخلص من الكيس

قم بإزالة الكيس والتخلص منه في سلة المهملات. لا تفرغ الكيس المستخدم في المراض لأن ذلك سيعيق نظام الصرف الصحي.

تكرار تغيير الكيس

قم بتغيير / إفراغ الكيس كما ينصح به أخصائيي الرعاية الصحية الخاص بك.

BA - Uputstvo za upotrebu

Namjena, opis proizvoda i informacije o materijalima

Stoma vrećice se koriste za prikupljanje tjelesnih izlučevina i obično se pričvršćuju na kožu nakon hirurškog zahvata stome.

ZenSiv Stoma proizvodi su podijeljeni na jednodijelne i dvodijelne stoma sisteme vrećica sa podlogama različitih oblika i veličina. Svi jednodijelni i dvodijelni sistemi vrećica iz ZenSiv programa su za kožu ugodni i izrađeni su od hidrokoloidnih materijala koji se pričvršćuju za kožu. Folija koja se nalazi na hidrokoloidnim podlogama čini zaštitni sloj koji se skida prije samog pričvršćivanja na kožu, što se detaljno može vidjeti na vodiču za rezanje.

Vrećica za stomu izrađena je od folije za zaštitu od mirisa sa udobnim netkanim i karbonskim filterom za kontrolu mirisa. (ileostoma i kolostoma). Vrećice za ileostomu imaju otvor za namotavanje koji se učvršćuje integralnim zatvaračem tipa "čičak" ili se u svakoj kutiji nalaze stezaljke i meke sponse. Za urostomu vrećice nose meku polimernu slavinu za drenažu. Sve vrećice imaju prozor za pregled stome u slučaju potrebe. Neki modeli vrećica imaju posebne otvore (vent otvor) s poklopcem za odzračivanje vrećice, ako je potrebno.

Svi ZenSiv Stoma proizvodi ne sadrže lateks i ne sadrže sastojke životinjskog porijekla. Proizvodi su nesterilni i mogu se koristiti u bilo kojim odgovarajućim okolnostima kada dežurni ljekar ili zdravstveni radnik odluče da se može primijeniti nesterilni proizvod.

Upozorenja-Predostrožnosti

- Svaka vrećica iz asortimana ZenSiv stoma programa je jednokratna i ne može se ponovo koristiti. Ponovno korištenje vrećice može izazvati unakrsnu-kontaminaciju.

- Koristiti prema uputama zdravstvenog radnika.

- Pročitati upute prije upotrebe.

- U slučaju bilo kakve alergijske reakcije ili probleme prilikom upotrebe vrećica, prekinuti korištenje i obavijestiti svog zdravstvenog radnika.

Kontraindikacije

ZenSiv proizvode ne smiju koristiti osobe sa osjetljivošću na: polietilen, poliamid, medicinski ugljen, sintetički polimer, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, polizobutilen, karboksimetilcelulozu, pektin ili glicerol.

Uslovi skladištenja

Proizvodi se čuvaju na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi od 0°C do 27°C, kako je navedeno i na etiketi proizvoda.

Ozbiljni slučajevi

Ako se zbog upotrebe proizvoda dogodi ozbiljan incident, molimo da to odmah prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu u državi u kojoj živite.

Rok trajanja

Rok trajanja naveden na etiketi.

Pripremite svoj materijal za upotrebu

Provjerite jesu li svi potrebni materijali spremni za upotrebu. Pripremite mjerni vodič, makaze, olovku, vlažnu i suhu gazu i vrećicu za stomu.

Izaberite pravu veličinu

Izmjerite promjer otvora stome vodilicom za mjerenje i izrežite (ako je potrebno) podlogu na pravu veličinu stome. Obavezno odaberite pravu veličinu kako bi stoma i okolna koža ostali zdravi. Omogućite maksimalno 2 mm prostora između stome i podloge za sigurno i pravilno postavljanje. Ako je veličina prevelika, fekalije će oštetiti kožu. Ako je veličina premala, podloga će oštetiti kožu na stomaku. Vremenom vaša stoma može promijeniti oblik ili veličinu, pa će povremeno biti potrebna ponovna mjerenja kako bi se spriječilo curenje.

Pripremite Vašu kožu

Poduprite kožu i pažljivo uklonite podlogu, ne odvajajte, već gurnite kožu natrag sa podloge, po potrebi upotrijebite vlažnu gazu. Operite kožu oko vaše stome toplom i neparfemiranom vodom. Za čišćenje kože nemojte koristiti ništa što sadrži alkohol, parfem jer mogu prouzrokovati oštećenja. Ne trljajte kožu prejako jer bi to moglo dovesti do oštećenja kože. Osušite kožu pažljivo i temeljno kako biste osigurali da vaša vrećica dobro prijanja.

Napomena: Ako vam je koža nadražena i upaljena, možete koristiti kremu za zaštitu, hidrokoloidni puder ili maramice za zaštitu kože. Nanesite puder, kremu za zaštitu kože i nježno obrišite okolnu područje stome.

Pripremite Vašu podlogu

Uklonite zaštitni papir sa podloge. Preklopite podlogu na pola i postavite otvor na donjoj strani stome. Poravnajte kožu trbuha rukom i povucite cijelu podlogu preko stome u pravilan položaj. (krenite od dna prema vrhu). Pomičite kožu oko stome tako da se hidrokoloidna podloga pričvrsti za kožu i osigurajte da je dobro zaljepljena za kožu. Postavite ruku preko podloge i provjerite na taj način da li je stvorena jaka veza između podloge i kože.

Aplicirajte vrećicu

Vrećicu spojite sa prstenom osnovne podloge na principu "klika" Krenite od dna prema vrhu prstena. Provjerite da li je vrećica sigurna i prstima kontrolirajte vezu između vrećice i podloge.

Vent otvor

Ako je vrećica puna plinova (puše se) ili ako nema zraka u vrećici (u vakuumu), vent otvor se može koristiti za puštanje zraka u vrećicu ili iz nje. Pri otvaranju otvora provjerite da vrećica nije puna fekalija. Ako je vrećica puna, vrećicu ispraznite ili je promijenite na svježju. Otvor se može otvoriti vađenjem poklopca. Pažljivo zatvorite poklopac nakon odzračivanja.

Prozor za pregled

Vrećica za stomu uključuje prozor za gledanje koji omogućava pregled stome, kao i izlaz iz stome. Također je korisno kada aplicirate kesu kako biste bili sigurni da ste pravilno postavili preko stome. Podignite netkani prozor za pregled.

Odlaganje vrećice

Iskorištenu vrećicu bacite u smeće. Iskorištene vrećice ne smijete bacati u toalet, jer to može blokirati vašu kanalizaciju.

Učestalost mijenjaja vrećica

Promijenite / ispraznite vrećicu prema uputama vašeg zdravstvenog radnika.

CZ - Návod k použití

Účel použití, popis produktu a informace o materiálech

Stomické sáčky se používají ke shromažďování odpadu z těla a jsou obvykle přiloženy k pokožce na chirurgicky vytvořené stomii.

Produkty Zensiv Ostomy jsou řadou jednoduchých a dvoudílných stomických sáčků a dvoudílných kroužků různých velikostí a tvarů. Všechny jednoduché sáčky a dvoudílné podložky mají hydrokoloidní lepicí vrstvu šetrnou k pokožce, která slouží pro zajištění přilnutí k tělu a která je před použitím chráněna ochrannou fólií s vystřihovací šablonou. Sáček se vyrábí z fólie zabraňující zápachu s komfortní vrstvou z netkané textilie a uhlíkovým filtrem pro odbourávání zápachu (pro ileostomie a kolostomie). Ileostomické sáčky mají buď rolovací výpusť zabezpečenou integrálním uzávěrem typu suchý zip nebo se v každé krabici dodávají svorky a měkké šňůrky. V případě urostomie mají sáčky měkký polymerový uzávěr pro snadné odvádění moči.

Všechny sáčky mají kontrolní okénko, kterým lze v případě potřeby stomii kontrolovat. Některé produktové řady mají ventil s krytkou, kterým se může v případě potřeby sáček odvětrávat.

Žádné produkty ZenSiv Ostomy neobsahují latex ani složky živočišného původu. Produkty jsou nesterilní a lze je použít za jakýchkoliv vhodných okolností, kdy ošetřující lékař nebo zdravotnický pracovník rozhodne o tom, že se může použít nesterilní produkt.

Varování – bezpečnostní opatření

- Každý sáček je pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně. Opakované použití může vést ke křížové kontaminaci.
- Používejte pouze podle pokynů zdravotnického pracovníka.
- Před použitím si přečtěte návod k použití.
- Pokud se při používání sáčků vyskytnou alergické reakce nebo problémy, přerušete jejich používání a kontaktujte zdravotnického pracovníka.

Kontraindikace

Tyto pomůcky by neměla používat osoba se známou citlivostí na polyetylen, polyamid, lékařské uhlí, syntetický polymer, ethylenvinylacetát, polypropylen, polyester, polyisobutylen, karboxymethylcelulózu, pektin nebo glycerin.

Podmínky skladování

Produkty skladujte nejlépe v chladu na suchém místě s přibližnou teplotou od 0°C do 27°C, jak je uvedeno na etiketě produktu.

Vážné incidenty

Dojde-li k vážnému incidentu v důsledku používání produktu, neprodleně to oznamte výrobcí a příslušnému úřadu v zemi, ve které bydlíte.

Trvanlivost

Použijte do data spotřeby uvedeného na obalu.

Připravte si materiál

Ujistěte se, že máte připraveny všechny potřebné materiály. Připravte si měřicí šablonu, nůžky, tužku, mokrou a suchou gázu a stomický sáček a kroužek.

Zvolte správnou velikost

Změřte stomii měřicí šablonou a podle potřeby ořízněte podložku na správnou velikost stomie. Ujistěte se, že jste vybrali správnou velikost, aby stomie a okolní pokožka zůstaly zdravé. Mezi stomií a podložkou ponechejte maximálně 2 mm prostoru pro bezpečné a správné nasazení. Pokud je velikost příliš velká, stolice poškodí pokožku. Pokud je velikost příliš malá, podložka poškodí stomii. Během doby může stomie změnit tvar nebo velikost, takže může být zapotřebí pravidelné měření, aby se zabránilo úniku.

Připravte pokožku

Podepřete pokožku a opatrně sejměte podložku, neodtrávejte ji, ale tlačte pokožku zpět z podložky; v případě potřeby použijte mokrou gázu. Omyjte pokožku okolo stomie teplou a neparfémovanou vodou. K čištění pokožky nepoužívejte nic, co obsahuje alkohol, parfém nebo éter, protože to může způsobit poškození. Nemněte pokožku příliš drsně, protože by to mohlo vést k jejímu poškození. Opatrně a důkladně pokožku vysušte, abyste zajistili dobré přilnutí sáčku.

Volitelné: Pokud je vaše pokožka podrážděná nebo bolestivá, můžete použít ochranný krém, hydrokoloidní prášek nebo ochranné ubrousky. Použijte prášek, ochranný krém nebo ubrousek jemně na okolní pokožku.

Připevněte podložku

Vyndejte ochrannou fólii podložky. Plochou dlaní napněte kůži na břiše a umístěte podložku na stomii do správné polohy (postupuje zespodu nahoru). Prsty uhlazujte místo kolem podložky tak, aby hydrokoloid dobře přilnul k pokožce, a ujistěte se, že podložka je zajištěná.

Aplikujte sáček

Vezměte sáček a zacvakněte ho do kroužku podložky. Postupujte zespodu nahoru kroužku. Ujistěte se, že sáček je zajištěný a prsty zkontrolujte úplné utěsnění sáčku.

Větrací otvor

Pokud je sáček plný plynů (balónování) nebo pokud není v sáčku žádný vzduch (vakuum), lze pomocí větracího otvoru vpustit dovnitř nebo ven vzduch. Při otvírání větracího otvoru se ujistěte, že sáček není plný výměšků. Pokud je sáček plný, vyprázdněte ho nebo vyměňte za nový. Větrací otvor lze otevřít odstraněním víčka. Po odvodušnění víčko opatrně zavřete.

Kontrolní průhledné okénko

Stomický sáček má kontrolní průhledné okénko, které umožňuje kontrolovat stomii i vývod ze stomie. Při použití sáčku je také velmi užitečné ujistit se, že je správně umístěn na stomii. Zvedněte netkanou textilií kontrolního okénka k provedení kontroly.

Likvidace sáčku

Odstraňte sáček a vyhodte ho do odpadu. Použitý sáček nesplachujte do záchodu, protože by se tím mohla ucpat kanalizace.

Frekvence výměny sáčků

Vyměňujte/vyprazdňujte sáček podle pokynů zdravotnického pracovníka.


Tilsigtet anvendelse, produktbeskrivelse og materialeinformation

Stomiposer bruges til at opsamle affaldsprodukter fra kroppen og er normalt fastgjort til huden over en kirurgisk fremstillet stomi.

Zensiv Ostomy-produkter er en serie med stomiposer i 1 og 2 dele og 2-delte flanger i forskellige størrelser og former. Alle poser i 1 del og 2-delte flanger har en hudvenlig hydrokolloid-pude til fastgørelse til kroppen, og den er beskyttet inden brug med en frigivelsesfilm, der viser en klippevejledning. Produktposen er fremstillet af lugtbarrierefilm med et komfortabelt, ikke-vævet lag og et kulfilter til lugtkontrol (til ileostomi og colostomi). Ileostomiposer har enten en sammenrullet afløbsåbning, der er sikret med en integreret "velcro"-lukning, eller også er der klemmer og bløde bånd i hver æske. Til urostomi har poserne en blød polymerhane for nem dræning. Alle poser har et vindue til at inspicere stomien, hvis det skulle være nødvendigt. Nogle områder har en ventilationsåbning med låg til udluftning af posen, hvis dette kræves.

Alle ZenSiv Ostomy-produkter er latexfrie og indeholder ikke ingredienser af animalsk oprindelse. Produkterne er ikke-sterile og kan anvendes under alle omstændigheder, hvor den behandlende læge eller sundhedsperson beslutter, at et ikke-sterilt produkt kan anvendes.

Advarsler og forholdsregler

- 
- Hver pose er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Genbrug kan føre til krydskontaminering.
 - Må kun bruges som anvist af dit sundhedspersonale.
 - Læs instruktionerne inden brug.
 - Afbryd brugen og kontakt dit sundhedspersonale, hvis du oplever allergiske reaktioner eller problemer, når du bruger poserne.

Kontraindikationer

Disse enheder må ikke bruges af personer med en kendt overfølsomhed over for: polyethylen, polyamid, medicinsk trækul, syntetisk polymer, ethylvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylen, carboxymethylcellulose, pektin eller glycerin.

Opbevaringsbetingelser

Det er bedst at opbevare dine produkter på et køligt, tørt sted med en temperatur fra 0°C til 27°C som angivet på produktetiketten.

Alvorlige hændelser

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, som følge af brugen af produktet, bedes du straks indberette dette til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor du bor.

Holdbarhed

Skal bruges inden udløbsdatoen, der er angivet på etiketten.

Find dine materialer

Sørg for, at alle nødvendige materialer er klar til brug. Find en målevejledning, en saks, en pen, våd og tør gaze, en stomipose og en flange.

Vælg den rigtige størrelse

Mål din stomi med en målevejledning og klip (om nødvendigt) flangen til den rigtige størrelse, så den passer til stomien. Sørg for at vælge den rigtige størrelse, så stomien og den omgivende hud forbliver sund og rask. Tillad maksimalt et 2 mm mellemrum mellem din stomi og flangen for en sikker og korrekt tilpasning. Hvis størrelsen er for stor, beskadiger din fæces huden. Hvis størrelsen er for lille, vil flangen beskadige stomien. Over tid kan din stomi ændre form eller størrelse, så periodiske målinger kan være nødvendige igen for at forhindre lækager.

Forbered din hud

Støt huden og fjern flangen forsigtigt. Riv den ikke af, men skub huden tilbage fra flangen. Brug om nødvendigt våd gaze. Vask huden omkring din stomi med varmt og uparfumeret vand. Brug ikke noget, der indeholder alkohol, parfume eller æter til at rengøre din hud, da dette kan forårsage skade. Gnid ikke huden for hårdt, da dette kan føre til hudskader. Tør huden forsigtigt og grundigt for at sikre, at din pose klæber godt.

Valgfrit: Hvis din hud er irriteret og øm, kan du bruge en hudbarrierecreme, hydrokolloidpulver eller hudbarriereservietter. Påfør pulver, hudbarrierecreme eller aftør forsigtigt den omgivende hud.

Tilpas din bundplade

Fjern frigørelsespapiret fra bundpladen. Stræk huden på din mave med en flad hånd, og placér bundpladen over din stomi i den rigtige position (start i bunden og arbejd dig op mod toppen). Arbejd med dine fingre omkring bundpladen, så hydrokolloidet binder godt på huden, og sørg for, at pladen sidder sikkert.

Sæt posen på

Tag din pose, og klik posen på ringen på bundpladen. Arbejd dig fra bunden mod toppen af ringen. Sørg for, at din pose sidder sikkert, og kontrollér posens forsejling med fingrene.

Udluftning

Hvis posen er fuld af gasser (oppustet), eller hvis der ikke er luft i posen (et vakuum), kan udluftningen bruges til at lukke luft ind eller ud af posen. Sørg for, at posen ikke er fuld af afføring, når du åbner udluftningen. Hvis posen er fuld, skal du tømme posen eller skifte den til en ny. Udluftningen kan åbnes ved at tage låget af. Luk forsigtigt låget efter udluftningen.

Vindue

Stomiposen har et vindue, der gør det muligt at inspicere stomien såvel som udgangen fra stomien. Det er også meget nyttigt, når posen påføres for at sikre, at den er placeret korrekt over stomien. Løft det ikke-vævede vindue ved inspektion.

Bortskaf din pose

Fjern din pose og smid den i skraldespanden. Skyl ikke din brugte pose ud i toilettet, da dette kan blokere dit kloaksystem.

Hypighed af poseskift

Skift/tøm din pose som anbefalet af dit sundhedspersonale.

ES - Instrucciones de uso

Indicaciones, Descripción del Producto e Información de los Materiales

Las bolsas de ostomía se utilizan para la recogida de desechos corporales y normalmente se fijan alrededor de un estoma quirúrgico.

La gama de productos para las ostomías Zensiv comprenden bolsas de Una Pieza y de Dos piezas y apósitos de Dos Piezas de diversas medidas y formas. Todas las bolsas de Una Pieza y apósitos de Dos Piezas se distinguen por contar con un apósito hidrocoloide respetuoso con la piel que se adhiere al cuerpo. Antes de su utilización el apósito está protegido por una película que tiene impresa una guía de diámetros de corte. El producto se produce con una pared laminar que es barrera a los olores con una capa de tejido no tejido y un filtro de carbono para controlar los olores (para ileostomías y colostomías). Las bolsas para ileostomías tienen asimismo un puerto de vaciado enrollable con cierre integral, de tipo 'velcro' o mediante pinzas con sujeciones blandas que se incluyen en cada caja. Las bolsas para urostomía llevan un tapón blanco de polímero para un vaciado fácil. Todas las bolsas tienen ventana para inspeccionar el estoma cuando sea necesario. Algunas gamas tienen un puerto de ventilación con tapa para cuando se requiera evacuar gases.

Todos los productos Zensiv para Ostomías están libres de látex y no contienen ingredientes de origen animal. Los productos son no-estériles y pueden ser utilizados en cualquier circunstancia que sea adecuada en el caso de que el médico o profesional sanitario al cargo decida que se puede utilizar un producto no-estéril.

Advertencias-Precauciones

- Las bosas son únicamente de un solo uso. No reutilizar. Reutilizar puede ser causa de contaminación cruzada.
- Usar únicamente tras indicación de su profesional sanitario.
- Leer las instrucciones antes de utilizar.
- Dejar de usar y contactar con su profesional sanitaria si experimenta cualquier reacción alérgica o problema al utilizar las bolsas.



Contraindicaciones

No deben utilizarse estos dispositivos por personas con sensibilidad conocida a: polietileno, poliamida, carbón médico, polímeros sintéticos, acetato de etilen-vinilo, polipropileno, poliéster, poliisobutileno, carboximetilcelulosa, pectina o glicerina.

Condiciones de almacenamiento

Se recomienda almacenar sus productos en un lugar seco y fresco con control de temperatura de 0°C a 27°C tal como se indica en la etiqueta de producto.

Incidencias Graves

Si como resultado de la utilización del producto ocurriera una incidencia grave rogamos informe inmediatamente al fabricante y a la Autoridad Competente del país en el que resida.

Permanencia en almacén

Véase la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Reunir materiales

Asegure de tener todos los materiales necesarios preparados para su utilización. Prepare una guía de medidas, unas tijeras, bolígrafo, gasa o toallita seca y húmeda y la bolsa para el estoma.

Elija el tamaño adecuado

Mida su estoma con una guía de medidas y recorte (si es necesario) el apósito al tamaño del estoma. Asegúrese de elegir el tamaño adecuado a fin de que el estoma y la piel circundante se mantengan en buen estado. Para que encaje correctamente, no dejar más de 2 mm entre el estoma y el apósito. Si el tamaño es demasiado grande, las heces lesionarán la piel. Si el tamaño es demasiado pequeño, el apósito dañará el estoma. Con el tiempo, el estoma puede cambiar de tamaño o forma, son por tanto necesario tomar de nuevo medidas de forma periódica para prevenir fugas.

Prepare la piel

Presione la piel y retire el apósito con cuidado, sujete la piel de detrás del apósito y tire del mismo con precaución, si es necesario utilice una gasa húmeda. Limpie la piel periestomal con agua tibia sin perfumar. No utilice nada que contenga alcohol, perfume o éter para limpiar la piel ya que pueden dañarla. No frote la piel con demasiada fuerza pues puede lesionarla. Seque la piel cuidadosamente y a fondo para asegurar que el apósito se fije bien.

Opcional: Si tiene la piel irritada o ulcerada puede utilizar crema protectora, polvos hidrocoloides o toallitas protectoras, que siempre se deben aplicar con suavidad.

Colocación de la placa

Retire el papel protector de la placa. Estire la piel abdominal con la mano plana y coloque el apósito sobre el estoma en la posición correcta (empiece por abajo y vaya desplazando hacia arriba). Presione suavemente por encima del apósito alrededor del estoma para asegurar que la se adhiere correctamente.

Colocación de la bolsa

Coloque la bolsa sobre el aro de la placa y presione de abajo a arriba del aro. Asegúrese de la fijación de la bolsa y del sellado complete pasando los dedos.

Ventilación

Si la bolsa está repleta de gases (como un balón) o si no hay aire (vacío, paredes pegadas) se puede utilizar el puerto de ventilación para que entre o salga aire, según sea necesario. Hay que asegurarse de que la bolsa no esté llena de heces en el momento de abrir el puerto de ventilación. Si estuviese llena, vacíela o cámbiela por una nueva. El Puerto se abre tirando de la tapa. Cierre con cuidado tras ventilar.

Ventana de inspección

La bolsa de ostomía incluye una ventana de inspección que permite ver tanto el estoma como el efluente sin retirar la bolsa. Resulta muy útil para saber si se ha situado bien la bolsa. Aparte el panel de tejido no tejido para inspección.

Desecho de la bolsa

Retire la bolsa y déjela en la basura. No tire la bolsa por la inodoro pues podría atascar el Sistema de desagüe.

Frecuencia de cambios de bolsas.

Cambie/vacíe la bolsa siguiendo las recomendaciones del personal sanitario.

Käyttötarkoitus, tuotekuvaus ja materiaalitiedot

Avannepusseja käytetään ulosteiden keräämiseksi kehosta, ja ne kiinnitetään yleensä ihoon kirurgisesti tehdyn avanteen päälle.

ZenSivin avannevalikoimaan kuuluu 1- ja 2-osaisia avannepusseja sekä erikokoisia ja -muotoisia 2-osaisia kiinnitysrenkaita. Kaikissa 1-osaisissa pusseissa ja 2-osaisissa renkaissa on ihoystävällinen hydrokolloidiekko kehoon kiinnitystä varten. Ennen käyttöönottoa kiekkoa suojaa irrotuskalvo, jossa on leikkausohje. Tuote on valmistettu hajunestokalvosta, jossa on mukavuutta parantava kuitukerros ja hiilisuodatin hajujen hallintaa varten (ileostomiaa ja kolostomiaa varten). Ileostomiapusseissa on joko rullattava tyhjennysaukko, joka on kiinnitetty kiinteällä tarranauhalla tai vaihtoehtoisesti kunkin pakkauksen mukana tulee kiinnittämiä ja pehmeitä siteitä. Urostomiaa varten pusseissa on pehmeä polymeerihana, joka tekee tyhjentämisestä helppoa. Kaikissa pusseissa on katseluikkuna avanteen tarkistamiseksi tarvittaessa. Joissakin malleissa on kannellinen ilmaventtiili ilman poistamiseksi ulos pussista tai ilman päästämiseksi pussiin tarvittaessa.

ZenSivin avannetuotteet eivät sisällä lateksia eivätkä eläinperäisiä ainesosia. Tuotteet eivät ole steriilejä, ja niitä voidaan käyttää olosuhteissa, joissa hoitava lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen päättää, että ei-steriiliä tuotetta voidaan käyttää.

Varoitukset ja varotoimenpiteet

- Pussit on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Älä käytä niitä uudelleen. Uudelleenkäyttö voi johtaa ristikontaminaatioon.
- Käytä vain terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.
- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Lopeta käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos pussin käyttö aiheuttaa allergisia reaktioita tai koet ongelmia pussin käytössä.

Vasta-aiheet

Henkilöiden, joilla on tiedossa oleva herkkyys polyeteenille, polyamidille, lääkehiillelle, synteettiselle polymeerille, etyleenivinyliasetaatille, polypropeenille, polyesterille, polyisobuteenille, karboksimeetyyliselluloosalle, pektiinille tai glyserolille, ei tule käyttää näitä laitteita.

Varastointiolosuhteet

Tuotteita on parasta säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 0°C - 27°C, kuten tuotteen etiketissä on mainittu.

Vakavat vaaratilanteet

Jos tuotteen käytöstä seuraa vakava vaaratilanne, ilmoita siitä välittömästi valmistajalle ja asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Säilyvyys

Käytä etikettiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

Kerää tarvittavat materiaalit

Varmista, että kaikki tarvittavat materiaalit ovat käyttövalmiina. Ota mittausopas, sakset, kynä, märkä ja kuiva sideharso sekä avannepussi ja kiinnitysrenkas esille.

Valitse oikea koko

Mittaa avanteesi mittausohjeiden mukaisesti ja leikkaa (tarvittaessa) rengas oikean kokoiseksi avanteeseen. Varmista, että valitset oikean koon, jotta avanne ja sitä ympäröivä iho pysyvät terveinä. Jätä avanteen ja renkaan väliin enintään 2 mm tilaa turvallisen ja oikean istuvuuden takaamiseksi. Jos koko on liian suuri, ulosteet vahingoittavat ihoa. Jos koko on liian pieni, rengas vahingoittaa avannetta. Ajan myötä avanne voi muuttaa muotoaan tai kokoaan, joten säännöllisiä mittauksia saatetaan edellyttää vuotojen estämiseksi.

Valmistele iho

Tue ihoa ja poista rengas varovasti. Älä repäise, vaan työnnä ihoa pois päin renkaasta, ja käytä tarvittaessa märkää sideharsoa. Pese avannetta ympäröivä iho lämpimällä ja hajustamattomalla vedellä. Älä käytä alkoholia, hajusteita tai eetteriä sisältäviä aineita ihosi puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa ihoa. Älä hiero ihoa liian voimakkaasti välttääksesi ihovauriot. Kuivaa iho huolellisesti ja perusteellisesti varmistaaksesi, että pussi tarttuu hyvin.

Valinnaisesti: Jos ihosi on ärtynyt ja kipeä, voit käyttää ihon suojavoiteita, hydrokolloidijauhetta tai ihonsuojapyyhkeitä. Levitä jauhetta tai ihovoidetta ympäröivälle iholle tai pyyhi iho varovasti ihonsuojapyyhkeellä.

Aseta pohjalevy

Irrota pohjalevyn irrotuspaperi. Venyttä vatsasi ihoa tasaisella kädellä ja aseta pohjalevy avanteen päälle oikeaan asentoon (aloita alhaalta ja jatka ylöspäin). Työnnä sormillasi pohjalevyn ympäriltä niin, että hydrokolloidi tarttuu hyvin ihoon ja varmista, että levy on tukevasti paikallaan.

Aseta pussi paikalleen

Napsauta pussi pohjalevyn renkaaseen. Aloita pohjasta ja siirry kohti renkaan yläosaa. Varmista sormiesi avulla, että pussi on kiinnittynyt ja tiivistynyt tukevasti.

Ilmaventtiili

Jos pussi on täynnä kaasuja (pussi on paisunut) tai jos pussissa ei ole ilmaa (tyhjiö), ilmaventtiiliä voidaan käyttää päästämään ilmaa sisään tai ulos pussista. Varmista, että pussi ei ole täynnä ulosteita, kun avaat venttiilin. Jos pussi ei ole täynnä, tyhjennä se ensin tai vaihda uuteen. Venttiili voidaan avata ottamalla kansi pois. Sulje kansi varovasti pussin tuuletuksen jälkeen.

Katseluikkuna

Avannepussi sisältää katseluikkunan, jonka avulla voidaan tarkastaa avanne sekä avanteen ulostulo. Ikkunan avulla voidaan myös varmistaa pussia asettaessa, että pussi on asetettu avanteen päälle oikein. Nosta katseluikkunan kuitukangasta tarkistaaksesi avanteen.

Pussin hävittäminen

Irrota pussi ja hävitä se roskien mukana. Älä huuhtelee käytettyä pussia alas wc-istuimesta, sillä se tukkii viemärijärjestelmän.

Pussien vaihtoväli

Vaihda/tyhjennä pussi terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.


Notice d'utilisation, description du produit et renseignements sur le matériel

Les poches de colostomie sont utilisées pour recueillir les déchets du corps et sont généralement fixés à la peau sur une stomie opérée.

Zensiv Ostomy comporte une gamme de poches et supports 1 pièce et 2 pièces avec différentes tailles et formes. Tous les supports Zensiv sont munis d'une plaquette hydrocolloïde qui assure une bonne adhésion ainsi qu'une bonne tolérance avec la peau. Avant l'utilisation nos supports sont protégés par un film transparent montrant un guide de coupe. Les poches Zensiv sont fabriquées à partir d'un film protecteur d'odeur avec une couche de tissu non tissé de confort et un filtre au carbone pour le contrôle des odeurs (pour l'iléostomie et la colostomie). Les poches d'iléostomie sont munies d'un orifice d'évacuation à enroulement fixé à l'aide d'un velcro intégré. Pour les poches d'urostomie, les sachets sont munis d'un robinet en polymère souple pour un drainage facile. Toutes les poches ont une fenêtre de visualisation pour inspecter la stomie si nécessaire. Certaines gammes disposent d'un évent avec couvercle pour évacuer la poche si nécessaire.

Tous les produits Zensiv Ostomy sont sans latex et ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale. Les produits ne sont pas stériles et peuvent être utilisés dans toutes les circonstances appropriées lorsque le médecin traitant ou le professionnel de la santé décide qu'un produit non stérile peut être appliqué.

Précautions d'emploi

- 
- Chaque poche est destinée à un usage unique, Ne pas la réutiliser car la réutilisation peut entraîner une contamination croisée.
 - Utilisez uniquement selon les directives de votre professionnel de la santé.
 - Lisez les instructions avant de les utiliser.
 - Cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez des réactions allergiques ou des problèmes lors de l'utilisation des poches.

Contre-Indications

Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés par quiconque ayant une sensibilité connue au polyéthylène, polyamide, charbon médical, polymère synthétique, acétate d'éthylène et de vinyle, polypropylène, polyester, polyisobutylène, carboxyméthylcellulose, pectine ou glycérine.

Conditions d'entreposage

Il est préférable de stocker vos produits dans un endroit frais et sec avec un guide de la température de 0°C à 27°C, tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

Incidents graves

Si un incident grave survient à la suite de l'utilisation du produit, veuillez le signaler immédiatement au fabricant et à l'autorité compétente du pays où vous résidez.

Durée de conservation

Utilisation à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette.

Matériel nécessaire pour les poches système 2 pièces

Assurez-vous que tout le matériel nécessaire est prêts à l'emploi. Recueillir un guide de mesure, une paire de ciseaux, stylo, gaze humide et sèche et poche de stomie ainsi que le support.

Le choix de la bonne tailles

Mesurez votre stomie avec un guide de mesure et coupez (si nécessaire) le support à la taille de la stomie de sorte que la stomie et la peau environnante restera saine. Prévoyez un espace maximum de 2 mm entre votre stomie et le support pour un ajustement sûr et correct. Si la taille est trop grande, vos selles endommageront la peau et Si la taille est trop petite, la bride endommagera la stomie. Au fil du temps, votre stomie peut changer de forme ou de taille, dans ce cas des mesures périodiques peuvent être nécessaires à nouveau pour éviter toute fuite.

Préparer la peau

Soulever légèrement la peau et retirer soigneusement le support en prenant soin de ne pas le déchirer tout en repoussant la peau du support, utiliser une gaze humide si nécessaire. Lavez la peau entourant votre estomac avec de l'eau chaude. N'utilisez rien qui contient de l'alcool, du parfum ou de l'éther pour nettoyer votre peau car elle peut causer des irritations. Ne frottez pas la peau trop fort car cela pourrait l'endommager. Séchez la peau soigneusement pour assurer une bonne adhésion.

Facultatif : Si votre peau est irritée, vous pouvez utiliser de la crème de barrière cutanée, de la poudre d'hydrocolloïde ou des lingettes de barrière cutanée. Appliquer la poudre, la crème protectrice de la peau en essuyant doucement la peau environnante.

Ajustez votre support

Retirer le papier de dégagement de la plaque du support. Étirez la peau de votre abdomen avec une main plate et placez la plaque de base sur votre stomie dans la bonne position (commencez par le bas et travaillez votre chemin vers le haut). Faites travailler vos doigts autour de la plaque de base de sorte que l'hydrocolloïde se lie bien à la peau et assurez-vous que la plaque est sûre.

Appliquez votre poche

Prenez votre poche et cliquez sur la poche sur le support. Travaillez votre chemin du bas vers le haut du support. Assurez-vous que votre poche est sécurisée puis contrôlez le joint complet de la poche avec vos doigts.

Vent (fenêtre)

Si la poche est remplie de gaz (ballonnement) ou s'il n'y a pas d'air dans la poche, l'évent peut être utilisé pour laisser entrer ou sortir l'air de la poche. Assurez-vous que la poche n'est pas pleine de matières fécales lors de l'ouverture de l'évent. Si la poche est pleine vider la pochette ou la changer pour une nouvelle. L'évent peut être ouvert en enlevant le couvercle. Refermez soigneusement le couvercle après l'évacuation.

Fenêtre de visualisation

La poche de stomie comprend une fenêtre de visualisation qui permet d'inspecter la stomie ainsi que la sortie de la stomie. Elle est également très utile lors de l'application de la poche pour s'assurer qu'elle est située correctement sur la stomie. Soulever le non-tissé de la fenêtre de visualisation pour l'inspection.

Élimination de pochette

Retirez votre sac et jetez-le à la poubelle. Ne jetez pas votre sac usagé dans les toilettes parce que cela bloquera votre système d'égouts.

Fréquence de changement de pochette

Changez/videz votre poche comme conseillé par votre professionnel de la santé.

Προβλεπόμενη Χρήση, Περιγραφή Προϊόντος και Πληροφορίες Υλικού

Οι οστομικοί σάκοι χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των σωματικών αποβλήτων και στερεώνονται συνήθως στο δέρμα επί μιας χειρουργικά δημιουργηθείσας στομίας.

Τα οστομικά προϊόντα Zensiv περιλαμβάνουν οστομικούς σάκους 1 και 2 τεμαχίων και βάσεις 2 τεμαχίων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Όλοι οι σάκοι 1 τεμαχίου και οι βάσεις 2 τεμαχίων διαθέτουν φιλικό προς το δέρμα υδροκολλοειδές υλικό για επικόλληση στο σώμα, το οποίο πριν από τη χρήση καλύπτεται με προστατευτική ταινία και φέρει οδηγό κοπής. Ο σάκος είναι κατασκευασμένος από άοσμη μεμβράνη και φέρει μη υφασμένο κάλυμμα και φίλτρο άνθρακα για τον έλεγχο των οσμών (ειλεοστομία και κολοστομία). Οι σάκοι ειλεοστομίας διαθέτουν τυλιγόμενη έξοδο αποστράγγισης, με ενσωματωμένο ασφαλιστικό κλείστρο τύπου "velcro" ή πλαστικό. κλείστρο ή αυτοκόλλητο έλασμα, που περιέχονται σε κάθε συσκευασία. Στην ουρητηροστομία, οι σάκοι φέρουν βρυσάκι από μαλακό πολυμερές υλικό για εύκολη αποστράγγιση. Οι σάκοι διαθέτουν παράθυρο για την επισκόπηση της στομίας, αν χρειαστεί. Μερικοί σάκοι διαθέτουν έξοδο εξαερισμού με τάπα (vent) για τον αερισμό του σάκου, αν απαιτηθεί.

Τα οστομικά προϊόντα ZenSiv δεν περιέχουν λάτεξ και συστατικά ζωικής προέλευσης. Τα προϊόντα είναι μη αποστειρωμένα και εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θεράπων ιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μη αποστειρωμένα προϊόντα.

Προειδοποιήσεις-Προφυλάξεις

- Κάθε σάκος είναι μίας χρήσης. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση.

- Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση.

- Αν αντιμετωπίσετε αλλεργικές αντιδράσεις ή προβλήματα κατά τη χρήση του σάκου, διακόψτε τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας.

Αντενδείξεις

Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα ακόλουθα υλικά: πολυαιθυλένιο, πολυαμίδιο, ιατρικός άνθρακας, συνθετικά πολυμερή, αιθυλένιο, οξικός βινυλεστέρας, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας, πολυισοβουτυλένιο, καρβοξυμεθυλική κυτταρίνη, πηκτίνη ή γλυκερίνη.

Συνθήκες Αποθήκευσης

Τα προϊόντα αποθηκεύονται κατά προτίμηση σε δροσερό και ξηρό μέρος, με ένδειξη θερμοκρασίας από 0ο έως 27ο βαθμούς Κελσίου, όπως αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Σοβαρά Περιστατικά

Αν παρουσιαστεί σοβαρό περιστατικό, συνεπεία χρήσης του προϊόντος, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή και την Αρχή της χώρας που διαμένετε.

Διάρκεια ζωή

Συμβουλευτείτε την ημερομηνία λήξης της ετικέτας.

Συγκεντρώστε τα υλικά σας

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα υλικά είναι έτοιμα για χρήση. Συγκεντρώστε έναν χάρακα, ένα ψαλίδι, ένα στυλό, βρεγμένες και στεγνές γάζες, έναν οστομικό σάκο και μια βάση.

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος

Μετρήστε τη στομία με τον χάρακα και κόψτε (αν είναι απαραίτητο) τη βάση στο σωστό μέγεθος της στομίας. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό μέγεθος, ώστε η στομία και το περιβάλλον δέρμα να παραμείνουν υγιή. Για σωστή και ασφαλή τοποθέτηση, αφήστε μέγιστο περιθώριο 2 χιλιοστών μεταξύ της στομίας και της βάσης. Αν το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο, τα περιπτώματά σας θα βλάψουν το δέρμα. Αν το μέγεθος είναι πολύ μικρό, η βάση θα τραυματίσει τη στομία. Με τον καιρό, η στομία μπορεί να αλλάξει σχήμα και μέγεθος, οπότε περιοδικές μετρήσεις είναι απαραίτητες για την πρόληψη των διαρροών.

Προετοιμάστε το δέρμα σας

Στηρίξτε το δέρμα και αφαιρέστε προσεκτικά τη βάση, μην τραβάτε το δέρμα, αλλά σπρώξτε το μακριά από τη βάση, χρησιμοποιώντας μια βρεγμένη γάζα αν είναι απαραίτητο. Ξεπλύνετε το δέρμα γύρω από τη στομία με χλιαρό, μη αρωματισμένο νερό. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν περιέχει οινόπνευμα, άρωμα ή αιθέρα για να καθαρίσετε το δέρμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τρίβετε πολύ δυνατά το δέρμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Στεγνώστε επιμελώς το δέρμα για να εξασφαλίσετε την καλή επικόλληση του σάκου.

Προαιρετικό: Αν το δέρμα σας είναι ερεθισμένο και επώδυνο, χρησιμοποιήστε μια κρέμα φραγμού, υδροκολλοειδή σκόνη ή μαντηλάκια προστασίας. Εφαρμόστε τη σκόνη ή την κρέμα στο περιβάλλον δέρμα ή σκουπίστε το μαλακά με τα μαντηλάκια.

Εφαρμόστε τη βάση σας

Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη βάση. Τεντώστε το δέρμα της κοιλιάς σας με την παλάμη και τοποθετήστε τη βάση στη σωστή θέση πάνω από τη στομία (εφαρμόστε από κάτω προς τα πάνω). Περάστε τα δάχτυλά σας γύρω από τη βάση ώστε το υδροκολλοειδές να κολλήσει καλά στο δέρμα και βεβαιωθείτε ότι η βάση παραμένει σταθερή.

Εφαρμόστε το σάκο σας

Πάρτε το σάκο σας και ενώστε τον με τον δακτύλιο της βάσης. Ξεκινήστε την εφαρμογή από το κάτω μέρος του δακτυλίου προς τα πάνω.

Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος σας είναι σταθερός και ελέγξτε με τα δάχτυλά σας ότι εφαρμόζει πλήρως.

Vent

Αν ο σάκος γεμίσει με αέρα (φούσκωμα) ή δεν υπάρχει αέρας μέσα στο σάκο (κενό), το vent μπορεί να επιτρέψει την είσοδο ή την έξοδο του αέρα στο σάκο. Πριν ανοίξετε το vent, βεβαιωθείτε ότι ο σάκος δεν είναι γεμάτος με περιττώματα. Αν ο σάκος είναι γεμάτος, αδειάστε τον ή αλλάξτε τον με έναν καινούριο. Το vent ανοίγει αφαιρώντας την τάπα. Μετά τον εξαερισμό του σάκου, κλείστε προσεκτικά την τάπα.

Παράθυρο επισκόπησης

Ο οστομικός σάκος διαθέτει ένα παράθυρο που επιτρέπει την επισκόπηση της στομίας καθώς και του προϊόντος της στομίας. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο, κατά την εφαρμογή του σάκου, για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησής του επί της στομίας. Για την επισκόπηση, ανασηκώστε το μη υφασμένο κάλυμμα του παραθύρου.

Η απόρριψη του σάκου σας

Αφαιρέστε το σάκο σας και απορρίψτε τον στα σκουπίδια. Μην απορρίψτε τον σάκο στην τουαλέτα, γιατί αυτό μπορεί να φράξει το αποχετευτικό σας σύστημα.

Η συχνότητα αλλαγής του σάκου

Αλλάξτε ή αδειάστε το σάκο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σας.

Predviđena uporaba, opis sustava i podaci o materijalu

Vrećice za stomu koriste se za sakupljanje otpadnih tvari iz tijela i obično se privijaju uz kožu preko kirurškim putem napravljene stome.

Proizvodi tvrtke Zensiv Ostomy uključuju niz jednodijelnih i dvodijelnih vrećica za stomu i dvodijelnih prirubnica u raznim veličinama i oblicima. Sve jednodijelne vrećice i dvodijelne prirubnice imaju hidrokoloidnu prijanjajuću površinu koja ne oštećuje kožu te je zaštićena filmom s oznakom za rezanje. Vrećica za stomu proizvodi se od materijala otpornog na mirise s netkanim slojem i ugljičnim filtrom za kontrolu mirisa (za ileostomu i kolostomu). Svaka kutija vrećice za ileostomu sadrži i namotani dren pričvršćen remenom „na čičak“ ili stezaljke i meke remene. Vrećice za urostomu sadrže mekani čep od polimera za jednostavniju drenažu. Sve vrećice sadrže prozorčić za inspekciju stome prema potrebi. Određeni asortiman sadrži i ventil za prozračivanje stome prema potrebi.

Svi proizvodi tvrtke Zensiv Ostomy ne sadrže lateks i sastojke životinjskog podrijetla. Proizvodi su nesterilni i mogu se koristiti u svim slučajevima u kojima je liječnik ili zdravstveni djelatnik odobrio uporabu nesterilnog proizvoda.

Upozorenja – predostrožnosti

- Sve su vrećice za jednokratnu uporabu. Nemojte ih ponovno upotrebljavati. Ponovna uporaba može dovesti do unakrsne kontaminacije.
- Koristite ih samo u skladu s uputama svog pružatelja primarne zdravstvene zaštite.
- Pročitajte upute prije uporabe.
- U slučaju alergijske reakcije ili problema prilikom uporabe vrećica, prestanite ih koristiti i kontaktirajte svog pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

Kontraindikacije

Ovi proizvode ne bi trebale koristiti osobe koje su osjetljive na: polietilen, poliamid, medicinski ugljen, sintetički polimer, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, poliizobutilen, karboksimetilcelulozu, pektin ili glicerol.

Uvjeti skladištenja

Najbolje je čuvati proizvode na hladnom, suhom mjestu na temperaturi između 0°C i 27°C kako je navedeno na oznaci proizvoda.

Ozbiljne posljedice

Ukoliko dođe do ozbiljne posljedice uslijed uporabe proizvoda, odmah to prijavite proizvođaču ili nadležnom tijelu u vašoj zemlji boravišta.

Rok trajanja

Upotrijebiti do roka uporabe na oznaci proizvoda.

Pripremite potrebne materijale

Provjerite jesu li svi materijali spremni za uporabu. Pripremite pribor za mjerenje, škare, kemijsku olovku, vlažnu i suhu gazu te vrećicu za stomu i prirubnicu.

Odaberite ispravnu veličinu

Izmjerite stomu priborom za mjerenje i izrežite prirubnicu (ako je potrebno) na veličinu stome. Provjerite jeste li odabrali ispravnu veličinu kako ne biste oštetili stomu i okolnu kožu. Za sigurnu upotrebu ostavite najmanje 2 mm prostora između stome i prirubnice. Ako je prirubnica prevelika, vaša će izmet oštetiti stomu. Ako je premalena, prirubnica će oštetiti stomu. S vremenom vaša će stoma promijeniti oblik ili veličinu, stoga su potrebna povremena mjerenja kako bi se spriječilo curenje.

Pripremite kožu

Pridržite kožu i pažljivo uklonite prirubnicu. Nemojte otrgnuti, već odmaknite kožu od prirubnice. Upotrijebite vlažnu gazu ako je potrebno. Operite kožu oko stome mlakom i neparfimiranom vodom. Nemojte koristiti proizvode koji sadrže alkohol, parfem ili eter za čišćenje kože jer je možete oštetiti. Nemojte pretjerano jako trljati kožu jer je možete oštetiti. Pažljivo osušite kožu i temeljito provjerite prijanja li vrećica ispravno. Prema izboru: Ako dođe do iritacije ili oštećenja kože, možete upotrijebiti kremu za njegu kože Barrier, hidrokoloidni prah ili maramice za zaštitu kože Barrier. Na okolnu kožu nježno nanosite prah, kremu za njegu kože Barrier ili je maramicu.

Namjestite podložnu pločicu

Uklonite zaštitni omot podložne pločice. Otvorenim dlanom nategnite kožu abdomena i navucite podložnu pločicu preko stome u ispravni položaj (od gore prema dolje). Prstima provjerite prijanja li hidrokoloidna površina dobro na kožu oko stome te je li podložna pločica pričvršćena.

Primijenite vrećicu

Uzmite vrećicu i pričvrstite je na prsten podložne pločice. Povlačite prsten od vrha prema dnu. Provjerite je li vrećica pričvršćena i prstima je dokrajica zatvorite.

Ventil

Ako je vrećica puna plinova (napuhavanje) ili ako u njoj nema zraka (vakuum), pomoću ventila možete pustiti ili ispustiti zrak. Kod otvaranja ventila provjerite da vrećica nije puna izmeta. Ako je vrećica puna, ispraznite je ili je zamijenite novom vrećicom. Ventil možete otvoriti pomoću poklopca. Pažljivo zatvorite poklopac nakon prozračivanja.

Prozorčić za inspekciju

Vrećica za stomu sadrži i prozorčić za inspekciju pomoću kojeg možete provjeriti stanje stome kao i sadržaj koji iz nje izlazi. Prilikom primjene vrećice važno je provjeriti je li ispravno položena preko stome. Za provjeru stome podignite netkani dio prozorčića za inspekciju.

Odstranjivanje vrećice

Skinite vrećicu i odstranite je u otpad. Nemojte pustiti vrećicu niz toalet jer ćete začepiti odvodni sustav kanalizacije.

Učestalost promjene vrećice

Promijenite/ispraznite vrećicu u skladu s uputama svog pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

ID - Petunjuk Penggunaan

Tujuan Penggunaan, Deskripsi Produk, dan Informasi Material

Kantong ostomi digunakan untuk mengumpulkan limbah dari tubuh dan biasanya ditempelkan pada kulit di atas stoma yang dibuat dengan pembedahan.

Produk Zensiv Ostomy adalah rangkaian kantong ostomi 1 bagian dan 2 bagian serta flensa 2 bagian dalam berbagai ukuran dan bentuk. Semua kantong 1 bagian dan flensa 2 bagian menampilkan wafer hidrokoloid yang ramah kulit untuk adhesi ke tubuh dan ini dilindungi sebelum digunakan dengan film pelepas yang menunjukkan panduan pemotongan. Kantong produk dibuat dari film penghalang bau dengan lapisan non-anyaman yang nyaman dan filter karbon untuk pengendalian bau (untuk ileostomi dan kolostomi). Kantong ileostomi memiliki saluran pembuangan yang digulung yang diamankan dengan penutup tipe 'velcro' integral atau ada klem dan ikatan lunak yang disediakan di setiap kotak. Untuk urostomi, kantong membawa keran polimer lembut untuk drainase yang mudah. Semua kantong memiliki jendela untuk memeriksa stoma jika diperlukan. Beberapa rentang memiliki ventilasi dengan penutup untuk melepaskan isi kantong jika diperlukan.

Semua produk ZenSiv Ostomy bebas lateks dan tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari hewan. Produk tidak steril dan dapat digunakan dalam keadaan yang sesuai di mana dokter yang merawat atau profesional kesehatan memutuskan produk tidak steril dapat digunakan.

Peringatan - Tindakan Pencegahan

- Setiap kantong hanya untuk sekali pakai. Jangan digunakan kembali. Penggunaan kembali dapat menyebabkan kontaminasi silang.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan oleh profesional kesehatan Anda.
- Baca petunjuk sebelum digunakan.
- Hentikan penggunaan dan hubungi ahli kesehatan Anda jika Anda mengalami reaksi alergi atau masalah saat menggunakan kantong.

Kontra indikasi

Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh siapa pun yang diketahui sensitif terhadap: polietilen, poliamida, arang medis, polimer sintesis, etilena vinil asetat, polipropilena, poliester, poliisobutilena, karboksimetilselulosa, pektin atau gliserin.

Ketentuan penyimpanan

Sebaiknya simpan produk Anda di tempat kering yang sejuk dengan panduan suhu dari 0°C hingga 27°C seperti yang tertera pada label produk.

Insiden Serius

Jika terjadi insiden serius akibat penggunaan produk, harap segera laporkan hal ini kepada produsen dan Otoritas Kompeten di negara tempat Anda tinggal.

Umur simpan

Gunakan sebelum tanggal kedaluwarsa yang tertera pada label.

Kumpulkan bahan Anda

Pastikan semua bahan yang diperlukan sudah siap digunakan. Kumpulkan panduan pengukuran, gunting, pena, kain kasa basah dan kering dan kantong stoma dan flensa.

Pilih ukuran yang tepat

Ukur stoma Anda dengan panduan pengukur dan potong (jika perlu) flensa ke ukuran stoma yang tepat. Pastikan Anda memilih ukuran yang tepat agar stoma dan kulit di sekitarnya tetap sehat. Berikan jarak maksimum 2 mm antara stoma dan flensa Anda untuk pemasangan yang aman dan tepat. Jika ukurannya terlalu besar, kotoran Anda akan merusak kulit. Jika ukurannya terlalu kecil, flange akan merusak stoma. Seiring waktu, stoma Anda dapat berubah bentuk atau ukuran, jadi pengukuran berkala mungkin diperlukan lagi untuk mencegah kebocoran.

Siapkan kulitmu

Topang kulit dan lepaskan flens dengan hati-hati, jangan sobek tetapi dorong kulit kembali dari flensa, gunakan kain kasa basah jika perlu. Cuci kulit di sekitar stoma Anda dengan air hangat dan tanpa pewangi. Jangan gunakan apapun yang mengandung alkohol, parfum atau eter untuk membersihkan kulit Anda karena dapat menyebabkan kerusakan. Jangan menggosok kulit terlalu keras karena dapat menyebabkan kerusakan kulit. Keringkan kulit dengan hati-hati dan menyeluruh untuk memastikan kantong Anda menempel dengan baik.

Opsional: Jika kulit Anda teriritasi dan sakit, Anda dapat menggunakan krim pelindung kulit, bubuk hidrokoloid, atau tisu pelindung kulit. Oleskan bedak, krim pelindung kulit atau usap dengan lembut ke kulit di sekitarnya.

Sesuaikan pelat dasar Anda

Lepaskan kertas pelepas pelat dasar. Regangkan kulit perut Anda dengan tangan rata dan letakkan pelat dasar di atas stoma Anda ke posisi yang tepat (mulai dari bawah dan lanjutkan ke atas). Gerakkan jari Anda di sekitar pelat dasar sehingga hidrokoloid terikat dengan baik ke kulit dan pastikan pelat terpasang dengan baik.

Pasang kantong Anda

Ambil kantong Anda dan klik kantong ke cincin pelat dasar. Pasang dari bawah ke atas ring. Pastikan kantong Anda aman dan kendalikan segel lengkap kantong dengan jari Anda.

Lubang angin

Jika kantong penuh dengan gas (balon) atau jika tidak ada udara di dalam kantong (vakum), ventilasi dapat digunakan untuk membiarkan udara masuk atau keluar dari kantong. Pastikan kantong tidak penuh dengan kotoran saat membuka ventilasi. Jika kantong sudah penuh daripada mengosongkan kantong atau menggantinya dengan yang baru. Ventilasi dapat dibuka dengan melepas tutupnya. Tutup tutupnya dengan hati-hati setelah ventilasi.

Jendela tampilan

Kantong ostomi mencakup jendela tampilan yang memungkinkan untuk memeriksa stoma serta keluaran dari stoma. Ini juga sangat membantu saat mengosongkan kantong untuk memastikannya terletak dengan benar di atas stoma. Angkat non-anyaman dari jendela tampilan untuk diperiksa.

Buang kantong Anda

Keluarkan kantong Anda dan buang ke tempat sampah. Jangan membuang kantong bekas Anda ke toilet karena ini akan menyumbat sistem pembuangan kotoran Anda.

Frekuensi penggantian kantong

Ganti/kosongkan kantong Anda seperti yang disarankan oleh ahli kesehatan Anda.

LT - Naudojimo instrukcijos

Paskirtis, gaminio aprašas ir medžiagu informacija

Ostomijos maišeliai naudojami atliekoms iš kūno surinkti ir paprastai pritvirtinami prie odos per chirurginiu būdu įvestą stoma.

„Zensiv Ostomy“ gaminiai yra įvairių dydžių ir formų vienos ir dviejų dalių ostomijos maišeliai su dviejų dalių jungėmis (flanšais). Visuose vienos dalies maišeliuose ir dviejų dalių flanšuose yra odą tausojanti hidrokoloidinė plokštelė, skirta klijuoti prie kūno, ir iki naudojimo ji yra apsaugota nuimama plėvele, kurioje pavaizduota, kaip tiksliai atlikti pjūvį. Gaminio maišelis pagamintas iš kvapus sulaikančios plėvelės su patogiu neaustiniu sluoksniu ir anglies filtru kvapams kontroliuoti (ileostomijai ir kolostomijai). Ileostomijos maišeliai turi arba suvyniojamą išleidimo portą, pritvirtintą integruotu lipni uždarymo įtaisu, arba kiekvienoje dėžutėje yra pridėdami reikalingi spaustukai ir minkšti dirželiai. Urostomijai skirtuose maišeliuose yra minkštas polimerinis kranelis paprastam drenavimui. Visuose maišeliuose yra stebėjimo langelis stomai apžiūrėti (jei reikia). Kai kuriuose modeliuose yra entiliacijos anga su dangteliu, jei reikėtų išleisti maišelio turinį.

Visuose „ZenSiv Ostomy“ gaminiuose nėra latekso ir nėra gyvūninės kilmės ingredientų. Gaminiai yra nesterilūs ir gali būti naudojami bet kokiomis tinkamomis aplinkybėmis, kai gydantis gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia, kad galima naudoti nesterilų gaminių.

Įspėjimai - atsargumo priemonės

- Kiekvienas maišelis skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Nenaudoti pakartotinai. Pakartotinai naudojant galima kryžminė tarša.
- Naudoti tiktai pagal gydytojo nurodymą.
- Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.
- Nutraukite naudojimą ir kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą, jei naudojant maišelius pasireiškia alerginės reakcijos ar problemos.

Kontraindikacijos

Šių prietaisų neturėtų naudoti asmenys, kurie yra jautrūs: polietilenui, poliamidui, medicininės medžio angliai, sintetiniam polimerui, etileno vinilacetatui, polipropilenui, poliesteriui, polizobutilenui, karboksimetilceliuliozei, pektinui arba glicerinui.

Laikymo sąlygos

Geriausia laikyti gaminius vėsioje, sausoje vietoje, kurioje temperatūra būtų nuo 0°C iki 27°C, kaip nurodyta gaminio etiketėje.

Rimti incidentai

Jei naudojant gaminių įvyksta rimtas incidentas, nedelsdami praneškite apie tai gamintojui ir šalies, kurioje gyvenate, kompetentingai institucijai.

Tinkamumo laikas

Tinkamumo laikas, nurodytas ant etiketės.

Surinkite visas medžiagas

Įsitinkite, kad visos reikalingos medžiagos paruoštos naudoti. Paimkite matavimo kreiptuvą, žirkles, švirškiklį, drėgną ir sausą marlę, stomos maišelį ir jungę.

Pasirinkite tinkamą dydį

Išmatuokite stomą naudodami matavimo kreiptuvą ir nupjaukite (jei reikia) jungę iki reikiamo stomos dydžio. Įsitinkite, kad pasirinkote tinkamą dydį, kad stoma ir aplinkinė oda išliktų sveika. Palikite ne daugiau kaip 2 mm tarpelį tarp stomos ir jungės, kad būtų galima įstatyti saugiai ir tinkamai. Jei dydis per didelis, išmatos gali pažeisti odą. Jei dydis per mažas, jungė sugadins stomą. Laikui bėgant jūsų stomos dydis ar forma gali pasikeisti, todėl gali prireikti periodiškai atlikti matavimus, kad būtų išvengta bet kokio nuotėkio.

Paruoškite odą

Priaiykite odą ir atsargiai nuimkite jungę, nenuplėškite, o atitraukite odą atgal nuo jungės, jei reikia, naudokite drėgną marlę. Nuplaukite odą aplink stomą šiltu neparfumuotu vandeniu. Odai valyti nenaudokite jokių priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, kvėpalų ar eterio, nes jos gali pažeisti odą. Netrinkite per stipriai, nes tai gali pažeisti odą. Kruopščiai ir kruopščiai nusauskite odą, kad maišelis gerai prikibtų. Pasirinktinai: Jei oda sudirginta ir skauda, galite naudoti odos barjerinį kremą, hidrokoloidinius miltelius arba odos barjerines servetėles. Užtepkite miltelių, apsauginio odos kremo arba švelniai nušluostykite aplinkinę odą.

Pritvirtinkite pagrindo plokštelę

Nuimkite apsauginę plėvelę nuo pagrindo plokštelės. Ištiestu delnu išstempkite pilvo odą ir uždėkite pagrindo plokštelę virš stomos į reikiamą padėtį (pradėkite nuo apačios ir judėkite į viršų). Pirštus apvyniokite aplink pagrindo plokštelę taip, kad hidrokoloidas gerai priliptų prie odos, ir įsitinkite, kad plokštelė gerai prisitvirtino.

Pritvirtinkite maišelį

Paimkite maišelį ir spustelėkite jį ant pagrindo plokštelės žiedo. Judėkite nuo žiedo apačios link viršaus. Įsitinkite, kad maišelis gerai pritvirtintas, ir pirštais patikrinkite visą maišelio sandarumą.

Vėdinimo anga

Jei maišelyje pilna dujų (jis išsipūtęs) arba jei maišelyje nėra oro (vakuumas), ventiliacijos angą galima naudoti orui į maišelį įleisti arba iš jo išleisti. Atidarydami ventiliacijos angą įsitinkite, kad maišelis nėra pilnas išmatų. Jei maišelis pilnas, jį ištuštinkite arba pakeiskite nauju. Ventiliacijos angą galima atidaryti nuimant dangtelį. Išleidę orą atsargiai uždarykite dangtelį.

Tikrinimo langelis

Ostomijos maišelyje yra tikrinimo langelis, leidžiantis apžiūrėti stomą ir išėjimą iš stomos. Taip pat labai svarbu uždedant maišelį įsitinkinti, kad jis tinkamai uždėtas virš stomos. Kai norite patikrinti vidų, pakelkite neaustinę tikrinimo langelio medžiagą.

Maišelio išmetimas

Nuimkite maišelį ir išmeskite jį su šiukšlėmis. Nepilkite panaudoto maišelio turinio į tualetą, nes tai užkimš nuotekų sistemą.

Maišelio keitimo dažnumas

Pakeiskite/ištuštinkite maišelį taip, kaip nurodė sveikatos priežiūros specialistas.

LV - Lietošanas instrukcija

Paredzētais lietojums, izstrādājuma apraksts un informācija par materiāliem

Ostomijas maisiņus izmanto urīna un fēču savākšanai, un tos parasti piestiprina pie ādas virs ķirurģiski izveidotas stomas.

Zensiv Ostomy izstrādājumi ir dažādi viendabīgi un divdabīgi ostomijas maisiņi un dažādu izmēru un formu divdabīgas pamatnes. Visiem viendabīgajiem maisiņiem un divdabīgajām pamatnēm ir ādu saudzējošs hidrokoloida slānis, kas paredzēts pielīmēšanai pie ķermeņa, un pirms lietošanas to aizsargā noņemama plēvi, uz kuras ir redzama griešanas norāde. Izstrādājuma maisiņš ir izgatavots no smakas aizturošas plēves ar ērtu neaustu slāni un oglekļa filtru smaku neitralizēšanai (ileostomijai un kolostomijai). Ileostomijas maisiņiem ir sarullējama drenāža, kas nostiprināta ar iestrādātu līplentes aizdari, vai arī katrā kārbā ir skavas un mīksta saites. Urostomijas maisiņiem ir mīksts polimēra krāns, lai varētu viegli veikt drenāžu. Visiem maisiņiem ir skata lodziņš, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārbaudīt stomu. Dažiem izstrādājumiem ir ventilācija ar vāciņu, lai nepieciešamības gadījumā izvēdinātu maisiņu.

Visi ZenSiv Ostomy izstrādājumi ir bez lateksa un nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Izstrādājumi ir nesterili, un tos var izmantot jebkuros piemērotos apstākļos, kad ārstējošais ārsts vai veselības aprūpes speciālists nolemj lietot nesterilu izstrādājumu.

Brīdinājumi–piesardzības pasākumi

- Katrs maisiņš ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Nelietojiet atkārtoti. Atkārtota lietošana var izraisīt savstarpēju piesārņojumu.
- Lietojiet tikai atbilstoši veselības aprūpes speciālista norādījumiem.
- Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.
- Pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, ja, lietojot maisiņus, rodas alerģiskas reakcijas vai problēmas.

Kontrindikācijas

Šīs ierīces nedrīkst lietot personas, kurām ir zināma jutība pret: polietilēnu, poliamīdu, medicīnisko ogli, sintētisko polimēru, etilēna vinilacetātu, polipropilēnu, poliesteru, polizobutilēnu, karboksimetilcelulozi, pektīnu vai glicerīnu.

Glabāšanas nosacījumi

Izstrādājumus vislabāk glabāt vēsā, sausā vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz 27°C, kā norādīts izstrādājuma etiķetē.

Nopietni negadījumi

Ja izstrādājuma lietošanas rezultātā rodas nopietns negadījums, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to ražotājam un kompetentajai iestādei valstī, kurā dzīvojat.

Glabāšanas laiks

Izlietot līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz etiķetes.

Paņemiet materiālus

Pārlicinieties, vai visi nepieciešamie materiāli ir gatavi lietošanai. Paņemiet izmēru rādītāju, šķēres, pildspalvu, mitru un sausu marli, stomas maisiņu un atloku.

Pareizā izmēra izvēle

Izmēriet savu stomu ar izmēru rādītāju un izgrieziet (ja nepieciešams) pamatni atbilstoši stomas izmēram. Pārlicinieties, vai esat izvēlējies pareizo izmēru, lai stoma un apkārtējā āda paliktu vesela. Lai droši un pareizi sastiprinātu stomu un pamatni, atstājiet starp tām ne vairāk kā 2 mm atstarpi. Ja izmērs ir pārāk liels, fēces sabojās ādu. Ja izmērs ir pārāk mazs, pamatne sabojās stomu. Laika gaitā stomas forma vai izmērs var mainīties, tāpēc periodiski var būt nepieciešams atkārtot mērīšanu, lai novērstu jebkādu nopliedi.

Ādas sagatavošana

Atbilstiet ādu un uzmanīgi noņemiet pamatni; nenoplēšiet, bet atvirziet ādu no pamatnes, ja nepieciešams, izmantojot mitru marli. Nomazgājiet ādu ap stomu ar siltu un nearomatizētu ūdeni. Ādas notīrīšanai nelietojiet neko tādu, kas satur spirtu, parfīmu vai ēteri, jo tas var radīt bojājumus. Neberzējiet ādu pārāk stipri, jo tas var izraisīt ādas bojājumus. Rūpīgi un kārtīgi nosusiniet ādu, lai maisiņš labi pieliptu. Pēc izvēles: Ja āda ir iekaisusi un sāpīga, varat izmantot ādas aizsargkrēmu, hidrokoloida pulveri vai ādu aizsargājošas salvetes. Uzklājiet pulveri, ādas aizsargkrēmu vai saudzīgi noslaukiet apkārtējo ādu.

Pamata plāksnes uzstādīšana

Noņemiet pamata plāksnes aizsargpapīru. Nostiepiet vēdera ādu ar plaukstu un novietojiet pamata plāksni virs stomas pareizajā stāvoklī (sāciet no apakšas un virzieties uz augšu). Ar pirkstiem izlīdziniet pamata plāksni tā, lai hidrokoloids kārtīgi pieliptu pie ādas, un pārlicinieties, vai plāksne ir kārtīgi pielipusi.

Maisiņa pielikšana

Paņemiet maisiņu un piestipriniet pie pamata plāksnes gredzena tā, lai atskanētu klikšķis. Izlīdziniet maisiņu virzienā no gredzena apakšas uz augšu. Pārlicinieties, vai maisiņš ir kārtīgi piestiprināts un ar pirkstiem pārbaudiet, vai maisiņš ir kārtīgi pielipis.

Ventilācijas atvere

Ja maisiņš ir pilns ar gāzēm (piepūsts) vai maisiņā nav gaisa (vakuums), var izmantot ventilācijas atveri, lai gaisu ievadītu maisiņā vai izvadītu no tā. Atverot ventilācijas atveri, pārlicinieties, vai maisiņš nav pilns ar fēcēm. Ja maisiņš ir pilns, iztukšojiet to vai nomainiet ar jaunu. Ventilācijas atveri var atvērt, noņemot vāciņu. Pēc ventilācijas pabeigšanas uzmanīgi aiztaisiet vāciņu.

Skata lodziņš

Ostomijas maisiņam ir skata lodziņš, kas ļauj pārbaudīt stomu, kā arī izdalījumus no stomas. Tas ir arī ļoti noderīgs, piestiprinot maisiņu, lai pārlicinātos, vai tas ir pareizi novietots virs stomas. Lai veiktu pārbaudi, paceliet skata lodziņa neaustu auduma aizsegu.

Maisiņa likvidēšana

Noņemiet maisiņu un izmetiet to atkritumu tvertnē. Neaizskalojiet izlietoto maisiņu tualetes podā, jo tas nosprostos kanalizācijas sistēmu.

Maisiņa maiņas biežums

Nomainiet/iztukšojiet maisiņu atbilstoši veselības aprūpes speciālista ieteikumiem.

NO - Bruksanvisning


Beregnet bruk, produktbeskrivelse og materiell informasjon

Stomiposer brukes for å samle opp avfall fra kroppen og er vanligvis festet på huden over en kirurgisk fremstilt stomi.

Zensiv stomiprodukter er en serie stomiposer med 1-dels og 2-dels og plater i forskjellige sorter/varianter, størrelser og former. Alle 1-dels poser og 2-dels plater har en hudvennlig hydrokolloidplate for feste til kroppen og dette blir beskyttet før bruk med en beskyttelsesfilm med utklippsmarkeringer. Produktposen er produsert av en luktkbarrierefilm med et komfritt ikke-vevd lag og et karbonfilter for lukt kontroll (for lleostomi og kolostomi). Ileostomi posen har enten en sammenrullbar avløpsport sikret med en integrert «borrelås» lukning, eller det er klemmer og myke bånd som leveres i hver eske. Urostomi posen har en myk polymer kran for enkel drenering. Alle posene har et visningsvindu for å inspisere stomien om nødvendig. Visse poser har en lufteluke for å ventilere posen ved behov.

Alle ZenSiv stomiprodukter er latexfrie og inneholder ikke ingredienser av animalsk opprinnelse. Produktene er ikke-sterile og kan brukes under alle mulige omstendigheter der den behandlede legen eller omsorgspersonale bestemmer at et ikke-sterilt produkt kan brukes.

Advarsler-forholdsregler

- 
- Hver pose er kun til engangsbruk. Skal ikke gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til krysskontaminering.
 - Brukes bare i henhold til instruksjonene fra helsepersonellet.
 - Les instruksjonene før bruk.
 - Avbryt bruken og ta kontakt med helsepersonellet om du opplever allergiske reaksjoner, eller problem når du bruker posene.

Kontraindikasjoner

Disse enheter bør ikke brukes av noen med kjent følsomhet for: polyeten, polyamid, medisinsk kull, syntetisk polymer, etylenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylene, karboximetylcellulosa, pektin eller glycerin.

Lagringsforhold

Det er best å lagre dine produktene på en kjølig, tørr plass med en anbefalt temperatur fra 0°C til 27°C, som det angis på produktetiketten.

Alvorlige hendelser

Om en alvorlig hendelse skulle oppstå som følge av at du bruker produktet, vennligst rapporter dette umiddelbart til leverandøren og til rett myndighet i det landet du bor.

Holdbarhetstid

Bruk før utløpsdato som er angitt på pakken.

Forbered dine produkter

Sørg for at alle nødvendige produkter er klare til bruk. Forbered en måleguide, en saks, en penn, våte og tørre gassbind og en stomipose og plate.

Velg en størrelse

Mål din stomi med en måleguide og klipp (hvis nødvendig) platen til stomistørrelsen. Sørg for at du velger riktig størrelse så stomien og omkringliggende hud holder seg friskt. Tillat 2 mm plass mellom din stomi og plate for en sikker og riktig passform. Om størrelsen er for stor, kommer din avføring til å skade huden. Om størrelsen er for liten, skader platen stomien. Med tiden kan din stomi forandre form eller størrelse, så periodevis kan målinger kreves igjen for å forhindre lekkasje.

Forbered din hud

Støtt huden og ta bort platen forsiktig, ikke riv den av, men skyv tilbake huden fra platen, bruk et vått gassbind hvis behov. Vask huden rundt stomien med varmt og uparfymert vann. Bruk ikke noe som inneholder alkohol, parfyme, eller eter for å rengjøre huden ettersom det kan forårsake skader. Ikke gni huden for hardt da det kan føre til hudskader. Tørk huden forsiktig og nøye så din pose fester seg bra.

Valgfritt: Hvis din hud er irritert og øm kan du bruke hudbarriere krem, hydrokolloidpulver eller hudbarriereservietter. Påfør pulver, hudbarriere krem, eller tørk forsiktig på den omkringliggende huden.

Monter din basisplate

Ta bort baseplatens beskyttelsesfilm. Strekk huden på magen med en utstrakt hånd og plasser baseplaten over stomien i riktig stilling (begynn lengst nede og arbeid deg opp til toppen). Jobb med fingrene rundt bunnplaten så hydrokolloiden fester godt mot huden og sørg for at platen er sikker.

Bruk posen din

Ta posen din og fest den til baseplatens ring. Jobb fra bunnen til toppen av ringen. Pass på at posen er sikker og kontrollere posens fullstendige tetning med fingrene.

Lufteluke

Om posen er full av gass (ballooning) eller om det ikke finnes luft i posen (vakuum) kan lufteluken brukes for å slippe inn eller ut luft av posen. Sørg for at posen ikke er full med avføring når du åpner lufteluken. Om posen er full, tøm posen eller bytt til en ny pose. Lufteluken kan åpnes gjennom å ta av lokket. Lukk forsiktig lokket etterpå.

Inspeksjonsluge

Stomiposen inneholder en inspeksjonsluge som gjør det mulig å inspisere stomien og sekresjonen fra stomien. Det er også veldig nyttig når du setter på posen for å sikre at den er riktig plassert over stomien. Løft det ikke-vevde stoffet til inspeksjonsdøren for inspeksjon.

Avfallshåndtering av posen din

Ta bort posen og kast den i søppelbøtten. Ikke spyl ned din brukte pose i toalettet, da det kan forårsake tilstopping i ditt avløpssystem.

Hypighet for bytting av pose

Bytt/tøm posen i henhold til råd fra helsepersonellet.

Przewidziane zastosowanie, opis produktu i informacje o materiałach

Worki stomijne służą do zbierania produktów przemiany materii z organizmu i są zwykle mocowane do skóry nad chirurgicznie wylonioną stomią.

Produkty stomijne ZenSiv to gama 1-częściowych i 2-częściowych worków stomijnych oraz 2-częściowych kołnierzy w różnych rozmiarach i kształtach. Wszystkie 1-częściowe worki i 2-częściowe kołnierze posiadają przyjazną dla skóry hydrokoloidową płytkę przylegającą do ciała, która przed użyciem jest zabezpieczona folią antyadhezyjną, na której zaznaczono otwór do wycięcia. Worek na produkt jest wykonany z folii antyzapachowej z komfortową warstwą włókniny i filtrem węglowym do neutralizacji zapachu (w przypadku ileostomii i kolostomii). Worki do ileostomii posiadają zwijane ujście do drenażu zabezpieczone zintegrowanym zamknięciem na rzep, a w każdym opakowaniu znajdują się również zaciski i miękkie opaski. Worki do urostomii posiadają miękki polimerowy kranik ułatwiający drenaż. Wszystkie worki posiadają okienko umożliwiające kontrolę stomii w razie potrzeby. Niektóre gamy produktów posiadają otwór wentylacyjny z pokrywą do odpowietrzania worka w razie potrzeby.

Wszystkie produkty stomijne ZenSiv są pozbawione lateksu oraz składników pochodzenia zwierzęcego. Produkty te są niesterylne i mogą być stosowane we wszystkich odpowiednich okolicznościach, w których lekarz prowadzący lub pracownik ochrony zdrowia zdecyduje, że można zastosować produkt niesterylny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Każdy worek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Ponowne użycie może prowadzić do zanieczyszczenia krzyżowego.
- Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami pracownika ochrony zdrowia.
- Przed użyciem przeczytać instrukcję.
- Jeśli podczas używania worków wystąpią jakiegokolwiek reakcje alergiczne lub problemy, należy przerwać korzystanie z nich i skontaktować się z pracownikiem ochrony zdrowia.

Przeciwwskazania

Urządzenia te nie powinny być używane przez osoby o wrażliwości na: polietylen, poliamid, węgiel medyczny, polimer syntetyczny, octan etylenowo-winylowy, polipropylen, poliester, poliizobutylen, karboksymetylocelulozę, pektynę lub glicerynę.

Warunki przechowywania

Produkty najlepiej przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od 0°C do 27°C, zgodnie z informacją na etykiecie produktu.

Poważne wypadki

Jeżeli w wyniku użytkowania produktu dojdzie do poważnego wypadku, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu producentowi i właściwym władzom w kraju zamieszkania.

Okres trwałości

Użyć przed upływem daty ważności podanej na etykiecie.

Przygotowanie wszystkich przedmiotów

Upewnić się, że wszystkie niezbędne przedmioty są gotowe do użycia. Przygotować miarkę stomijną, nożyczki, długopis, mokrą i suchą gazę, worek stomijny oraz kołnierz.

Wybór właściwego rozmiaru

Zmierzyć stomię za pomocą miarki i przyciąć (jeśli to konieczne) kołnierz do odpowiedniego rozmiaru stomii. Upewnić się, że wybrano właściwy rozmiar, aby stomia i otaczająca ją skóra pozostały zdrowe. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe dopasowanie, należy pozostawić maksymalnie 2 mm wolnej przestrzeni między stomią a kołnierzem. Jeśli rozmiar jest zbyt duży, kał może uszkodzić skórę. Jeśli rozmiar jest zbyt mały, kołnierz może uszkodzić stomię. Z czasem stomia może zmienić swój kształt lub rozmiar, dlatego okresowo mogą być wymagane ponowne pomiary, aby zapobiec przeciekaniu.

Przygotowanie skóry

Przytrzymać skórę i ostrożnie zdjąć kołnierz. Nie odrywać, lecz odsunąć skórę od kołnierza. W razie potrzeby użyć mokrej gazy. Umyć skórę wokół stomii ciepłą, czystą wodą. Nie używać do mycia skóry produktów zawierających alkohol, perfumy lub eter, aby nie uszkodzić skóry. Nie pocierać skóry zbyt mocno, gdyż może dojść do jej uszkodzenia. Osuszyć skórę starannie i dokładnie, aby upewnić się, że worek dobrze przylega. Opcjonalnie: Jeśli skóra jest podrażniona i obolała, można użyć kremu ochronnego, pudru hydrokoloidowego lub gazików ochronnych. Zastosować puder, krem ochronny lub gazik delikatnie na otaczającą skórę.

Dopasowywanie płytki

Zdjąć papier zabezpieczający z płytki. Rozciągnąć skórę brzucha płaską dłonią i umieścić płytkę nad stomią we właściwej pozycji (należy zacząć od dołu i kierować się ku górze). Objąć palcami płytkę, aby hydrokoloid dobrze przylegał do skóry, i upewnić się, że płytka jest dobrze przymocowana.

Mocowanie worka

Wziąć worek i zatrasnąć go na pierścieniu płytki. Zacząć od dołu i kierować się ku górze pierścienia. Upewnić się, że worek jest przymocowany, i sprawdzić palcami, czy dobrze przylega.

Otwór wentylacyjny

Jeśli worek jest wypełniony gazami (pęcznienie) lub jeśli w worku nie ma powietrza (próżnia), można użyć otworu wentylacyjnego do wpuszczenia/wypuszczenia powietrza do/z worka. Przed otwarciem otworu wentylacyjnego należy upewnić się, że worek nie jest wypełniony kałem. Jeśli worek jest pełny, należy go opróżnić lub wymienić na nowy. Otwór wentylacyjny można otworzyć poprzez zdjęcie pokrywy. Po odpowietrzeniu ostrożnie zamknąć pokrywę.

Okienko

Worek stomijny posiada okienko, które umożliwia kontrolę stomii oraz jej ujścia. Jest również bardzo pomocne podczas zakładania worka, aby upewnić się, że jest on prawidłowo umieszczony nad stomią. W celu kontroli należy podnieść warstwę włókniny okienka.

Utylizacja worka

Wyjąć worek i wyrzucić go do kosza. Nie splukiwać zużytego worka w toalecie, ponieważ spowoduje to zablokowanie kanalizacji.

Częstotliwość wymiany worka

Wymieniać/opróżniać worek zgodnie z zaleceniami pracownika ochrony zdrowia.

PT - Instruções de uso

Uso pretendido, descrição do produto e informações de materiais

Bolsas para ostomia são usadas para coletar resíduos do corpo e geralmente são fixadas à pele sobre um estoma realizado cirurgicamente.

A gama de produtos Zensiv Ostomy contém bolsas para ostomia de 1 e 2 peças e flanges de 2 peças em vários tamanhos e formas. Todas as bolsas de 1 peça e flanges de 2 peças apresentam um wafer hidrocolóide que não agride a pele, para adesão ao corpo, e, antes do uso, é protegido com uma película de liberação que mostra uma guia de corte. O produto «bolsa» é fabricado em filme de barreira contra odores com uma camada de não-tecido confortável e um filtro de carbono para controle de odores (para ileostomia e colostomia). As bolsas para ileostomia têm uma abertura de drenagem de enrolar, protegida com um fecho do tipo 'velcro' integrado ou existem braçadeiras e laços flexíveis fornecidos em cada caixa. Para urostomia, as bolsas possuem uma torneira de polímero macio para fácil drenagem. Todas as bolsas têm uma janela de visualização para inspecionar o estoma, se necessário. Alguns produtos da linha apresentam um respiradouro com tampa para ventilar a bolsa, se necessário.

Todos os produtos ZenSiv Ostomy não contêm látex e não contêm ingredientes de origem animal. Os produtos não são estéreis e podem ser usados em quaisquer circunstâncias apropriadas em que o médico assistente ou profissional de saúde decida que um produto não estéril possa ser aplicado.

Avisos - Precauções

- Cada bolsa é para uso único. Não reutilize. A reutilização pode levar a uma contaminação cruzada.
- Use somente conforme indicado pelo seu profissional de saúde.
- Leia as instruções antes de usar.
- Interrompa o uso e entre em contato com o seu profissional de saúde se tiver reações alérgicas ou problemas ao usar as bolsas.

Contraindicações

Esses dispositivos não devem ser usados por ninguém com sensibilidade conhecida a: polietileno, poliamida, carvão medicinal, polímero sintético, etileno acetato de vinila, polipropileno, poliéster, poliisobutileno, carboximetilcelulose, pectina ou glicerina.

Condições de armazenamento

É melhor armazenar seus produtos em um local fresco e seco com uma temperatura de 0°C a 27°C conforme indicado no rótulo do produto.

Incidentes Graves

Caso ocorra um incidente grave como resultado do uso do produto, informe imediatamente o fabricante e a autoridade competente do país onde você reside.

Validade

Use dentro do prazo de validade indicada no rótulo.

Colete seus materiais

Certifique-se de que todos os materiais necessários estão prontos para uso. Pegue um guia de medição, uma tesoura, uma caneta, uma gaze húmida e seca e uma bolsa para estoma e flange.

Escolha o tamanho certo

Meça o seu estoma com uma guia de medição e corte (se necessário) o flange no tamanho certo do estoma. Certifique-se de escolher o tamanho certo para que o estoma e a pele ao redor permaneçam saudáveis. Deixe no máximo 2 mm de espaço entre o estoma e o flange para um ajuste correto e seguro. Se o tamanho for muito grande, suas fezes danificarão a pele. Se o tamanho for muito pequeno, o flange danificará o estoma. Com o tempo, seu estoma pode mudar de forma ou tamanho, portanto, medições periódicas podem ser necessárias novamente para evitar qualquer vazamento.

Prepare sua pele

Apoie a pele e remova o flange com cuidado, não arranque, mas empurre a pele para trás do flange, use uma gaze húmida, se necessário. Lave a pele ao redor do estoma com água morna e não perfumada. Não use nada que contenha álcool, perfume ou éter para limpar sua pele, pois pode causar danos. Não esfregue a pele com muita força, pois isso pode causar danos à pele. Seque a pele cuidadosa e completamente para garantir que sua bolsa adira bem.

Opcional: Se sua pele estiver irritada e dolorida, você pode usar um creme de proteção para a pele, pó de hidrocolóide ou lenços de proteção para a pele. Aplique o pó, creme de proteção para a pele ou limpe suavemente na pele circundante.

Ajuste sua placa de base

Remova o papel de liberação da placa de base. Estique a pele de seu abdômen com a mão espalmada e coloque a placa de base sobre o seu estoma na posição correta (comece na parte inferior e prossiga até o topo). Passe os dedos ao redor da placa de base para que o hidrocolóide se una bem à pele e certifique-se de que a placa esteja firme.

Aplique sua bolsa

Pegue sua bolsa e encaixe-a no anel da placa de base. Vá trabalhando desde a parte inferior até a parte superior do anel. Certifique-se de que sua bolsa esteja segura e controle a vedação completa da bolsa com os dedos.

Respiradouro

Se a bolsa estiver cheia de gases (inchaço) ou se não houver ar na bolsa (vácuo), o respiradouro pode ser usado para deixar o ar entrar ou sair da bolsa. Certifique-se de que a bolsa não está cheia de fezes ao abrir o respiradouro. Se a bolsa estiver cheia, esvazie a bolsa ou troque por uma nova. O respiradouro pode ser aberto retirando a tampa. Feche a tampa com cuidado após a ventilação.

Janela de visualização

A bolsa de ostomia inclui uma janela de visualização que permite inspecionar tanto o estoma quanto o que sai do mesmo. Também é muito útil ao aplicar a bolsa para verificar se ela está localizada corretamente sobre o estoma. Levante o não-tecido da janela de visualização para inspeção.

Descarte de sua bolsa

Remova sua bolsa e descarte-a no lixo. Não jogue a bolsa usada no vaso sanitário, pois isso bloqueará o sistema de esgoto.

Frequência de troca de bolsa

Troque/esvazie a bolsa conforme recomendado pelo seu profissional de saúde.

RO - Instrucțiuni de folosire

Utilizare, descriere produs și informații despre materiale

Pungile de ostomie sunt folosite pentru colectarea deșeurilor din corp și sunt de obicei atașate de piele peste stoma produsă chirurgical.

Produsele Zensiv Ostomy se regăsesc într-o gamă de punji unitare cât și din 2 bucăți (flanșa și punja colectoare), în diferite dimensiuni și forme. Toate pungile dintr-o bucată cât și cele din 2 bucăți au o placă hidrocolidă prietenoasă pentru piele pentru aderența la corp iar aceasta este protejată înainte de utilizare cu un film care prezintă un ghid de tăiere. Punga colectoare este acoperită cu un strat neșesut confort și un filtru de carbon pentru controlul mirosului (pentru ileostomie și colostomie). Pungile pentru ileostomie au fie o închidere tip „velcro” (arici), fie sunt furnizate cleme și legături moi în fiecare cutie. Pentru urostomie, pungile prezintă un robinet de evacuare, din polimer moale pentru o scurgere ușoară. Toate pungile au fereastră de vizualizare pentru a inspecta stoma, dacă este nevoie. În cazul în care este necesar, unele game sunt prevăzute cu un capac pentru ventilarea punjii.

Toate produsele ZenSiv Ostomy nu conțin latex și nu conțin ingrediente de origine animală. Produsele nu sunt sterile și pot fi utilizate în circumstanțe adecvate, la recomandarea unui medic curant sau a profesionistului din domeniul sănătății.

Avertismente-Măsurile de precauție

- Fiecare punjă este de unică utilizare. Nu reutilizați. Reutilizarea poate duce la contaminare încrucișată.
- Utilizați conform indicațiilor date de către specialistul dumneavoastră în sanătate.
- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
- Întrerupeți utilizarea și luați legătura cu specialistul în sanătate dacă aveți reacții alergice sau probleme atunci când utilizați pungile.

Contraindicații

Aceste dispozitive nu trebuie utilizate de către persoanele care au o alergie cunoscută la: polietilenă, poliamidă, cărbune medical, polimer sintetic, acetat de etilen vinil, polipropilenă, poliester, polisobutilenă, carboximetilceluloză, pectină sau glicerină.

Condiții de depozitare

Cel mai bine este să stocați produsele într-un loc uscat, cu o temperatură variabilă între 0°C și 27°C, așa cum se menționează pe eticheta produsului.

Incidente grave

Dacă apare un incident grav ca urmare a utilizării produsului, raportați-l imediat producătorului și autorității competente din țara în care vă aflați.

Termen de valabilitate

Utilizarea până la data de expirare menționată pe etichetă.

Colectați materialele

Asigurați-vă că toate materialele necesare sunt gata de utilizare. Folosiți șablonul, o pereche de foarfece, un stilou, tifon umed și uscat și o punjă de stoma.

Alegeți dimensiunea potrivită

Măsurați-vă colostoma folosind șablonul și tăiați (dacă este necesar) flanșa la dimensiunea corectă a stomei. Asigurați-vă că alegeți dimensiunea potrivită când decupați și pielea din jurul stomei o să rămână sănătoasă. Permiteți maximum 2 mm spațiu între stoma și flanșa pentru o potrivire sigură și corectă. Dacă dimensiunea este prea mare, materiile fecale vor deteriora pielea. Dacă dimensiunea este prea mică, flanșa va deteriora stoma. De-a lungul timpului, stoma dvs. își poate schimba forma sau dimensiunea, astfel încât periodic pot fi necesare din nou măsurători pentru a preveni orice scurgere.

Pregătiți-vă pielea

Sustineți pielea și îndepărtați flanșa cu atenție, fără mișcări bruște, ci împingeți pielea înapoi de pe flanșă, folosiți un tifon umed dacă este necesar. Curățați pielea din jurul stomei cu apă caldă. Nu folosiți produse care conțin alcool sau parfum pentru a vă curăța pielea, deoarece pot provoca iritații. Nu frecăți pielea prea tare, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea pielii. Uscați foarte bine pielea pentru a vă asigura că punja dvs. aderă bine.

Opțional: dacă pielea este iritată și dureroasă, puteți folosi cremă de protecție pentru piele sau praf hidrocolid. Aplicați pudra, crema de protecție pentru piele ștergeți ușor pielea din jur.

Potrivirea flânsei

Scoateți hârtia protecoate de pe flanșă. Întindeți pielea abdomenului cu o mână și așezați flanșa peste stoma în poziția corectă (începeți în partea de jos și lipiți spre partea de sus). Apăsăți flanșa astfel încât hidrocoloidul să se lipească bine de piele și asigurați-vă că flanșa este bine lipită.

Aplicare punjii pe flanșa

Luați-vă punja și apăsați-o pe inelul flânsei. Apăsăți punja peste flanșă începând din partea de jos spre partea de sus a inelului. Asigurați-vă că punja dvs. este bine etanșată.

Supapa

Dacă punjă este plină de gaze (balonare) sau dacă nu există aer în punjă (un vid), supapa poate fi utilizată pentru a lăsa aerul în sau în afara punjii. Asigurați-vă că punja nu este plină de materii fecale la deschiderea supapei de aerisire. Dacă punja este plină goliti punja sau schimbați-o cu una proaspătă. Supapa poate fi deschisă prin scoaterea capacului. Închideți cu atenție capacul după aerisire.

Fereastra de vizualizare

Punga de colostomie/ileostomie include o fereastră de vizualizare care face posibilă inspecția stomei. De asemenea, este foarte utilă atunci când aplicați punja pentru a vă asigura că este localizată corect peste stomă.

Aruncarea punjii

Îndepărtați punja și aruncați-o în coșul de gunoi. Nu aruncați punja folosită în toaletă, deoarece acest lucru vă va bloca sistemul de canalizare.

Frecvența de schimbare a punjii

Schimbați/goliți punja conform indicațiilor specialistului în sanătate.

Avsedd användning, produktbeskrivning och materialinformation

Stomipåsar används för att samla upp avfall från kroppen och är vanligtvis fästa vid huden över en kirurgiskt framställd stomi.

Zensiv stomiprodukter är en serie stomipåsar med 1-dels och 2-dels och plattor i olika sorter/varianter, storlekar och former. Alla 1-dels påsar och 2-dels plattor har en hudvänlig hydrokolloidplatta för vidhäftning till kroppen och detta skyddas före användning med en uppkleppningsbar skyddsfilm. Stomipåsen är tillverkad av luktbarriärfilm med ett bekvämt non-woven lager och ett kolfilter för luktkontroll (för ileostomi och kolostomi). Ileostomipåsar har antingen ett upprullningsbart lås som är säkrat med ett integrerat "kardborrband" eller så finns klämmor och mjuka band i varje låda. För urostomi har påsarna en mjuk polymerkran för enkel dränering. Alla påsar har ett visningsfönster för inspektion av stomin vid behov. Vissa påsar har en luftningslucka för att ventilerat påsen vid behov.

Alla ZenSiv stomiprodukter är latexfria och innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung. Produkterna är icke-sterila och kan användas under alla lämpliga omständigheter där den behandlande läkaren eller vårdpersonalen beslutar att en icke-steril produkt kan användas.

Varningar-försiktighetsåtgärder

- Varje påse är endast avsedd för engångsbruk. Återanvänd inte. Återanvändning kan leda till korskontaminering.
- Använd endast enligt anvisningar från din sjukvårdspersonal.
- Läs instruktionerna före användning.
- Avbryt användningen och kontakta din sjukvårdspersonal om du upplever allergiska reaktioner eller problem när du använder påsarna.

Kontraindikationer

Dessa enheter bör inte användas av någon med känd känslighet för: polyeten, polyamid, medicinsk kol, syntetisk polymer, etenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylen, karboximetylcellulosa, pektin eller glycerol.

Förvaringsförhållanden

Det är bäst att förvara dina produkter på en sval, torr plats med en rekommenderad temperatur från 0°C till 27°C, som anges på produktetiketten.

Allvarliga incidenter

Om en allvarlig händelse skulle uppstå till följd av att du använder produkten, vänligen rapportera detta omedelbart till leverantören och den behöriga myndigheten i det land där du bor.

Hållbarhetstid

Använd före utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Förbered dina produkter

Se till att alla nödvändiga produkter är färdiga för användning. Förbered en mätguide, en sax, en penna, våta och torra gasbindor och en stomipåse och platta.

Välj rätt storlek

Mät din stomi med en mätguide och klipp (om nödvändigt) plattan till stomistorleken. Se till att du väljer rätt storlek så att stomin och omgivande hud förblir friska. Tillåt 2 mm utrymme mellan din stomi och platta för en säker och korrekt passform. Om storleken är för stor, kommer din avföring att skada huden. Om storleken är för liten skadar plattan stomin. Med tiden kan din stomi ändra form eller storlek, så periodvis kan mätningar krävas igen för att förhindra läckage.

Förbered din hud

Stöd huden och ta bort plattan försiktigt, riv inte av den utan skjut tillbaka huden från plattan, använd vid behov en våt gasbinda. Tvätta huden som omger stomin med varmt och oparfymrat vatten. Använd inte något som innehåller alkohol, parfym eller eter för att rengöra huden eftersom det kan orsaka skador. Gnid inte huden för hårt eftersom det kan leda till hudskador. Torka huden försiktigt och noggrant så att din påse fäster bra. Valfritt: Om din hud är irriterad och öm kan du använda hudbarriärkräm, hydrokolloidpulver eller hudbarriärservetter. Applicera pulver, hudbarriärkräm eller torka försiktigt på den omgivande huden.

Montera din basplatta

Ta bort basplattans skyddsfilm. Sträck huden på buken med en utsträckt hand och placera basplattan över stomin i rätt läge (börja längst ner och arbeta dig upp till toppen). Arbeta med fingrarna runt bottenplattan så att hydrokolloiden fäster bra mot huden och se till att plattan är säker.

Applicera din påse

Ta din påse och klicka fast påsen på basplattans ring. Arbeta från botten till toppen av ringen. Se till att din påse är säker och kontrollera påsens fullständiga tätning med fingrarna.

Luftningslucka

Om påsen är full av gaser (ballooning) eller om det inte finns luft i påsen (vakuum) kan luftningsluckan användas för att släppa in eller ut luft ur påsen. Se till att påsen inte är full med avföring när du öppnar luftningsluckan. Om påsen är full, tom påsen eller byt den till en ny. Luftningsluckan kan öppnas genom att ta av locket. Stäng försiktigt locket efteråt.

Inspektionslucka

Stomipåsen innehåller en inspektionslucka som gör det möjligt att inspektera stomin och utsöndring från stomin. Det är också till stor hjälp när du applicerar påsen för att se till att den är korrekt placerad över stomin. Lyft upp non-woven tyget till inspektionsluckan för inspektion.

Avfallshantering av din påse

Ta bort påsen och kassera den i papperskorgen. Spola inte ner din använda påse i toaletten, eftersom det kan orsaka stopp i ditt avloppssystem.

Frekvens för byte av påse

Byt/töm påsen enligt råd från din sjukvårdspersonal.

SI - Navodila za uporabo

Predvidena uporaba, opis izdelka in bistvene informacije

Vrečke za stomo omogočajo zbiranje izločkov iz telesa. Običajno se pritrjuje na kožo čez kirurško oblikovano stomo.

Vrečke za stomo Zensiv so linija enodelnih in dvodelnih zbiralnih vrečk za stomo in dvodelnih prirobnic različnih velikosti in oblik. Vse enodelne vrečke in dvodelne prirobnice imajo koži prijazno hidrokoloidno podlogo, ki se prilepi na telo, in so pred uporabo zaščitene z zaščitno folijo, na kateri je označen vzorec za izrez. Vrečke so izdelane iz materiala, ki preprečuje širjenje neprijetnih vonjav, z netkanim slojem, ki zagotavlja udobje, in ogljikovim filtrom za obvladovanje neprijetnih vonjav (pri ileostomi in kolostomi). Vrečke za ileostomo imajo odtočno odprtino, ki se zviije in zavaruje z velcro trakom, ali pa je izdelek opremljen s sponkami ali podobnimi pritrdilnimi pripomočki. Vrečke za urostomo imajo odtočno odprtino iz mehkih polimerov, ki omogoča enostavno izpraznjevanje seča. Vse vrečke so opremljene s pregledovalnim okencem, ki omogoča preverjanje stome, če je to potrebno. Nekateri izdelki imajo tudi ventil s pokrovom, ki omogoča zračenje stome, če je to potrebno.

Vsi izdelki za oskrbo stome ZenSiv so brez lateksa in ne vsebujejo sestavin živalskega izvora. Izdelki so nesterilni in se lahko uporabljajo v vseh ustreznih okoliščinah, ko zdravnik ali medicinski strokovnjak odloči, da je uporaba nesterilnih izdelkov primerna.

Opozorila/Previdnostni ukrepi

- Vsaka vrečka je namenjena le za enkratno uporabo. Vrečk ne uporabljaj te ponovno. Ponovna uporaba lahko vodi do navzkrižne kontaminacije.
- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili zdravnika.
- Pred uporabo preberite navodila.
- Če imate zaradi uporabe vrečk alergij sko reakcijo ali druge težave, vrečko prenehajte uporabljati in se obrnite na svojega zdravnika.

Kontraindikacije

Teh pripomočkov ne smejo uporabljati ljudje, ki so občutljivi na: polietilen, poliamid, medicinsko oglje, sintetične polimere, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, poliizobutilen, karboksimetilcelulozo, pektin ali glicerol.

Pogoji shranjevanja

Izdelke hranite na hladnem suhem mestu pri temperaturi med 0°C in 27°C, kot zapisano na oznaki izdelka.

Resni zapleti

V primeru, da pride zaradi uporabe tega izdelka do resnih zapletov, to nemudoma javite proizvajalcu in pristojnemu organu države, v kateri prebivate.

Rok trajanja

Rok trajanja je naveden na izdelku.

Pripravite vse potrebne pripomočke

Prepričajte se, da so vsi potrebni pripomočki pripravljani za uporabo. Potrebujete merilni pripomoček, škarje, pisalo, mokro in suho gazo, vrečko za stomo in prirobnico.

Izberite pravo velikost

Z merilnim pripomočkom izmerite svojo stomo in (po potrebi) odrežite prirobnico, da bo njena velikost ustrezala velikosti vaše stome. Izberite pravo velikost, da bo vaša stoma in koža okoli nje ostala zdrava. Poskrbite za 2 mm razmika med vašo stomo in prirobnico, da zagotovite varno in pravilno namestitvev. Če je prirobnica prevelika, bo blato poškodovalo vašo kožo. Če je prirobnica premajhna, bo poškodovala stomo. S časom se lahko oblika ali velikost vaše stome spreminja, tako da morate stomo redno meriti, da preprečite neželeno iztekanje.

Pripravite svojo kožo

Podprite kožo in previdno odstranite prirobnico, ne odtrgajte je, temveč počasi potiskajte kožo stran od prirobnice, po potrebi uporabite mokro gazo. Kožo okoli stome umijte s toplo in čisto vodo. Za čiščenje kože ne uporabljajte ničesar, kar vsebuje alkohol, parfum ali eter, saj lahko s tem poškodujete stomo. Kože ne drgnite premočno, saj lahko to vodi do poškodb kože. Previdno in temeljito posušite kožo, da se bo vrečka dobro prilepila.

Poljubno: Če je vaša koža razdražena in boleča, lahko uporabite kremo za zaščito kože, hidrokoloidni gel ali vlažilne robčke. Previdno nanesite kremo ali gel na razdraženo kožo.

Namestite podlogo

Odstranite zaščitni papir podloge. Z dlanjo raztegnite kožo vašega trebuha in podlogo namestite čez vašo stomo na pravilen položaj (začnite na dnu in nadaljujte proti vrhu). S prsti sledite robu podloge, da se hidrokoloid dobro prime na kožo. Prepričajte se, da se podloga tesno prilega.

Namestite vrečko

Vzemite vrečko in jo priključite na obroč podloge. Začnite na dnu in nadaljujte proti vrhu obroča. Prepričajte se, da je vrečka pravilno nameščena in s prsti preverite, če popolnoma tesni.

Zračni ventil

Če je vrečka polna plinov (napihnjena) ali v vrečki ni zraka (vakuum), lahko s pomočjo zračnega ventila spustite zrak iz vrečke oziroma v vrečko. Prepričajte se, da vrečka ni polna blata, ko odpirate ventil. Če je vrečka polna, jo izpraznite ali zamenjajte z novo. Zračni ventil odprete tako, da snamete pokrov ventila. Po končanem postopku ponovno previdno zaprite ventil.

Pregledovalno okence

Vrečke za stomo so opremljene s pregledovalnim okencem, s pomočjo katerega lahko preverite stomo in izločke, ki prihajajo iz nje. Okence pomaga tudi pri tem, da vrečko pravilno namestimo čez stomo. Za ogled stome dvignite netkano površino pregledovalnega okenca.

Odstranjevanje vrečk

Snemite vrečko in jo ustrezno odstranite v smeti. Uporabljene vrečke ne mečite v stranišče, saj boste tako zamašili kanalizacijski sistem.

Kako pogosto menjati vrečke

Vrečke praznite/menjajte v skladu z navodili vašega zdravnika.

SK - Inštrukcie na používanie

Určené použitie, popis produktu a informácie o materiáli

Stomické vrecká sa používajú na zachytávanie obsahu čreva a zvyčajne sa priložia na pokožku cez chirurgicky vytvorenú stómiu.

Produkty ZenSiv Ostomy sú radom jednodielnych a dvojdielnych stomických vreciek a dvojdielnych podložiek v rôznych veľkostiach a tvaroch. Všetky jednodielne vrecká a dvojdielne podložky obsahujú hydrokoloidnú vrstvu šetrnú k pokožke na príľnutie k telu, ktorá je pred použitím chránená ochrannou fóliou s ystrihovacou šablónou. Vrecko je vyrobené z ochranného filmu proti zápachu s príjemnou netkanou vrstvou a uhlíkovým filtrom na kontrolu zápachu (na ileostómiu a kolostómiu). Ileostomické vrecká majú buď rolovací výpusť zabezpečený zavedeným uzáverom zo suchého zipsu alebo sa v každom balení dodávajú svorky a mäkké pásiky. Urostomické vrecká majú výpusť z mäkkého polyméru na jednoduché vypúšťanie. Všetky vrecká majú priehľadnú časť na kontrolovanie stómie v prípade potreby. Niektoré rady produktov obsahujú ventil s krytom na vetranie vrecka, ak je to potrebné.

Produkty ZenSiv Ostomy neobsahujú latex ani zložky živočíšneho pôvodu. Produkty sú nesterilné a môžu sa použiť za akýchkoľvek vhodných okolností, keď ošetrojúci lekár alebo zdravotnícky pracovník rozhodne, že sa môže použiť nesterilný produkt.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Každé vrecko je určené len na jednorazové použitie. Nepoužívajte ho opakovane. Opakované použitie môže viesť ku krížovej kontaminácii.
- Používajte len podľa pokynov vášho zdravotníckeho pracovníka.
- Pred použitím si prečítajte návod.
- Ak sa pri používaní vreciek vyskytnú alergické reakcie alebo problémy, prestaňte vrecká používať a kontaktujte svojho lekára.

Kontraindikácie

Tieto pomôcky by nemali používať osoby so známych citlivosťou na: polyetylén, polyamid, lekárske uhlie, syntetický polymér, etylénvinylacetát, polypropylén, polyester, polyizobutylén, karboxymetylcelulóza, pektín alebo glycerín.

Podmienky skladovania

Produkty je najlepšie skladovať na chladnom suchom mieste s regulovaním teploty od 0°C do 27°C, ako je uvedené na obale produktu.

Závažné nežiaduce udalosti

Ak v dôsledku používania nastane závažná nežiaduca udalosť, ihneď to ohláste výrobcovi a príslušnému orgánu v krajine vášho bydliska.

Doba použiteľnosti

Používajte do dátumu expirácie uvedeného na obale.

Prípravte si pomôcky

Uistite sa, že máte pripravené všetky potrebné pomôcky. Pripravte si meraciu šablónu, nožnice, pero, vlhkú a suchú gázu a stomické vrecko a podložku.

Vyberte si správnu veľkosť

Zmerajte si stómiu pomocou šablóny a (v prípade potreby) vystrihnite podložku na správnu veľkosť stómie. Uistite sa, že ste zvolili správnu veľkosť, aby zostala stómia aj okolitá pokožka zdravá. Medzi stómiou a podložkou nechajte najviac 2 mm na bezpečné a správne používanie. Ak bude podložka príliš veľká, výkaly poškodia pokožku. Ak bude podložka príliš malá, poškodí podložka stómiu. Stómia môže v priebehu času meniť veľkosť a tvar, preto môžu byť potrebné pravidelné merania, aby sa zabránilo úniku.

Pripravte pokožku

Pridržiňte pokožku a opatrne odstráňte podložku, nestrhnite ju, ale ťahajte pokožku od podložky, v prípade potreby použite vlhkú gázu. Pokožku okolo stómie umyte teplou vodou bez parfumov. Na umývanie pokožky nepoužívajte žiadne prípravky s obsahom alkoholu, parfumu alebo éteru, pretože môžu pokožku podráždiť. Nešúchajte pokožku príliš silno, aby ste ju nepoškodili. Opatrne a dôkladne osušte pokožku, aby vrecko dobre príľnulo k pokožke.

Voliteľné: Ak máte podráždenú alebo bolestivú pokožku, môžete použiť bariérový krém, hydrokoloidný prášok alebo ochranné rúško. jemne aplikujte prášok, bariérový krém alebo ochranné rúško na okolitú pokožku.

Pripevnite podložku

Odstráňte ochrannú fóliu z podložky. Dlaňou natiahnite pokožku na bruchu a priložte podložku na stómiu do správnej polohy (začnite zospodu a postupne pokračujte nahor). Prstami pritláčajte okolie podložky, aby hydrokoloid dobre príľnul k pokožke, a uistite sa, že podložka je zabezpečená.

Nasadte si vrecko

Vrecko pripevnite ku krúžku podložky. Pritláčajte zospodu krúžku až nahor. Uistite sa, že vrecko je zabezpečené, a prstami skontrolujte príľnutie vrecka.

Ventil

Ak je vrecko plné plynov (nafúknutie) alebo ak vo vrecku nie je žiadny vzduch (vákuum), môže sa pomocou vetracieho ventilu vpustiť vzduch dovnútra alebo vypustiť von z vrecka. Pri otvorení vetracieho ventilu sa uistite, že vrecko nie je plné výkalov. Ak je vrecko plné, vyprázdňte ho alebo ho vymeňte za nové. Ventil sa otvára odstránením krytu. Po vyvetraní kryt opatrne uzatvorte.

Priehľadný otvor

Stomické vrecko obsahuje priehľadné okienko, vďaka ktorému je možné kontrolovať stómiu, ako aj výtok zo stómie. Tento otvor je tiež veľmi nápomocný pri nasádzaní vrecka, aby bolo umiestnené správne na stómiu. Zdvihnite netkanú časť priehľadného otvoru a skontrolujte stómiu.

Likvidácia vrecka

Odstráňte vrecko a zahodte ho do koša. Nesplachujte vrecko do toalety, pretože upchá vašu kanalizáciu.

Frekvencia vymieňania vrecka

Vymieňajte/vyprázdňujte vrecko podľa pokynov zdravotníckeho pracovníka.

Показання, опис продукту, інформація про склад

Калоприймачі стомічні призначені для збору кишкових виділень, що виділяються з тіла людини. Калоприймач зазвичай кріпиться навколо стоми, яка сформована хірургічним шляхом.

Калоприймачі Zensiv (Зенсів) можуть бути однокомпонентні та двокомпонентні. Пластини двокомпонентних калоприймачів можуть бути різних розмірів та форм. Всі пластини одно- та двокомпонентних калоприймачів вирізняються наявністю сприятливого для шкіри гідроколоїдного адгезиву, що забезпечує приклеювання. Адгезив пластини покритий захисною плівкою, на якій нанесені направляючі лінії для вирізання отвору. Мішок калоприймача виготовлений із плівки, що не пропускає запах і комфортного нетканого покриття та має вбудований карбоновий фільтр для контролю запаху. Ілеостомні калоприймачі можуть закриватись на вбудовану застібку на липучках (велкро), на жорсткий затискач (кліпсу) або на гнучкий затискач, якими комплектується кожна коробка (упаковка). Уростомний мішок обладнаний м'яким полімерним краном для легкого випорожнення. Всі мішки калоприймачів обладнані вікном для інспекції при необхідності. Деякі калоприймачі мають вентиляційний отвір для вентиляції за потреби.

Вся стомічна продукція ZenSiv (Зенсів) не містить латексу та складових тваринного походження. Продукція є нестерильною і може бути застосована при відповідних обставинах за рішенням терапевта або іншого лікаря про можливість використовувати нестерильну продукцію.

Попередження - Застереження

- Кожний калоприймач – одноразового використання. Не використовуйте виріб повторно. Повторне використання може призвести до перехресного забруднення.
- Використовуйте у спосіб, призначений лікарем.
- Прочитайте інструкцію перед використанням.
- Не використовуйте виріб та проконсультуйтеся з лікарем у разі виникнення алергічних реакцій або інших проблем під час використання.

Протипоказання

Дані вироби не повинні застосовувати люди, у яких була виявлена чутливість до: поліетилену, поліамідів, медичного деревного вугілля, синтетичного полімеру, етиленвінілацетату, поліпропілену, поліестеру, поліізобутилену, карбоксиметилцелюлози, пектину або гліцерину

Умови зберігання

Найкращі умови для зберігання продукції – прохолодне сухе місце з температурою від 0°C до 27°C, як це зазначено на продуктивій етикетці.

Серйозні випадки

У разі серйозного випадку, пов'язаного з використанням продукції, просимо вас негайно повідомити виробника та компетентні органи вашої країни.

Термін придатності

Кінцева дата (Вжити до) терміну придатності вказана на етикетці продукту.

Приготуйте все необхідне

Переконайтесь, що всі необхідні засоби готові до використання. Приготуйте шаблон для вирізання отвору, ножиці, олівець, вологі та сухі серветки, пластину та мішок стомічний.

Визначте правильний розмір

Виміряйте вашу стому за допомогою шаблону та виріжте (якщо це необхідно) отвір, що відповідає розміру стоми. Переконайтесь, що ви зробили отвір, який відповідає розміру стоми, і шкіра біля стоми буде захищена. Різниця в розмірі отворів стоми та отвору пластини не більше 2 мм є відповідною та безпечною. Якщо отвір буде більшим, кишкові виділення можуть пошкодити шкіру. Якщо отвір буде меншим за розмір стоми, є вірогідність травмування стоми пластиною калоприймача. З часом ваша стома може змінити форму та розмір, періодичне вимірювання необхідне для попередження підтікання кишкових виділень під пластину калоприймача.

Підготуйте вашу шкіру

Притримуючи шкіру, відклейте обережно пластину. Відклеюйте шкіру від пластини, а не відривайте пластину від шкіри. Використовуйте вологі серветки за потреби. Очистіть шкіру навколо стоми теплою чистою водою. Не використовуйте для очищення шкіри нічого, що містить спирт, парфуми чи ефір, оскільки це може завдати шкоди шкірі. Не тріть шкіру занадто сильно, оскільки це може спричинити пошкодження шкіри. Просушіть обережно та ретельно шкіру, щоб забезпечити хорошу адгезію (приклеювання) калоприймача зі шкірою.

Додаткова інформація: якщо ваша шкіра подразнена або має ознаки запалення, ви можете використовувати захисний крем-бар'єр, гідроколоїдний абсорбуючий порошок (пудру) або захисні серветки. Нанесіть абсорбуючий порошок чи захисний крем-бар'єр, або легко потріть захисними серветками шкіру навколо стоми.

Підготуйте пластину

Видаліть захисну плівку з пластини двокомпонентного калоприймача. Розладьте шкіру навколо стоми рукою і розмістіть пластину в правильне положення (розмістіть спочатку нижню частину пластини, а потім верхню). Притисніть пальцями пластину навколо стоми таким чином, щоб гідроколоїд гарно приклеївся до шкіри, переконайтесь, що пластини приклеєна надійно.

Кріплення мішка до пластини

Візьміть ваш мішок і вдягніть на пластину таким чином, щоб кільце на мішку поєдналось з кільцем на пластині. Починайте вдягати мішок знизу і рухайтеся до верху. Переконайтесь, що мішок надійно прикріплений до пластини та перевірте пальцями, чи надійно вдягнений мішок на пластину по всьому контуру кільця.

Вентиляційний отвір

Якщо в мішку зібрався газ (здуття) або якщо відсутнє повітря в мішку (вакуум), вентиляційний отвір може бути використаний для вивільнення або впускання повітря в мішок. Перед тим, як відкрити вентиляційний отвір, переконайтесь, щоб мішок не був повністю заповнений кишковими виділеннями. Якщо мішок заповнений кишковими виділеннями, випорожніть мішок або змініть його на новий. Для того, щоб відкрити вентиляційний отвір, необхідно відкрити кришку вентиляційного отвору.

Оглядове вікно

Стомічний мішок обладнаний оглядовим вікном, що дозволяє зробити інспекцію стоми та кишкових виділень. Через оглядове вікно зручно контролювати чи правильно приклеєна пластини калоприймача навколо стоми. Відігніть неткану поверхню вікна для інспекції.

Утилізація калоприймачів

Відклейте ваш калоприймач та викиньте його до сміттового баку. Не викидайте використаний калоприймач до туалету (унітазу), бо це спричинить блокування каналізаційної системи.

Частота заміни калоприймача

Змінійте/випорожняйте мішок відповідно до рекомендації вашого лікаря.

2-PIECE COLOSTOMY

