



It's all
about
ostomy!



























GB	Instructions for use	NL	Gebruiksaanwijzing	DE	Gebrauchsanweisung
AR	تعليمات الاستخدام	BA	Uputstvo za upotrebu	CZ	Návod k použití
DK	Brugsanvisning	ES	Instrucciones de uso	FI	Käyttöohje
FR	Mode d'emploi	GR	Οδηγίες χρήσης	HR	Upute za uporabu
ID	Petunjuk Penggunaan	LT	Naudojimo instrukcijos	LV	Lietošanas instrukcija
NO	Bruksanvisning	PL	Instrukcja użycia	PT	Instruções de uso
RO	Instructiuni de folosire	SE	Bruksanvisning	SI	Navodila za uporabo
SK	Inštrukcie na používanie	TR	Kullanım talimatları	UA	Інструкція із застосування



P1NT10



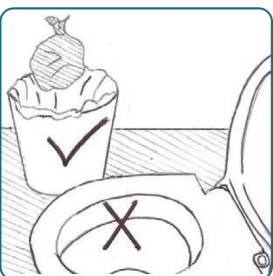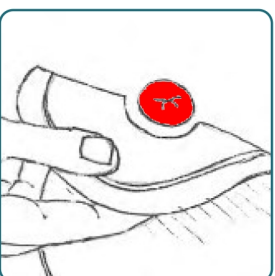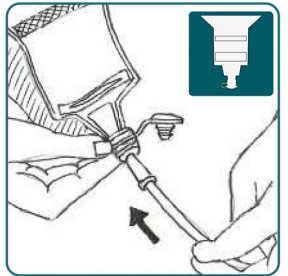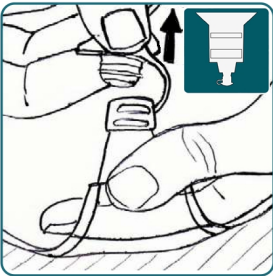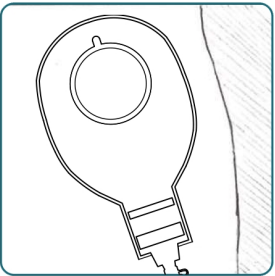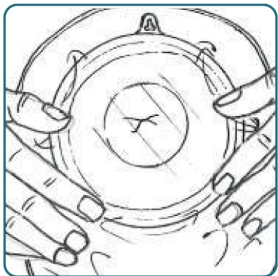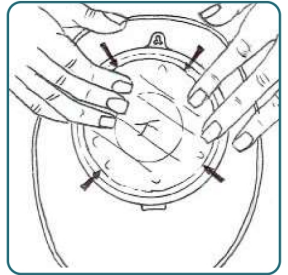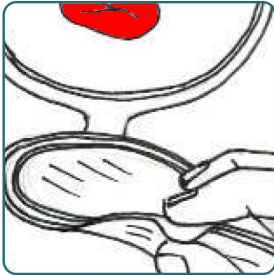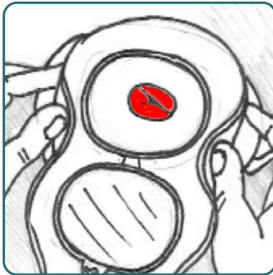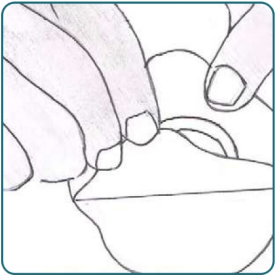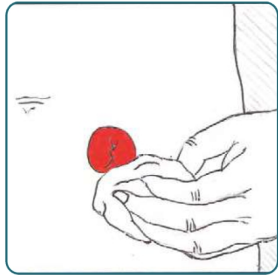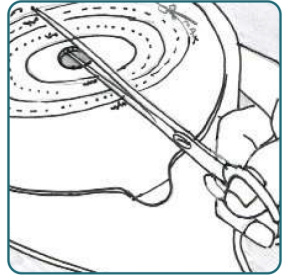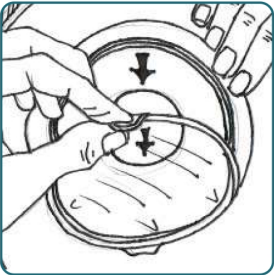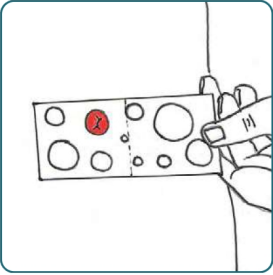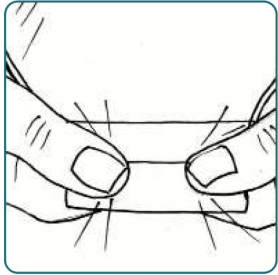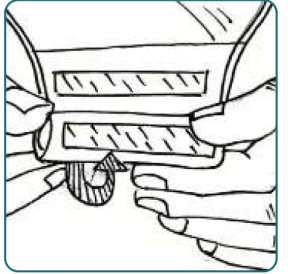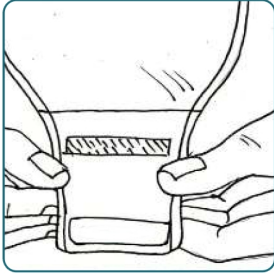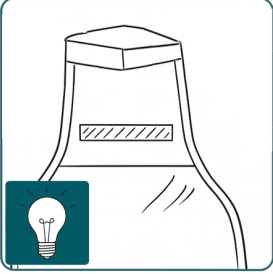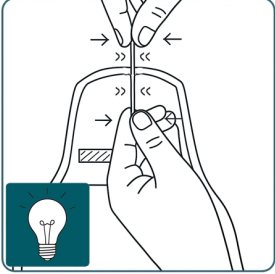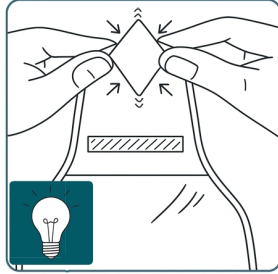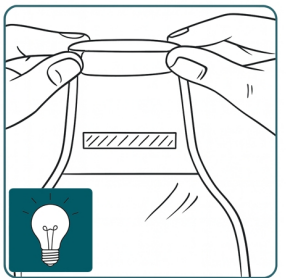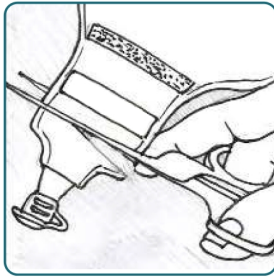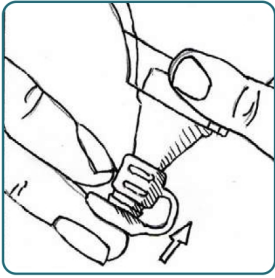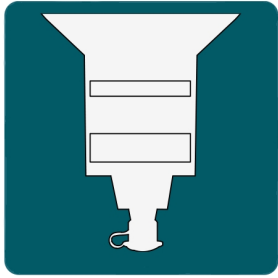

Intended Use, Product Description and Material Information

Ostomy pouches are used to collect waste from the body and are usually attached to the skin over a surgically made stoma. Zensiv Ostomy products are a range of 1-piece and 2-piece ostomy pouches and 2-piece flanges in various sizes and shapes. All 1-piece pouches and 2-piece flanges feature a skin friendly hydrocolloid wafer for adhesion to the body and this is protected before use with a release film that shows a cutting guide. The product pouch is manufactured from odour barrier film with a comfort non-woven layer and a carbon filter for odour control (for ileostomy and colostomy). Ileostomy pouches have either a roll up drain port secured with an integral 'velcro' type closure or there are clamps and soft ties supplied in each box. For urostomy the pouches carry a soft polymer tap for easy drainage. All pouches have a viewing window to inspect the stoma if needed. Some ranges feature a vent with lid for venting the pouch if required. All Zensiv Ostomy products are latex-free and do not contain ingredients of animal origin. The products are non-sterile and can be used in any appropriate circumstances where the attending physician or healthcare professional decides a non-sterile product may be applied.



Warnings-Precautions

- Each pouch is for single use only. Do not re-use. Re-use can lead to cross-contamination. - Use only as directed by your healthcare professional. - Read the instructions prior to use. - Discontinue use and contact your healthcare professional if you experience any allergic reactions or problems when using the pouches.

Contra-indications

These devices should not be used by anyone with a known sensitivity to: polyethylene, polyamide, medical charcoal, synthetic polymer, ethylene vinyl acetate, polypropylene, polyester, polyisobutylene, carboxymethylcellulose, pectin or glycerine, acrylic gel, spandex.

Storage Conditions

It is best to store your products in a cool dry place with a guidance of temperature from 0°C to 27°C as is noted on the product label.

Serious Incidents

Should a serious incident arise as a result of using the product please report this immediately to the manufacturer and the Competent Authority in the country where you reside.

Shelf Life

Use by the expiry date noted on the label.

Collect your materials

Make sure that all necessary materials are ready for use. Collect a measuring guide, a pair of scissors, a pen, wet and dry gauze and a stoma pouch.

Choose the right size

Measure your stoma with a measuring guide and cut (if necessary) the flange to the right size of the stoma. Make sure that you choose the right size so that the stoma and surrounding skin will stay healthy. Allow a maximum of 2 mm of space between your stoma and flange for a safe and correct fit. If the size is too big, your faeces will damage the skin. If the size is too small, the flange will damage the stoma. Over time your stoma may change shape or size, so periodically measurements may be required again to prevent any leakage.

Prepare your skin

Support the skin and remove the flange carefully, do not tear off but push the skin back from the flange, use a wet gauze if necessary. Wash the skin surrounding your stoma with warm and unperfumed water. Do not use anything that contains alcohol, perfume or ether to clean your skin as it can cause damage. Do not rub the skin too hard as this might lead to skin damage. Dry the skin carefully and thoroughly to ensure that your pouch adheres well. Optional: If your skin is irritated and sore you can use skin barrier cream, hydrocolloid powder or skin barrier wipes. Apply the powder, skin barrier cream or wipe gently to the surrounding skin.

Close the tap at the base of the pouch

First make sure that the tap is closed safely. Close the tap by pressing the tap firmly.

Connecting your pouch to a night bag.

The pouch has a universal tap. This tap can be connected to almost any type and brand of night bag. Open the tap of the pouch and connect this to the connector of the night bag and ensure that the connection is secure.

Access window

To Open: Open the access window using the tab provided and pull open. Hold the pouch steady with your other hand while you do this. Ensure that the pouch is emptied before opening the access window. If this is not possible, hold the pouch carefully to ensure no output will spill out during the opening process. To Close: Close carefully by snapping the access window shut and pressing all the way round the closing section to ensure full closure. Always check that the access window is properly closed.

Fit your pouch

Remove the release paper of the flange. Fold the flange halfway and place the opening at the underside of the stoma. Stretch the skin of your abdomen with a flat hand and pull the whole flange over the stoma into the right position. Work your way around the stoma so that the hydrocolloid will attach to the skin and make sure that the flange is secure. Place your hand over the flange and make sure that a good seal is created.

Empty your pouch

Lift up the tap and open the tap. Empty the contents of your pouch into the toilet. Close tap again making sure it is securely closed.

Tap and outlet closure

If the tap is not required this can be cut off and the 'velcro' type closure used instead.

Empty your pouch using the 'velcro' type closure

Lift up the tail of the pouch and open the bag. Empty the contents of your pouch into the toilet.

Close the outlet

First make sure that the clamp or 'velcro' type closure is closed safely. For the clamp: Place the clamp at the tail of the pouch. Fold the end of the tail once over the clamp and make sure that the film of the tail is smooth to ensure that the outlet tail is in the right position and press the clamp firmly. Clamps are reusable. For the metal wire strips: Take the release film from the metal wire strip. Stick the metal wire strip onto the tail of the pouch. Roll-up the tail of the pouch. Fold the metal wire on both sides so that the tail of the pouch stays rolled-up. For the Velcro closure: Roll-up the tail of the pouch until the two 'velcro' type pieces are touching each other. Press the 'velcro' type pieces onto each other firmly. For the Velcro closure with folding tabs: Roll-up the tail of the pouch until the velcro is at the same height as the folding tabs. Press the velcro on the folding tabs firmly onto the velcro of the closure.

Disposal of your pouch

Remove your pouch and dispose of it in the trash. Do not flush your used pouch down the toilet because this will block your sewage system.

Frequency of pouch change

Change/empty your pouch as advised by your healthcare professional.

Beoogd gebruik, productbeschrijving en materiaal informatie

Stomamaterialen worden gebruikt om afvalstoffen uit het lichaam op te vangen en worden meestal aan de huid bevestigd rondom een chirurgisch gemaakte stoma. Zensiv producten zijn een reeks van 1-delige en 2-delige stomamaterialen en 2-delige huidplaten in verschillende maten en vormen. Alle 1-delige zakjes en 2-delige huidplaten hebben een huidvriendelijke hydrocolloïde huidplaat voor hechting aan het lichaam. De hydrocolloïde huidplaat is voorzien van een beschermfolie met maataanduiding voor het uitknippen op de juiste maat. Het stomazakje is vervaardigd van een folie met geurbarrière met een comfortabele non-woven laag en een koolstoffilter voor geurneutralisatie (voor ileostomie en colostomie). Ileostomiezakjes hebben ofwel een oprolbare sluiting met een geïntegreerde klittenband sluiting of er zijn klemmen en sluitstrips meegeleverd in elke doos. De urostomiezakjes zijn uitgerust met een zacht kunststof kraantje voor eenvoudige leging van het zakje. Alle zakjes hebben een kijkvenster om indien nodig de stoma te kunnen inspecteren. Sommige producten zijn voorzien van een ventiel voor het eventueel ontluchten van het zakje. Alle Zensiv producten zijn latexvrij en bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong. De producten zijn niet-steriel en kunnen worden gebruikt in alle geschikte omstandigheden waarin de behandelend arts of zorgverlener besluit dat een niet-steriel product mag worden toegepast.



Waarschuwingen-voorzorgsmaatregelen

- Elk product is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting. - Gebruik alleen zoals voorgeschreven door uw zorgverlener. - Lees vóór gebruik de instructies. - Stop het gebruik en neem contact op met uw arts als u allergische reacties of problemen ervaart tijdens het gebruik van het product.

Contra-indicaties

Deze producten mogen niet worden gebruikt door iemand met een bekende gevoeligheid voor: polyethyleen, polyamide, medische houtskool, synthetisch polymeer, ethyleenvinylacetaat, polypropyleen, polyester, polyisobutyleen, carboxymethylcellulose, pectine of glycerine, acrylgel, spandex.

Opslagcondities

Producten bewaren op een koele, droge plaats en bij een temperatuur van 0°C tot 27°C, zoals vermeld op het productetiket.

Ernstige incidenten

Mocht er zich een ernstig incident voordoen als gevolg van het gebruik van het product, meldt dit dan onmiddellijk aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in het land waar u woont.

Houdbaarheid

Te gebruiken tot de vervaldatum vermeld op het etiket.

Verzamel je materialen

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaar zijn voor gebruik: een maatkaart (mal), een schaar, een pen, nat en droog gaas en een stomazakje.

Kies de juiste maat

Meet uw stoma met een maatkaart en/of mal en knip (indien nodig) de huidplaat op de juiste maat van de stoma. Zorg ervoor dat u de juiste maat kiest, zodat de stoma en de omliggende huid gezond blijven. Laat maximaal 2 mm ruimte tussen uw stoma en de huidplaat voor een veilige en correcte pasvorm. Als de maat te groot is, beschadigd de ontlasting de huid. Als de maat te klein is, kan de huidplaat de stoma beschadigen. Na verloop van tijd kan uw stoma van vorm of grootte veranderen, dus periodieke metingen kunnen opnieuw nodig zijn om lekkage te voorkomen.

Vorbereiding van de huid

Ondersteun de huid en verwijder de huidplaat voorzichtig, ruk niet af maar duw de huid terug van de huidplaat, gebruik indien nodig een nat gaasje. Was de huid rondom uw stoma met warm en ongeparfumeerd water. Gebruik niets dat alcohol, parfum of ether bevat om uw huid te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken. Wrijf niet te hard over de huid, dit kan leiden tot huidbeschadiging. Droog de huid zorgvuldig en grondig om ervoor te zorgen dat de huidplaat goed hecht. Optioneel: als uw huid geïrriteerd en pijnlijk is, kunt u huidbeschermingscrème, hydrocolloïde poeder of huidbeschermingsdoekjes gebruiken. Breng de poeder, de huidbeschermende crème of de huidbeschermingsfilm aan op de omliggende huid.

Sluit het kraantje aan de onderkant van het zakje

Zorg eerst dat het kraantje veilig is gesloten. Sluit het kraantje door het dopje stevig op het kraantje te drukken.

Het zakje aansluiten op een nachtzak

Het zakje heeft een universeel kraantje. Dit kraantje kan op bijna elk type en merk urine nachtzak worden aangesloten. Open de kraan van het zakje en sluit deze aan op de connector van de nachtzak en zorg ervoor dat de verbinding veilig is.

Werkluik

Openen: Open het werkluik met behulp van het daarvoor bestemde lipje en trek het open. Houd hierbij het zakje met uw andere hand stevig vast. Zorg ervoor dat het zakje is geleegd voordat u het werkluik opent. Als dit niet mogelijk is, houd het zakje dan voorzichtig vast om ervoor te zorgen dat er geen output naar buiten komt tijdens het openen. Sluiten: Sluit voorzichtig het werkluik door de sluiting rondom dicht te klikken. Controleer altijd of het werkluik goed is gesloten.

Aanbrengen van het zakje

Verwijder de beschermfolie van de huidplaat. Vouw de huidplaat halverwege en plaats de opening aan de onderkant van de stoma. Strek de huid van de buik met een platte hand en plaats de huidplaat over de stoma in de juiste positie. Druk de hydrocolloïde huidplaat goed aan rondom de stoma, zodat deze goed hecht en zorg er voor dat de huidplaat goed vastzit. Plaats uw hand over de huidplaat en zorg ervoor dat een goede hechting ontstaat.

Legen van het zakje

Til de kraan op en open de kraan. Leeg de inhoud van het zakje in het toilet. Sluit de kraan opnieuw en zorg ervoor dat deze goed gesloten is.

Mogelijkheid afknippen van de kraan

Als de kraan niet nodig is, kan deze worden afgeknipt. In plaats daarvan kan de klittenbandsluiting worden gebruikt.

Legen van het zakje via de klittenbandsluiting

Til de onderkant van het zakje op en open de sluiting van de zak. Leeg de inhoud van het zakje in het toilet.

Sluit het zakje aan de onderkant

Zorg er eerst voor dat de klem of de klittenbandsluiting veilig is gesloten. Voor de klem: plaats de klem aan de achterkant van het zakje. Vouw het uiteinde van het zakje over de klem en zorg ervoor dat de folie van het zakje glad is en zich in de juiste positie bevindt. Druk stevig op de klem om te sluiten. Klemmen zijn herbruikbaar. Voor de sluitstrips: Neem de beschermfolie van de sluitstrip. Plak de sluitstrip op het onderste gedeelte van het zakje. Rol de onderkant van het zakje op. Vouw de sluitstrip aan beide kanten, zodat de onderkant van het zakje opgerold blijft. Voor de klittenbandsluiting: Rol de onderkant van het zakje op totdat de twee stukken van het klittenband elkaar raken. Druk de stukken klittenband stevig op elkaar om te sluiten. Voor de klittenbandsluiting met vouwlipjes: Rol de onderkant van het zakje op tot het klittenband zich op dezelfde hoogte bevindt als de vouwlipjes. Druk het klittenband van de vouwlipjes stevig op het klittenband van de sluiting.

Verwijderen van het zakje

Verwijder uw zak en gooi deze in de prullenbak. Spoel het gebruikte zak niet door het toilet, omdat de riolering hierdoor verstopt kan raken.

Vervangen van het zakje

Vervang en/of leeg het zakje zoals geadviseerd door uw zorgverlener.

Verwendungszweck, Produktbeschreibung und Materialangaben

Stomabeutel werden zur Sammlung von Körperausscheidungen verwendet und werden gewöhnlich über einem chirurgisch angelegten Stoma auf der Haut angebracht. Zensiv Stomaprodukte sind eine Reihe von 1- und 2-teiligen Stomabeuteln und 2-teiligen Flanschen in verschiedenen Größen und Formen. Alle 1- Beutel und 2-teiligen Flanschen sind mit einer hautfreundlichen Hydrokolloid-Platte zur Haftung auf dem Körper ausgestattet, die vor der Anwendung mit einem Trennfilm mit Schneidföhrung geschützt ist. Der Produktbeutel wird aus einer geruchsneutralisierenden Folie mit einer Vliesschicht und einem Aktivkohlefilter zur Geruchskontrolle (für Ileostomie und Kolostomie) hergestellt. Ileostoma-Beutel haben entweder einen aufrollbaren Auslass, der mit einem integrierten Klettverschluss verschlossen wird, oder es befinden sich in jeder Schachtel Klemmen und weiche Bänder. Für Urostoma sind die Beutel mit einem weichen Polymer-Hahn zur einfachen Drainage ausgestattet. Alle Beutel sind mit einem Sichtfenster ausgestattet, um das Stoma gegebenenfalls zu inspizieren. Bestimmte Reihen haben eine Entlüftung, um den Beutel gegebenenfalls zu entlüften. Alle Zensiv Stomaprodukte sind latexfrei und enthalten keine Inhaltsstoffe tierischer Herkunft. Die Produkte sind nicht steril und können unter allen gegebenen Umständen genutzt werden, wenn der behandelnde Arzt oder die medizinische Fachkraft entscheidet, dass ein nicht-steriles Produkt angewendet werden kann.



Warnungen-Vorsorgemaßnahmen

- Jeder Beutel dient nur der einmaligen Anwendung. Nicht wiederverwenden. Wiederverwendung kann Kreuzkontamination verursachen. - Nur nach Anweisung Ihrer medizinischen Fachkraft anwenden. - Vor der Anwendung die Anleitung lesen. - Stellen Sie die Nutzung der Beutel ein und wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft, wenn die Anwendung Beutel allergische Reaktionen auslöst oder sonstige Probleme verursacht.

Kontraindikationen

Diese Produkte sollten nicht von Personen mit einer bekannten Empfindlichkeit vor folgenden Stoffen verwendet werden: Polyethylen, Polyamid, Medizinalkohle, synthetische Polymere, Ethylen-Vinylacetat, Polypropylen, Polyester, Polyisobuten, Carboxymethylcellulose, Pektin oder Glycerin, Acrylgel, Spandex.

Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte an einem kühlen, trockenen Ort, bei einer Temperatur zwischen 0°C bis 27°C gelagert werden, wie es auch auf dem Produktetikett verzeichnet ist.

Schwerer Zwischenfall

Falls sich in Folge der Anwendung dieses Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, bitte sofort den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Heimatland informieren.

Haltbarkeit

Bis zum auf dem Etikett angezeigten Verfallsdatum verwenden.

Sammeln Sie Ihre Materialien

Sorgen Sie dafür, dass alle benötigten Materialien gebrauchsfertig sind. Legen Sie ein Lineal oder Maßband, eine Schere, einen Stift, eine befeuchtete und eine trockene Mullbinde und einen Stomabeutel zurecht.

Wählen Sie die richtige Größe

Messen Sie Ihr Stoma mit einem Lineal oder Maßband und schneiden Sie (falls erforderlich) den Flansch je nach Größe des Stomas zu. Achten Sie darauf, die richtige Größe zu wählen, damit das Stoma und die das Stoma umgebende Haut gesund bleiben. Lassen Sie maximal 2 mm Zwischenraum zwischen Ihrem Stoma und dem Flansch, damit es sicher und genau passt. Wenn der Flansch zu groß ist, kann Ihr Kot die Haut beschädigen. Wenn er zu klein ist, kann der Flansch die Haut beschädigen. Im Laufe der Zeit kann sich die Form oder Größe des Stomas verändern, daher können regelmäßige neue Messungen erforderlich sein, um Leckagen zu vermeiden.

Bereiten Sie Ihre Haut vor

Stützen Sie die Haut und entfernen Sie den Flansch vorsichtig, nicht abreißen, sondern die Haut vom Flansch wegdrücken, gegebenenfalls eine befeuchtete Mullbinde verwenden. Die Haut um Ihr Stoma mit warmem und nicht parfümiertem Wasser waschen. Zur Reinigung Ihrer Haut keine Mittel verwenden, die Alkohol, Parfüm oder Ether enthalten, da diese die Haut beschädigen können. Reiben Sie die Haut nicht zu fest, das kann die Haut beschädigen. Trocknen Sie die Haut vorsichtig und gründlich, damit Ihr Beutel gut haftet. Optional: Wenn Ihre Haut gereizt und strapaziert ist, können Sie Skin Barrier Creme, Hydrokolloid-Pulver oder Skin Barrier Wipes verwenden. Das Pulver, die Skin Barrier Creme oder die Wipes sanft auf die das Stoma umgebende Haut auftragen.

Den Hahn an der Unterseite des Beutels schließen

Prüfen Sie zuerst, ob der Hahn sicher geschlossen ist. Den Hahn durch festes Drücken schließen.

Ihren Beutel an einen Nachtbeutel verbinden

Der Beutel hat einen Universalhahn. Dieser Hahn kann an nahezu jede Art und Marke Nachtbeutel angeschlossen werden. Den Hahn des Beutels öffnen und diesen mit dem Anschluss des Nachtbeutels verbinden. Prüfen, ob der Anschluss sicher ist.

Zugangsfenster

Zum Öffnen: Öffnen Sie das Zugangsfenster an der dafür vorgesehenen Lasche und ziehen Sie es auf. Halten Sie den Beutel dabei mit der anderen Hand fest. Stellen Sie sicher, dass der Beutel vor dem Öffnen des Zugangsfensters entleert ist. Wenn dies nicht möglich ist, halten Sie den Beutel vorsichtig fest, um sicherzustellen, dass während des Öffnens kein Material ausläuft. Zum Schließen: Schließen Sie den Beutel vorsichtig, indem Sie das Zugangsfenster einrasten lassen und den Verschlussbereich bis zum Anschlag andrücken, um ein vollständiges Schließen zu gewährleisten. Überprüfen Sie immer, ob das Zugangsfenster richtig geschlossen ist.

Ihren Beutel anbringen

Das Trennpapier des Flansches abnehmen. Den Flansch zur Hälfte falten und die Öffnung an die untere Seite des Stomas legen. Die Haut des Bauches mit flacher Hand straffen und den kompletten Flansch in die korrekte Position über dem Stoma ziehen. Arbeiten Sie dabei um das Stoma herum, damit das Hydrokolloid auf der Haut haftet und vergewissern Sie sich, dass der Flansch gut befestigt ist. Legen Sie Ihre Hand über den Flansch und sorgen Sie dafür, dass eine einwandfreie Versiegelung erzielt wurde.

Ihren Beutel entleeren

Den Hahn anheben und öffnen. Den Inhalt Ihres Beutels in die Toilette entleeren. Den Hahn wieder schließen und sicherstellen, dass er sicher verschlossen ist.

Hahn und Auslassverschluss

Wenn der Hahn nicht benötigt wird, kann dieser abgeschnitten und stattdessen der Klettverschluss verwendet werden.

Ihren Beutel entleeren mit Hilfe des Klettverschlusses

Das untere Ende des Beutels anheben und den Beutel öffnen. Den Inhalt Ihres Beutels in die Toilette entleeren.

Den Auslass schließen

Prüfen Sie zuerst, ob die Klemme oder der Klettverschluss sicher geschlossen ist. Für die Klemme: Die Klemme am unteren Ende des Beutels befestigen. Den Beutel unter der Klemme einmal über die Klemme falten. Dabei darauf achten, dass die Beutelfolie keine Falten wirft, damit sich der Auslass in der richtigen Position befindet und die Klemme fest schließt. Die Klemmen sind wiederverwertbar. Für die Metalldrahtstreifen: Den Trennfilm vom Metalldrahtstreifen lösen. Den Metalldrahtstreifen am unteren Ende des Beutels befestigen. Das untere Ende des Beutels aufrollen. Den Metalldrahtstreifen an beiden Seiten falten, damit das untere Ende des Beutels aufgerollt bleibt. Für den Klettverschluss: Das untere Ende des Beutels aufrollen bis die beiden Klettverschlüsse einander berühren. Die Klettverschlüsse fest zusammendrücken. Für Klettverschluss mit Faltlaschen: Das Ende des Beutels aufrollen, bis der Klettverschluss auf gleicher Höhe mit den Faltlaschen ist. Klett auf den Faltlaschen fest auf das Klett des Verschlusses drücken.

Entsorgung Ihres Beutels

Entfernen Sie Ihren Beutel und entsorgen Sie ihn im Müll. Spülen Sie Ihren gebrauchten Beutel nicht durch die Toilette, da es sonst zur Verstopfung der Kanalisation kommt.

Häufigkeit des Beutelwechsels

Wechseln bzw. entleeren Sie Ihren Beutel gemäß den Empfehlungen Ihrer medizinischen Fachkraft.

الاستخدام المقصود وصف المنتج ومعلومات المواد

تُستخدم أكياس الاستوما لجمع الفضلات من الجسم وعادة ما يتم ربطها بالجلد فوق فتحة الفغر ستوما المصنوعة جراحياً.

منتجات الاستوما زينسيف هي عبارة عن مجموعة من أكياس فغر ستوما قطعة واحدة وقطعتين وحلقه من قطعتين بأحجام وأشكال مختلفة. تحتوي جميع الأكياس ذات القطعة الواحدة والقطعتين على رقاقة مائية غروانية صديقة للبشرة للالتصاق بالجسم وهذا محمي قبل الاستخدام مع فيلم إطلاق يظهر دليل القطع. يتم تصنيع كيس المنتج من فيلم حاجز الرائحة مع طبقة مريحة غير منسوجة وفلتر كربون للتحكم في الرائحة (لفغر اللانفسي اليوستومي وفغر القولون كولوستومي). تحتوي أكياس فغر اللانفسي اليوستومي إما على منفذ تصريف متدحرج مؤمن بإغلاق متكامل من نوع "الفيلكرو" أو توجد مشابك وروابط لينة في كل صندوق. بالنسبة إلى فغر البول ، تحمل الأكياس حنفية بوليور ناعمة لسهولة التصريف. تحتوي جميع الأكياس على نافذة عرض لفحص الثغرة إذا لزم الأمر. تحتوي بعض النطاقات على فتحة تهوية مع غطاء لتنفيس الحقيبة إذا لزم الأمر.

جميع منتجات زينسيف للفاغرة خالية من اللاتكس ولا تحتوي على مكونات من أصل حيواني. المنتجات غير معقمة ويمكن استخدامها في أي ظروف مناسبة يقرر فيها الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية منتجاً غير معقم.

تحذيرات - احتياطات

- كل كيس للاستخدام الفردي فقط - لا تعد الاستخدام - يمكن أن تؤدي إعادة الاستخدام إلى التلوث المتبادل.
- استخدم فقط حسب توجيهات أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
- اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.
- توقف عن الاستخدام واتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت أي ردود فعل أو حساسية عند استخدام الأكياس.

موانع الاستخدام

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية معروفة تجاه: البولي إيثيلين، والبولي أميد، والفحم الطبي، والبوليمر الصناعي، وخلات الفينيل إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبوليستروبولي إيزوبوتيلين، وكاربوكسي ميثيل السليلوز، والبكتين، وهلام الأكرليك، والبايف لدنة، والجلسرين.

شروط التخزين

من الأفضل تخزين منتجاتك في مكان بارد وجاف مع توجيه درجة الحرارة من 0 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية كما هو موضح على ملصق المنتج.

حوادث خطيرة

في حالة وقوع حادث خطير نتيجة لاستخدام المنتج ، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في البلد الذي تقيم فيه على الفور.

مدة الصلاحية

الاستخدام بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق.

اجمع موادك

تأكد من أن جميع المواد الضرورية جاهزة لجمع دليل القياس ، ومقص ، وقلم ، وشاش رطب وجاف وكيس الفغر (ستوما) كل القطعتين.

اتر المقاس المناسب

قم بقياس فتحة الفغر ستوما باستخدام دليل قياس وقص (إذا لزم الأمر) الحافة إلى الحجم الصحيح للفتحة. تأكد من اختيار الحجم المناسب بحيث تبقى الفتحة والجلد المحيط بصحة جيدة. اترك مسافة لا تقل عن 2 م بين الفتحة وحافة القاعدة من أجل ملائمة آمنة وصحيحة. إذا كان الحجم كبيراً جداً ، فإن برازك سيتلف الجلد. إذا كان الحجم صغيراً جداً ، فسوف تتلف حافة القاعدة فتحة الفغر ستوما. بمرور الوقت قد يتغير شكل الفتحة أو حجمها ، لذا قد يلزم إجراء قياسات دورية مرة أخرى لمنع أي تسرب.

تجهيز جلدك

دعم الجلد وإزالة القاعدة بعناية ، لا تنزعها ولكن ادفع الجلد للخلف من الحافة ، استخدم الشاش الرطب إذا لزم الأمر. اغسل الجلد المحيط بفتحة الفغر ستوما بالماء الدافئ وغير المعطر. لا تستخدم أي شيء يحتوي على الكحول أو العطور أو الأثير لتنظيف بشرتك لأنها يمكن أن تسبب الضرر. لا تفرك الجلد بشدة لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الجلد. جفف الجلد بعناية ودقة للتأكد من أن الكيس يلتصق بشكل جيد.

اختياري: إذا كان جلدك متهيجاً ومتقرحاً ، يمكنك استخدام كريم حماية البشرة أو مسحوق هيدروكوليد أو مناديل حماية الجلد. ضع المسحوق أو كريم حماية البشرة أو امسح برفق على الجلد المحيط.

أغلق الصنبور اسفل الكيس

أولاً ، تأكد من إغلاق الصنبور بأمان. أغلق الصنبور بالضغط عليه بقوة.

توصيل كيس الفغر بكيس بول ليلي

الحقيبة لديها صنبور عالمي. يمكن توصيل هذا الصنبور بأي نوع وعلامة تجارية لحقيبة ليلية تقريباً. افتح صنبور الحقيبة وقم بتوصيل هذا بموصل الحقيبة الليلية وتأكد من أن الاتصال آمن.

الفتحة

للفتح: افتح الفتحة باستخدام الشريط واسحب للفتح. أمسك الكيس بيدك الأخرى أثناء القيام بذلك. تأكد من إفراغ الكيس قبل فتح الفتحة. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فامسك الكيس بعناية لضمان عدم تسرب أي فضلات أثناء عملية الفتح.

للإغلاق: أغلق الكيس بعناية من خلال إغلاق الفتحة والضغط المستمر حول قسم الإغلاق لضمان الإغلاق الكامل. تحقق دائماً من أن الفتحة مغلقة بشكل صحيح.

تناسب الكيس

قم بإزالة ورقة تحرير القاعدة. اطو القاعدة في المنتصف وضع الفتحة في الجانب السفلي من فتحة الفغر ستوما. شد جلد بطنك بيد مسطحة ثم اسحب القاعدة بالكامل فوق فتحة الفغر ستوما إلى الوضع الصحيح. شق طريقك حول الفغر ستوما بحيث تلتصق القاعدة بالجلد وتأكد من أن القاعدة آمنة. ضع يدك على القاعدة وتأكد من لصقها جيداً.

تفريغ الكيس

ارفع الصنبور ثم افتحه وافرغ محتويات الكيس في المراض. أغلق الصنبور مرة أخرى مع التأكد من إغلاقه بشكل آمن.

الصنبور وإغلاق فتحة التصريف

إذا لم تكن هناك حاجة للصنبور ، فيمكن قطعه واستخدام نوع مشبك. إغلاق أو "الفيلكرو" بدلاً من ذلك.

"أفرغ الكيس باستخدام مشبك الإغلاق من نوع ,,الفيلكرو"

ارفع ذيل الكيس ثم افتحه. وأفرغ محتويات الكيس في المراض.

أغلق فتحة التصريف

أولاً ، تأكد من إغلاق المشبك أو "الفيلكرو" بأمان.

للمشبك: ضع المشبك على ذيل الحقيبة. قم بطي طرف الذيل مرة واحدة فوق المشبك وتأكد من أن غشاء الذيل سلس لضمان أن ذيل المخرج في الموضع الصحيح واضغط على المشبك بقوة. المشابك قابلة لإعادة الاستخدام.

بالنسبة لشرايط الأسلاك المعدنية: انزع الفيلم من شريط الأسلاك المعدنية. ضع شريط الأسلاك المعدنية على ذيل الحقيبة. قم بلف ذيل الحقيبة. اطو السلك المعدني على كلا الجانبين حتى يبقى ذيل الحقيبة ملفوفاً.

لإغلاق الفيلكرو: قم بلف ذيل الحقيبة حتى تلامس قطعاً "الفيلكرو" بعضهما البعض. اضغط على قطع "الفيلكرو" على بعضها البعض بإحكام.

بالنسبة لإغلاق شريط الفيلكرو بالأسنة القابلة للطي: قم بطي الجزء السفلي من الكيس حتى يصل الفيلكرو إلى نفس ارتفاع الأسنة القابلة للطي. ثم اضغط بقوة على جزء الفيلكرو الموجود على الأسنة القابلة للطي، واصفه على شريط إغلاق الفيلكرو الموجود على الكيس.

التخلص من الكيس

قم بإزالة الكيس والتخلص منه في سلة المهملات. لا تفرغ الكيس المستخدم في المراض لأن ذلك سيعيق نظام الصرف الصحي.

تكرار تغيير الكيس

قم بتغيير / إفراغ الكيس كما ينصح به أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

BA - Uputstvo za upotrebu

Namjena, opis proizvoda i informacije o materijalima

Stoma vrećice se koriste za prikupljanje tjelesnih izlučevina i obično se pričvršćuju na kožu nakon hirurškog zahvata stome. Zensiv Stoma proizvodi su podijeljeni na jednodijelne i dvodijelne stoma sisteme vrećica sa podlogama različitih oblika i veličina. Svi jednodijelni i dvodijelni sistemi vrećica iz ZenSiv programa su za kožu ugodni i izrađeni su od hidrokoloidnih materijala koji se pričvršćuju za kožu. Folija koja se nalazi na hidrokoloidnim podlogama čini zaštitni sloj koji se skida prije samog pričvršćivanja na kožu, što se detaljno može vidjeti na vodiču za rezanje. Vrećica za stomu izrađena je od folije za zaštitu od mirisa sa udobnim netkanim i karbonskim filterom za kontrolu mirisa. (ileostoma i kolostoma). Vrećice za ileostomu imaju otvor za namotavanje koji se učvršćuje integralnim zatvaračem tipa "čičak" ili se u svakoj kutiji nalaze stezaljke i meke sponge. Za urostomu vrećice nose meku polimernu slavinu za drenažu. Sve vrećice imaju prozor za pregled stome u slučaju potrebe. Neki modeli vrećica imaju posebne otvore (vent otvor) s poklopcem za odzračivanje vrećice, ako je potrebno. Svi Zensiv Stoma proizvodi ne sadrže lateks i ne sadrže sastojke životinjskog porijekla. Proizvodi su nesterilni i mogu se koristiti u bilo kojim odgovarajućim okolnostima kada dežurni ljekar ili zdravstveni radnik odluče da se može primijeniti nesterilni proizvod.



Upozorenia-Predostrožnosti

- Svaka vrećica iz asortimana ZenSiv stoma programa je jednokratna i ne može se ponovo koristiti. Ponovno korištenje vrećice može izazvati unakrsnu-kontaminaciju. - Koristiti prema uputama zdravstvenog radnika. - Pročitati upute prije upotrebe. - U slučaju bilo kakve alergijske reakcije ili probleme prilikom upotrebe vrećica, prekinuti korištenje i obavijestiti svog zdravstvenog radnika.

Kontraindikacije

ZenSiv proizvode ne smiju koristiti osobe sa osjetljivošću na: polietilen, poliamid, medicinski ugljen, sintetički polimer, etilen vinil acetat, polipropilen, poliestar, polizobutilen, karboksimetilcelulozu, pektin ili glicerol, akrilni gel, spandeks.

Uslovi skladištenja

Proizvodi se čuvaju na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi od 0°C do 27°C, kako je navedeno i na etiketi proizvoda.

Ozbiljni slučajevi

Ako se zbog upotrebe proizvoda dogodi ozbiljan incident, molimo da to odmah prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu u državi u kojoj živite.

Rok trajanja

Rok trajanja naveden na etiketi.

Pripremite svoj mateijal za upotrebu

Provjerite jesu li svi potrebni materijali spremni za upotrebu. Pripremite mjerni vodic, škare, olovku, vlažnu i suhu gazu i vrecicu za stomu.

Izaberite pravu veličinu

Izmjerite promjer otvora stome vodicom za mjerenje i izrežite (ako je potrebno) podlogu na pravu veličinu stome. Obavezno odaberite pravu veličinu kako bi stoma i okolna koža ostali zdravi. Omogućite maksimalno 2 mm prostora između stome i podloge za sigurno i pravilno postavljanje. Ako je veličina prevelika, fekalije će oštetiti kožu. Ako je veličina premala, podloga će oštetiti kožu na stomaku. Vremenom vaša stoma može promijeniti oblik ili veličinu, pa će povremeno biti potrebna ponovna mjerenja kako bi se spriječilo curenje.

Pripremite Vašu kožu

Poduprite kožu i pažljivo uklonite podlogu, ne odvajajte, već gurnite kožu natrag sa podloge, po potrebi upotrijebite vlažnu gazu. Operite kožu oko vaše stome toplom i neparfemiranom vodom. Za čišćenje kože nemojte koristiti ništa što sadrži alkohol, parfem jer mogu prouzrokovati oštećenja. Ne trljajte kožu prejako jer bi to moglo dovesti do oštećenja kože. Osušite kožu pažljivo i temeljno kako biste osigurali da vaša vrećica dobro prijanja. Napomena: Ako vam je koža nadražena i upaljena, možete koristiti kremu za zaštitu, hidrokoloidni puder ili maramice za zaštitu kože. Nanesite puder, kremu za zaštitu kože i nježno obrišite okolnu područje stome.

Zatvorite meku slavinu (otvor) na dnu kese

Prvo provjerite da li je otvor na dnu kese sigurno zatvoren. Zatvorite otvor tako da čvrsto pritisnete poklopac na otvoru.

Spojite vrećicu za noćnu kesu

Vrećica ima univerzalnu slavinu (otvor). Ovom slavinom možete povezati gotovo svaku vrstu i brend noćne kese. Kada otvorite slavinu vrećice i spojite je sa priključkom noćne kese, zadnji korak - provjerite da li je veza sigurna.

Prozor za pristup

Otvaranje: Otvorite prozor za pristup tako što ćete uhvatiti izbočeni dio, povući ga i otvoriti. Dok to radite, držite vrećicu drugom rukom kako se ne bi pomjerala. Prije otvaranja prozora za pristup osigurajte da vrećica bude ispraznjena. Ako to nije moguće, pažljivo držite vrećicu kako biste osigurali da se sadržaj ne izlije tokom postupka otvaranja. Zatvaranje: Pažljivo zatvorite prozor za pristup tako što ćete ga vratiti u početni položaj, prikopčati i pritisnuti do kraja oko dijela za zatvaranje kako biste osigurali potpuno zatvaranje. Nakon zatvaranja uvijek provjerite da li je prozor za pristup pravilno zatvoren.

Pripremite svoju vrećicu

Uklonite zaštitni papir sa podloge. Preklapite podlogu na pola i postavite otvor na donjoj strani stome. Poravnajte kožu trbuha rukom i povucite cijelu podlogu preko stome u pravilan položaj. Pomičite kožu oko stome tako da se hidrokoloidna podloga pričvrsti za kožu i osigurajte da je dobro zaljepljena za kožu. Postavite ruku preko podloge i provjerite na taj način da li je stvorena jaka veza između podloge i kože.

Ispraznite sadržaj vrećice

Otvorite završetak vrećice i otvorite vrećicu, zatim ispraznite sadržaj vrećice u toalet.

Zatvaranje slavine i otvora

Ako slavinu nije potrebna može se odrezati, a umjesto nje se može upotrijebiti „čičak“ zatvarač.

Ispraznite sadržaj vrećice koristeći „čičak“ zatvarač

Podignite završetak vrećice i otvorite vrećicu, zatim ispraznite sadržaj vrećice u toalet.

Zatvorite otvor

Prvo provjerite je li zatvarač tipa "čičak" sigurno zatvoren. Za stezaljku: stezaljku stavite na kraj vrećice. Kraj vrećice jednom preklapite preko stezaljke i osigurajte da je folija vrećice glatka kako bi se osiguralo da je izlazni otvor u ispravnom položaju i čvrsto pritisnete stezaljku. Stezaljke ili trakice su za višekratnu upotrebu. Za trake od metalne žice: Skinite otpustni film sa trake metalne žice. Zalijepite traku metalne žice na kraj vrećice. Svežite kraj vrećice. Preklapite metalnu žicu s obje strane tako da kraj vrećice ostane namotan. Za zatvaranje na čičak: preklapiti kraj vrećice dok se dva komada "čička" ne dodirnu. Čvrsto pritisnite komade "čička", dok se ne uklape. Kada se bavite čičak zatvaračem sa preklapnim jezičcima: namotajte rep torbice. Učinite to dok čičak ne bude na istoj visini kao i jezičci za sklapanje. Zatim čvrsto pritisnite čičak na preklapnim jezičcima na čičak zatvarača.

Odlaganje vrećice

Iskorištenu vrećicu bacite u smeće. Iskorištene vrećice ne smijete baciti u toalet, jer to može blokirati vašu kanalizaciju.

Učestalost mijenjanja vrećica

Promijenite / ispraznite vrećicu prema uputama vašeg zdravstvenog radnika.

CZ - Návod k použití

Účel použití, popis produktu a informace o materiálech

Stomické sáčky se používají ke shromažďování odpadu z těla a jsou obvykle přiloženy k pokožce na chirurgicky vytvořené stomii. Produkty Zensiv Ostomy jsou řadou jednoduchých a dvoudílných stomických sáčků a dvoudílných kroužků různých velikostí a tvarů. Všechny jednoduché sáčky a dvoudílné podložky mají hydrokoloidní lepicí vrstvu šetrnou k pokožce, která slouží pro zajištění přilnutí k tělu a která je před použitím chráněna ochrannou fólií s vystřihovací šablonou. Sáček se vyrábí z fólie zabráňující zápachu s komfortní vrstvou z netkané textilie a uhlíkovým filtrem pro odbourávání zápachu (pro ileostomie a kolostomie). Ileostomické sáčky mají buď rolovací výpusť zabezpečenou integrálním uzávěrem typu suchý zip nebo se v každé krabici dodávají svorky a měkké šňůrky. V případě urostomie mají sáčky měkký polymerový uzávěr pro snadné odvádění moči. Všechny sáčky mají kontrolní okénko, kterým lze v případě potřeby stomii kontrolovat. Některé produktové řady mají ventil s krytkou, kterým se může v případě potřeby sáček odvětrávat. Žádné produkty Zensiv Ostomy neobsahují latex ani složky živočišného původu. Produkty jsou nesterilní a lze je použít za jakýchkoliv vhodných okolností, kdy ošetřující lékař nebo zdravotnický pracovník rozhodne o tom, že se může použít nesterilní produkt.

Varování – bezpečnostní opatření

- Každý sáček je pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně. Opakované použití může vést ke křížové kontaminaci. - Používejte pouze podle pokynů zdravotnického pracovníka. - Před použitím si přečtěte návod k použití. - Pokud se při používání sáčků vyskytnou alergické reakce nebo problémy, přerušete jejich používání a kontaktujte zdravotnického pracovníka.

Kontraindikace

Tyto pomůcky by neměla používat osoba se známou citlivostí na polyetylen, polyamid, lékařské uhlí, syntetický polymer, ethylenvinylacetát, polypropylen, polyester, polyisobutylen, karboxymethylcelulózu, pektin nebo glycerin, akrylový gel, spandex.

Podmínky skladování

Produkty skladujte nejlépe v chladu na suchém místě s přibližnou teplotou od 0°C do 27°C, jak je uvedeno na etiketě produktu.

Vážné incidenty

Dojde-li k vážnému incidentu v důsledku používání produktu, neprodleně to oznamte výrobci a příslušnému úřadu v zemi, ve které bydlíte.



Trvanlivost

Použijte do data spotřeby uvedeného na obalu.

Připravte si materiál

Připravte si všechny potřebný materiál - měřicí šablonu, nůžky, tužku, mokrou a suchou gázu a stomický sáček.

Zvolte správnou velikost

Změřte stomii měřicí šablonou a podle potřeby ořízněte podložku na správnou velikost stomie. Ujistěte se, že jste vybrali správnou velikost, aby stomie a okolní pokožka zůstaly zdravé. Mezi stomií a podložkou ponechtejте maximálně 2 mm prostoru pro bezpečné a správné nasazení. Pokud je velikost příliš velká, stolice poškodí pokožku. Pokud je velikost příliš malá, podložka poškodí stomii. Během doby může stomie změnit tvar nebo velikost, takže může být zapotřebí pravidelné měření, aby se zabránilo úniku.

Připravte pokožku

Podepřete pokožku a opatrně sejměte podložku, neodtrhávejte ji, ale tlačte pokožku zpět z podložky; v případě potřeby použijte mokrou gázu. Omyjte pokožku okolo stomie teplou a neparfémovanou vodou. K čištění pokožky nepoužívejte nic, co obsahuje alkohol, parfémy nebo éter, protože to může způsobit poškození. Nemněte pokožku příliš drsně, protože by to mohlo vést k jejímu poškození. Opatrně a důkladně pokožku vysušte, abyste zajistili dobré přilnutí sáčku. Volitelně: Pokud je vaše pokožka podrážděná nebo bolestivá, můžete použít ochranný krém, hydrokoloidní prášek nebo ochranné ubrousky. Použijte prášek, ochranný krém nebo ubrousek jemně na okolní pokožku.

Zavřete uzávěr na spodní straně sáčku

Nejprve se ujistěte, že uzávěr je bezpečně zavřený. Uzávěr zavřete tak, že ho pevně stisknete.

Připojení sáčku na noční sběrný sáček

Sáček má univerzální uzávěr. Tento uzávěr lze připojit téměř ke každému typu a značce nočního sběrného sáčku. Otevřete uzávěr sáčku a připojte ho ke konektoru nočního sběrného sáčku. Zkontrolujte, že je připojení bezpečné.

Přístupové okénko

Otevření: Otevřete přístupové okénko pomocí záložky, která je k dispozici, a tažením otevřete. Druhou rukou přitom držte sáček pevně. Před otevřením přístupového okénka se ujistěte, že je sáček vyprázdněný. Pokud to není možné, držte sáček opatrně, aby během otevírání neunikl obsah. Zavření: Zavřete opatrně zaklapnutím přístupového okénka a stisknutím celého zavíracího dílu, abyste zajistili úplné uzavření. Vždy zkontrolujte, zda je přístupové okénko řádně uzavřeno.

Připevnění sáčku

Odstraňte ochrannou folii z podložky. Přeložte podložku na polovinu a umístěte otvor na spodní stranu stomie. Plochou dlaní napněte kůži na břicho a natáhněte celou podložku přes stomii do správné polohy. Prsty uhlazujte místo kolem stomie tak, aby hydrokoloid přilnul k pokožce, a ujistěte se, že podložka je zajištěná. Položte ruku na podložku a zkontrolujte, zda je dobře utěsněná.

Vyprazdňování sáčku

Zvedněte uzávěr a otevřete ho. Vyprázdněte obsah sáčku do toalety. Znovu uzávěr zavřete a ujistěte se, že je bezpečně zavřený.

Uzávěr a zavření vývodu

Pokud uzávěr není potřeba, lze jej odříznout a místo něj použít uzávěr na suchý zip.

Vyprázdnění vaku pomocí uzávěru na suchý zip

Zvedněte zadní část sáčku a sáček otevřete. Vyprázdněte obsah sáčku do toalety.

Uzavřete vývod

Nejprve se ujistěte, že svorka nebo uzávěr typu suchý zip jsou bezpečně uzavřeny. V případě svorky: Umístěte svorku na spodní konec sáčku. Přeložte spodní konec sáčku jedenkrát přes svorku a ujistěte se, že folie konce je hladká, aby byl výstupní konec ve správné poloze, a pevně stiskněte svorku. Svorky jsou použitelné opakovaně. V případě pásků z kovového drátu: Vyjměte ochrannou folii z pásky z kovového drátu. Přilepte pásek z kovového drátu na spodní konec sáčku. Srolujte spodní konec sáčku. Přeložte kovový drát na obou stranách tak, aby spodní konec sáčku zůstal srolovaný. V případě uzávěru na suchý zip: Rolujte spodní konec sáčku tak dlouho, dokud se nebudou suché zipy vzájemně dotýkat. Suché zipy k sobě pevně přitiskněte. Pro zapínání na suchý zip se zavíracími poutky: Srolujte zadní část pytlíku, dokud se nedostane suchý zip na stejnou úroveň jako zavírací poutka. Přitiskněte suchý zip na zavíracích poutcích pevně k suchému zipu uzávěru.

Likvidace sáčku

Odstraňte sáček a vyhoďte ho do odpadu. Použitý sáček nesplachujte do záchodu, protože by se tím mohla ucpat kanalizace.

Frekvence výměny sáčků

Vyměňujte/vyprazdňujte sáček podle pokynů zdravotnického pracovníka.

DK - Brugsanvisning

Tilsigtet anvendelse, produktbeskrivelse og materialeinformation

Stomiposer bruges til at opsamle affaldsprodukter fra kroppen og er normalt fastgjort til huden over en kirurgisk fremstillet stomi. Zensiv Ostomy-produkter er en serie med stomiposer i 1 og 2 dele og 2-delte flanger i forskellige størrelser og former. Alle poser i 1 del og 2-delte flanger har en hudvenlig hydrokoloid-pude til fastgørelse til kroppen, og den er beskyttet inden brug med en frigivelsesfilm, der viser en klippevejledning. Produktposen er fremstillet af lugtbarrierefilm med et komfortabelt, ikke-vævet lag og et kulfilter til lugtkontrol (til ileostomi og colostomi). Ileostomiposer har enten en sammenrullet afløbsåbning, der er sikret med en integreret "velcro"-lukning, eller også er der klemmer og bløde bånd i hver æske. Til urostomi har poserne en blød polymerhane for nem dræning. Alle poser har et vindue til at inspicere stomien, hvis det skulle være nødvendigt. Nogle områder har en ventilationsåbning med låg til udluftning af posen, hvis dette kræves. Alle Zensiv Ostomy-produkter er latexfrie og indeholder ikke ingredienser af animalsk oprindelse. Produkterne er ikke-sterile og kan anvendes under alle omstændigheder, hvor den behandlende læge eller sundhedsperson beslutter, at et ikke-sterilt produkt kan anvendes.

Advarsler og forholdsregler

- Hver pose er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Genbrug kan føre til krydskontaminering. - Må kun bruges som anvist af dit sundhedspersonale. - Læs instruktionerne inden brug. - Afbryd brugen og kontakt dit sundhedspersonale, hvis du oplever allergiske reaktioner eller problemer, når du bruger poserne.

Kontraindikationer

Disse enheder må ikke bruges af personer med en kendt overfølsomhed over for: polyethylen, polyamid, medicinsk trækul, syntetisk polymer, ethylenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylene, carboxymethylcellulose, pektin eller glycerin, akrylgel, spandex.

Opbevaringsbetingelser

Det er bedst at opbevare dine produkter på et køligt, tørt sted med en temperatur fra 0°C til 27°C som angivet på produktetiketten.

Alvorlige hændelser

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, som følge af brugen af produktet, bedes du straks indberette dette til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor du bor.

Holdbarhed

Skal bruges inden udløbsdatoen, der er angivet på etiketten.

Find dine materialer

Sørg for, at alle nødvendige materialer er klar til brug. Find en målevejledning, en saks, en blyant, våd og tør gaze og en stomipose.

Vælg den rigtige størrelse

Mål din stomi med en målevejledning og klip (om nødvendigt) flangen til den rigtige størrelse, så den passer til stomien. Sørg for at vælge den rigtige størrelse, så stomien og den omgivende hud forbliver sund og rask. Tillad maksimalt et 2 mm mellemrum mellem din stomi og flangen for en sikker og korrekt tilpasning. Hvis størrelsen er for stor, beskadiger din fæces huden. Hvis størrelsen er for lille, vil flangen beskadige stomien. Over tid kan din stomi ændre form eller størrelse, så periodiske målinger kan være nødvendige igen for at forhindre lækager.



Forbered din hud

Støt huden og fjern flangen forsigtigt. Riv den ikke af, men skub huden tilbage fra flangen. Brug om nødvendigt våd gaze. Vask huden omkring din stomi med varmt og uparfumeret vand. Brug ikke noget, der indeholder alkohol, parfume eller æter til at rengøre din hud, da dette kan forårsage skade. Gnid ikke huden for hårdt, da dette kan føre til hudskader. Tør huden forsigtigt og grundigt for at sikre, at din pose klæber godt. Valgfrit: Hvis din hud er irriteret og øm, kan du bruge en hudbarrierecreme, hydrokolloidpulver eller hudbarriereservietter. Påfør pulver, hudbarrierecreme eller aftør forsigtigt den omgivende hud.

Luk for hane i bunden af posen

Sørg først for, at hane er lukket sikkert. Luk hane ved at trykke hane fast.

Tilslut din pose til en natpose

Posen har en universal hane. Denne hane kan tilsluttes næsten enhver type og mærke af natposer. Åbn posens hane, og tilslut den til natposens stik, og sørg for, at forbindelsen er sikker.

Adgangsvindue

Åbning: Åbn adgangsvinduet ved hjælp af den medfølgende hane, og træk den op. Hold posen roligt med den anden hånd, mens du gør dette. Sørg for, at posen er tømt, før du åbner adgangsvinduet. Hvis dette ikke er muligt, skal du forsigtigt holde posen for at sikre, at afføring ikke løber ud under åbning. Lukning: Luk forsigtigt ved at klikke adgangsvinduet ned og trykke hele vejen rundt om lukkesektionen for at sikre at vinduet er helt lukket. Kontroller altid, at adgangsvinduet er lukket korrekt.

Tilpas din pose

Fjern frigørelsespapiret fra flangen. Fold flangen halvvejs, og placér åbningen på undersiden af stomien. Stræk huden på din mave med en flad hånd, og træk hele flangen over stomien i den rigtige position. Arbejd dig rundt om stomien, så hydrokolloidet fastgøres til huden og sørg for, at flangen er sikker. Placér din hånd over flangen og sørg for, at der skabes en god tætning.

Tøm din pose

Løft hane op, og åbn hane. Tøm indholdet af din pose ned i toilettet. Luk hane igen og sørg for, at den er lukket korrekt.

Lukning af hane og udløb

Hvis hane ikke er nødvendig, kan den skæres af, og i stedet kan der bruges en "velcro"-lukning.

Tøm posen ved hjælp af "velcro"-lukningen

Løft posens hale og åbn posen. Tøm indholdet af din pose ned i toilettet.

Luk udløbet

Sørg først for, at klemmen eller "velcro"-lukningen er sikkert lukket. For klemmen: Anbring klemmen bag på posen. Fold enden af halen én gang over klemmen og sørg for, at halens film er glat for at sikre, at udløbshalen er i den rigtige position, og tryk på klemmen. Klemmerne kan genbruges. For metaltråde: Tag frigørelsesfilmen af metaltråden. Sæt metaltråden på posens hale. Rul posens halen op. Fold metaltråden på begge sider, så posens hale forbliver rullet op. Ved velcrolukning: Rul posens hale op, indtil de to stykker af velcro rører hinanden. Tryk stykkerne af velcro fast på hinanden. Til velcrolukning med foldeflige: Rul posens hale op, indtil velcroen er i samme højde som foldefligene. Tryk velcroen på foldefligene fast på lukningens velcro.

Bortskaf din pose

Fjern din pose og smid den i skraldespanden. Skyl ikke din brugte pose ud i toilettet, da dette kan blokere dit kloaksystem.

Hyppeghed af poseskift

Skift/tøm din pose som anbefalet af dit sundhedspersonale.

ES - Instrucciones de uso

Indicaciones, Descripción del Producto e Información de los Materiales

Las bolsas de ostomía se utilizan para la recogida de desechos corporales y normalmente se fijan alrededor de un estoma quirúrgico. La gama de productos para las ostomías Zensiv comprenden bolsas de Una Pieza y de Dos piezas y apósitos de Dos Piezas de diversas medidas y formas. Todas las bolsas de Una Pieza y apósitos de Dos Piezas se distinguen por contar con un apósito hidrocoloide respetuoso con la piel que se adhiere al cuerpo. Antes de su utilización el apósito está protegido por una película que tiene impresa una guía de diámetros de corte. El producto se produce con una pared laminar que es barrera a los olores con una capa de tejido no tejido y un filtro de carbono para controlar los olores (para ileostomías y colostomías). Las bolsas para ileostomías tienen asimismo un puerto de vaciado enrollable con cierre integral, de tipo 'velcro' o mediante pinzas con sujeciones blandas que se incluyen en cada caja. Las bolsas para urostomía llevan un tapón blanco de polímero para un vaciado fácil. Todas las bolsas tienen ventana para inspeccionar el estoma cuando sea necesario. Algunas gamas tienen un puerto de ventilación con tapa para cuando se requiera evacuar gases. Todos los productos Zensiv para Ostomías están libres de látex y no contienen ingredientes de origen animal. Los productos son no-estériles y pueden ser utilizados en cualquier circunstancia que sea adecuada en el caso de que el médico o profesional sanitario al cargo decida que se puede utilizar un producto no-estéril.

Advertencias-Precauciones

- Las bosas son únicamente de un solo uso. No reutilizar. Reutilizar puede ser causa de contaminación cruzada. - Usar únicamente tras indicación de su profesional sanitario. - Leer las instrucciones antes de utilizar. - Dejar de usar y contactar con su profesional sanitaria si experimenta cualquier reacción alérgica o problema al utilizar las bolsas.

Contraindicaciones

No deben utilizarse estos dispositivos por personas con sensibilidad conocida a: polietileno, poliamida, carbón médico, polímeros sintéticos, acetato de etilen-vinilo, polipropileno, poliéster, poliisobutileno, carboximetilcelulosa, pectina o glicerina, gel acrílico, licra.

Condiciones de almacenamiento

Se recomienda almacenar sus productos en un lugar seco y fresco con control de temperatura de 0°C a 27°C tal como se indica en la etiqueta de producto.

Incidencias Graves

Si como resultado de la utilización del producto ocurriera una incidencia grave rogamos informe inmediatamente al fabricante y a la Autoridad Competente del país en el que resida.

Permanencia en almacén

Véase la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Reunir materiales

Asegure de tener todos los materiales necesarios preparados para su utilización. Prepare una guía de medidas, unas tijeras, bolígrafo, gasa o toallita seca y húmeda y la bolsa para el estoma.

Elija el tamaño adecuado

Mida su estoma con una guía de medidas y recorte (si es necesario) el apósito al tamaño del estoma. Asegúrese de elegir el tamaño adecuado a fin de que el estoma y la piel circundante se mantengan en buen estado. Para que encaje correctamente, no dejar más de 2 mm entre el estoma y el apósito. Si el tamaño es demasiado grande, las heces lesionarán la piel. Si el tamaño es demasiado pequeño, el apósito dañará el estoma. Con el tiempo, el estoma puede cambiar de tamaño o forma, son por tanto necesario tomar de nuevo medidas de forma periódica para prevenir fugas.

Prepare la piel

Presione la piel y retire el apósito con cuidado, sujete la piel de detrás del apósito y tire del mismo con precaución, si es necesario utilice una gasa húmeda. Limpie la piel periestomal con agua tibia sin perfumar. No utilice nada que contenga alcohol, perfume o éter para limpiar la piel ya que pueden dañarla. No frote la piel con demasiada fuerza pues puede lesionarla. Seque la piel cuidadosamente y a fondo para asegura que el apósito se fije bien. Opcional: Si tiene la piel irritada o ulcerada puede utilizar crema protectora, polvos hidrocoloides o toallitas protectoras, que siempre se deben aplicar con suavidad.

Cierre el tapón de la parte inferior de la bolsa

Primeramente, asegúrese que el tapón queda bien cerrado. Cierre el tapón presionando con firmeza.



Conectando la bolsa a la bolsa de drenaje nocturna

La bolsa tiene un tapón universal. El tapón se puede conectar a prácticamente todos los tipos y marcas de bolsas de drenaje. Abra el tapón de la bolsa y conecte la bolsa a la bolsa de drenaje mediante el conector de esta, cerciorándose de que la conexión es segura.

Ventana de acceso

Para abrir: Abra la ventana de acceso con la lengüeta prevista y tire de ella. Mantenga la bolsa firme con la otra mano mientras lo hace. Asegúrese de que la bolsa esté vacía antes de abrir la ventana de acceso. Si no es posible, sujete la bolsa con cuidado para asegurarse de que no se derrama ninguna sustancia durante el proceso de apertura. Para cerrar: Cierre con cuidado la ventanilla de acceso y vaya presionando alrededor del borde de la sección de cierre para asegurar el cierre completo. Compruebe siempre que la ventana de acceso está bien cerrada.

Colocación de la bolsa

Retire el papel protector del apósito. Doble el apósito por la mitad y coloque la apertura de este por encima del estoma. Estire la piel abdominal con la mano plana y coloque el apósito sobre el estoma en la posición correcta. Presione suavemente por encima del apósito alrededor del estoma para asegurar que se fija firmemente. Pase la mano por el contorno del apósito para ver que ha quedado sellado.

Vaciado de la bolsa

Levante el tapón y ábralo. Vacíe el contenido de la bolsa en el inodoro. Cierre de nuevo el tapón asegurándose de que quede bien cerrado.

Cerrar el tapón y la salida

Puede cortar y retirar el tapón si este no es necesario y utilizar en su lugar el cierre tipo "velcro".

Vacíe la bolsa a través del cierre de tipo “velcro”

Levante la cola de la bolsa y ábrala. Vacíe el contenido de la bolsa en el inodoro.

Cierre la salida

En primer lugar, asegúrese que la pinza o el cierre tipo ‘velcro’ están bien cerrados. Para la pinza: Colóquela en la cola de la bolsa. Doble el final de la cola sobre la pinza y cerciórese de que la pared de la cola quede lisa para asegurar que la salida está en la posición correcta y aprieta la pinza con firmeza. Las pinzas son reutilizables. Para las tiras de cable metálico: Retire la tira protectora adhesiva del cable metálico. Fije las tiras de cable metálico sobre la cola de la bolsa. Enrolle la cola de la bolsa. Doble el cable metálico por las dos caras de manera que la cola de la bolsa quede enrollada y cerrada. Para el cierre Velcro: Enrolle la cola de la bolsa hasta que las dos piezas tipo ‘velcro’ queden encaradas. Presione las piezas tipo ‘velcro’ firmemente una contra la otra. Para el cierre de velcro con pestañas plegables: enrolle la parte final de la bolsa hasta que el velcro quede a la misma altura que las pestañas plegables. Presione firmemente el velcro de las pestañas sobre el velcro del cierre.

Desecho de la bolsa

Retire la bolsa y déjela en la basura. No tire la bolsa por la inodoro pues podría atascar el Sistema de desagüe.

Frecuencia de cambios de bolsas.

Cambie/vacíe la bolsa siguiendo las recomendaciones del personal sanitario.

FI - Käyttöohje

Käyttötarkoitus, tuotekuvaus ja materiaalitiedot

Avanepusseja käytetään ulosteen keräämiseksi kehosta, ja ne kiinnitetään yleensä ihoon kirurgisesti tehdyn avanteen päälle. Zensivin avannevalikoimaan kuuluu 1- ja 2-osaisia avanepusseja sekä erikokoisia ja -muotoisia 2-osaisia kiinnitysrenkaita. Kaikissa 1-osaisissa pusseissa ja 2-osaisissa renkaissa on ihoystävällinen hydrokolloidikiekko kehoon kiinnitystä varten. Ennen käyttöönottoa kiekkoa suojaa irrotuskalvo, jossa on leikkausohje. Tuote on valmistettu hajunestokalvosta, jossa on mukavuutta parantava kuitukerros ja hiilisudatin hajujen hallintaa varten (ileostomiaa ja kolostomiaa varten). Ileostomiapusseissa on joko rullattava tyhjennysaukko, joka on kiinnitetty kiinteällä tarranauhalla tai vaihtoehtoisesti kunkin pakkauksen mukana tulee kiinnittimiä ja pehmeitä siteitä. Urostomiaa varten pusseissa on pehmeä polymeerihana, joka tekee tyhjentämisestä helppoa. Kaikissa pusseissa on katseluikkuna avanteen tarkistamiseksi tarvittaessa. Joissakin malleissa on kannellinen ilmaventili ilman poistamiseksi ulos pussista tai ilman päästämiseksi pussiin tarvittaessa. Zensivin avannetuotteet eivät sisällä lateksia eivätkä eläinperäisiä ainesosia. Tuotteet eivät ole steriilejä, ja niitä voidaan käyttää olosuhteissa, joissa hoitava lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen päättää, että ei-steriiliä tuotetta voidaan käyttää.

Varoitukset ja varotoimenpiteet

- Pussit on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Älä käytä niitä uudelleen. Uudelleenkäyttö voi johtaa ristikontaminaatioon. - Käytä vain terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. - Lue ohjeet ennen käyttöä. - Lopeta käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos pussin käyttö aiheuttaa allergisia reaktioita tai koet ongelmia pussin käytössä.

Vasta-aiheet

Henkilöiden, joilla on tiedossa oleva herkkyys polyeteenille, polyamidille, lääkehiilelle, synteettiselle polymeerille, etyleenivinyylasetaatille, polypropreenille, polyesterille, polyisobuteenille, karboksimeetyyliseluloosalle, pektiinille tai glyserolille, ei tule käyttää näitä laitteita, akryyligeeli, elastaani.

Varastointiolosuhteet

Tuotteita on parasta säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 0°C - 27°C, kuten tuotteen etiketissä on mainittu.

Vakavat vaaratilanteet

Jos tuotteen käytöstä seuraa vakava vaaratilanne, ilmoita siitä välittömästi valmistajalle ja asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Säilyvyys

Käytä etikettiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

Kerää tarvittavat materiaalit

Varmista, että kaikki tarvittavat materiaalit ovat käyttövalmiina. Ota mittausopas, sakset, kynä, märkä ja kuiva sideharso sekä avanepussi esille.

Valitse oikea koko

Mittaa avanteesi mittausohjeiden mukaisesti ja leikkaa (tarvittaessa) rengas oikean kokoiseksi avanteeseen. Varmista, että valitset oikean koon, jotta avanne ja sitä ympäröivä iho pysyvät terveinä. Jätä avanteen ja renkaan väliin enintään 2 mm tilaa turvallisen ja oikean istuvuuden takaamiseksi. Jos koko on liian suuri, ulosteet vahingoittavat ihoa. Jos koko on liian pieni, rengas vahingoittaa avannetta. Ajan myötä avanne voi muuttaa muotoaan tai kokoaan, joten säännöllisiä mittauksia saatetaan edellyttää vuotojen estämiseksi.

Valmistelee iho

Tue ihoa ja poista rengas varovasti. Älä repäise, vaan työnnä ihoa pois päin renkaasta, ja käytä tarvittaessa märkää sideharsoa. Pese avannetta ympäröivä iho lämpimällä ja hajustamattomalla vedellä. Älä käytä alkoholia, hajusteita tai eetteriä sisältäviä aineita ihosi puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa ihoa. Älä hiero ihoa liian voimakkaasti välttääksesi ihovauriot. Kuivaa iho huolellisesti ja perusteellisesti varmistaaksesi, että pussi tarttuu hyvin. Valinnaisesti: Jos ihosi on ärtynyt ja kipeä, voit käyttää ihon suojavoiteita, hydrokolloidijauhetta tai ihonsuojapyyhkeitä. Levitä jauhetta tai ihovoidetta ympäröivälle iholle tai pyyhi iho varovasti ihonsuojapyyhkeellä.

Sulje pussin pohjassa oleva hana

Varmista ensin, että hana on suljettu turvallisesti. Sulje hana painamalla sitä tiukasti.

Pussin liittäminen yösäiliöön

Pussissa on yleishana. Tämä hana voidaan liittää melkein minkä tahansa tyyppiseen ja tuotemerkkiseen yösäiliöön. Avaa pussin hana ja liitä se yösäiliön liittimeen ja varmista, että liitos on pitävä.

Tarkastusikkuna

Avaa näin: Avaa tarkastusikkuna käyttäen mukana toimitettua läppää ja vedä luukku auki. Pidä samalla pussia tukevasti paikallaan toisella kädellä. Varmista, että pussi on tyhjennetty, ennen kuin avaat tarkastusikkunan. Jos se ei ole mahdollista, pitele pussia varovasti, jotta eritettä ei pääse vuotamaan ikkunaa avattaessa. Sulje näin: Sulje tarkastusikkuna varovasti napsauttamalla luukku kiinni ja painelemalla reunaa koko matkalta, jotta varmistaat ikkunan sulkeutumisen tiiviisti. Tarkasta aina, että tarkastusikkuna on suljettu huolellisesti.

Aseta pussi

Irrota renkaan irrotuspaperi. Taita rengas puoliväliin ja aseta aukko avanteen alapuolelle. Venytä vatsasi ihoa tasaisella kädellä ja vedä koko rengas avanteen yli oikeaan asentoon. Käy avanteen ympärys lävitse varmistaen, että hydrokolloidi kiinnittyy ihoon ja varmista, että rengas on asettunut paikalleen. Aseta kätesi renkaan päälle ja varmista, että se muodostaa hyvän tiiviste.



Pussin tyhjennys

Nosta hana ylös ja avaa se. Tyhjennä pussin sisältö wc-istuimeen. Sulje hana uudelleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.

Hana ja ulostulon suljin

Jos hanaa ei tarvita, se voidaan leikata irti ja sen sijaan käyttää tarrakiinnitystä.

Pussin tyhjennys käytettäessä tarrakiinnitystä

Nosta pussin häntä ylös ja avaa pussi. Tyhjennä pussin sisältö wc-istuimeen.

Sulje aukko

Varmista ensin, että kiinnitin tai tarranauha on suljettu turvallisesti. Kiinnitin: Aseta kiinnitin pussin häntään. Taita häntäosan pää kerran kiinnittimen päälle ja varmista, että hännän kalvo on sileä, jotta hännän ulostuloaukko on oikeassa asennossa, ja paina kiinnitintä tiukasti. Kiinnittimet ovat uudelleenkäytettäviä. Metallinauhat: Irrota irrotuskalvo metallinauhasta. Kiinnitä metallinauha pussin häntään. Rullaa pussin häntä ylös. Taita metallinauha molemmilta puolilta niin, että pussin häntä pysyy ylös käärittyä. Tarranauhakiinnitys: Kierrä pussin häntää ylöspäin, kunnes kaksi tarranauhatyypistä kappaletta koskettavat toisiaan. Paina kappaleet tiukasti toisiinsa. Tarranauhakiinnitys taittokielekkeillä: Kääri pussin loppuosaa ylös, kunnes tarranauha on taittokielekkeiden kohdalla. Paina taittokielekkeiden tarranauha tiiviisti sulkukohdan tarranauhaan.

Pussin hävittäminen

Irrota pussi ja hävitä se roskien mukana. Älä huuhtelee käytettyä pussia alas wc-istuimesta, sillä se tukkii viemärijärjestelmän.

Pussin vaihtoväli

Vaihda/tyhjennä pussi terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

FR - Mode d'emploi

Notice d'utilisation, description du produit et renseignements sur le matériel

Les poches de colostomie sont utilisées pour recueillir les déchets du corps et sont généralement fixés à la peau sur une stomie opérée. Zensiv Ostomy comporte une gamme de poches et supports 1 pièce et 2 pièces avec différentes tailles et formes. Tous les supports Zensiv sont munis d'une plaquette hydrocolloïde qui assure une bonne adhésion ainsi qu'une bonne tolérance avec la peau. Avant l'utilisation nos supports sont protégés par un film transparent montrant un guide de coupe. Les poches Zensiv sont fabriquées à partir d'un film protecteur d'odeur avec une couche de tissu non tissé de confort et un filtre au carbone pour le contrôle des odeurs (pour l'iléostomie et la colostomie). Les poches d'iléostomie sont munies d'un orifice d'évacuation à enroulement fixé à l'aide d'un velcro intégré. Pour les poches d'urostomie, les sachets sont munis d'un robinet en polymère souple pour un drainage facile. Toutes les poches ont une fenêtre de visualisation pour inspecter la stomie si nécessaire. Certaines gammes disposent d'un évent avec couvercle pour évacuer la poche si nécessaire. Tous les produits Zensiv Ostomy sont sans latex et ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale. Les produits ne sont pas stériles et peuvent être utilisés dans toutes les circonstances appropriées lorsque le médecin traitant ou le professionnel de la santé décide qu'un produit non stérile peut être appliqué.

Précautions d'emploi

- Chaque poche est destinée à un usage unique, Ne pas la réutiliser car la réutilisation peut entraîner une contamination croisée. - Utilisez uniquement selon les directives de votre professionnel de la santé. - Lisez les instructions avant de les utiliser. - Cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez des réactions allergiques ou des problèmes lors de l'utilisation des poches.

Contre-Indications

Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés par quiconque ayant une sensibilité connue au polyéthylène, polyamide, charbon médical, polymère synthétique, acétate d'éthylène et de vinyle, polypropylène, polyester, polyisobutylène, carboxyméthylcellulose, pectine ou glycérine, gel acrylique, élasthanne.

Conditions d'entreposage

Il est préférable de stocker vos produits dans un endroit frais et sec avec un guide de la température de 0°C à 27°C, tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

Incidents graves

Si un incident grave survient à la suite de l'utilisation du produit, veuillez le signaler immédiatement au fabricant et à l'autorité compétente du pays où vous résidez.

Durée de conservation

Utilisation à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette.

Matériel nécessaire pour les poches système 1 pièce

Assurez-vous que tout le matériel nécessaire est prêts à l'emploi. Recueillir un guide de mesure, une paire de ciseaux, stylo, gaze humide et sèche et poche de stomie.

Le choix de la bonne tailles

Mesurez votre stomie avec un guide de mesure et coupez (si nécessaire) le support à la taille de la stomie de sorte que la stomie et la peau environnante restera saine. Prévoyez un espace maximum de 2 mm entre votre stomie et le support pour un ajustement sûr et correct. Si la taille est trop grande, vos selles endommageront la peau et Si la taille est trop petite, la bride endommagera la stomie. Au fil du temps, votre stomie peut changer de forme ou de taille, dans ce cas des mesures périodiques peuvent être nécessaires à nouveau pour éviter toute fuite.

Préparer la peau

Soulever légèrement la peau et retirer soigneusement le support en prenant soin de ne pas le déchirer tout en repoussant la peau du support, utiliser une gaze humide si nécessaire. Lavez la peau entourant votre estomac avec de l'eau chaude. N'utilisez rien qui contient de l'alcool, du parfum ou de l'éther pour nettoyer votre peau car elle peut causer des irritations. Ne frottez pas la peau trop fort car cela pourrait l'endommager. Séchez la peau soigneusement pour assurer une bonne adhésion. Facultatif : Si votre peau est irritée, vous pouvez utiliser de la crème de barrière cutanée, de la poudre d'hydrocolloïde ou des lingettes de barrière cutanée. Appliquer la poudre, la crème protectrice de la peau en essuyant doucement la peau environnante.

Fermer le robinet à la base de la pochette

Assurez-vous d'abord que le robinet est fermé en toute sécurité. Fermez le robinet en appuyant fermement sur le robinet.

Connexion de la poche à une poche de nuit

La poche a un robinet universel. Ce robinet peut être connecté à presque n'importe quel type et marque de poche de nuit. Ouvrir le robinet de la poche et le connecter au connecteur de la poche de nuit et s'assurer que la connexion est sécurisée.

Fenêtre d'accès

Pour ouvrir: Ouvrez la fenêtre d'accès à l'aide de la languette fournie et tirez-la. Tenez la pochette de manière stable avec votre autre main pendant que vous faites cela. Assurez-vous que la pochette est vidée avant d'ouvrir la fenêtre d'accès. Si ce n'est pas possible, tenez la poche avec précaution pour vous assurer qu'aucun produit ne s'échappe pendant le processus d'ouverture. Pour fermer: Fermez soigneusement la fenêtre d'accès en la fermant et en appuyant tout autour de la section de fermeture pour assurer une fermeture complète. Vérifiez toujours que la fenêtre d'accès est correctement fermée.

Ajustez votre poche

Retirez le papier de dégagement du support. Pliez le support à mi-chemin et placez l'ouverture à la face inférieure de la stomie. Étirez la peau de votre abdomen avec une main plate et tirez tout le support sur la stomie dans la bonne position. Faites le tour de la stomie pour que l'hydrocolloïde s'attache à la peau et assurez-vous que le support est bien fixée. Placez votre main sur le support et assurez-vous qu'un bon joint est créé.

Videz votre pochette

Soulevez le robinet et ouvrez-le. Videz le contenu de votre poche dans les toilettes. Refermez le robinet en vous assurant qu'il est bien fermé.

Fermeture du robinet et de la sortie

Si le robinet n'est pas nécessaire, il peut être coupé et remplacé par la fermeture de type "velcro".

Videz votre pochette en utilisant la fermeture de type 'velcro'

Soulevez le bas de la pochette et ouvrez le sac. Videz le contenu de votre pochette dans les toilettes.

Fermer le conduit

Assurez-vous tout d'abord que la fermeture de type serre-câble ou velcro est fermée en toute sécurité. Pour la pince: Placez la pince à l'extrémité de la poche. Plier l'extrémité de la poche une fois sur la pince s'assurer que le film de la poche est lisse pour que le conduit soit dans la bonne position et appuyez fermement sur la pince. (Les pinces sont réutilisables). Pour les bandes métalliques: Prenez le film de la bande métallique. Collez la bande métallique sur l'extrémité la poche. Enrouler l'extrémité de la poche et plier le fil de métal des deux côtés. Pour la fermeture velcro: Enrouler l'extrémité de la poche jusqu'à ce que les deux pièces de type velcro se touchent les unes sur les autres. Pour la fermeture velcro avec languettes rabattables: Enroulez la queue de la pochette jusqu'à ce que le velcro soit à la même hauteur que les languettes de pliage. Pressez fermement le velcro des languettes de pliage sur le velcro de la fermeture.

Élimination de pochette

Retirez votre sac et jetez-le à la poubelle. Ne jetez pas votre sac usagé dans les toilettes parce que cela bloquera votre système d'égouts.

Fréquence de changement de pochette

Changez/videz votre poche comme conseillé par votre professionnel de la santé.

GR - Οδηγίες χρήσης

Προβλεπόμενη Χρήση, Περιγραφή Προϊόντος και Πληροφορίες Υλικού

Οι οστομικοί σάκοι χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των σωματικών αποβλήτων και στερεώνονται συνήθως στο δέρμα επί μιας χειρουργικά δημιουργηθείσας στομίας. Τα οστομικά προϊόντα Zensin περιλαμβάνουν οστομικούς σάκους 1 και 2 τεμαχίων και βάσεις 2 τεμαχίων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Όλοι οι σάκοι 1 τεμαχίου και οι βάσεις 2 τεμαχίων διαθέτουν φιλικό προς το δέρμα υδροκολλοειδές υλικό για επικόλληση στο σώμα, το οποίο πριν από τη χρήση καλύπτεται με προστατευτική ταινία και φέρει οδηγό κοπής. Ο σάκος είναι κατασκευασμένος από άσμη μεμβράνη και φέρει μη υφασμένο κάλυμμα και φίλτρο άνθρακα για τον έλεγχο των οσμών (ειλεοστομία και κολοστομία). Οι σάκοι ειλεοστομίας διαθέτουν τυλιγόμενη έξοδο αποστράγγισης, με ενσωματωμένο ασφαλιστικό κλείστρο τύπου "velcro" ή πλαστικό. κλείστρο ή αυτοκόλλητο έλασμα, που περιέχονται σε κάθε συσκευασία. Στην ουρητηροστομία, οι σάκοι φέρουν βρυσάκι από μαλακό πολυμερές υλικό για εύκολη αποστράγγιση. Οι σάκοι διαθέτουν παράθυρο για την επισκόπηση της στομίας, αν χρειαστεί. Μερικοί σάκοι διαθέτουν έξοδο εξαερισμού με τάπα (vent) για τον αερισμό του σάκου, αν απαιτηθεί. Τα οστομικά προϊόντα Zensin δεν περιέχουν λάτεξ και συστατικά ζωικής προέλευσης. Τα προϊόντα είναι μη αποστειρωμένα και εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θεράπων ιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μη αποστειρωμένα προϊόντα.

Προειδοποιήσεις-Προφυλάξεις

- Κάθε σάκος είναι μίας χρήσης. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση. - Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού. - Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. - Αν αντιμετωπίσετε αλλεργικές αντιδράσεις ή προβλήματα κατά τη χρήση του σάκου, διακόψτε τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας.

Αντενδείξεις

Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα ακόλουθα υλικά: πολυαιθυλένιο, πολυαμίδιο, ιατρικός άνθρακας, συνθετικά πολυμερή, αιθυλένιο, οξικός βινυλεστέρας, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας, πολυισοβουτυλένιο, καρβοξυμεθυλική κυτταρίνη, πηκτίνη ή γλυκερίνη, Ακρυλικό τζελ, spandex.

Συνθήκες Αποθήκευσης

Τα προϊόντα αποθηκεύονται κατά προτίμηση σε δροσερό και ξηρό μέρος, με ένδειξη θερμοκρασίας από 0ο έως 27ο βαθμούς Κελσίου, όπως αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Σοβαρά Περιστατικά

Αν παρουσιαστεί σοβαρό περιστατικό, συνεπεία χρήσης του προϊόντος, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή και την Αρμόδια Αρχή της χώρας που διαμένετε.

Διάρκεια ζωή

Συμβουλευτείτε την ημερομηνία λήξης της ετικέτας.

Συγκεντρώστε τα υλικά σας

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα υλικά είναι έτοιμα για χρήση. Συγκεντρώστε έναν χάρακα, ένα ψαλίδι, ένα στυλό, βρεγμένες και στεγνές γάζες και έναν οστομικό σάκο.

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος

Μετρήστε τη στομία με τον χάρακα και κόψτε (αν είναι απαραίτητο) τη βάση στο σωστό μέγεθος της στομίας. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό μέγεθος, ώστε η στομία και το περιβάλλον δέρμα να παραμείνουν υγιή. Για σωστή και ασφαλή τοποθέτηση, αφήστε μέγιστο περιθώριο 2 χιλιοστών μεταξύ της στομίας και της βάσης. Αν το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο, τα περιττώματά σας θα βλάψουν το δέρμα. Αν το μέγεθος είναι πολύ μικρό, η βάση θα τραυματίσει τη στομία. Με τον καιρό, η στομία μπορεί να αλλάξει σχήμα και μέγεθος, οπότε περιοδικές μετρήσεις είναι απαραίτητες για την πρόληψη των διαρροών.

Προετοιμάστε το δέρμα σας

Στηρίξτε το δέρμα και αφαιρέστε προσεκτικά τη βάση, μην τραβάτε το δέρμα, αλλά στρώστε το μακριά από τη βάση, χρησιμοποιώντας μια βρεγμένη γάζα αν είναι απαραίτητο. Ξεπλύνετε το δέρμα γύρω από τη στομία με χλιαρό, μη αρωματισμένο νερό. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν περιέχει οινόπνευμα, άρωμα ή αιθέρα για να καθαρίσετε το δέρμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τρίβετε πολύ δυνατά το δέρμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Στεγνώστε επιμελώς το δέρμα για να εξασφαλίσετε την καλή επικόλληση του σάκου. Προαιρετικό: Αν το δέρμα σας είναι ερεθισμένο και επώδυνο, χρησιμοποιήστε μια κρέμα φραγμού, υδροκολλοειδή σκόνη ή μαντηλάκια προστασίας. Εφαρμόστε τη σκόνη ή την κρέμα στο περιβάλλον δέρμα ή σκουπίστε το μαλακά με τα μαντηλάκια.

Κλείστε το βρυσάκι στη βάση του σάκου

Αρχικά σιγουρευτείτε ότι το βρυσάκι είναι ασφαλισμένο. Κλείστε το βρυσάκι πιέζοντας σφιχτά την τάπα.

Συνδέστε το σάκο σας σε έναν ουροσυλλέκτη νυκτός

Ο σάκος έχει βρυσάκι γενικού τύπου. Το βρυσάκι αυτό μπορεί να συνδεθεί με ουροσυλλέκτες σχεδόν κάθε τύπου και μάρκας. Ανοίξτε το βρυσάκι του σάκου, ενώστε το στο συνδετικό του ουροσυλλέκτη και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.

Παράθυρο πρόσβασης

Για άνοιγμα: Ανοίξτε το παράθυρο πρόσβασης χρησιμοποιώντας την καρτέλα που παρέχεται και ανοίξτε. Κρατήστε σταθερό το σάκο με το άλλο σας χέρι ενώ το κάνετε. Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος έχει αδειάσει πριν ανοίξετε το παράθυρο πρόσβασης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, κρατήστε προσεκτικά το σάκο για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα διαρρεύσει κάτι κατά τη διαδικασία ανοίγματος. Για να το κλείσετε: Κλείστε προσεκτικά πατώντας το κλείσιμο του παραθύρου πρόσβασης και πατώντας σε όλη την έκταση του τμήματος κλεισίματος για να εξασφαλίσετε το πλήρες κλείσιμο. Πάντα ελέγχετε ότι το παράθυρο πρόσβασης είναι σωστά κλειστό.

Εφαρμόστε το σάκο σας

Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη βάση. Διπλώστε τη βάση στη μέση και τοποθετήστε το άνοιγμά της στο κάτω μέρος της στομίας. Τεντώστε το δέρμα της κοιλιάς σας με την παλάμη σας και φέρετε τη βάση στη σωστή θέση πάνω από τη στομία. Συνεχίστε την εφαρμογή γύρω από τη στομία, ώστε το υδροκολλοειδές να προσκολληθεί στο δέρμα και βεβαιωθείτε ότι η βάση παραμένει σταθερή. Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από τη βάση για να εφαρμόσει καλά.

Αδειάστε το σάκο σας

Ανασηκώστε το βρυσάκι και ανοίξτε την τάπα. Αδειάστε το περιεχόμενο του σάκου σας στην τουαλέτα. Κλείστε ξανά την τάπα και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένη.

Βρύση και κλείσιμο εξόδου

Εάν δεν απαιτείται βρύση, μπορεί να αποκοπεί και να χρησιμοποιηθεί το κλείσιμο τύπου «velcro».

Αδειάστε το σάκο σας χρησιμοποιώντας το κλείσιμο τύπου «velcro»

Σηκώστε την ουρά του σάκου και ανοίξτε το σάκο. Αδειάστε το περιεχόμενο του σάκου σας στην τουαλέτα.

Κλείστε το άνοιγμα

Αρχικά βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κλείστρο ή το κλείστρο τύπου velcro είναι ασφαλισμένο. Για το πλαστικό κλείστρο: Τοποθετήστε το κλείστρο στην ουρά του σάκου. Διπλώστε την άκρη της ουράς πάνω στο κλείστρο, βεβαιωθείτε ότι το φιλμ της ουράς είναι τεντωμένο και στη σωστή θέση και πιέστε σφιστά το κλείστρο. Τα κλείστρα είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Για το έλασμα: Βγάλτε το προστατευτικό φιλμ από το έλασμα. Κολλήστε το έλασμα στην ουρά του σάκου. Τυλίξτε την ουρά του σάκου. Διπλώστε το έλασμα στις δυο πλευρές, ώστε η ουρά του σάκου να παραμείνει τυλιγμένη. Για το κλείστρο τύπου Velcro: Τυλίξτε την ουρά του σάκου ώσπου τα δυο τμήματα του velcro να ακουμπήσουν το ένα το άλλο. Πιέστε σταθερά τα δυο τμήματα μεταξύ τους. Για το κλείσιμο Velcro με αναδιπλούμενες γλωττίδες: Αναδιπλώστε την ουρά του σάκου έως ότου το Velcro βρεθεί στο ίδιο ύψος με τις αναδιπλούμενες γλωττίδες. Πιέστε το velcro στις αναδιπλούμενες γλωττίδες σταθερά πάνω στο velcro του κλεισίματος.

Η απόρριψη του σάκου σας

Αφαιρέστε το σάκο σας και απορρίψτε τον στα σκουπίδια. Μην απορρίπτετε τον σάκο στην τουαλέτα, γιατί αυτό μπορεί να φράξει το αποχετευτικό σας σύστημα.

Η συχνότητα αλλαγής του σάκου

Αλλάξτε ή αδειάστε το σάκο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σας.

HR - Upute za uporabu

Predviđena uporaba, opis sustava i podaci o materijalu

Vrećice za stomu koriste se za sakupljanje otpadnih tvari iz tijela i obično se privijaju uz kožu preko kirurškim putem napravljene stome. Proizvodi tvrtke Zensiv Ostomy uključuju niz jednodijelnih i dvodijelnih vrećica za stomu i dvodijelnih prirubnica u raznim veličinama i oblicima. Sve jednodijelne vrećice i dvodijelne prirubnice imaju hidrokoloidnu prijanjajuću površinu koja ne oštećuje kožu te je zaštićena filmom s oznakom za rezanje. Vrećica za stomu proizvodi se od materijala otpornog na mirise s netkanim slojem i ugljičnim filtrom za kontrolu mirisa (za ileostomu i kolostomu). Svaka kutija vrećice za ileostomu sadrži i namotani dren pričvršćen remenom „na čičak” ili stezaljke i meke remene. Vrećice za urostomu sadrže mekani čep od polimera za jednostavniju drenažu. Sve vrećice sadrže prozorčić za inspekciju stome prema potrebi. Određeni asortiman sadrži i ventil za prozračivanje stome prema potrebi. Svi proizvodi tvrtke Zensiv Ostomy ne sadrže lateks i sastojke životinjskog podrijetla. Proizvodi su nesterilni i mogu se koristiti u svim slučajevima u kojima je liječnik ili zdravstveni djelatnik odobrio uporabu nesterilnog proizvoda.



Upozorenja – predostrožnosti

- Sve su vrećice za jednokratnu uporabu. Nemojte ih ponovno upotrebljavati. Ponovna uporaba može dovesti do unakrsne kontaminacije. - Koristite ih samo u skladu s uputama svojeg pružatelja primarne zdravstvene zaštite. - Pročitajte upute prije uporabe. - U slučaju alergijske reakcije ili problema prilikom uporabe vrećica, prestanite ih koristiti i kontaktirajte svojeg pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

Kontraindikacije

Ovi proizvodi ne bi trebale koristiti osobe koje su osjetljive na: polietilen, poliamid, medicinski ugljen, sintetički polimer, etilen vinil acetat, polipropilen, poliestar, polizobutilen, karboksimetilcelulozu, pektin ili glicerol, akrilni gel, spandeks.

Uvjeti skladištenja

Najbolje je čuvati proizvode na hladnom, suhom mjestu na temperaturi između 0°C i 27°C kako je navedeno na oznaci proizvoda.

Ozbiljne posljedice

Ukoliko dođe do ozbiljne posljedice uslijed uporabe proizvoda, odmah to prijavite proizvođaču ili nadležnom tijelu u vašoj zemlji boravišta.

Rok trajanja

Upotrijebiti do roka uporabe na označi proizvoda.

Pripremite potrebne materijale

Provjerite jesu li svi materijali spremni za uporabu. Pripremite pribor za mjerenje, škare, kemijsku olovku, vlažnu i suhu gazu te vrećicu za stomu.

Odaberite ispravnu veličinu

Izmjerite stomu priborom za mjerenje i izrežite prirubnicu (ako je potrebno) na veličinu stome. Provjerite jeste li odabrali ispravnu veličinu kako ne biste oštetili stomu i okolnu kožu. Za sigurnu upotrebu ostavite najmanje 2 mm prostora između stome i prirubnice. Ako je prirubnica prevelika, vaš će izmet oštetiti stomu. Ako je premalena, prirubnica će oštetiti stomu. S vremenom vaša će stoma promijeniti oblik ili veličinu, stoga su potrebna povremena mjerenja kako bi se spriječio curenje.

Pripremite kožu

Pridržite kožu i pažljivo uklonite prirubnicu. Nemojte otrgnuti, već odmaknite kožu od prirubnice. Upotrijebite vlažnu gazu ako je potrebno. Operite kožu oko stome mlakom i neparfumiranom vodom. Nemojte koristiti proizvode koji sadrže alkohol, parfem ili eter za čišćenje kože jer je možete oštetiti. Nemojte pretjerano jako trljati kožu jer je možete oštetiti. Pažljivo osušite kožu i temeljito provjerite prijanja li vrećica ispravno. Prema izboru: Ako dođe do iritacije ili oštećenja kože, možete upotrijebiti kremu za njegu kože Barrier, hidrokoloidni prah ili maramice za zaštitu kože Barrier. Na okolnu kožu nježno nanosite prah, kremu za njegu kože Barrier ili je maramicu.

Zatvorite čep na dnu vrećice

Provjerite je li čep zatvoren. Čvrsto pritisnite čep da biste ga zatvorili.

Povezivanje vrećice s noćnom vrećicom

Vrećica ima univerzalni čep. Taj se čep može namjestiti na bilo koju vrstu noćne vrećice. Otvorite čep vrećice i povežite ga na priključak noćne vrećice te provjerite je li čvrsto povezan.

Prozorčić za pristup

Otvaranje: otvorite prozorčić za pristup s pomoću dostupnog jezička i povucite. Mirno držite vrećicu s drugom rukom dok to činite. Provjerite je li vrećica prazna prije otvaranja prozorčića za pristup. Ako to nije moguće, pažljivo držite vrećicu kako biste osigurali da ne dođe do izlivanja tijekom postupka otvaranja. Zatvaranje: pažljivo zatvorite tako da zatvorite prozorčić za pristup i pritisnete ga skroz oko odjeljka za zatvaranje kako biste osigurali da je dio kraja zatvoren. Uvijek provjerite je li prozorčić za pristup ispravno zatvoren.

Namjestite vrećicu

Uklonite zaštitni omot prirubnice. Savijte pločicu do pola i pričvrstite je na donju stranu stome. Otvorenim dlanom nategnite kožu abdomena i navucite prirubnicu preko stome u ispravni položaj. Provjerite prijanja li hidrokoloidna površina dobro na kožu oko stome te je li prirubnica pričvršćena. Pritisnite rukom prirubnicu kako biste provjerili je li dobro pričvršćena.

Ispraznite vrećicu

Podignite i otvorite čep. Ispraznite sadržaj vrećice u toalet. Ponovno zatvorite čep i provjerite je li dobro zatvoren.

Zatvaranje čepa i ispusta

Ako čep nije potreban, taj se dio može izrezati i umjesto njega upotrijebiti remen „na čičak”.

Ispraznite vrećicu s pomoću remena „na čičak”

Podignite stražnju stranu vrećice i otvorite je. Ispraznite sadržaj vrećice u toalet.

Zatvorite ispust

Provjerite jesu li stezaljke ili remen „na čičak” pričvršćeni. Za stezaljku: Pričvrstite stezaljku na stražnju stranu vrećice. Savijte kraj vrećice oko stezaljke i provjerite je li površina kraja glatka kako bi ispust bio u pravom položaju te čvrsto pritisnite stezaljku. Stezaljke su za višekratnu uporabu. Za metalne trakice: Skinite zaštitni film s metalne trakice. Uvedite metalnu trakicu u stražnji dio vrećice. Smotajte stražnji dio vrećice. Savijte metalnu trakicu s obje strane kako bi stražnji dio vrećice ostao u smotanom položaju. Za remen na čičak: Smotajte stražnji dio vrećice tako da se dva remena „na čičak” dodiruju. Čvrsto pritisnite remene „na čičak” jedan o drugi. Za zatvarač na čičak-traku s preklopivim bočnim dijelovima: namatajte dno vrećice dok čičak-traka ne bude na istoj visini kao preklopivi bočni dijelovi. Čvrsto pritisnite čičak-traku preklopivih bočnih dijelova na čičak-traku zatvarača.

Odstranjivanje vrećice

Skinite vrećicu i odstranite je u otpad. Nemojte pustiti vrećicu niz toalet jer ćete začepiti odvodni sustav kanalizacije.

Učestalost promjene vrećice

Promijenite/ispraznite vrećicu u skladu s uputama svog pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

ID - Petunjuk Penggunaan

Tujuan Penggunaan, Deskripsi Produk, dan Informasi Material

Kantong ostomi digunakan untuk mengumpulkan limbah dari tubuh dan biasanya ditempelkan pada kulit di atas stoma yang dibuat dengan pembedahan. Produk Zensiv Ostomy adalah rangkaian kantong ostomi 1 bagian dan 2 bagian serta flensa 2 bagian dalam berbagai ukuran dan bentuk. Semua kantong 1 bagian dan flensa 2 bagian menampilkan wafer hidrokoloid yang ramah kulit untuk adhesi ke tubuh dan ini dilindungi sebelum digunakan dengan film pelepas yang menunjukkan panduan pemotongan. Kantong produk dibuat dari film penghalang bau dengan lapisan non-anyaman yang nyaman dan filter karbon untuk pengendalian bau (untuk ileostomi dan kolostomi). Kantong ileostomi memiliki saluran pembuangan yang digulung yang diamankan dengan penutup tipe 'velcro' integral atau ada klem dan ikatan lunak yang disediakan di setiap kotak. Untuk urostomi, kantong membawa keran polimer lembut untuk drainase yang mudah. Semua kantong memiliki jendela untuk memeriksa stoma jika diperlukan. Beberapa rentang memiliki ventilasi dengan penutup untuk melepaskan isi kantong jika diperlukan. Semua produk Zensiv Ostomy bebas lateks dan tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari hewan. Produk tidak steril dan dapat digunakan dalam keadaan yang sesuai di mana dokter yang merawat atau profesional kesehatan memutuskan produk tidak steril dapat digunakan.



Peringatan - Tindakan Pencegahan

- Setiap kantong hanya untuk sekali pakai. Jangan digunakan kembali. Penggunaan kembali dapat menyebabkan kontaminasi silang. - Gunakan hanya seperti yang diarahkan oleh profesional kesehatan Anda. - Baca petunjuk sebelum digunakan. - Hentikan penggunaan dan hubungi ahli kesehatan Anda jika Anda mengalami reaksi alergi atau masalah saat menggunakan kantong.

Kontra indikasi

Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh siapa pun yang diketahui sensitif terhadap: polietilen, poliamida, arang medis, polimer sintetis, etilena vinil asetat, polipropilena, poliester, poliisobutilena, karboksimetilselulosa, pektin atau gliserin, gel akrilik, spandeks.

Ketentuan penyimpanan

Sebaiknya simpan produk Anda di tempat kering yang sejuk dengan panduan suhu dari 0°C hingga 27°C seperti yang tertera pada label produk.

Insiden Serius

Jika terjadi insiden serius akibat penggunaan produk, harap segera laporkan hal ini kepada produsen dan Otoritas Kompeten di negara tempat Anda tinggal.

Umur simpan

Gunakan sebelum tanggal kedaluwarsa yang tertera pada label.

Kumpulkan bahan Anda

Pastikan semua bahan yang diperlukan sudah siap digunakan. Kumpulkan panduan pengukuran, gunting, pena, kain kasa basah dan kering, dan kantong stoma.

Pilih ukuran yang tepat

Ukur stoma Anda dengan panduan pengukur dan potong (jika perlu) flensa ke ukuran stoma yang tepat. Pastikan Anda memilih ukuran yang tepat agar stoma dan kulit di sekitarnya tetap sehat. Berikan jarak maksimum 2 mm antara stoma dan flensa Anda untuk pemasangan yang aman dan tepat. Jika ukurannya terlalu besar, kotoran Anda akan merusak kulit. Jika ukurannya terlalu kecil, flange akan merusak stoma. Seiring waktu, stoma Anda dapat berubah bentuk atau ukuran, jadi pengukuran berkala mungkin diperlukan lagi untuk mencegah kebocoran.

Siapkan kulitmu

Topang kulit dan lepaskan flens dengan hati-hati, jangan sobek tetapi dorong kulit kembali dari flensa, gunakan kain kasa basah jika perlu. Cuci kulit di sekitar stoma Anda dengan air hangat dan tanpa pewangi. Jangan gunakan apapun yang mengandung alkohol, parfum atau eter untuk membersihkan kulit Anda karena dapat menyebabkan kerusakan. Jangan menggosok kulit terlalu keras karena dapat menyebabkan kerusakan kulit. Keringkan kulit dengan hati-hati dan menyeluruh untuk memastikan kantong Anda menempel dengan baik. Opsional: Jika kulit Anda teriritasi dan sakit, Anda dapat menggunakan krim pelindung kulit, bubuk hidrokoloid, atau tisu pelindung kulit. Oleskan bedak, krim pelindung kulit atau usap dengan lembut ke kulit di sekitarnya.

Tutup keran di dasar kantong

Pertama-tama pastikan keran ditutup dengan aman. Tutup keran dengan menekan keran dengan kuat.

Menghubungkan kantong Anda ke kantong tidur

Kantong memiliki keran universal. Keran ini bisa disambungkan ke hampir semua jenis dan merek tas malam. Buka keran kantong dan sambungkan ini ke konektor tas malam dan pastikan sambungannya aman.

Jendela Akses

Membuka: Buka jendela akses menggunakan tab yang disediakan dan tarik terbuka. Pegang kantong dengan stabil dengan tangan Anda yang lain saat Anda melakukan ini. Pastikan kantong dikosongkan sebelum membuka jendela akses. Jika ini tidak memungkinkan, pegang kantong dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada keluaran yang tumpah selama proses pembukaan. Untuk Menutup: Tutup dengan hati-hati dengan menutup jendela akses dan menekan sepanjang bagian penutup untuk memastikan penutupan penuh. Selalu periksa apakah jendela akses ditutup dengan benar.

Sesuaikan kantong Anda

Lepaskan kertas pelepas flensa. Lipat flange setengah dan tempatkan bukaan di bagian bawah stoma. Regangkan kulit perut Anda dengan tangan rata dan tarik seluruh flensa di atas stoma ke posisi yang tepat. Kerjakan di sekitar stoma sehingga hidrokoloid akan menempel pada kulit dan pastikan flensanya aman. Letakkan tangan Anda di atas flensa dan pastikan segel yang baik telah dibuat.

Mengosongkan Kantong Anda

Angkat keran dan buka keran. Kosongkan isi kantong Anda ke dalam toilet. Tutup ketuk lagi untuk memastikan tertutup dengan aman.

Penutupan keran dan outlet

Jika keran tidak diperlukan, ini dapat dipotong dan penutup tipe 'velcro' digunakan sebagai gantinya.

Kosongkan kantong Anda menggunakan penutup tipe 'velcro'

Angkat bagian belakang kantong dan buka kantongnya. Kosongkan isi kantong Anda ke dalam toilet.

Tutup outletnya

Pertama-tama pastikan bahwa klem atau penutup tipe 'velcro' ditutup dengan aman. Untuk klem: Tempatkan klem di bagian ekor kantong. Lipat ujung ekor sekali di atas klem dan pastikan film ekor halus untuk memastikan bahwa ekor outlet berada di posisi yang tepat dan tekan klem dengan kuat. Klem dapat digunakan kembali. Untuk strip kawat logam: Ambil film pelepas dari strip kawat logam. Tempelkan strip kawat logam ke bagian ekor kantong. Gulung ekor kantong. Lipat kawat logam di kedua sisi sehingga ujung kantong tetap tergulung. Untuk penutupan Velcro: Gulung bagian ekor kantong hingga kedua bagian tipe 'velcro' saling bersentuhan. Tekan potongan tipe 'velcro' satu sama lain dengan kuat. Untuk penutup Velcro dengan tab lipat: Gulung bagian ekor kantong hingga velcro sama tingginya dengan tab lipat. Tekan velcro pada tab lipat dengan kuat ke velcro penutupnya.

Buang kantong Anda

Keluarkan kantong Anda dan buang ke tempat sampah. Jangan membuang kantong bekas Anda ke toilet karena ini akan menyumbat sistem pembuangan kotoran Anda.

Frekuensi penggantian kantong

Ganti/kosongkan kantong Anda seperti yang disarankan oleh ahli kesehatan Anda.

Paskirtis, gaminio aprašas ir medžiagu informacija

Ostomijos maišeliai naudojami atliekoms iš kūno surinkti ir paprastai pritvirtinami prie odos per chirurginiu būdu įvestą stoma. „Zensiv Ostomy“ gaminiai yra įvairių dydžių ir formų vienos ir dviejų dalių ostomijos maišeliai su dviejų dalių jungėmis (flanšais). Visuose vienos dalies maišeliuose ir dviejų dalių flanšuose yra odą tausojanti hidrokoloidinė plokštelė, skirta klijuoti prie kūno, ir iki naudojimo ji yra apsaugota nuimama plėvele, kurioje pavaižuota, kaip tiksliai atlikti pjūvį. Gaminio maišelis pagamintas iš kvapus sulaikančios plėvelės su patogiu neaustiniu sluoksniu ir anglies filtru kvapams kontroliuoti (ileostomijai ir kolostomijai). Ileostomijos maišeliai turi arba suvyniojamą išleidimo portą, pritvirtintą integruotu lipniu uždarymo įtaisu, arba kiekvienoje dėžutėje yra pridėdami reikalingi spausťukai ir minkšti dirželiai. Urostomijai skirtuose maišeliuose yra minkštas polimerinis kranelis paprastam drenavimui. Visuose maišeliuose yra stebėjimo langelis stomai apžiūrėti (jei reikia). Kai kuriuose modeliuose yra entiliacijos anga su dangteliu, jei reikėtų išleisti maišelio turinį. Visuose „Zensiv Ostomy“ gaminiuose nėra latekso ir nėra gyvūninės kilmės ingredientų. Gaminiai yra nesterilūs ir gali būti naudojami bet kokiomis tinkamomis aplinkybėmis, kai gydantis gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia, kad galima naudoti nesterilų gaminį.



Įspėjimai - atsargumo priemonės

- Kiekvienas maišelis skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Nenaudoti pakartotinai. Pakartotinai naudojant galima kryžminė tarša. - Naudoti tiktai pagal gydytojo nurodymą. - Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas. - Nutraukite naudojimą ir kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą, jei naudojant maišelius pasireiškia alerginės reakcijos ar problemos.

Kontraindikacijos

Šių prietaisų neturėtų naudoti asmenys, kurie yra jautrūs: polietilenui, poliamidui, medicininės medžio angliai, sintetiniam polimerui, etileno vinilacetatui, polipropilenui, poliesteriui, poliizobutilenui, karboksimetilceliuliozei, pektinui arba glicerinui, akrilinis gelis, spandeksas.

Laikymo sąlygos

Geriausia laikyti gaminius vėsioje, sausoje vietoje, kurioje temperatūra būtų nuo 0°C iki 27°C, kaip nurodyta gaminio etiketėje.

Rimti incidentai

Jei naudojant gaminį įvyksta rimtas incidentas, nedelsdami praneškite apie tai gamintojui ir šalies, kurioje gyvenate, kompetentingai institucijai.

Tinkamumo laikas

Tinkamumo laikas, nurodytas ant etiketės.

Surinkite visas medžiagas

Įsitinkite, kad visos reikalingos medžiagos paruoštos naudoti. Paimkite matavimo kreiptuvą, žirkles, švirkštiklį, drėgną ir sausą marlę ir stomos maišelį.

Pasirinkite tinkamą dydį

Išmatuokite stomą naudodami matavimo kreiptuvą ir nupjaukite (jei reikia) jungę iki reikiamo stomos dydžio. Įsitinkite, kad pasirinkote tinkamą dydį, kad stoma ir aplinkinė oda išliktų sveika. Palikite ne daugiau kaip 2 mm tarpelį tarp stomos ir jungės, kad būtų galima įstatyti saugiai ir tinkamai. Jei dydis per didelis, išmatos gali pažeisti odą. Jei dydis per mažas, jungė sugadins stomą. Laikui bėgant jūsų stomos dydis ar forma gali pasikeisti, todėl gali prireikti periodiškai atlikti matavimus, kad būtų išvengta bet kokio nuotėkio.

Paruoškite odą

Priaiykite odą ir atsargiai nuimkite jungę, nenuplėškite, o atitraukite odą atgal nuo jungės, jei reikia, naudokite drėgną marlę. Nuplaukite odą aplink stomą šiltu neparfumuotu vandeniu. Odai valyti nenaudokite jokių priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, kvėpalų ar eterio, nes jos gali pažeisti odą. Netrinkite per stipriai, nes tai gali pažeisti odą. Kruopščiai ir kruopščiai nusauskite odą, kad maišelis gerai prikibtų. Pasirinktinai: Jei oda sudirginta ir skauda, galite naudoti odos barjerinį kremą, hidrokoloidinius miltelius arba odos barjerines servetėles. Užtepkite miltelių, apsauginio odos kremo arba švelniai nušluostykite aplinkinę odą.

Uždarykite maišelio apačioje esantį kranelį

Visada įsitinkite, kad kranelis saugiai uždarytas. Uždarykite kranelį jį tvirtai paspausdami.

Maišelio prijungimas prie naktinio surinkimo maišelio

Maišelyje yra universalus kranelis. Šį kranelį galima prijungti prie beveik bet kokio tipo ir prekės ženklo naktinio surinkimo maišelio. Atidarykite maišelio kranelį, prijunkite jį prie naktinio surinkimo maišelio jungties ir įsitinkite, kad jungtis sujungta tvirtai.

Tikrinimo langelis

Atidarymas: atidarykite tikrinimo langelį naudodamiesi nurodytu skirtuku ir traukdami atidarykite. Tuo pat metu kita ranka stabiliai laikykite maišelį. Prieš atidarydami tikrinimo langelį įsitinkite, kad maišelis ištuštintas. Jei to padaryti neįmanoma, atsargiai laikykite maišelį, kad atidarant iš jo niekas neišsiliėtų. Uždarymas: atsargiai užspauskite tikrinimo langelį ir prispauskite visą uždarymo dalį, kad ji gerai užsidarytų. Visada patikrinkite, ar tikrinimo langelis tinkamai uždarytas.

Pritvirtinkite maišelį

Nuimkite apsauginę plėvelę nuo jungės. Sulenkite jungę iki pusės ir įleiskite į angą stomos apačioje. Ištempkite pilvo odą ištiestu delnu ir patraukite visą jungę virš stomos į reikiamą padėtį. Hidrokolooidą prilipinkite prie odos aplink stomą ir įsitinkite, kad jungė yra sujungta patikimai. Uždėkite ranką ant jungės ir įsitinkite, kad surinkimo sistema tinkamai užsandarinta.

Ištuštinkite maišelį

Pakelkite ir atidarykite kranelį. Išpilkite maišelio turinį į tualetą. Dar kartą uždarykite kranelį ir įsitinkite, kad jis saugiai uždarytas.

Kranelio ir išleidimo angos uždarymas

Jei kranelis nereikalingas, jį galima nupjauti ir vietoje jo naudoti „velcro“ tipo spaustuką.

Ištuštinkite maišelį naudodami „velcro“ tipo spaustuką

Pakelkite maišelio galą ir atidarykite maišelį. Išpilkite maišelio turinį į tualetą.

Uždarykite lizdą

Pirmiausia įsitinkite, kad spaustukas arba „Velcro“ tipo kamštelis saugiai uždarytas. Spaustukui: Uždėkite spaustuką ant maišelio galo. Vieną kartą užlenkite galą ant spaustuko ir įsitinkite, kad gale plėvelė yra lygi, kad išvado galas būtų tinkamoje padėtyje, ir tvirtai paspauskite spaustuką. Spaustukus galima naudoti pakartotinai. Metaliniams dirželiams Nuimkite apsauginę plėvelę nuo metalinio dirželio. Metalinį dirželį priklijuokite prie maišelio galo. Užvyniokite maišelio galą. Sulenkite metalinį dirželį iš abiejų pusių, kad maišelio galas liktų suvyniotas. „Velcro“ užsegimui: Sukite maišelio galą, kol abi lipniosios dalys sukibs. Tvirtai prispauskite „Velcro“ spaustuko dalis. Velcro juostelės su užlenkiamais spaustukais: Užvyniokite maišelio galą tiek, kad Velcro juostelė būtų tame pačiame aukštyje kaip ir užlenkiami spaustukai. Užspauskite Velcro juostelę su užspaudžiamais spaustukais ant uždarymo juostelės.

Maišelio išmetimas

Nuimkite maišelį ir išmeskite jį su šiukšlėmis. Nepilkite panaudoto maišelio turinio į tualetą, nes tai užkimš nuotekų sistemą.

Maišelio keitimo dažnumas

Pakeiskite/ištuštinkite maišelį taip, kaip nurodė sveikatos priežiūros specialistas.

Paredzētais lietojums, izstrādājuma apraksts un informācija par materiāliem

Ostomijas maisiņus izmanto urīna un fēču savākšanai, un tos parasti piestiprina pie ādas virs ķirurģiski izveidotas stomas. Zensiv Ostomy izstrādājumi ir dažādi viendabīgi un divdabīgi ostomijas maisiņi un dažādu izmēru un formu divdabīgas pamatnes. Visiem viendabīgajiem maisiņiem un divdabīgajām pamatnēm ir ādu saudzējošs hidrocoloīda slānis, kas paredzēts pielīmēšanai pie ķermeņa, un pirms lietošanas to aizsargā noņemama plēvi, uz kuras ir redzama griešanas norāde. Izstrādājuma maisiņš ir izgatavots no smakas aizturošas plēves ar ērtu neaustu slāni un oglekļa filtru smaku neitralizēšanai (ileostomijai un kolostomijai). Ileostomijas maisiņiem ir sarullējama drenāža, kas nostiprināta ar iestrādātu līplentes aizdari, vai arī katrā kārbā ir skavas un mīksta saites. Urostomijas maisiņiem ir mīksts polimēra krāns, lai varētu viegli veikt drenāžu. Visiem maisiņiem ir skata lodziņš, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārbaudīt stomu. Dažiem izstrādājumiem ir ventilācija ar vāciņu, lai nepieciešamības gadījumā izvēdinātu maisiņu. Visi Zensiv Ostomy izstrādājumi ir bez lateksa un nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Izstrādājumi ir nesterili, un tos var izmantot jebkuros piemērotos apstākļos, kad ārstējošais ārsts vai veselības aprūpes speciālists nolemj lietot nesterilu izstrādājumu.



Brīdinājumi—piesardzības pasākumi

- Katrs maisiņš ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Nelietojiet atkārtoti. Atkārtota lietošana var izraisīt savstarpēju piesārņojumu. - Lietojiet tikai atbilstoši veselības aprūpes speciālista norādījumiem. - Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. - Pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, ja, lietojot maisiņus, rodas alerģiskas reakcijas vai problēmas.

Kontrindikācijas

Šīs ierīces nedrīkst lietot personas, kurām ir zināma jutība pret: polietilēnu, poliamīdu, medicīnisko ogli, sintētisko polimēru, etilēna vinilacetātu, polipropilēnu, poliesteru, polizobutilēnu, karboksimetilcelulozi, pektīnu vai glicerīnu, akrila gēls, elastāns.

Glabāšanas nosacījumi

Izstrādājumus vislabāk glabāt vēsā, sausā vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz 27°C, kā norādīts izstrādājuma etiķetē.

Nopietni negadījumi

Ja izstrādājuma lietošanas rezultātā rodas nopietns negadījums, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to ražotājam un kompetentajai iestādei valstī, kurā dzīvojat.

Glabāšanas laiks

Izlietot līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz etiķetes.

Paņemiet materiālus

Pārļiecinieties, vai visi nepieciešamie materiāli ir gatavi lietošanai. Paņemiet izmēru rādītāju, šķēres, pildspalvu, mitru un sausu marli un stomas maisiņu.

Pareizā izmēra izvēle

Izmēriet savu stomu ar izmēru rādītāju un izgrieziet (ja nepieciešams) pamatni atbilstoši stomas izmēram. Pārļiecinieties, vai esat izvēlējies pareizo izmēru, lai stoma un apkārtējā āda paliktu vesela. Lai droši un pareizi sastiprinātu stomu un pamatni, atstājiet starp tām ne vairāk kā 2 mm atstarpi. Ja izmērs ir pārāk liels, fēces sabojās ādu. Ja izmērs ir pārāk mazs, pamatne sabojās stomu. Laika gaitā stomas forma vai izmērs var mainīties, tāpēc periodiski var būt nepieciešams atkārtot mērīšanu, lai novērstu jebkādu noplūdi.

Ādas sagatavošana

Atbalstiet ādu un uzmanīgi noņemiet pamatni; nenoplēsiet, bet atvirziet ādu no pamatnes, ja nepieciešams, izmantojot mitru marli. Nomazgājiet ādu ap stomu ar siltu un nearomatizētu ūdeni. Ādas notīrīšanai nelietojiet neko tādu, kas satur spirtu, parfīmu vai ēteri, jo tas var radīt bojājumus. Neberzējiet ādu pārāk stipri, jo tas var izraisīt ādas bojājumus. Rūpīgi un kārtīgi nosusiniet ādu, lai maisiņš labi pieliptu. Pēc izvēles: Ja āda ir iekaisusi un sāpīga, varat izmantot ādas aizsargkrēmu, hidrocoloīda pulveri vai ādu aizsargājošas salvetes. Uzklājiet pulveri, ādas aizsargkrēmu vai saudzīgi noslaukiet apkārtējo ādu.

Krāna aizvēršana pie maisiņa pamatnes

Vispirms pārļiecinieties, vai krāns ir stingri aizvērts. Aizveriet krānu, to stingri piespiežot.

Maisiņa pievienošana nakts maisiņam

Maisiņam ir universāls krāns. Šo krānu var savienot ar gandrīz jebkura veida un zīmola nakts maisiņu. Atveriet maisiņa krānu, pievienojiet to nakts somas savienotājam un pārļiecinieties, vai savienojums ir drošs.

Piekluves lodziņš

Atvēršana: atveriet piekluves lodziņu, velkot aiz tā ķepiņas. To darot, pieturiet maisiņu ar otru roku. Pirms piekluves lodziņa atvēršanas pārļiecinieties, vai maisiņš ir iztukšots. Ja tas nav iespējams, turiet maisiņu uzmanīgi, lai, to atverot, neizšļakstītos maisiņa saturs. Aizvēršana: aizveriet maisiņu uzmanīgi, ar vienu kustību noslēdzot piekluves lodziņu un uzspiežot pa visu noslēgšanas daļas perimetru, lai nodrošinātu, ka tas ir aizvērts pilnībā. Vienmēr pārbaudiet, vai piekluves lodziņš ir pienācīgi aizvērts.

Maisiņa uzstādīšana

Noņemiet pamatnes aizsargpapīru. Salokiet pamatni uz pusēm un novietojiet atveri stomas apakšpusē. Nostiepiet vēdera ādu ar plaukstu un pārvelciet visu pamatni pāri stomai pareizā stāvoklī. Izlīdziniet pamatni ap visu stomu tā, lai hidrocoloīds pieliptu pie ādas, un pārļiecinieties, vai pamatne ir kārtīgi pielipusi. Uzlieciet roku uz pamatnes un pārļiecinieties, vai tā ir kārtīgi pielipusi.

Maisiņa iztukšošana

Paceliet krānu un atveriet to. Maisiņa saturu iztukšojiet tualetes podā. Aizveriet krānu un pārļiecinieties, vai tas ir droši aizvērts.

Krāns un izplūdes aizdare

Ja krāns nav nepieciešams, to var nogriezt un tā vietā izmantot līplentes aizdari.

Maisiņa iztukšošana, izmantojot līplentes tipa aizdari

Paceliet maisiņa galu un atveriet maisiņu. Maisiņa saturu iztukšojiet tualetes podā.

Izvides aizvēršana

Vispirms pārļiecinieties, vai skavas vai līplentes aizdare ir kārtīgi aiztaisīta. Ja izmantojat skavu: novietojiet skavu maisiņa apakšgalā. Vienu reizi nolokiet apakšgalu pāri skavai un pārļiecinieties, vai apakšgala plēve ir gluda, lai nodrošinātu, ka izvades gals ir pareizajā stāvoklī, un stingri saspiediet skavu. Skavas ir izmantojamas atkārtoti. Ja izmantojat metāla stiepli sloksnes: noņemiet no metāla stieples sloksnes aizsargplēvi. Pielīmējiet metāla stieples sloksni pie maisiņa apakšgala. Sarullējiet maisiņa apakšgalu. Salokiet metāla stiepli abās pusēs tā, lai maisiņa gals paliktu sarullēts. Ja izmantojat līplentes aizdari: sarullējiet maisiņa galu, līdz abi līplentes gabali saskaras viens ar otru. Stingri saspiediet līplentes gabalus vienu pie otra. Lai nodrošinātu Velcro līplentes ar nolokāmām malām aizdari: Saritiniet somiņas aizdares cilpu, līdz līplente ir tādā pašā augstumā kā aizveres nolokāmās malas. Stingri piespiediet līplenti pie aizveres nolokamajām malām līdz ir nodrošināta pilnīga līplentes aizdare.

Maisiņa likvidēšana

Noņemiet maisiņu un izmetiet to atkritumu tvertnē. Neaizskalojiet izlietoto maisiņu tualetes podā, jo tas nosprostos kanalizācijas sistēmu.

Maisiņa maiņas biežums

Nomainiet/iztukšojiet maisiņu atbilstoši veselības aprūpes speciālista ieteikumiem.

NO - Bruksanvisning

Beregnet bruk, produktbeskrivelse og materiell informasjon

Stomiposer brukes for å samle opp avfall fra kroppen og er vanligvis festet på huden over en kirurgisk fremstilt stomi. Zensiv stomiprodukter er en serie stomiposer med 1-dels og 2-dels og plater i forskjellige sorter/ varianter, størrelser og former. Alle 1-dels poser og 2-dels plater har en hudvennlig hydrokolloidplate for feste til kroppen og dette blir beskyttet før bruk med en beskyttelsesfilm med utklippsmarkeringer. Produktposen er produsert av en luftbarrierefilm med et komfortfritt ikke-vevd lag og et karbonfilter for lukt kontroll (for ileostomi og kolostomi). Ileostomi posen har enten en sammenrullbar avløpsport sikret med en integrert «borrelås» lukning, eller det er klemmer og myke bånd som leveres i hver eske. Urostomi posen har en myk polymer kran for enkel drenering. Alle posene har et visningsvindu for å inspisere stomien om nødvendig. Visse poser har en lufteluke for å ventilere posen ved behov. Alle Zensiv stomiprodukter er latexfrie og inneholder ikke ingredienser av animalsk opprinnelse. Produktene er ikke-sterile og kan brukes under alle mulige omstendigheter der den behandlede legen eller omsorgspersonale bestemmer at et ikke-sterilt produkt kan brukes.



Advarsler-forholdsregler

- Hver pose er kun til engangsbruk. Skal ikke gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til krysskontaminering. - Brukes bare i henhold til instruksjonene fra helsepersonellet. - Les instruksjonene før bruk. - Avbryt bruken og ta kontakt med helsepersonellet om du opplever allergiske reaksjoner, eller problem når du bruker posene.

Kontraindikasjoner

Disse enheter bør ikke brukes av noen med kjent følsomhet for: polyeten, polyamid, medisinsk kull, syntetisk polymer, etylenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylene, karboximetilcellulosa, pektin eller glycerin, akrylgel, spandex.

Lagringsforhold

Det er best å lagre dine produktene på en kjølig, tørr plass med en anbefalt temperatur fra 0°C til 27°C, som det angis på produktetiketten.

Alvorlige hendelser

Om en alvorlig hendelse skulle oppstå som følge av at du bruker produktet, vennligst rapporter dette umiddelbart til leverandøren og til rett myndighet i det landet du bor.

Holdbarhetstid

Bruk før utløpsdato som er angitt på pakken.

Forbered dine produkter

Sørg for at alle nødvendige produkter er klare til bruk. Forbered en måleguide, en saks, en penn, våte og tørre gassbind og en stomipose.

Velg en størrelse

Mål din stomi med en måleguide og klipp (hvis nødvendig) platen til stomistørrelsen. Sørg for at du velger riktig størrelse så stomien og omkringliggende hud holder seg friskt. Tillat 2 mm plass mellom din stomi og plate for en sikker og riktig passform. Om størrelsen er for stor, kommer din avføring til å skade huden. Om størrelsen er for liten, skader platen stomien. Med tiden kan din stomi forandre form eller størrelse, så periodevis kan målinger kreves igjen for å forhindre lekkasje.

Forbered din hud

Støtt huden og ta bort platen forsiktig, ikke riv den av, men skyv tilbake huden fra platen, bruk et vått gassbind hvis behov. Vask huden rundt stomien med varmt og uparfymert vann. Bruk ikke noe som inneholder alkohol, parfyme, eller eter for å rengjøre huden ettersom det kan forårsake skader. Ikke gni huden for hardt da det kan føre til hudskader. Tørk huden forsiktig og nøye så din pose fester seg bra. Valgfritt: Hvis din hud er irritert og øm kan du bruke hudbarriere krem, hydrokolloidpulver eller hudbarriereservietter. Påfør pulver, hudbarriere krem, eller tørk forsiktig på den omkringliggende huden.

Steng utløpet ved bunnen av posen

Pass først på at utløpet er stengt på en sikker måte. Steng utløpet gjennom å trykke ordentlig på tappen.

Koble til din stomipose til en nattpose

Posen har en universalkran. Denne kranen kan kobles til nesten alle typer og merker av nattposer. Åpne kranen på posen og koble den til nattposen og sørg for at tilkoblingen er sikker.

Tilgangsåpning

For å åpne: Åpne tilgangsåpningen ved å bruke klaffen og trekk den åpen. Hold posen godt fast med den andre hånden mens du gjør dette. Sørg for at posen er tømt før du åpner tilgangsåpningen. Hvis det ikke er mulig, må posen holdes forsiktig for å sikre at innhold ikke kommer ut under åpningsprosessen. For å lukke: Lukk tilgangsåpningen forsiktig og trykk hele veien rundt lukkedelen for å sikre fullstendig lukking. Kontroller alltid at tilgangsåpningen er godt lukket.

Montere posen din

Ta bort platens beskyttelsesfilm. Fold platen halvveis og plasser åpningen på stomiens bunn. Strekk huden på magen med en flat hånd, og trekk hele platen over magen til riktig stilling. Jobb deg rundt stomien slik at hydrokolloiden fester til huden og pass på at platen er sikret. Legg hånden over platen og sørg for at det blir en god tetting.

Tom posen din

Løft opp kranen og åpne kranen. Tøm innholdet fra posen i toalettet. Steng kranen igjen og pass på at den er ordentlig stengt.

Kran og stenging av åpning

Hvis kranen ikke er nødvendig kan den klippes av. Borrelåsen kan brukes istedenfor.

Tøm posen din ved å bruke borrelåsen

Løft opp åpningen på posen og åpne posen. Tøm innholdet fra posen i toalettet.

Steng åpningen

Kontroller først at klemmen eller "karrborrelåsen" er stengt på en sikker måte. For klemmen: Plasser klemmen ved posen. Brett enden nederst en gang over klemmen og sørg for at åpningen er jevn for å sikre at åpningen er i riktig posisjon og trykk klemmen på plass. Klemmen kan brukes på nytt. For metallstrimler: Ta bort beskyttelsesfilmen fra metallstrimmelen. Fest metallstrimmelen på posen. Rull opp posen. Fold metalltråden på begge sider så posens åpning forblir rullet. For kardborrestenging: Rull opp åpningen på posen til begge kardborrestykkene møter hverandre. Trykk fast "kardborrebåndet" ordentlig mot hverandre. For borrelåslukking med foldefliker: Rull opp halen på posen til borrelåsen står i samme høyde som de sammenleggbare tappene. Trykk borrelåsen på brettetappene godt på lukkeborrelåsen.

Avfallshåndtering av posen din

Ta bort posen og kast den i søppelbøtten. Ikke spyl ned din brukte pose i toalettet, da det kan forårsake tilstopping i ditt avløpssystem.

Hypighet for bytting av pose

Bytt/tøm posen i henhold til råd fra helsepersonellet.

PL - Instrukcja użycia

Przewidziane zastosowanie, opis produktu i informacje o materiałach

Worki stomijne służą do zbierania produktów przemiany materii z organizmu i są zwykle mocowane do skóry nad chirurgicznie wylonioną stomią. Produkty stomijne Zensiv to gama 1-częściowych i 2-częściowych worków stomijnych oraz 2-częściowych kołnierzy w różnych rozmiarach i kształtach. Wszystkie 1-częściowe worki i 2-częściowe kołnierze posiadają przyjazną dla skóry hydrokolidową płytkę przylegającą do ciała, która przed użyciem jest zabezpieczona folią antyadhezyjną, na której zaznaczono otwór do wycięcia. Worek na produkt jest wykonany z folii antyzapachowej z komfortową warstwą włókniny i filtrem węglowym do neutralizacji zapachu (w przypadku ileostomii i kolostomii). Worki do ileostomii posiadają za pomocą ujęcia do drenażu zabezpieczone zintegrowanym zamknięciem na rzep, a w każdym opakowaniu znajdują się również zaciski i miękkie opaski. Worki do urostomii posiadają miękki polimerowy kranik ułatwiający drenaż. Wszystkie worki posiadają okienko umożliwiające kontrolę stomii w razie potrzeby. Niektóre gamy produktów posiadają otwór wentylacyjny z pokrywą do odpowietrzania worka w razie potrzeby. Wszystkie produkty stomijne Zensiv są pozbawione lateksu oraz składników pochodzenia zwierzęcego. Produkty te są niesterylne i mogą być stosowane we wszystkich odpowiednich okolicznościach, w których lekarz prowadzący lub pracownik ochrony zdrowia zdecyduje, że można zastosować produkt niesterylny.



Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Każdy worek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Ponowne użycie może prowadzić do zanieczyszczenia krzyżowego. - Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami pracownika ochrony zdrowia. - Przed użyciem przeczytać instrukcję. - Jeśli podczas używania worków wystąpią jakiegokolwiek reakcje alergiczne lub problemy, należy przerwać korzystanie z nich i skontaktować się z pracownikiem ochrony zdrowia.

Przeciwwskazania

Urządzenia te nie powinny być używane przez osoby o wrażliwości na: polietylen, poliamid, węgiel medyczny, polimer syntetyczny, octan etylenowo-winylowy, polipropylen, poliester, poliizobutylen, karboksymetylocelulozę, pektynę lub glicerynę, żel akrylowy, spandex.

Warunki przechowywania

Produkty najlepiej przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od 0°C do 27°C, zgodnie z informacją na etykiecie produktu.

Poważne wypadki

Jeżeli w wyniku użytkowania produktu dojdzie do poważnego wypadku, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu producentowi i właściwym władzom w kraju zamieszkania.

Okres trwałości

Użyć przed upływem daty ważności podanej na etykiecie.

Przygotowanie wszystkich przedmiotów

Upewnić się, że wszystkie niezbędne przedmioty są gotowe do użycia. Przygotować miarkę stomijną, nożyczki, długopis, mokrą i suchą gazę oraz worek stomijny.

Wybór właściwego rozmiaru

Zmierzyć stomię za pomocą miarki i przyciąć (jeśli to konieczne) kołnierz do odpowiedniego rozmiaru stomii. Upewnić się, że wybrano właściwy rozmiar, aby stomia i otaczająca ją skóra pozostały zdrowe. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe dopasowanie, należy pozostawić maksymalnie 2 mm wolnej przestrzeni między stomią a kołnierzem. Jeśli rozmiar jest zbyt duży, kał może uszkodzić skórę. Jeśli rozmiar jest zbyt mały, kołnierz może uszkodzić stomię. Z czasem stomia może zmienić swój kształt lub rozmiar, dlatego okresowo mogą być wymagane ponowne pomiary, aby zapobiec przeciekaniu.

Przygotowanie skóry

Przytrzymać skórę i ostrożnie zdjąć kołnierz. Nie odrywać, lecz odsunąć skórę od kołnierza. W razie potrzeby użyć mokrej gazy. Umyć skórę wokół stomii ciepłą, czystą wodą. Nie używać do mycia skóry produktów zawierających alkohol, perfumy lub eter, aby nie uszkodzić skóry. Nie pocierać skóry zbyt mocno, gdyż może dojść do jej uszkodzenia. Osuszyć skórę starannie i dokładnie, aby upewnić się, że worek dobrze przylega. Opcjonalnie: Jeśli skóra jest podrażniona i obolała, można użyć kremu ochronnego, pudru hydrokoloidowego lub gazików ochronnych. Zastosować puder, krem ochronny lub gazik delikatnie na otaczającą skórę.

Zamknięcie kraniku u podstawy worka

Najpierw należy upewnić się, że kranik jest bezpiecznie zamknięty. Zamknąć kranik, mocno go naciskając.

Podłączenie worka stomijnego do worka na noc

Worek posiada uniwersalny kranik. Kranik ten można podłączyć do prawie każdego typu i marki worka na noc. Otworzyć kranik worka, podłączyć go do łącznika worka na noc i upewnić się, że połączenie jest bezpieczne.

Okienko

Otwieranie: Otwórz okienko ciągnąc za zakładkę. Drugą ręką przytrzymuj worek. Upewnij się, że przed otwarciem okienka worek został opróżniony. Jeśli nie jest to możliwe, postępuj ostrożnie, tak by podczas otwierania nie rozlała się zawartość worka. Zamykanie: Zamknij ostrożnie zatrzaskując okienko i dociśnij materiał dookoła sekcji zamykającej, tak by zapewnić szczelność zamknięcia. Zawsze sprawdzaj, czy okienko jest zamknięte prawidłowo.

Dopasowywanie worka

Zdjąć papier zabezpieczający kołnierz. Złożyć kołnierz na pół i umieścić otwór w dolnej części stomii. Rozciągnąć skórę brzucha płaską dłońią i przeciągnąć cały kołnierz nad stomią do właściwej pozycji. Obejść stomię dookoła tak, aby hydrokoloid przylegał do skóry, i upewnić się, że kołnierz jest dobrze przymocowany. Umieścić dłoń na kołnierzu i upewnić się, że powstało dobre uszczelnienie.

Opróżnianie worka

Podnieść kranik i otworzyć go. Opróżnić zawartość worka do toalety. Ponownie zamknąć kranik, upewniając się, że jest szczelnie zamknięty.

Zamykanie kranu i wylotu

Jeśli kran nie jest potrzebny, można go odłączyć i użyć zamiast niego zamknięcia typu „velcro”.

Opróżnij worek za pomocą zamknięcia typu „velcro”.

Unieś końcówkę worka i otwórz worek. Opróżnij worek wyrzucając jego zawartość do toalety.

Zamknięcie wylotu

Najpierw należy upewnić się, że zamknięcie na zacisk lub rzep jest bezpiecznie zamknięte. Zacisk: Umieścić zacisk na końcu worka. Zagiąć koniec worka raz w miejscu zacisku i upewnić się, że koniec worka jest gładki, aby wylot był we właściwej pozycji. Następnie mocno nacisnąć zacisk. Zaciski są wielokrotnie użytku. Metalowy drucik: Zdjąć folię zabezpieczającą z metalowego drucika. Przykleić metalowy drucik do końca worka. Podwinąć koniec worka. Zagiąć metalowy drucik po obu stronach tak, aby koniec worka pozostał podwinięty. Zamknięcie na rzep: Podwinąć koniec worka, aż dwa elementy zamknięcia na rzep będą się stykać. Mocno dociśnąć do siebie oba elementy zamknięcia na rzep. W przypadku zapięcia na rzep z zakładkami: podwinąć końcówkę worka tak, by rzep znalazł się na wysokości zakładki. Mocno dociśnij rzep zapięcia do rzepu zakładki.

Utylizacja worka

Wyjąć worek i wyrzucić go do kosza. Nie splukiwać zużytego worka w toalecie, ponieważ spowoduje to zablokowanie kanalizacji.

Częstotliwość wymiany worka

Wymieniać/opróżniać worek zgodnie z zaleceniami pracownika ochrony zdrowia.

PT - Instruções de uso

Uso pretendido, descrição do produto e informações de materiais

Bolsas para ostomia são usadas para coletar resíduos do corpo e geralmente são fixadas à pele sobre um estoma realizado cirurgicamente. A gama de produtos Zensiv Ostomy contém bolsas para ostomia de 1 e 2 peças e flanges de 2 peças em vários tamanhos e formas. Todas as bolsas de 1 peça e flanges de 2 peças apresentam um wafer hidrocolóide que não agride a pele, para adesão ao corpo, e, antes do uso, é protegido com uma película de liberação que mostra uma guia de corte. O produto «bolsa» é fabricado em filme de barreira contra odores com uma camada de não-tecido confortável e um filtro de carbono para controle de odores (para ileostomia e colostomia). As bolsas para ileostomia têm uma abertura de drenagem de enrolar, protegida com um fecho do tipo 'velcro' integrado ou existem braçadeiras e laços flexíveis fornecidos em cada caixa. Para urostomia, as bolsas possuem uma torneira de polímero macio para fácil drenagem. Todas as bolsas têm uma janela de visualização para inspecionar o estoma, se necessário. Alguns produtos da linha apresentam um respiradouro com tampa para ventilar a bolsa, se necessário. Todos os produtos Zensiv Ostomy não contêm látex e não contêm ingredientes de origem animal. Os produtos não são estéreis e podem ser usados em quaisquer circunstâncias apropriadas em que o médico assistente ou profissional de saúde decida que um produto não estéril possa ser aplicado.

Avistos - Precauções

- Cada bolsa é para uso único. Não reutilize. A reutilização pode levar a uma contaminação cruzada. - Use somente conforme indicado pelo seu profissional de saúde. - Leia as instruções antes de usar. - Interrompa o uso e entre em contato com o seu profissional de saúde se tiver reações alérgicas ou problemas ao usar as bolsas.

Contraindicações

Esses dispositivos não devem ser usados por ninguém com sensibilidade conhecida a: polietileno, poliamida, carvão medicinal, polímero sintético, etileno acetato de vinila, polipropileno, poliéster, poliisobutileno, carboximetilcelulose, pectina ou glicerina, gel acrílico, spandex.

Condições de armazenamento

É melhor armazenar seus produtos em um local fresco e seco com uma temperatura de 0°C a 27°C conforme indicado no rótulo do produto.



Incidentes Graves

Caso ocorra um incidente grave como resultado do uso do produto, informe imediatamente o fabricante e a autoridade competente do país onde você reside.

Validade

Use dentro do prazo de validade indicada no rótulo.

Colete seus materiais

Certifique-se de que todos os materiais necessários estão prontos para uso. Pegue um guia de medição, uma tesoura, uma caneta, uma gaze húmida e seca e uma bolsa para estoma.

Escolha o tamanho certo

Meça o seu estoma com uma guia de medição e corte (se necessário) o flange no tamanho certo do estoma. Certifique-se de escolher o tamanho certo para que o estoma e a pele ao redor permaneçam saudáveis. Deixe no máximo 2 mm de espaço entre o estoma e o flange para um adapte correto e seguro. Se o tamanho for muito grande, suas fezes danificarão a pele. Se o tamanho for muito pequeno, o flange danificará o estoma. Com o tempo, seu estoma pode mudar de forma ou tamanho, portanto, medições periódicas podem ser necessárias novamente para evitar qualquer vazamento.

Prepare sua pele

Apole a pele e remova o flange com cuidado, não arranque, mas empurre a pele para trás do flange, use uma gaze húmida, se necessário. Lave a pele ao redor do estoma com água morna e não perfumada. Não use nada que contenha álcool, perfume ou éter para limpar sua pele, pois pode causar danos. Não esfregue a pele com muita força, pois isso pode causar danos à pele. Seque a pele cuidadosa e completamente para garantir que sua bolsa adira bem. Opcional: Se sua pele estiver irritada e dolorida, você pode usar um creme de proteção para a pele, pó de hidrocolóide ou lenços de proteção para a pele. Aplique o pó, creme de proteção para a pele ou limpe suavemente na pele circundante.

Feche a torneira na base da bolsa

Primeiro certifique-se de que a torneira está fechada com segurança. Feche a torneira pressionando-a com firmeza.

Conectando sua bolsa a uma bolsa noturna

A bolsa possui uma torneira universal. Esta torneira pode ser conectada a quase qualquer tipo e marca de bolsa noturna. Abra a torneira da bolsa e conecte-a ao conector da bolsa noturna e verifique se a conexão está firme.

Janela de acesso

Para abrir: Abra a janela de acesso usando a aba fornecida e puxe-a para abrir. Segure a bolsa firmemente com a outra mão enquanto faz isso. Certifique-se de que a bolsa esteja vazia antes de abrir a janela de acesso. Se isso não for possível, segure a bolsa com cuidado para garantir que nenhum produto vazze durante o processo de abertura. Para fechar: Feche cuidadosamente fechando a janela de acesso e pressionando em toda a volta da seção de fechamento para garantir o fechamento total. Sempre verifique se a janela de acesso está fechada corretamente.

Adapte a sua bolsa

Remova o papel de liberação do flange. Dobre o flange até a metade e coloque a abertura na parte inferior do estoma. Estique a pele do abdômen com a mão espalmada e puxe todo o flange sobre o estoma para a posição correta. Busque o seu caminho ao redor do estoma para que o hidrocolóide se fixe na pele e certifique-se de que o flange esteja seguro. Coloque sua mão sobre o flange e certifique-se de que haja um boa vedação.

Esvazie sua bolsa

Levante a torneira e abra a torneira. Esvazie o conteúdo de sua bolsa no WC. Feche a torneira novamente, certificando-se de que está bem fechada.

Fechamento da torneira e da saída

Se a torneira não for necessária, ela pode ser cortada e o fecho do tipo 'velcro' usado em seu lugar.

Esvazie sua bolsa usando o fecho tipo 'velcro'

Levante a extremidade traseira da bolsa e abra a bolsa. Esvazie o conteúdo de sua bolsa no WC.

Feche a saída

Primeiro, certifique-se de que a braçadeira ou fecho do tipo 'velcro' está fechado com segurança. Para a braçadeira: Coloque a braçadeira na extremidade traseira da bolsa. Dobre a extremidade traseira uma vez sobre a braçadeira e certifique-se de que a película da extremidade traseira esteja lisa para garantir que a extremidade traseira de saída esteja na posição correta e pressione a braçadeira firmemente. As braçadeiras são reutilizáveis. Para as tiras de arame: Retire o filme de liberação da tira de arame. Cole a tira de arame na extremidade traseira da bolsa. Enrole a extremidade traseira da bolsa. Dobre o arame de metal em ambos os lados de forma que a extremidade traseira da bolsa fique enrolada. Para o fecho tipo velcro: Enrole a extremidade traseira da bolsa até que as duas peças do tipo 'velcro' estejam se tocando. Pressione as peças do tipo 'velcro' um contra a outra com firmeza. Para o fecho de velcro com abas dobráveis: enrole a ponta traseira do saco até o velcro ficar à mesma altura que as abas dobráveis. Pressione firmemente o velcro nas abas dobráveis sobre o velcro do fecho.

Descarte de sua bolsa

Remova sua bolsa e descarte-a no lixo. Não jogue a bolsa usada no vaso sanitário, pois isso bloqueará o sistema de esgoto.

Frequência de troca de bolsa

Troque/esvazie a bolsa conforme recomendado pelo seu profissional de saúde.

RO - Instructiuni de folosire

Utilizare, descriere produs și informații despre materiale

Pungile de ostomie sunt folosite pentru colectarea deșeurilor din corp și sunt de obicei atașate de piele peste stoma produsă chirurgical. Produsele Zensiv Ostomy se regasesc într-o gamă de punți unitare cat și din 2 bucăți (flansa si punga colectoare), în diferite dimensiuni și forme. Toate pungile dintr-o bucată cat si cele din 2 bucăți au o placă hidrocolidă prietenoasă pentru aderenta la corp iar aceasta este protejată înainte de utilizare cu un film care prezintă un ghid de tăiere. Punga colectoare este acoperita cu un strat nețesut confort și un filtru de carbon pentru controlul mirosului (pentru ileostomie și colostomie). Pungile pentru ileostomie au fie o închidere tip „velcro”(arici) , fie sunt furnizate cleme și legături moi în fiecare cutie. Pentru urostomie, pungile prezinta un robinet de evacuare, din polimer moale pentru o scurgere ușoară. Toate pungile au fereastră de vizualizare pentru a inspecta stoma, dacă este nevoie. În cazul în care este necesar, unele game sunt prevăzute cu un capac pentru ventilarea punzii. Toate produsele Zensiv Ostomy nu conțin latex și nu conțin ingrediente de origine animală. Produsele nu sunt sterile și pot fi utilizate în circumstanțe adecvate, la recomandarea unui medic curant sau a profesionistului din domeniul sănătății.

Avertismente-Măsurile de precauție

- Fiecare punge este de unica utilizare. Nu reutilizați. Reutilizarea poate duce la contaminare încrucișată. - Utilizați conform indicațiilor date de către specialistul dumneavoastră în sanatare. - Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. - Întrerupeți utilizarea și luați legătura cu specialistul în sanatare dacă aveți reacții alergice sau probleme atunci când utilizați pungile.

Contraindicații

Aceste dispozitive nu trebuie utilizate de către persoanele care au o alergie cunoscută la: polietilenă, poliamidă, cărbune medical, polimer sintetic, acetat de etilen vinil, polipropilenă, poliester, polisobutilenă, carboximetilceluloză, pectină sau glicerină, gel acrilic, spandex.

Condiții de depozitare

Cel mai bine este să stocați produsele într-un loc uscat, cu o temperatură variabilă între 0°C și 27°C, așa cum se menționează pe eticheta produsului.

Incidente grave

Dacă apare un incident grav ca urmare a utilizării produsului, raportați-l imediat producătorului și autorității competente din țara în care vă aflați.

Termen de valabilitate

Utilizarea până la data de expirare menționată pe etichetă.

Colectarea materialelor

Asigurați-vă că toate materialele necesare sunt gata de utilizare. Folosiți sablonul, o pereche de foarfece, un stilou, tifon umed și uscat și o punge de stoma.



Alegeți dimensiunea potrivită

Măsurați-vă colostoma folosind sablonul și tăiați (dacă este necesar) flanșa la dimensiunea corectă a stomei. Asigurați-vă că alegeți dimensiunea potrivită când decupați și pielea din jurul stomei o să rămână sănătoasă. Permiteți maximum 2 mm spațiu între stoma și flanșa pentru o potrivire sigură și corectă. Dacă dimensiunea este prea mare, materiile fecale vor deteriora pielea. Dacă dimensiunea este prea mică, flanșa va deteriora stoma. De-a lungul timpului, stoma dvs. își poate schimba forma sau dimensiunea, astfel încât periodic pot fi necesare din nou măsurători pentru a preveni orice scurgere.

Pregătiți-vă pielea

Sustineți pielea și îndepărtați flanșa cu atenție, fara miscari bruste, ci împingeți pielea înapoi de pe flanșă, folosiți un tifon umed dacă este necesar. Curatați pielea din jurul stomei cu apă caldă. Nu folosiți produse care conțin alcool sau parfum pentru a vă curăța pielea, deoarece pot provoca iritații. Nu frecăți pielea prea tare, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea pielii. Uscați foarte bine pielea pentru a vă asigura că punga dvs. aderă bine. Opțional: dacă pielea este iritată și dureroasă, puteți folosi cremă de protecție pentru piele sau praf hidrocolid. Aplicați pudra, crema de protecție pentru piele ștergeți ușor pielea din jur.

Închideți valva de la baza pungii

Mai întâi asigurați-vă că valva este foarte bine închisă, apăsându-o ferm.

Conectarea pungii la un sac colector de urina

Punga are un valva universală. Acesta valva poate fi conectată la aproape orice tip și marcă de sac de noapte. Deschideți valva pungii și conectați-o la conectorul sacului de noapte și asigurați-vă că sunt bine conectate.

Fereastra de acces

Pentru a deschide: Deschideți fereastra de acces folosind deschizătoarea furnizată și trageți pentru a deschide. Țineți punga ferm cu cealaltă mână în timp ce faceți acest lucru. Asigurați-vă că punga este golită înainte de a deschide fereastra de acces. Dacă acest lucru nu este posibil, țineți punga cu grijă pentru a vă asigura că nu vor exista scăpări pe parcursul procesului de deschidere. Pentru a închide: Închideți cu grijă fereastra de acces apăsând în jurul secțiunii de închidere pentru a vă asigura că este închisă etanș. Întotdeauna verificați dacă fereastra de acces este închisă adecvat.

Potrivăți-vă punga

Scoateți hârtia protecoate de pe flanșă. Îndoți flanșa pe jumătate și așezați deschizătura în partea inferioară a stomei. Întindeți pielea abdomenului cu mâna și trageți întreaga flanșă peste stoma, în poziția corectă, astfel încât hidrocoloidul să se atașeze de piele. Așezați mâna peste flanșă și asigurați-vă că se creează o etanșare bună.

Golirea pungii

Ridicați partea inferioară a pungii și deschideți valva. Goliți conținutul pungii în toaletă. Închideți valva din si asigurați-vă că este bine închisă.

Sigilarea valvei și a evacuării

Dacă valva nu este necesară, aceasta poate fi sigilată și se poate folosi în schimb închiderea de tip „velcro”.

Goliți punga folosind închiderea de tip „velcro”

Ridicați partea inferioară a pungii și deschideți punga. Goliți conținutul pungii în toaletă.

Sigilati evacuare

În primul rând, asigurați-vă că „velcro” (ariciul) sau clema sunt închise. Pentru clemă: Așezați clema în josul pungii. Îndoți capătul o dată peste clemă și asigurați-vă că acesta este neted. Când este în poziția corectă, apăsați ferm clema. Clemele sunt refozabile. Pentru benzi de sârmă metalică: Scoateți folia de eliberare de pe banda metalică. Lipiți banda de sârmă de metal pe capătul pungii. Rotiți capătul pungii. Îndoți sârma metalică pe ambele părți, astfel încât capătul pungii să rămână rulat. Pentru închiderea Velcro (ariciului): Rotiți capătul pungii până când cele două piese de tip „velcro” (arici) se ating între ele. Apăsați ferm piesele de tip „velcro” unul pe celălalt. Pentru închiderea cu scai cu barete de pliere: Rulați spatulele saculețului până când scaiul este la aceeași înălțime cu baretele de pliere. Apăsați bine elementul cu scai de pe baretele de pliere pe punctul cu scai al închiderii.

Aruncarea pungii

Îndepărtați punga și aruncați-o în coșul de gunoi. Nu aruncați punga folosită în toaletă, deoarece acest lucru vă va bloca sistemul de canalizare.

Frecvența de schimbare a pungii

Schimbați/goliți punga conform indicațiilor specialistului în sănătate.

SE - Bruksanvisning

Avsedd användning, produktbeskrivning och materialinformation

Stomipåsar används för att samla upp avfall från kroppen och är vanligtvis fästa vid huden över en kirurgiskt framställd stomi. Zensiv stomiprodukter är en serie stomipåsar med 1-dels och 2-dels och plattor i olika sorter/varianter, storlekar och former. Alla 1-dels påsar och 2-dels plattor har en hudvänlig hydrokolloidplatta för vidhäftning till kroppen och detta skyddas före användning med en uppklipningsbar skyddsfilm. Stomipåsen är tillverkad av luktbarriärfilm med ett bekvämt non-woven lager och ett kolfilter för luktkontroll (för ileostomi och kolostomi). Ileostomipåsar har antingen ett upprullningsbart lås som är säkrat med ett integrerat ”kardborrband” eller så finns klämmor och mjuka band i varje låda. För urostomi har påsarna en mjuk polymerkran för enkel dränering. Alla påsar har ett visningsfönster för inspektion av stomin vid behov. Vissa påsar har en luftningslucka för att ventileras påsen vid behov. Alla Zensiv stomiprodukter är latexfria och innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung. Produkterna är icke-sterila och kan användas under alla lämpliga omständigheter där den behandlande läkaren eller vårdpersonalen beslutar att en icke-steril produkt kan användas.

Varningar-försiktighetsåtgärder

- Varje påse är endast avsedd för engångsbruk. Återanvänd inte. Återanvändning kan leda till korskontaminering. - Använd endast enligt anvisningar från din sjukvårdspersonal. - Läs instruktionerna före användning. - Avbryt användningen och kontakta din sjukvårdspersonal om du upplever allergiska reaktioner eller problem när du använder påsarna.

Kontraindikationer

Dessa enheter bör inte användas av någon med känd känslighet för: polyeten, polyamid, medicinsk kol, syntetisk polymer, etenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylen, karboximetilcellulosa, pektin eller glycerol, akrylgel, spandex.

Förvaringsförhållanden

Det är bäst att förvara dina produkter på en sval, torr plats med en rekommenderad temperatur från 0°C till 27°C, som anges på produktetiketten.

Allvarliga incidenter

Om en allvarlig händelse skulle uppstå till följd av att du använder produkten, vänligen rapportera detta omedelbart till leverantören och den behöriga myndigheten i det land där du bor.

Hållbarhetstid

Använd före utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Förbered dina produkter

Se till att alla nödvändiga produkter är färdiga för användning. Förbered en mätguide, en sax, en penna, vata och torra gasbindor och en stomipåse.

Välj rätt storlek

Mät din stomi med en mätguide och klipp (om nödvändigt) plattan till stomistorleken. Se till att du väljer rätt storlek så att stomin och omgivande hud förblir friska. Tillåt 2 mm utrymme mellan din stomi och platta för en säker och korrekt passform. Om storleken är för stor, kommer din avföring att skada huden. Om storleken är för liten skadar plattan stomin. Med tiden kan din stomi ändra form eller storlek, så periodvis kan mätningar krävas igen för att förhindra läckage.

Förbered din hud

Stöd huden och ta bort plattan försiktigt, riv inte av den utan skjut tillbaka huden från plattan, använd vid behov en våt gasbinda. Tvätta huden som omger stomin med varmt och oparfymrat vatten. Använd inte något som innehåller alkohol, parfym eller eter för att rengöra huden eftersom det kan orsaka skador. Gnid inte huden för hårt eftersom det kan leda till hudskador. Torka huden försiktigt och noggrant så att din påse fäster bra. Valfritt: Om din hud är irriterad och om du kan använda hudbarriärkräm, hydrokolloidpulver eller hudbarriärservetter. Applicera pulver, hudbarriärkräm eller torka försiktigt på den omgivande huden.

Stäng utloppet vid botten av påsen

Se först till att utloppet är stängt på ett säkert sätt. Stäng utloppet genom att trycka ordentligt påappen.

Anslut din stomipåse till en nattpåse

Påsen har en universalkran. Denna kran kan anslutas till nästan alla typer och märken av nattpåsar. Öppna kranen på påsen och anslut den till nattpåsen och se till att anslutningen är säker.

Åtkomst fönster

Öppna: Öppna fönstret genom att dra i fliken. Håll stadigt i påsen med andra handen medan du drar. Se till att påsen töms innan du öppnar fönstret. Om så inte är möjligt, håll varsamt i påsen så att spill eller läckage undviks vid öppnandet. Stänga: Stäng fönstret genom att trycka till det och klämma till runt hela öppningen för att garantera att det är helt stängt. Kontrollera alltid att fönstret är ordentligt stängt.

Montera din påse

Ta bort plattans skyddsfilm. Vik plattan halvvägs och placera öppningen på stomins undersida. Sträck huden på buken med en platt hand och dra hela plattan över magen till rätt läge. Arbeta dig runt stomin så att hydrokolloiden fäster vid huden och se till att plattan är säkrad. Lägg handen över plattan och se till att en god tätning skapas.

Töm din påse

Lyft upp kranen och öppna kranen. Töm innehållet från din påse i toaletten. Stäng kranen igen och se till att den är ordentligt stängd.

Stänga kran och utlopp

Om kranen inte behövs kan den klippas av och "kardborrestängningen" kan användas istället.

Töm påsen genom att öppna "kardborrestängningen"

Lyft upp öppningen på påsen och öppna påsen. Töm innehållet från din påse i toaletten.

Stäng öppningen

Kontrollera först att klämman eller den "kardborrelåset" är stängt på ett säkert sätt. För klämman: Placera klämman vid påsen. Vik änden längst ner en gång över klämman och se till att öppningen är slät för att säkerställa att öppningen är i rätt läge och tryck fast klämman. Klämman kan återanvändas. För metalltrådremsor: Ta bort skyddsfilmen från metalltrådremsan. Sätt fast metalltrådremsan på påsen. Rulla upp påsen. Vik metalltråden på båda sidor så att påsens öppning förblir rullad. För kardborrestängning: Rulla upp öppningen på påsen tills de båda kardborrestyckena möter varandra. Tryck fast "kardborrebanden" mot varandra ordentligt. För kardborrestängning med vikbara flikar: Rulla upp påsens bakre del tills kardborrebandet är i samma höjd som de vikbara flikarna. Tryck fast kardborrebandet på vikkflikarna ordentligt på kardborrebandet på förslutningen.

Avfallshantering av din påse

Ta bort påsen och kassera den i papperskorgen. Spola inte ner din använda påse i toaletten, eftersom det kan orsaka stopp i ditt avloppssystem.

Frekvens för byte av påse

Byt/töm påsen enligt råd från din sjukvårdspersonal.

SI - Navodila za uporabo

Predvidena uporaba, opis izdelka in bistvene informacije

Vrečke za stomo omogočajo zbiranje izločkov iz telesa. Običajno se pritrdijo na kožo čez kirurško oblikovano stomo. Vrečke za stomo Zensiv so linija enodelnih in dvodelnih zbiralnih vrečk za stomo in dvodelnih prirobnic različnih velikosti in oblik. Vse enodelne vrečke in dvodelne prirobnice imajo koži prijazno hidrokoloidno podlogo, ki se prilepi na telo, in so pred uporabo zaščitene z zaščitno folijo, na kateri je označen vzorec za izrez. Vrečke so izdelane iz materiala, ki preprečuje širjenje neprijetnih vonjav, z netkanim slojem, ki zagotavlja udobje, in ogljikovim filtrom za obvladovanje neprijetnih vonjav (pri ileostomi in kolostomi). Vrečke za ileostomo imajo odtočno odprtino, ki se zvije in zavaruje z velcro trakom, ali pa je izdelek opremljen s sponkami ali podobnimi pritrdilnimi pripomočki. Vrečke za urostomo imajo odtočno odprtino iz mehkih polimerov, ki omogoča enostavno izpraznjevanje seča. Vse vrečke so opremljene s pregledovalnim okencem, ki omogoča preverjanje stome, če je to potrebno. Nekateri izdelki imajo tudi ventil s pokrovom, ki omogoča zračenje stome, če je to potrebno. Vsi izdelki za oskrbo stome Zensiv so brez lateksa in ne vsebujejo sestavin živalskega izvora. Izdelki so nesterilni in se lahko uporabljajo v vseh ustreznih okoliščinah, ko zdravnik ali medicinski strokovnjak odloči, da je uporaba nesterilnih izdelkov primerna.

Opozorila/Previdnostni ukrepi

- Vsaka vrečka je namenjena le za enkratno uporabo. Vrečk ne uporabljajte ponovno. Ponovna uporaba lahko vodi do navzkrižne kontaminacije. - Izdelek uporabljajte v skladu z navodili zdravnika. - Pred uporabo preberite navodila. - Če imate zaradi uporabe vrečk alergij sko reakcijo ali druge težave, vrečko prenehajte uporabljati in se obrnite na svojega zdravnika.

Kontraindikacije

Teh pripomočkov ne smejo uporabljati ljudje, ki so občutljivi na: polietilen, poliamid, medicinsko oglje, sintetične polimere, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, polizobutilen, karboksimetilcelulozo, pektin ali glicerol, akrilni gel, elastan.

Pogoji shranjevanja

Izdelke hranite na hladnem suhem mestu pri temperaturi med 0°C in 27°C, kot zapisano na oznaki izdelka.

Resni zapleti

V primeru, da pride zaradi uporabe tega izdelka do resnih zapletov, to nemudoma javite proizvajalcu in pristojnemu organu države, v kateri prebivate.

Rok trajanja

Rok trajanja je naveden na izdelku.

Pripravite vse potrebne pripomočke

Prepričajte se, da so vsi potrebni pripomočki pripravljeni za uporabo. Potrebujete merilni pripomoček, škarje, pisalo, mokro in suho gazo in vrečko za stomo.

Izberite pravo velikost

Z merilnim pripomočkom izmerite svojo stomo in (po potrebi) odrežite prirobnico, da bo njena velikost ustrezala velikosti vaše stome. Izberite pravo velikost, da bo vaša stoma in koža okoli nje ostala zdrava. Poskrbite za 2 mm razmika med vašo stomo in prirobnico, da zagotovite varno in pravilno namestitve. Če je prirobnica prevelika, bo blato poškodovalo vašo kožo. Če je prirobnica premajhna, bo poškodovala stomo. S časom se lahko oblika ali velikost vaše stome spreminja, tako da morate stomo redno meriti, da preprečite neželene iztekanje.

Pripravite svojo kožo

Podprite kožo in previdno odstranite prirobnico, ne odtrgajte je, temveč počasi potiskajte kožo stran od prirobnice, po potrebi uporabite mokro gazo. Kožo okoli stome umijte s toplo in čisto vodo. Za čiščenje kože ne uporabljajte ničesar, kar vsebuje alkohol, parfum ali eter, saj lahko s tem poškodujete stomo. Kože ne drgnite premočno, saj lahko to vodi do poškodb kože. Previdno in temeljito posušite kožo, da se bo vrečka dobro prilepila. Poljubno: Če je vaša koža razdražena in boleča, lahko uporabite kremo za zaščito kože, hidrokoloidni gel ali vlažilne robčke. Previdno nanesite kremo ali gel na razdraženo kožo.

Zaprite odvodni čep na dnu vrečke

Prepričajte se, da je čep dobro zaprt. Čep zaprete tako, da ga tesno stisnete.

Povežite vašo vrečko za stomo z nočno zbiralno vrečko

Vrečka ima univerzalen čep. Ta čep lahko povežete s skoraj vsemi vrstami nočnih zbiralnih vrečk raznih proizvajalcev. Odprite čep vrečke in ga povežite s priključkom nočne zbiralne vrečke ter se prepričajte, da stik ne pušča.



Okno za dostop

Odpiranie: Odprite okno za dostop s priloženim jezičkom in potegnite. Medtem vrečko mirno držite z drugo roko. Preden odprete okno za dostop, se pripravajte, da je vrečka izpraznjená. Če to ni mogoče, previdno držite vrečko, da se med postopkom odpiranja ne izlije noben rezultat. Zapiranje: Previdno zaprite tako, da zaprete okno za dostop in pritisnete do konca, da zagotovite popolno zapiranje. Vedno preverite, ali je okno za dostop pravilno zaprto.

Namestite vrečko

Odstranite zaščitni papir prirobnice. Prirobnico prepognite na pol in odprtino namestite na spodnjo stran stome. Raztegnite kožo na vašem trebuhu in celo prirobnico ustrezno namestite čez stomo. Prirobnico počasi nameščajte okoli stome, tako da se hidrokoloid prime na kožo. Pripravajte se, da se prirobnica tesno prilega. Položite roko nad prirobnico in se pripravajte, da dobro tesni.

Izpraznite vrečko

Dvignite čep in ga odprite. Vsebinske vrečke izpraznite v straniščno školjko. Ponovno zaprite čep in preverite, da dobro tesni.

Zapiranje pipe in odvoda

Če pipa ni potrebna, lahko to prekinemo in namesto nje uporabimo zapiranje tipa traku "velcro".

Izpraznite vrečko z uporabo zapiranja tipa traku "velcro"

Dvignite spodnji del vrečke in jo odprite. Vsebinske vrečke izpraznite v straniščno školjko.

Zaprite odtok

Pripravajte se, da je odtok tesno zaprt s sponko ali velcro trakom. V primeru sponke: Sponko namestite na dno vrečke. Dno vrečke enkrat prepognite in se pripravajte, da je površina gladka ter da bo sponka dobro zatesnila vrečko, nato tesno stisnite sponko. Sponko lahko ponovno uporabite. V primeru kovinskega traka: Snemite zaščitno folijo s kovinskega traka. Kovinski trak namestite na dno vrečke. Zvijte spodnji del vrečke. S kovinskim trakom objemite vrečko, da bo njen spodnji del ostal zvit. V primeru velcro traka: Zvijte dno vrečke, dokler se površina z velcro nalepkami ne stikata. Stisnite velcro površini tesno skupaj. Za zapiranje na ježka s preklopnimi zavihki: Zavijte zadnji del torbice, dokler ježek ni na isti višini kot preklonni zavihki. Ježka na preklonih zavihkih čvrsto pritisnite na ježka zapirala.

Odstranjevanje vrečk

Snemite vrečko in jo ustrezno odstranite v smeti. Uporabljene vrečke ne mečite v stranišče, saj boste tako zamašili kanalizacijski sistem.

Kako pogosto menjati vrečke

Vrečke praznite/menjajte v skladu z navodili vašega zdravnika.

SK - Instrukcie na používanie

Určené použítie, popis produktu a informácie o materiáli

Stomické vrecká sa používajú na zachytávanie obsahu čreva a zvyčajne sa priložia na pokožku cez chirurgicky vytvorenú stómiu. Produkty Zensiv Ostomy sú radom jednodielnych a dvojdielnych stomických vreciek a dvojdielnych podložiek v rôznych veľkostiach a tvaroch. Všetky jednodielne vrecká a dvojdielne podložky obsahujú hydrokoloidnú vrstvu šetrnú k pokožke na prilnutie k telu, ktorá je pred použitím chránená ochrannou fóliou s ystrihovacou šablónou. Vrecko je vyrobené z ochranného filmu proti zápachu s príjemnou netkanou vrstvou a uhlíkovým filtrom na kontrolu zápachu (na ileostómii a kolostómii). Ileostomické vrecká majú buď rolovací výpusť zabezpečený zavedeným uzáverom zo suchého zipsu alebo sa v každom balení dodávajú svorky a mäkké pásiky. Urostomické vrecká majú výpusť z mäkkého polyméru na jednoduché vypúšťanie. Všetky vrecká majú priehľadnú časť na kontrolovanie stómie v prípade potreby. Niektoré rady produktov obsahujú ventil s krytom na vetranie vrecka, ak je to potrebné. Produkty Zensiv Ostomy neobsahujú latex ani zložky živočíšneho pôvodu. Produkty sú nesterilné a môžu sa použiť za akýchkoľvek vhodných okolností, keď ošetrojúci lekár alebo zdravotnícky pracovník rozhodne, že sa môže použiť nesterilný produkt.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Každé vrecko je určené len na jednorazové použitie. Nepoužívajte ho opakovane. Opakované použitie môže viesť ku križovej kontaminácii. - Používajte len podľa pokynov vášho zdravotníckeho pracovníka. - Pred použitím si prečítajte návod. - Ak sa pri používaní vreciek vyskytnú alergické reakcie alebo problémy, prestaňte vrecká používať a kontaktujte svojho lekára.

Kontraindikácie

Tieto pomôcky by nemali používať osoby so známou citlivosťou na: polyetylén, polyamid, lekárske uhlie, syntetický polymér, etylénvinylacetát, polypropylén, polyester, polyizobutylén, karboxymetylcelulóza, pektín alebo glycerín, akrylový gél, spandex.

Podmienky skladovania

Produkty je najlepšie skladovať na chladnom suchom mieste s regulovaním teploty od 0°C do 27°C, ako je uvedené na obale produktu.

Závažné nežiaduce udalosti

Ak v dôsledku používania nastane závažná nežiaduca udalosť, ihneď to ohláste výrobcovi a príslušnému orgánu v krajine vášho bydliska.

Doba použiteľnosti

Používajte do dátumu expirácie uvedeného na obale.

Pripravte si pomôcky

Uistite sa, že máte pripravené všetky potrebné pomôcky. Pripravte si meraciu šablónu, nožnice, pero, vlhkú a suchú gázu a stomické vrecko.

Vyberte si správnu veľkosť

Zmerajte si stómiu pomocou šablóny a (v prípade potreby) vystrihnite podložku na správnu veľkosť stómie. Uistite sa, že ste zvolili správnu veľkosť, aby zostala stómia aj okolitá pokožka zdravá. Medzi stómiou a podložkou nechajte najviac 2 mm na bezpečné a správne používanie. Ak bude podložka príliš veľká, výkaly poškodia pokožku. Ak bude podložka príliš malá, poškodí podložka stómiu. Stómia môže v priebehu času meniť veľkosť a tvar, preto môžu byť potrebné pravidelné merania, aby sa zabránilo úniku.

Pripravte pokožku

Pridržte pokožku a opatrne odstráňte podložku, nestrhnite ju, ale ťahajte pokožku od podložky, v prípade potreby použite vlhkú gázu. Pokožku okolo stómie umyte teplou vodou bez parfumov. Na umývanie pokožky nepoužívajte žiadne prípravky s obsahom alkoholu, parfumu alebo éteru, pretože môžu pokožku podráždiť. Nešúchajte pokožku príliš silno, aby ste ju nepoškodili. Opatrne a dôkladne osušte pokožku, aby vrecko dobre prilnulo k pokožke. Voliteľné: Ak máte podráždenú alebo bolestivú pokožku, môžete použiť bariérový krém, hydrokoloidný prášok alebo ochranné rúško. Jemne aplikujte prášok, bariérový krém alebo ochranné rúško na okolie pokožky.

Uzatvorte výpusť na vrecku

Najskôr sa uistite, že výpusť je bezpečne uzatvorený. Výpusť zatvorte silným stlačením výpustu.

Pripojenie vrecka k nočnému zbernému vrecku

Vrecko má univerzálny výpusť. Tento výpusť je možné pripojiť takmer ku všetkým typom a značkám nočného zberného vrecka. Otvorte výpusť na vrecku, pripojte ho k otvoru na nočnom vrecku a uistite sa, že spoj je zabezpečený.

Vstupný otvor

Otvorenie: Otvorte vstupný otvor pomocou uška a potiahnutím ho otvorte. Druhou rukou pritom držte pevne vrecko. Pred otvorením vstupného otvoru sa uistite, že je vrecko vyprázdnené. Ak to nie je možné, držte vrecko opatrne tak, aby sa počas otvárania nevyliat obsah von. Zatvorenie: Opatrne zatvorte vstupný otvor zacvaknutím a zatlačte pozdĺž celej uzatváracej časti, aby ste zabezpečili úplné zatvorenie. Vždy skontrolujte, či je vstupný otvor riadne zatvorený.

Pripevnite vrecko

Odstráňte ochrannú fóliu z podložky. Preložte podložku na polovicu a priložte otvor k spodnej časti stómie. Dlaňou natiahnite pokožku na bruchu a priložte celú podložku na stómiu do správnej polohy. Prítlačte okolie stómie, aby hydrokoloid prilnul k pokožke, a uistite sa, že podložka je zabezpečená. Položte na podložku ruku a uistite sa, že sa vytvorilo dobré spojenie.

Vyprázdňte vrecko

Zdvihnite výpusť a otvorte uzáver. Vyprázdňte obsah vrecka do toalety. Znova uzatvorte výpusť a uistite sa, že je bezpečne uzatvorený.

Kohútikový uzáver a uzáver výstupu

Ak kohútik nie je potrebný, možno ho odrezat' a namiesto neho použiť uzáver na ,suchý zips'.



Vyprázdnite vrecko použitím uzáveru typu „suchý zips“.

Vytiahnite spodnú časť vrecka a otvorte ho. Vyprázdnite obsah vrecka do toalety.

Uzatvorte výpust

Najskôr sa uistite, že je svorka alebo uzáver zo suchého zipsu bezpečne uzatvorený. V prípade svorky: Umiestnite svorku na spodný okraj vrecka. Preložte koniec spodného okraja cez svorku a uistite sa, že ochranný film okraja je hladký, aby bol výpust na správnom mieste, a silno stlačte svorku. Svorky je možné použiť opakovane. V prípade drôtených pásov: Odstráňte ochrannú fóliu z drôteného pásika. Priložte drôtený pásik na spodný okraj vrecka. Zrolujte okraj vrecka. Drôtený pásik preložte na oboch stranách, aby zostal okraj vrecka zrolovaný. V prípade uzáveru zo suchého zipsu: Zrolujte okraj vrecka, až kým sa dve časti suchého zipsu nedotýkajú. Silno zatlačte dve časti suchého zipsu k sebe. Pre zapínanie na suchý zips so skladacími záložkami: Zrolujte zadnú časť vrecka, kým sa suchý zips nedostane do rovnej výšky ako skladacie záložky. Suchý zips na skladacích záložkách pevne pritlačte na suchý zips zapínania.

Likvidácia vrecka

Odstráňte vrecko a zahodte ho do koša. Nesplachujte vrecko do toalety, pretože upcháva vašu kanalizáciu.

Frekvencia vymieňania vrecka

Vymieňajte/vyprázdňujte vrecko podľa pokynov zdravotníckeho pracovníka.

TR - Kullanım talimatları

Kullanım Amacı, Ürün Açıklaması ve Malzeme Bilgileri

Ostomi torbaları vücudun atıklarının toplanması için kullanılır ve genellikle cerrahi olarak yapılmış bir stoma üzerinden cilde tutturulur. Zensiv Ostomy ürünleri, çeşitli boyut ve şekillerde 1 parçalı ve 2 parçalı ostomi poşetlerinden ve 2 parçalı flanşlara (NOT: Flanşdan emin değilim, ürünün fotoğrafını bulmaya çalıştım ama olmadı. Kapak, bağlantı, bağ vs. daha doğru olabilir) değişmektedir. Tüm 1 parçalı poşetler ve 2 parçalı flanşlar, vücuda yapışması için cilt dostu bir hidrokoloid tabakaya sahiptir ve bu, kullanımdan önce kesme kılavuzunu gösteren bir ayırma filmi ile korunur. Ürünün poşeti, kokuların kontrol edilmesi amacıyla rahat dokuma olmayan bir katmanlı ve (ileostomi ve kolostomi için) bir karbon filtreli kokuyu engelleyen ince bir tabakadan üretilmiştir. Ileostomi torbalarının ya entegre bir 'cırt cırtlı' tip kapakla sabitlenmiş bir rulo drenaj portu vardır ya da her kutuda temin edilen kelepçeler ve yumuşak bağlar bulunur. Ürostomide, keseler, kolay drenaj için yumuşak bir polimer musluk taşır. Tüm torbalarda gerektiğinde stomayı incelemek için bir görüntüleme penceresi vardır. Bazı serilerde gerektiğinde poşetin havalandırılması için kapaklı bir havalandırma vardır. Tüm Zensiv Ostomy ürünleri lateks içermez ve hayvansal kökenli bileşenler içermez. Ürünler steril değildir ve ilgili doktorun veya sağlık uzmanının steril olmayan bir ürünün uygulanabileceğine karar verdiği her türlü uygun durumda kullanılabilir.

Uyarılar - Önlemler

- Her kese yalnızca tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayın. Yeniden kullanım çapraz bulaşmaya yol açabilir. - Yalnızca sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde kullanın. - Kullanmadan önce talimatları okuyun. - Torbaları kullanırken herhangi bir alerjik reaksiyon veya sorunla karşılaşırsanız, kullanmayı bırakın ve sağlık uzmanınıza başvurun.

Kontrendikasyonlar

Bu cihazlar, polietilen, poliamid, tıbbi kömür, sentetik polimer, etilen vinil asetat, polipropilen, polyester, polizobütülen, karboksimetilselüloz, pektin veya gliserine duyarlılığı olduğu bilinen kişiler tarafından kullanılmamalıdır, akrilik jel, spandex.

Saklama koşulları

Ürünlerinizi serin ve kuru bir yerde, ürün etiketinde belirtildiği gibi 0°C ile 27°C sıcaklık aralığıyla saklamanız en doğrusudur.

Saklama koşulları

Ürünün kullanılması sonucunda ciddi bir olay meydana gelirse, lütfen bunu derhal üreticiye ve ikamet ettiğiniz ülkedeki Yetkili Otoriteye bildirin.

Raf ömrü

Etiketle belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanın.

Malzemelerinizi toplayın

Gerekli tüm malzemelerin kullanıma hazır olduğundan emin olun. Bir ölçüm kılavuzu, makas, kalem, ıslak ve kuru gazlı bez ve stoma kesesini bir araya getirin.

Doğru boyutu seçin

Stomanızı bir ölçüm kılavuzuyla ölçün ve (gerekirse) kulağı stomanın doğru boyutuna göre kesin. Stomanın ve çevresindeki cildin sağlıklı kalması için doğru boyutu seçtiğinizden emin olun. Güvenli ve doğru bir uyum için stomanızla kulak arasında maksimum 2 mm boşluk bırakın. Boyutu çok büyükse dışkıınız cilde zarar verecektir. Boyut çok küçükse flanş stomaya zarar verecektir. Zamanla stomanızın şekli veya boyutu değişebilir, bu nedenle herhangi bir sızıntıyı önlemek için periyodik ölçümlerin tekrar yapılması gerekebilir.

Cildinizi hazırlayın

Cildi destekleyin ve kulağı dikkatlice çıkarın, yırtmayın, deriyi kulaktan geriye doğru itin, gerekirse ıslak gazlı bez kullanın. Stomanızı çevreleyen cildi ılık ve parfümsüz suyla yıkayın. Cildinizi temizlemek için alkol, parfüm veya eter içeren herhangi bir şey kullanmayın çünkü bu zarar verebilir. Cildi çok sert ovalamayın çünkü bu ciltte hasara yol açabilir. Kesenizin iyice yapıştığından emin olmak için cildi dikkatli ve iyice kurulayın. İsteğe bağlı: Cildiniz tahriş olmuş ve ağrıyorsa cilt bariyer kremi, hidrokoloid toz veya cilt bariyeri mendillerini kullanabilirsiniz. Tozu, cilt bariyeri kremi uygulayın veya çevredeki cilde nazikçe silin.

Torbanın tabanındaki musluğu kapatın

Öncelikle musluğun güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun. Musluğa kuvvetlice basarak musluğu kapatın.

Torbanızı gece çantasına bağlama

Kesenin evrensel bir musluğu vardır. Bu musluk hemen hemen her tür ve markadaki gece çantasına bağlanabilir. Torbanın musluğunu açın ve bunu gece çantasının konektörüne bağlayın ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.

Erişim penceresi

Açmak için: Sağlanan kanadı kullanarak erişim penceresini açın ve çekerek açın. Bunu yaparken diğer elinizle keseyi sabit tutun. Erişim penceresini açmadan önce poşetin boşaltıldığından emin olun. Bu mümkün değilse, açma işlemi sırasında hiçbir çıktının dökülmemesini sağlamak için poşeti dikkatli tutun. Kapatmak için: Erişim penceresini kapatarak ve tam kapanmayı sağlamak için kapatma bölümünün tamamına basarak dikkatlice kapatın. Her zaman erişim penceresinin düzgün şekilde kapatıldığını kontrol edin.

Torbanızı takın

Flanşın yapışkanlı kağıdını çıkarın. Flanşı yarıya kadar katlayın ve açıklığı stomanın alt tarafına yerleştirin. Düz bir elinizle karnınızın derisini gerin ve tüm flanşı stomanın üzerinden doğru konuma çekin. Hidrokoloidin cilde yapışması için stomanın etrafından dolaşın ve flanşın sağlam olduğundan emin olun. Elinizi flanşın üzerine koyun ve iyi bir sızdırmazlık sağlandığından emin olun.

Torbanızı boşaltın

Musluğu kaldırın ve musluğu açın. Kesenizin içindekileri tualete boşaltın. Güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olarak musluğu tekrar kapatın.

Musluk ve çıkışı kapatma

Musluk gerekmiyorsa bu kesilebilir ve bunun yerine 'cırt cırtlı' tip kapatma kullanılabilir.

'Cırt cırt tipi kapatmayı kullanarak kesenizi boşaltın

Torbanın kuyruğunu kaldırın ve torbayı açın. Kesenizin içindekileri tualete boşaltın.

Çıkışı kapat

Öncelikle kelepçenin veya 'cırt cırtlı' tipi kapağın güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun. Kelepçe için: Kelepçeyi poşetin kuyruğuna yerleştirin. Kuyruğun ucunu kelepçenin üzerine bir kez katlayın ve çıkış kuyruğunun doğru konumda olduğundan emin olmak için kuyruk filminin pürüzsüz olduğundan emin olun ve kelepçeye sıkıca bastırın. Kelepçeler tekrar kullanılabilir. Metal tel şeritler için: Metal tel şeritten ayırma filmini alın. Metal tel şeridi poşetin kuyruğuna yapıştırın. Torbanın kuyruğunu kıvrın. Torbanın kuyruğunun kıvrılmış kalması için metal teli her iki taraftan katlayın. Cırt cırtlı kapatmak için: İki 'cırt cırt' tipi parça birbirine değene kadar torbanın kuyruğunu sarın. Cırt cırtlı parçaları birbirine sıkıca bastırın. Katlanır tırnaklı Cırt Cırtlı kapatma için: Torbanın kuyruğunu cırt cırtlı katlama tırnaklarıyla aynı yüksekliğe gelene kadar yukarı sarın. Katlama tırnaklarındaki cırt cırtlı kapağın cırt cırtlılarına sıkıca bastırın.

Torbanızın imha edilmesi

Torbanızı çıkarın ve çöpe atın. Kullanılmış kesenizi tualete atmayın çünkü bu, kanalizasyon sisteminizi tıkayacaktır.

Torbanızı sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde değiştirin/boşaltın.

Показання, опис продукту, інформація про склад

Попередження - Застереження

- Кожний калоприймач – одноразового використання. Не використовуйте виріб повторно. Повторне використання може призвести до перехресного забруднення. - Використовуйте у спосіб, призначений лікарем. - Прочитайте інструкцію перед використанням. - Не використовуйте виріб та проконсультуйтеся з лікарем у разі виникнення алергічних реакцій або інших проблем під час використання.

Протипоказання

Дані вироби не повинні застосовувати люди, у яких була виявлена чутливість до: поліетилену, поліамідів, медичного деревного вугілля, синтетичного полімеру, етиленвінілацетату, поліпропілену, поліестеру, поліізобутилену, карбоксиметилцелюлози, пектину або гліцерину, акрилового гелю, спандексу.

Умови зберігання

Найкращі умови для зберігання продукції – прохолодне сухе місце з температурою від 0°C до 27°C, як це зазначено на продуктивній етикетці.

Серйозні випадки

У разі серйозного випадку, пов'язаного з використанням продукції, просимо вас негайно повідомити виробника та компетентні органи вашої країни.

Термін придатності

Кінцева дата (Вжити до) терміну придатності вказана на етикетці продукту.

Приготуйте все необхідне

Переконайтесь, що всі необхідні засоби готові до використання. Приготуйте шаблон для вирізання отвору, ножиці, олівець, вологі та сухі серветки і калоприймач.

Визначте правильний розмір

Виміряйте вашу стоми за допомогою шаблону та виріжте (якщо це необхідно) отвір, що відповідає розміру стоми. Переконайтеся, що ви зробили отвір, який відповідає розміру стоми, і шкіра біля стоми буде захищена. Різниця в розмірі отворів стоми та отвору пластини не більше 2 мм є відповідною та безпечною. Якщо отвір буде більшим, кишкові виділення можуть пошкодити шкіру. Якщо отвір буде меншим за розмір стоми, є вірогідність травмування стоми пластиною калоприймача. 3 часом ваша стома може змінити форму та розмір, періодичне вимірювання необхідне для попередження підтікання кишкових виділень під пластину калоприймача.

Підготуйте вашу шкіру

Притримуючи шкіру, відклейте обережно пластину. Відклеюйте шкіру від пластини, а не відривайте пластину від шкіри. Використовуйте вологі серветки за потреби. Очистіть шкіру навколо стому теплою чистою водою. Не використовуйте для очищення шкіри нічого, що містить спирт, парфуми чи ефір, оскільки це може завдати шкоди шкірі. Не трійте шкіру занадто сильно, оскільки це може спричинити пошкодження шкіри. Просушіть обережно та ретельно шкіру, щоб забезпечити хорошу адгезію (приклеювання) калоприймача зі шкірою. Додаткова інформація: якщо ваша шкіра подразнена або має ознаки запалення, ви можете використовувати захисний крем-бар'єр, гідроколоїдний абсорбуючий порошок (пудру) або захисні серветки. Нанесіть абсорбуючий порошок чи захисний крем-бар'єр, або легко протріть захисними серветками шкіру навколо стому.

Закрийте дренажний кран для зливу сечі вниз у ростомного мішка

Переконайтеся, що кран закритий надійно. Для надійного закривання міцно натисніть на кран.

З'єднання уростомного мішка з нічним сечоприймачем

Уростомний мішок має універсальний дренажний кран. Цей тип дренажного крану може бути поєднаний майже з усіма типами нічних сечоприймачів. Відкритий дренажний кран і під'єднайте уростомний мішок до конектора нічного сечоприймача, переконайтесь, що уростомний мішок та нічний сечоприймач з'єднані надійно.

Вікно для доступу до стоми

Відкривання: відкривайте вікно для доступу до стоми за допомогою кришки вікна. Притримуйте калоприймач іншою рукою, коли ви знімаєте кришку вікна. Перед тим, як відкривати кришку, переконайтесь, що мішок випорожнений. Якщо немає можливості це зробити, утримуйте мішок таким чином, щоб уникнути витікання кишкового вмісту через вікно. **Закривання:** закрийте вікно, захиплюючи кришку, притискаючи її по всьому колу. Завжди перевіряйте, чи надійно закрита кришка вікна для доступу.

Підготуйте калоприймач

Видаліть захисну плівку з пластини калоприймача. Зігніть наполовину і розмістіть нижню частину навколо стоми. Розгладьте шкіру навколо стоми однією рукою зверху, приклейте верхню частину. Розгладьте ретельно пластину навколо стоми, щоб забезпечити адгезію (приклеювання) гідроколіюдоу пластини зі шкірою навколо стоми, переконайтесь, що пластина приклеєна надійно. Покладіть обидві руки на пластину та переконайтесь, що пластина приклеєна герметично.

Випорожнення мішка

Відкрийте дренуючий кран. Випорожніть вміст мішка в туалет. Закрийте дренуючий кран та переконайтесь, що він закритий надійно.

Дренуючий кран та гнучкий затискач

Якщо в дренажному крані немає необхідності, він може бути зрізаний, після чого може бути використаний затискач на липучках (велкро).

Випорожнення мішка з затискачем на липучках (велкро)

Візьміть кінець мішка і відкрийте його. Випорожніть вміст мішка в туалет.

Закрийте застібку

Переконайтесь, що затискач або затискач на липучці (велкро) закритий надійно. Для затискача: розмістіть затискач унизу мішка. Помістіть кінець мішка перед затискачем та протягніть його в затискач, переконайтесь, що кінець мішка надійно поміщений в затискач і натисніть на затискач. Затискач може бути використаний повторно. Для гнучкого затискача з металевими вставками: зніміть захисну стрічку з гнучкого затискача. Приклейте гнучкий затискач до низу мішка, прокрутіть декілька разів та загніть краї таким чином, щоб мішок залишався закритим. Для затискача на липучках (велкро): Закрутіть низ мішка таким чином, щоб липкі частини торкалися одна одної. Натисніть міцно на липкі частини. Для застібки-липучки з відкидними язичками: Підверніть кінець калоприймача так, щоб застібка-липучка опинилася на тій самій висоті, що й відкидні язички. Щільно притисніть липучку на відкидних язичках до застібки-липучки.

Утилізація калоприймачів

Відклейте ваш калоприймач та викиньте його до сміттового баку. Не викидайте використаний калоприймач до туалету (унітазу), бо це спричинить блокування каналізаційної системи.

Частота заміни калоприймача

Змінюйте/випорожняйте мішок відповідно до рекомендації вашого лікаря.



