

It's all  
about  
ostomy!











GB	Instructions for use	NL	Gebruiksaanwijzing	DE	Gebrauchsanweisung
AR	تعليمات الاستخدام	BA	Uputstvo za upotrebu	CZ	Návod k použití
DK	Brugsanvisning	ES	Instrucciones de uso	FI	Käyttöohje
FR	Mode d'emploi	GR	Οδηγίες χρήσης	HR	Upute za uporabu
ID	Petunjuk Penggunaan	LT	Naudojimo instrukcijos	LV	Lietošanas instrukcija
NO	Bruksanvisning	PL	Instrukcja użycia	PT	Instruções de uso
RO	Instructiuni de folosire	SE	Bruksanvisning	SI	Navodila za uporabo
SK	Inštrukcie na používanie	TR	Kullanım talimatları	UA	Інструкція із застосування

## REF

U2B4F	U2B5F	U2B6F	U2B7F
U2C4F	U2C5F	U2C6F	U2C7F
U2Z4F	U2Z5F	U2Z6F	U2Z7F



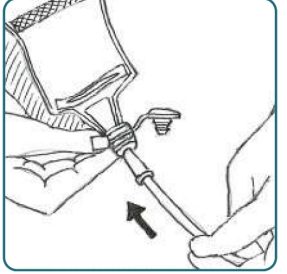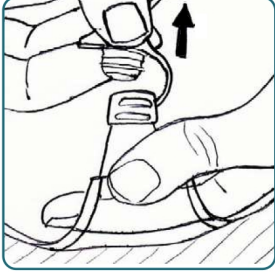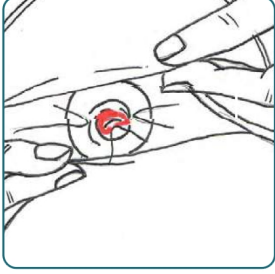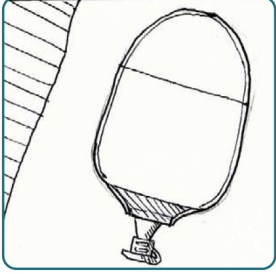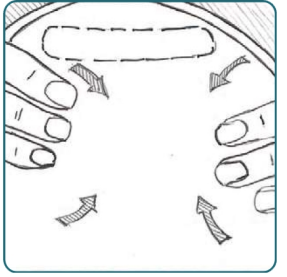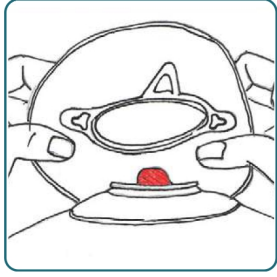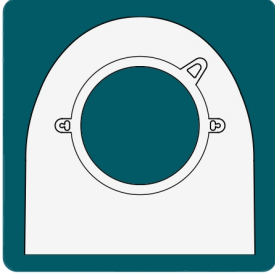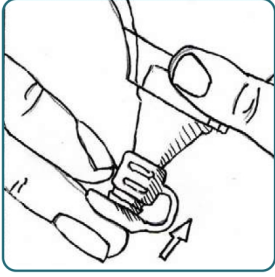

## GB - Instructions for use

### Intended Use, Product Description and Material Information

Ostomy pouches are used to collect waste from the body and are usually attached to the skin over a surgically made stoma. Zensiv Ostomy products are a range of 1-piece and 2-piece ostomy pouches and 2-piece flanges in various sizes and shapes. All 1-piece pouches and 2-piece flanges feature a skin friendly hydrocolloid wafer for adhesion to the body and this is protected before use with a release film that shows a cutting guide. The product pouch is manufactured from odour barrier film with a comfort non-woven layer and a carbon filter for odour control (for ileostomy and colostomy). Ileostomy pouches have either a roll up drain port secured with an integral 'velcro' type closure or there are clamps and soft ties supplied in each box. For urostomy the pouches carry a soft polymer tap for easy drainage. All pouches have a viewing window to inspect the stoma if needed. Some ranges feature a vent with lid for venting the pouch if required. All Zensiv Ostomy products are latex-free and do not contain ingredients of animal origin. The products are non-sterile and can be used in any appropriate circumstances where the attending physician or healthcare professional decides a non-sterile product may be applied.



### Warnings-Precautions

- Each pouch is for single use only. Do not re-use. Re-use can lead to cross-contamination. - Use only as directed by your healthcare professional. - Read the instructions prior to use. - Discontinue use and contact your healthcare professional if you experience any allergic reactions or problems when using the pouches.

### Contra-indications

These devices should not be used by anyone with a known sensitivity to: polyethylene, polyamide, medical charcoal, synthetic polymer, ethylene vinyl acetate, polypropylene, polyester, polyisobutylene, carboxymethylcellulose, pectin or glycerine, acrylic gel, spandex.

### Storage Conditions

It is best to store your products in a cool dry place with a guidance of temperature from 0°C to 27°C as is noted on the product label.

### Serious Incidents

Should a serious incident arise as a result of using the product please report this immediately to the manufacturer and the Competent Authority in the country where you reside.

### Shelf Life

Use by the expiry date noted on the label.

### Collect your materials

Make sure that all necessary materials are ready for use. Collect a measuring guide, a pair of scissors, a pen, wet and dry gauze and a stoma pouch and flange.

### Choose the right size

Measure your stoma with a measuring guide and cut (if necessary) the flange to the right size of the stoma. Make sure that you choose the right size so that the stoma and surrounding skin will stay healthy. Allow a maximum of 2 mm of space between your stoma and flange for a safe and correct fit. If the size is too big, your faeces will damage the skin. If the size is too small, the flange will damage the stoma. Over time your stoma may change shape or size, so periodically measurements may be required again to prevent any leakage.

### Prepare your skin

Support the skin and remove the flange carefully, do not tear off but push the skin back from the flange, use a wet gauze if necessary. Wash the skin surrounding your stoma with warm and unperfumed water. Do not use anything that contains alcohol, perfume or ether to clean your skin as it can cause damage. Do not rub the skin too hard as this might lead to skin damage. Dry the skin carefully and thoroughly to ensure that your pouch adheres well. Optional: If your skin is irritated and sore you can use skin barrier cream, hydrocolloid powder or skin barrier wipes. Apply the powder, skin barrier cream or wipe gently to the surrounding skin.

### Close the tap at the base of the pouch

First make sure that the tap is closed safely. Close the tap by pressing the tap firmly.

### Connecting your pouch to a night bag.

The pouch has a universal tap. This tap can be connected to almost any type and brand of night bag. Open the tap of the pouch and connect this to the connector of the night bag and ensure that the connection is secure.

### Fit your base plate

Remove the release paper of the base plate. Stretch the skin of your abdomen with a flat hand and place the base plate over your stoma into the right position (start at the bottom and work your way to the top). Work your fingers around the base plate so that the hydrocolloid bonds well onto the skin and make sure that the plate is secure.

### Apply your pouch

Take your pouch and click the pouch onto the ring of base plate. Work your way from the bottom to the top of the ring. Make sure that your pouch is secure and control the complete seal of the pouch with your fingers.

### Empty your pouch

Lift up the tap and open the tap. Empty the contents of your pouch into the toilet. Close tap again making sure it is securely closed.

### Viewing window

The ostomy pouch includes a viewing window which makes it possible to inspect the stoma as well as the output from the stoma. It is also very helpful when applying the pouch to make sure it is located correctly over the stoma. Lift up the non-woven of the viewing window for inspection.

### Disposal of your pouch

Remove your pouch and dispose of it in the trash. Do not flush your used pouch down the toilet because this will block your sewage system.

### Frequency of pouch change

Change/empty your pouch as advised by your healthcare professional.

## NL - Gebruiksaanwijzing

### Beoogd gebruik, productbeschrijving en materiaal informatie

Stomamaterialen worden gebruikt om afvalstoffen uit het lichaam op te vangen en worden meestal aan de huid bevestigd rondom een chirurgisch gemaakte stoma. Zensiv producten zijn een reeks van 1-delige en 2-delige stomamaterialen en 2-delige huidplaten in verschillende maten en vormen. Alle 1-delige zakjes en 2-delige huidplaten hebben een huidvriendelijke hydrocolloïde huidplaat voor hechting aan het lichaam. De hydrocolloïde huidplaat is voorzien van een beschermfolie met maataanduiding voor het uitknippen op de juiste maat. Het stomazakje is vervaardigd van een folie met geurbarrière met een comfortabele non-woven laag en een koolstoffilter voor geurneutralisatie (voor ileostomie en colostomie). Ileostomiezakjes hebben ofwel een oprolbare sluiting met een geïntegreerde klittenband sluiting of er zijn klemmen en sluitstrips meegeleverd in elke doos. De urostomiezakjes zijn uitgerust met een zacht kunststof kraantje voor eenvoudige leging van het zakje. Alle zakjes hebben een kijkvenster om indien nodig de stoma te kunnen inspecteren. Sommige producten zijn voorzien van een ventiel voor het eventueel ontlichten van het zakje. Alle Zensiv producten zijn latexvrij en bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong. De producten zijn niet-steriel en kunnen worden gebruikt in alle geschikte omstandigheden waarin de behandelend arts of zorgverlener besluit dat een niet-steriel product mag worden toegepast.



### Waarschuwingen-voorzorgsmaatregelen

- Elk product is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting. - Gebruik alleen zoals voorgeschreven door uw zorgverlener. - Lees vóór gebruik de instructies. - Stop het gebruik en neem contact op met uw arts als u allergische reacties of problemen ervaart tijdens het gebruik van het product.

### Contra-indicaties

Deze producten mogen niet worden gebruikt door iemand met een bekende gevoeligheid voor: polyethyleen, polyamide, medische houtskool, synthetisch polymeer, ethyleenvinylacetaat, polypropyleen, polyester, polyisobutyleen, carboxymethylcellulose, pectine of glycerine, acrylgel, spandex.

## Opslagcondities

Producten bewaren op een koele, droge plaats en bij een temperatuur van 0°C tot 27°C, zoals vermeld op het productetiket.

## Ernstige incidenten

Mocht er zich een ernstig incident voordoen als gevolg van het gebruik van het product, meldt dit dan onmiddellijk aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in het land waar u woont.

## Houdbaarheid

Te gebruiken tot de vervaldatum vermeld op het etiket.

## Verzamel je materialen

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaar zijn voor gebruik: een maatkaart (mal), een schaar, een pen, nat en droog gaas en een stomazakje en huidplaat.

## Kies de juiste maat

Meet uw stoma met een maatkaart en/of mal en knip (indien nodig) de huidplaat op de juiste maat van de stoma. Zorg ervoor dat u de juiste maat kiest, zodat de stoma en de omliggende huid gezond blijven. Laat maximaal 2 mm ruimte tussen uw stoma en de huidplaat voor een veilige en correcte pasvorm. Als de maat te groot is, beschadigt de ontlasting de huid. Als de maat te klein is, kan de huidplaat de stoma beschadigen. Na verloop van tijd kan uw stoma van vorm of grootte veranderen, dus periodieke metingen kunnen opnieuw nodig zijn om lekkage te voorkomen.

## Vorbereitung van de huid

Ondersteun de huid en verwijder de huidplaat voorzichtig, ruk niet af maar duw de huid terug van de huidplaat, gebruik indien nodig een nat gaasje. Was de huid rondom uw stoma met warm en ongeparfumeerd water. Gebruik niets dat alcohol, parfum of ether bevat om uw huid te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken. Wrijf niet te hard over de huid, dit kan leiden tot huidbeschadiging. Droog de huid zorgvuldig en grondig om ervoor te zorgen dat de huidplaat goed hecht. Optioneel: als uw huid geïrriteerd en pijnlijk is, kunt u huidbeschermingscrème, hydrocolloïde poeder of huidbeschermingsdoekjes gebruiken. Breng de poeder, de huidbeschermende crème of de huidbeschermingsfilm aan op de omliggende huid.

## Sluit het kraantje aan de onderkant van het zakje

Zorg eerst dat het kraantje veilig is gesloten. Sluit het kraantje door het dopje stevig op het kraantje te drukken.

## Het zakje aansluiten op een nachtzak

Het zakje heeft een universeel kraantje. Dit kraantje kan op bijna elk type en merk urine nachtzak worden aangesloten. Open de kraan van het zakje en sluit deze aan op de connector van de nachtzak en zorg ervoor dat de verbinding veilig is.

## Aanbrengen van de huidplaat

Verwijder de beschermfolie van de huidplaat. Strek de huid van de buik met een platte hand en plaats de huidplaat over de stoma in de juiste positie (begin onderaan en werk zo verder naar boven). Druk de hydrocolloïde huidplaat goed aan rondom de stoma, zodat deze goed hecht en zorg er voor dat de huidplaat goed vastzit. Plaats uw hand over de huidplaat en zorg ervoor dat een goede hechting ontstaat.

## Aanbrengen van het zakje

Neem het zakje en klik het zakje op de ring van de huidplaat. Werk van onder naar boven. Zorg ervoor dat uw zak veilig is aangesloten en controleer de volledige connectie van de zak op de huidplaat met uw vingers.

## Legen van het zakje

Til de kraan op en open de kraan. Leeg de inhoud van het zakje in het toilet. Sluit de kraan opnieuw en zorg ervoor dat deze goed gesloten is.

## Kijkvenster

Het stomazakje heeft een kijkvenster dat het mogelijk maakt om zowel de stoma als de output van de stoma te inspecteren. Het is ook erg handig bij het aanbrengen van het zakje om te controleren of de huidplaat goed geplaatst is rondom de stoma. Til het non-woven van het kijkvenster omhoog voor inspectie.

## Verwijderen van het zakje

Verwijder uw zak en gooi deze in de prullenbak. Spoel het gebruikte zak niet door het toilet, omdat de riolering hierdoor verstopt kan raken.

## Vervangen van het zakje

Vervang en/of leeg het zakje zoals geadviseerd door uw zorgverlener.

## DE - Gebrauchsanweisung

### Verwendungszweck, Produktbeschreibung und Materialangaben

Stomabeutel werden zur Sammlung von Körperausscheidungen verwendet und werden gewöhnlich über einem chirurgisch angelegten Stoma auf der Haut angebracht. Zensiv Stomaproducte sind eine Reihe von 1- und 2-teiligen Stomabeuteln und 2-teiligen Flanschen in verschiedenen Größen und Formen. Alle 1- Beutel und 2-teiligen Flanschen sind mit einer hautfreundlichen Hydrokolloid-Platte zur Haftung auf dem Körper ausgestattet, die vor der Anwendung mit einem Trennfilm mit Schneidführung geschützt ist. Der Produktbeutel wird aus einer geruchsneutralisierenden Folie mit einer Vliesschicht und einem Aktivkohlefilter zur Geruchskontrolle (für Ileostomie und Kolostomie) hergestellt. Ileostoma-Beutel haben entweder einen aufrollbaren Auslass, der mit einem integrierten Klettverschluss verschlossen wird, oder es befinden sich in jeder Schachtel Klemmen und weiche Bänder. Für Urostoma sind die Beutel mit einem weichen Polymer-Hahn zur einfachen Drainage ausgestattet. Alle Beutel sind mit einem Sichtfenster ausgestattet, um das Stoma gegebenenfalls zu inspizieren. Bestimmte Reihen haben eine Entlüftung, um den Beutel gegebenenfalls zu entlüften. Alle Zensiv Stomaproducte sind latexfrei und enthalten keine Inhaltsstoffe tierischer Herkunft. Die Produkte sind nicht steril und können unter allen gegebenen Umständen genutzt werden, wenn der behandelnde Arzt oder die medizinische Fachkraft entscheidet, dass ein nicht-steriles Produkt angewendet werden kann.

### Warnungen-Vorsorgemaßnahmen

- Jeder Beutel dient nur der einmaligen Anwendung. Nicht wiederverwenden. Wiederverwendung kann Kreuzkontaminierung verursachen. - Nur nach Anweisung Ihrer medizinischen Fachkraft anwenden. - Vor der Anwendung die Anleitung lesen. - Stellen Sie die Nutzung der Beutel ein und wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft, wenn die Anwendung Beutel allergische Reaktionen auslöst oder sonstige Probleme verursacht.

### Kontraindikationen

Diese Produkte sollten nicht von Personen mit einer bekannten Empfindlichkeit vor folgenden Stoffen verwendet werden: Polyethylen, Polyamid, Medizinalkohle, synthetische Polymere, Ethylen-Vinylacetat, Polypropylen, Polyester, Polyisobuten, Carboxymethylcellulose, Pektin oder Glycerin, Acrylgel, Spandex.

### Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte an einem kühlen, trockenen Ort, bei einer Temperatur zwischen 0°C bis 27°C gelagert werden, wie es auch auf dem Produktetikett verzeichnet ist.

### Schwerer Zwischenfall

Falls sich in Folge der Anwendung dieses Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, bitte sofort den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Heimatland informieren.

### Haltbarkeit

Bis zum auf dem Etikett angezeigten Verfallsdatum verwenden.

### Sammeln Sie Ihre Materialien

Sorgen Sie dafür, dass alle benötigten Materialien gebrauchsfertig sind. Legen Sie eine Lineal oder Maßband, eine Schere, einen Stift, eine befeuchtete und eine trockene Mullbinde, sowie einen Stomabeutel und Flansch zurecht.

### Wählen Sie die richtige Größe

Messen Sie Ihr Stoma mit einem Lineal oder Maßband und schneiden Sie (falls erforderlich) den Flansch je nach Größe des Stomas zu. Achten Sie darauf, die richtige Größe zu wählen, damit das Stoma und die das Stoma umgebende Haut gesund bleiben. Lassen Sie maximal 2 mm Zwischenraum zwischen Ihrem Stoma und dem Flansch, damit es sicher und genau passt. Wenn der Flansch zu groß ist, kann Ihr Kot die Haut beschädigen. Wenn er zu klein ist, kann der Flansch die Haut beschädigen. Im Laufe der Zeit kann sich die Form oder Größe des Stomas verändern, daher können regelmäßige neue Messungen erforderlich sein, um Leckagen zu vermeiden.

### Bereiten Sie Ihre Haut vor



Stützen Sie die Haut und entfernen Sie den Flansch vorsichtig, nicht abreißen, sondern die Haut vom Flansch wegdrücken, gegebenenfalls eine befeuchtete Mullbinde verwenden. Die Haut um Ihr Stoma mit warmem und nicht parfümiertem Wasser waschen. Zur Reinigung Ihrer Haut keine Mittel verwenden, die Alkohol, Parfüm oder Ether enthalten, da diese die Haut beschädigen können. Reiben Sie die Haut nicht zu fest, das kann die Haut beschädigen. Trocknen Sie die Haut vorsichtig und gründlich, damit Ihr Beutel gut haftet. Optional: Wenn Ihre Haut gereizt und strapaziert ist, können Sie Skin Barrier Creme, Hydrokolloid-Pulver oder Skin Barrier Wipes verwenden. Das Pulver, die Skin Barrier Creme oder die Wipes sanft auf die das Stoma umgebende Haut auftragen.

### Den Hahn an der Unterseite des Beutels schließen

Prüfen Sie zuerst, ob der Hahn sicher geschlossen ist. Den Hahn durch festes Drücken schließen.

### Ihren Beutel an einen Nachtbeutel verbinden

Der Beutel hat einen Universalhahn. Dieser Hahn kann an nahezu jede Art und Marke Nachtbeutel angeschlossen werden. Den Hahn des Beutels öffnen und diesen mit dem Anschluss des Nachtbeutels verbinden. Prüfen, ob der Anschluss sicher ist.

### Ihre Basisplatte anbringen

Das Trennpapier der Basisplatte abnehmen. Die Haut des Bauches mit flacher Hand straffen und die Basisplatte in die korrekte Position über dem Stoma platzieren (unten anfangen und nach oben arbeiten). Drücken Sie die Basisplatte mit den Fingern an, damit das Hydrokolloid gut auf der Haut haftet und vergewissern sie sich, dass die Platte gut befestigt ist.

### Ihren Beutel anlegen

Den Beutel auf den Ring der Basisplatte klicken. Arbeiten Sie dabei von unten am Ring nach oben. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Beutel korrekt befestigt ist und prüfen Sie mit den Fingern die gesamte Dichtung des Beutels.

### Ihren Beutel entleeren

Den Hahn anheben und öffnen. Den Inhalt Ihres Beutels in die Toilette entleeren. Den Hahn wieder schließen und sicherstellen, dass er sicher verschlossen ist.

### Sichtfenster

Im Stomabeutel befindet sich ein Sichtfenster, das die Möglichkeit bietet, das Stoma und dessen Ausscheidungen zu inspizieren. Das Sichtfenster ist auch beim Anlegen des Beutels sehr hilfreich, da man sich so vergewissern kann, dass er korrekt über dem Stoma positioniert wird. Heben Sie zur Inspektion das Vlies des Sichtfensters an.

### Entsorgung Ihres Beutels

Entfernen Sie Ihren Beutel und entsorgen Sie ihn im Müll. Spülen Sie Ihren gebrauchten Beutel nicht durch die Toilette, da es sonst zur Verstopfung der Kanalisation kommt.

### Häufigkeit des Beutelwechsels

Wechseln bzw. entleeren Sie Ihren Beutel gemäß den Empfehlungen Ihrer medizinischen Fachkraft.

## تعليمات الاستخدام - AR

### الاستخدام المقصود وصف المنتج ومعلومات المواد

تستخدم أكياس الاستوما لجمع الفضلات من الجسم وعادة ما يتم ربطها بالجلد فوق فتحة الفغر ستوما المصنوعة جراحيا.

منتجات الاستوما زينسيف هي عبارة عن مجموعة من أكياس فغر ستوما قطعة واحدة وقطعتين وحلقه من قطعتين بأحجام وأشكال مختلفة. تحتوي جميع الأكياس ذات القطعة الواحدة والقطعتين على رقاقة مائية غروانية صديقة للبشرة للالتصاق بالجسم وهذا محمي قبل الاستخدام مع فيلم إطلاق يظهر دليل القطع. يتم تصنيع كيس المنتج من فيلم حاجز الرائحة مع طبقة مريحة غير منسوجة وفلتر كربون للتحكم في الرائحة (لفغر اللانفاقي اليوستومي وفغر القولون كولوستومي). تحتوي أكياس فغر اللانفاقي اليوستومي إما على منفذ تصريف متدرج مؤمن بإغلاق متكامل من نوع "الفيلكرو" أو توجد مشابك وروابط لينة في كل صندوق. بالنسبة إلى فغر البول، تحمل الأكياس حنقية بوليمر ناعمة لسهولة التصريف. تحتوي جميع الأكياس على نافذة عرض لفحص النفرة إذا لزم الأمر. تحتوي بعض النطاقات على فتحة تهوية مع غطاء لتفليس الحقيبة إذا لزم الأمر.

جميع منتجات زينسيف للمفاغرة خالية من اللاتكس ولا تحتوي على مكونات من أصل حيواني. المنتجات غير معقمة ويمكن استخدامها في أي ظروف مناسبة يقر فيها الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية منتجاً غير معقم.

### تحذيرات - احتياطات

- كل كيس للاستخدام الفردي فقط - لا تعد الاستخدام - يمكن أن تؤدي إعادة الاستخدام إلى التلوث المتبادل.

- استخدم فقط حسب توجيهات أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

- اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

- توقف عن الاستخدام واتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت أي ردود فعل أو حساسية عند استخدام الأكياس.

### موانع الاستخدام

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية معروفة تجاه: البولي إيثيلين، البولي أميد، والفحم الطبي، والبوليمر الصناعي، وولات الفينيل إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبوليستر بولي إيزوبوتيلين، وكاربوكسي ميثيل السليلوز، والبكتين، وهلام الأكريليك، والياف لدنة، والجلسرين.

### شروط التخزين

من الأفضل تخزين منتجاتك في مكان بارد وجاف مع توجيه درجة الحرارة من 0 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية كما هو موضح على ملصق المنتج.

### حوادث خطيرة

في حالة وقوع حادث خطير نتيجة لاستخدام المنتج، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في البلد الذي تقيم فيه على الفور.

### مدة الصلاحية

الاستخدام بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق.

### اجمع موادك

تأكد من أن جميع المواد الضرورية جاهزة لجمع دليل القياس، ومقص، وقلم، وشاش رطب وجاف وكيس الفغر والقاعدة.

### اتر المقاس المناسب

قم بقياس فتحة الفغر ستوما باستخدام دليل قياس وقص (إذا لزم الأمر) الحافة إلى الحجم الصحيح للفتحة. تأكد من اختيار الحجم المناسب بحيث تبقى الفتحة والجلد المحيط بصحة جيدة. اترك مسافة لا تقل عن 2 مم بين الفتحة وحافة القاعدة من أجل ملائمة آمنة وصحية. إذا كان الحجم كبيراً جداً، فإن برازك سيثقل الجلد. إذا كان الحجم صغيراً جداً، فسوف تلتف حافة القاعدة فتحة الفغر ستوما- بمرور الوقت قد يتغير شكل الفتحة أو حجمها، لذا قد يلزم إجراء قياسات دورية مرة أخرى لمنع أي تسرب.

### تجهيز جلدك

دعم الجلد وإزالة القاعدة بعناية، لا تنزعها ولكن ادفع الجلد للخلف من الحافة، استخدم الشاش الرطب إذا لزم الأمر. اغسل الجلد المحيط بفتحة الفغر ستوما بالماء الدافئ وغير المعطر. لا تستخدم أي شيء يحتوي على الكحول أو العطور أو الأثير لتنظيف بشرتك لأنها يمكن أن تسبب الضرر. لا تفرك الجلد بشدة لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الجلد. جفف الجلد بعناية ودقة للتأكد من أن الكيس يلتصق بشكل جيد.

اختياري: إذا كان جلدك متهيئاً ومتقرحاً، يمكنك استخدام كريم حماية البشرة أو مسحوق هيدروكولويد أو مناديل حماية الجلد. ضع المسحوق أو كريم حماية البشرة أو امسح برفق على الجلد المحيط.

### أغلق الصندوق اسفل الكيس

أولاً، تأكد من إغلاق الصندوق بأمان. أغلق الصندوق بالضغط عليه بقوة.

### توصيل كيس الفغر بكيس بول ليلي

الحقيبة لديها صندوق عالمي. يمكن توصيل هذا الصندوق بأي نوع وعلامة تجارية لحقيبة ليلية تقريباً. افتح صندوق الحقيبة وقم بتوصيل هذا بموصل الحقيبة الليلية وتأكد من أن الاتصال آمن.

### تناسب القاعدة

قم بإزالة ورقة تحرير القاعدة. مدد جلد بطنك بيد مسطحة وضع القاعدة فوق بطنك في الموضع الصحيح (ابدأ من الأسفل وشق طريقك إلى الأعلى). مرر أصابعك حول القاعدة بحيث يتم لصقها جيداً على الجلد وتأكد من أن القاعدة آمنة.

### تركيب الكيس

ضع حلقة الكيس على حلقة القاعدة وشق طريقك من الأسفل إلى أعلى الحلقة. تأكد من أن الكيس الخاص بك آمن وتحكم في إغلاق تام للكيس على القاعدة بأصابعك.

### تفريغ الكيس

ارفع الصندوق ثم افتحه و أفرغ محتويات الكيس في المراض. أغلق الصندوق مرة أخرى مع التأكد من إغلاقه بشكل آمن.

### شباك المشاهدة

يحتوي كيس الفغر ستوما على نافذة مشاهدة تجعل من الممكن فحص فتحة الفغر ستوما وكذلك الإخراج من الفتحة. كما أنه مفيد جداً عند تطبيق الكيس للتأكد من وضعها بشكل صحيح فوق الفتحة ارفع الطبقة غير المنسوجة من نافذة العرض للمشاهدة.

## BA - Uputstvo za upotrebu

### Namjena, opis proizvoda i informacije o materijalima

Stoma vrećice se koriste za prikupljanje tjelesnih izlučevina i obično se pričvršćuju na kožu nakon hirurškog zahvata stome. Zensiv Stoma proizvodi su podijeljeni na jednostijelne i dvodijelne stoma sisteme vrećica sa podlogama različitih oblika i veličina. Svi jednostijelni i dvodijelni sistemi vrećica iz ZenSiv programa su za kožu ugodni i izrađeni su od hidrokoloidnih materijala koji se pričvršćuju za kožu. Folija koja se nalazi na hidrokoloidnim podlogama čini zaštitni sloj koji se skida prije samog pričvršćivanja na kožu, što se detaljno može vidjeti na vodiču za rezanje. Vrećica za stomu izrađena je od folije za zaštitu od mirisa sa udobnim netkanim i karbonskim filterom za kontrolu mirisa. (ileostoma i kolostoma). Vrećice za ileostomu imaju otvor za namotavanje koji se učvršćuje integralnim zatvaračem tipa "čičak" ili se u svakoj kutiji nalaze stezaljke i meke sponje. Za urostomu vrećice nose meku polimernu slavinu za drenažu. Sve vrećice imaju prozor za pregled stome u slučaju potrebe. Neki modeli vrećica imaju posebne otvore (vent otvor) s poklopcem za odzračivanje vrećice, ako je potrebno. Svi Zensiv Stoma proizvodi ne sadrže lateks i ne sadrže sastojke životinjskog porijekla. Proizvodi su nesterilni i mogu se koristiti u bilo kojim odgovarajućim okolnostima kada dežurni ljekar ili zdravstveni radnik odluče da se može primijeniti nesterilni proizvod.

### Upozorenja-Predostrožnosti

- Svaka vrećica iz asortimana ZenSiv stoma programa je jednokratna i ne može se ponovo koristiti. Ponovno korištenje vrećice može izazvati unakrsnu-kontaminaciju. - Koristiti prema uputama zdravstvenog radnika. - Pročitati upute prije upotrebe. - U slučaju bilo kakve alergijske reakcije ili probleme prilikom upotrebe vrećica, prekinuti korištenje i obavijestiti svog zdravstvenog radnika.

### Kontraindikacije

ZenSiv proizvode ne smiju koristiti osobe sa osjetljivošću na: polietilen, poliamid, medicinski ugljen, sintetički polimer, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, poliizobutilen, karboksimetilcelulozu, pektin ili glicerol, akrilni gel, spandeks.

### Uslovi skladištenja

Proizvodi se čuvaju na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi od 0°C do 27°C, kako je navedeno i na etiketi proizvoda.

### Ozbiljni slučajevi

Ako se zbog upotrebe proizvoda dogodi ozbiljan incident, molimo da to odmah prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu u državi u kojoj živite.

### Rok trajanja

Rok trajanja naveden na etiketi.

### Pripremite svoj materijal za upotrebu

Provjerite jesu li svi potrebni materijali spremni za upotrebu. Pripremite mjerni vodič, makaze, olovku, vlažnu i suhu gazu i vrećicu za stomu.

### Izaberite pravu veličinu

Izmjerite promjer otvora stome vodilicom za mjerenje i izrežite (ako je potrebno) podlogu na pravu veličinu stome. Obavezno odaberite pravu veličinu kako bi stoma i okolna koža ostali zdravi. Omogućite maksimalno 2 mm prostora između stome i podloge za sigurno i pravilno postavljanje. Ako je veličina prevelika, fekalije će oštetiti kožu. Ako je veličina premala, podloga će oštetiti kožu na stomaku. Vremenom vaša stoma može promijeniti oblik ili veličinu, pa će povremeno biti potrebna ponovna mjerenja kako bi se spriječio curenje.

### Pripremite Vašu kožu

Poduprite kožu i pažljivo uklonite podlogu, ne odvajajte, već gurnite kožu natrag sa podloge, po potrebi upotrijebite vlažnu gazu. Operite kožu oko vaše stome toplom i neparfemiranom vodom. Za čišćenje kože nemojte koristiti ništa što sadrži alkohol, parfem jer mogu prouzrokovati oštećenja. Ne trljajte kožu prejako jer bi to moglo dovesti do oštećenja kože. Osušite kožu pažljivo i temeljno kako biste osigurali da vaša vrećica dobro prijanja. Napomena: Ako vam je koža nadražena i upaljena, možete koristiti kremu za zaštitu, hidrokoloidni puder ili maramice za zaštitu kože. Nanesite puder, kremu za zaštitu kože i nježno obrišite okolnu područje stome.

### Zatvorite meku slavinu (otvor) na dnu kese

Prvo provjerite da li je otvor na dnu kese sigurno zatvoren. Zatvorite otvor tako da čvrsto pritisnete poklopac na otvoru.

### Spojite vrećicu za noćnu kesu

Vrećica ima univerzalnu slavinu (otvor). Ovom slavinom možete povezati gotovo svaku vrstu i brend noćne kese. Kada otvorite slavinu vrećice i spojite je sa priključkom noćne kese, zadnji korak - provjerite da li je veza sigurna.

### Pripremite Vašu podlogu

Uklonite zaštitni papir sa podloge. Preklopite podlogu na pola i postavite otvor na donjoj strani stome. Poravnajte kožu trbuha rukom i povucite cijelu podlogu preko stome u pravilan položaj. (krenite od dna prema vrhu). Pomičite kožu oko stome tako da se hidrokoloidna podloga pričvrsti za kožu i osigurajte da je dobro zaljepljena za kožu. Postavite ruku preko podloge i provjerite na taj način da li je stvorena jaka veza između podloge i kože.

### Aplicirajte vrećicu

Vrećicu spojite sa prstenom osnovne podloge na principu "klika" Krenite od dna prema vrhu prstena. Provjerite da li je vrećica sigurna i prstima kontrolirajte vezu između vrećice i podloge.

### Ispraznite sadržaj vrećice

Otvorite završetak vrećice i otvorite vrećicu, zatim ispraznite sadržaj vrećice u toalet.

### Prozor za pregled

Vrećica za stomu uključuje prozor za gledanje koji omogućava pregled stome, kao i izlaz iz stome. Također je korisno kada aplicirate kesu kako biste bili sigurni da ste pravilno postavili preko stome. Podignite netkani prozor za pregled.

### Odlaganje vrećice

Iskorištenu vrećicu bacite u smeće. Iskorištene vrećice ne smijete bacati u toalet, jer to može blokirati vašu kanalizaciju.

### Učestalost mijenjanja vrećica

Promijenite / ispraznite vrećicu prema uputama vašeg zdravstvenog radnika.

## CZ - Návod k použití

### Účel použití, popis produktu a informace o materiálech

Stomické sáčky se používají ke shromažďování odpadu z těla a jsou obvykle přiloženy k pokožce na chirurgicky vytvořené stomii. Produkty Zensiv Ostomy jsou řadou jednodílných a dvoudílných stomických sáčků a dvoudílných kroužků různých velikostí a tvarů. Všechny jednodílné sáčky a dvoudílné podložky mají hydrokoloidní lepicí vrstvu šetrnou k pokožce, která slouží pro zajištění přilnutí k tělu a která je před použitím chráněna ochrannou fólií s vystřihovací šablonou. Sáček se vyrábí z fólie zabraňující zápachu s komfortní vrstvou z netkané textilie a uhlíkovým filtrem pro odbourávání zápachu (pro ileostomii a kolostomii). Ileostomické sáčky mají buď rolovací výpusť zabezpečenou integrálním uzávěrem typu suchý zip nebo se v každé krabici dodávají svorky a měkké šňůrky. V případě urostomie mají sáčky měkký polymerový uzávěr pro snadné odvádění moči. Všechny sáčky mají kontrolní okénko, kterým lze v případě potřeby stomii kontrolovat. Některé produktové řady mají ventil s krytkou, kterým se může v případě potřeby sáček odvětrávat. Žádné produkty Zensiv Ostomy neobsahují latex ani složky živočišného původu. Produkty jsou nesterilní a lze je použít za jakýchkoliv vhodných okolností, kdy ošetřující lékař nebo zdravotnický pracovník rozhodne o tom, že se může použít nesterilní produkt.

### Varování – bezpečnostní opatření

- Každý sáček je pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně. Opakované použití může vést ke křížové kontaminaci. - Používejte pouze podle pokynů zdravotnického pracovníka. - Před použitím si přečtěte návod k použití. - Pokud se při používání sáčků vyskytnou alergické reakce nebo problémy, přerušete jejich používání a kontaktujte zdravotnického pracovníka.

### Kontraindikace

Tyto pomůcky by neměla používat osoba se známou citlivostí na polyetylen, polyamid, lékařské uhlí, syntetický polymer, ethylvinylacetát, polypropylen, polyester, polyisobutylen, karboxymethylcelulózu, pektin nebo glycerin, akrylový gel, spandex.

#### **Podmínky skladování**

Produkty skladujte nejlépe v chladu na suchém místě s přibližnou teplotou od 0°C do 27°C, jak je uvedeno na etiketě produktu.

#### **Vážné incidenty**

Dojde-li k vážnému incidentu v důsledku používání produktu, neprodleně to oznamte výrobci a příslušnému úřadu v zemi, ve které bydlíte.

#### **Trvanlivost**

Použijte do data spotřeby uvedeného na obalu.

#### **Připravte si materiál**

Ujistěte se, že máte připraveny všechny potřebné materiály. Připravte si měřicí šablonu, nůžky, tužku, mokrou a suchou gázu a stomický sáček a kroužek.

#### **Zvolte správnou velikost**

Změřte stomii měřicí šablonou a podle potřeby ořízněte podložku na správnou velikost stomie. Ujistěte se, že jste vybrali správnou velikost, aby stomie a okolní pokožka zůstaly zdravé. Mezi stomií a podložkou ponechtejete maximálně 2 mm prostoru pro bezpečné a správné nasazení. Pokud je velikost příliš velká, stolice poškodí pokožku. Pokud je velikost příliš malá, podložka poškodí stomii. Během doby může stomie změnit tvar nebo velikost, takže může být zapotřebí pravidelné měření, aby se zabránilo úniku.

#### **Připravte pokožku**

Podepřete pokožku a opatrně sejměte podložku, neodtrhávejte ji, ale tlačte pokožku zpět z podložky; v případě potřeby použijte mokrou gázu. Omyjte pokožku okolo stomie teplou a neparfémovanou vodou. K čištění pokožky nepoužívejte nic, co obsahuje alkohol, parfém nebo éter, protože to může způsobit poškození. Nemněte pokožku příliš drsně, protože by to mohlo vést k jejímu poškození. Opatrně a důkladně pokožku vysušte, abyste zajistili dobré přilnutí sáčku. Volitelně: Pokud je vaše pokožka podrážděná nebo bolestivá, můžete použít ochranný krém, hydrokoloidní prášek nebo ochranné ubrousky. Použijte prášek, ochranný krém nebo ubrousek jemně na okolní pokožku.

#### **Zavřete uzávěr na spodní straně sáčku**

Nejprve se ujistěte, že uzávěr je bezpečně zavřený. Uzávěr zavřete tak, že ho pevně stisknete.

#### **Připojení sáčku na noční sběrný sáček**

Sáček má univerzální uzávěr. Tento uzávěr lze připojit téměř ke každému typu a značce nočního sběrného sáčku. Otevřete uzávěr sáčku a připojte ho ke konektoru nočního sběrného sáčku. Zkontrolujte, že je připojení bezpečné.

#### **Připevněte podložku**

Vyndějte ochrannou folii podložky. Plochou dlaní napněte kůži na břiše a umístěte podložku na stomii do správné polohy (postupuje zespodu nahoru). Prsty uhlazujte místo kolem podložky tak, aby hydrokoloid dobře přilnul k pokožce, a ujistěte se, že podložka je zajištěná.

#### **Aplikujte sáček**

Vezměte sáček a zacvakněte ho do kroužku podložky. Postupujte zespodu nahoru kroužku. Ujistěte se, že sáček je zajištěný a prsty zkontrolujte úplné utěsnění sáčku.

#### **Vyprazdňování sáčku**

Zvedněte uzávěr a otevřete ho. Vyprázdněte obsah sáčku do toalety. Znovu uzávěr zavřete a ujistěte se, že je bezpečně zavřený.

#### **Kontrolní průhledné okénko**

Stomický sáček má kontrolní průhledné okénko, které umožňuje kontrolovat stomii i vývod ze stomie. Při použití sáčku je také velmi užitečné ujistit se, že je správně umístěn na stomii. Zvedněte netkanou textilii kontrolního okénka k provedení kontroly.

#### **Likvidace sáčku**

Odstraňte sáček a vyhodte ho do odpadu. Použitý sáček nespachujte do záchodu, protože by se tím mohla ucpat kanalizace.

#### **Frekvence výměny sáčků**

Vyměňujte/vyprazdňujte sáček podle pokynů zdravotnického pracovníka.

## **DK - Brugsanvisning**

### **Tilsigtet anvendelse, produktbeskrivelse og materialeinformation**

Stomiposer bruges til at opsamle affaldsprodukter fra kroppen og er normalt fastgjort til huden over en kirurgisk fremstillet stomi. Zensiv Ostomy-produkter er en serie med stomiposer i 1 og 2 dele og 2-delte flanger i forskellige størrelser og former. Alle poser i 1 del og 2-delte flanger har en hudvenlig hydrokolloid-pude til fastgørelse til kroppen, og den er beskyttet inden brug med en frigivelsesfilm, der viser en klipvejledning. Produktposen er fremstillet af lugtbarrierefilm med et komfortabelt, ikke-vævet lag og et kulfilter til lugtkontrol (til ileostomi og colostomi). Ileostomiposer har enten en sammenrullet afløbsåbning, der er sikret med en integreret "velcro"-lukning, eller også er der klemmer og bløde bånd i hver æske. Til urostomi har poserne en blød polymerhane for nem dræning. Alle poser har et vindue til at inspicere stomien, hvis det skulle være nødvendigt. Nogle områder har en ventilationsåbning med låg til udluftning af posen, hvis dette kræves. Alle Zensiv Ostomy-produkter er latexfrie og indeholder ikke ingredienser af animalsk oprindelse. Produkterne er ikke-sterile og kan anvendes under alle omstændigheder, hvor den behandelende læge eller sundhedsperson beslutter, at et ikke-sterilt produkt kan anvendes.

### **Advarsler og forholdsregler**

- Hver pose er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Genbrug kan føre til krydskontaminering. - Må kun bruges som anvist af dit sundhedspersonale. - Læs instruktionerne inden brug. - Afbryd brugen og kontakt dit sundhedspersonale, hvis du oplever allergiske reaktioner eller problemer, når du bruger poserne.

### **Kontraindikationer**

Disse enheder må ikke bruges af personer med en kendt overfølsomhed over for: polyetylen, polyamid, medicinsk trækul, syntetisk polymer, ethylvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylen, carboxymethylcellulose, pektin eller glycerin, akrylgel, spandex.

### **Opbevaringsbetingelser**

Det er bedst at opbevare dine produkter på et køligt, tørt sted med en temperatur fra 0°C til 27°C som angivet på produktetiketten.

### **Alvorlige hændelser**

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, som følge af brugen af produktet, bedes du straks indberette dette til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor du bor.

### **Holdbarhed**

Skal bruges inden udløbsdatoen, der er angivet på etiketten.

### **Find dine materialer**

Sørg for, at alle nødvendige materialer er klar til brug. Find en målevejledning, en saks, en pen, våd og tør gaze, en stomipose og en flange.

### **Vælg den rigtige størrelse**

Mål din stomi med en målevejledning og klip (om nødvendigt) flangen til den rigtige størrelse, så den passer til stomien. Sørg for at vælge den rigtige størrelse, så stomien og den omgivende hud forbliver sund og rask. Tillad maksimalt et 2 mm mellemrum mellem din stomi og flangen for en sikker og korrekt tilpasning. Hvis størrelsen er for stor, beskadiger din fæces huden. Hvis størrelsen er for lille, vil flangen beskadige stomien. Over tid kan din stomi ændre form eller størrelse, så periodiske målinger kan være nødvendige igen for at forhindre lækager.

### **Forbered din hud**

Støt huden og fjern flangen forsigtigt. Riv den ikke af, men skub huden tilbage fra flangen. Brug om nødvendigt våd gaze. Vask huden omkring din stomi med varmt og uparfumeret vand. Brug ikke noget, der indeholder alkohol, parfume eller æter til at rengøre din hud, da dette kan forårsage skade. Gnid ikke huden for hårdt, da dette kan føre til hudskader. Tør huden forsigtigt og grundigt for at sikre, at din pose klæber godt. Valgfrit: Hvis din hud er irriteret og øm, kan du bruge en hudbarrierecreme, hydrokolloidpulver eller hudbarriereservietter. Påfør pulver, hudbarrierecreme eller aftør forsigtigt den omgivende hud.

### **Luk for hanen i bunden af posen**

Sørg først for, at hanen er lukket sikkert. Luk hanen ved at trykke hanen fast.

### Tiġslut din pose til en natpose

Posen har en universal hane. Denne hane kan tilsluttes næsten enhver type og mærke af natposer. Åbn posens han, og tilslut den til natposens stik, og sørg for, at forbindelsen er sikker.

### Tilpas din bundplade

Fjern frigørelsespapiret fra bundpladen. Stræk huden på din mave med en flad hånd, og placér bundpladen over din stomi i den rigtige position (start i bunden og arbejd dig op mod toppen). Arbejd med dine fingre omkring bundpladen, så hydrokolloidet binder godt på huden, og sørg for, at pladen sidder sikkert.

### Sæt posen på

Tag din pose, og klik posen på ringen på bundpladen. Arbejd dig fra bunden mod toppen af ringen. Sørg for, at din pose sidder sikkert, og kontrollér posens forsejling med fingrene.

### Tøm din pose

Løft hanen op, og åbn hanen. Tøm indholdet af din pose ned i toiletet. Luk hanen igen og sørg for, at den er lukket korrekt.

### Vindue

Stomiposen har et vindue, der gør det muligt at inspicere stomien såvel som udgangen fra stomien. Det er også meget nyttigt, når posen påføres for at sikre, at den er placeret korrekt over stomien. Løft det ikke-vævede vindue ved inspektion.

### Bortskaf din pose

Fjern din pose og smid den i skraldespanden. Skyl ikke din brugte pose ud i toiletet, da dette kan blokere dit kloaksystem.

### Hyppeghed af poseskift

Skift/tøm din pose som anbefalet af dit sundhedspersonale.

## ES - Instrucciones de uso

### Indicaciones, Descripción del Producto e Información de los Materiales

Las bolsas de ostomía se utilizan para la recogida de desechos corporales y normalmente se fijan alrededor de un estoma quirúrgico. La gama de productos para las ostomías Zensiv comprenden bolsas de Una Pieza y de Dos piezas y apósitos de Dos Piezas de diversas medidas y formas. Todas las bolsas de Una Pieza y apósitos de Dos Piezas se distinguen por contar con un apósito hidrocoloide respetuoso con la piel que se adhiere al cuerpo. Antes de su utilización el apósito está protegido por una película que tiene impresa una guía de diámetros de corte. El producto se produce con una pared laminar que es barrera a los olores con una capa de tejido no tejido y un filtro de carbono para controlar los olores (para ileostomías y colostomías). Las bolsas para ileostomías tienen asimismo un puerto de vaciado enrollable con cierre integral, de tipo 'velcro' o mediante pinzas con sujeciones blandas que se incluyen en cada caja. Las bolsas para urostomía llevan un tapón blanco de polímero para un vaciado fácil. Todas las bolsas tienen ventana para inspeccionar el estoma cuando sea necesario. Algunas gamas tienen un puerto de ventilación con tapa para cuando se requiera evacuar gases. Todos los productos Zensiv para Ostomías están libres de látex y no contienen ingredientes de origen animal. Los productos son no-estériles y pueden ser utilizados en cualquier circunstancia que sea adecuada en el caso de que el médico o profesional sanitario al cargo decida que se puede utilizar un producto no-estéril.

### Advertencias-Precauciones

- Las bosas son únicamente de un solo uso. No reutilizar. Reutilizar puede ser causa de contaminación cruzada. - Usar únicamente tras indicación de su profesional sanitario. - Leer las instrucciones antes de utilizar. - Dejar de usar y contactar con su profesional sanitaria si experimenta cualquier reacción alérgica o problema al utilizar las bolsas.

### Contraindicaciones

No deben utilizarse estos dispositivos por personas con sensibilidad conocida a: polietileno, poliamida, carbón médico, polímeros sintéticos, acetato de etileno-vinilo, polipropileno, poliéster, poliisobutileno, carboximetilcelulosa, pectina o glicerina, gel acrílico, licra.

### Condiciones de almacenamiento

Se recomienda almacenar sus productos en un lugar seco y fresco con control de temperatura de 0°C a 27°C tal como se indica en la etiqueta de producto.

### Incidencias Graves

Si como resultado de la utilización del producto ocurriera una incidencia grave rogamos informe inmediatamente al fabricante y a la Autoridad Competente del país en el que resida.

### Permanencia en almacén

Véase la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

### Reunir materiales

Asegure de tener todos los materiales necesarios preparados para su utilización. Prepare una guía de medidas, unas tijeras, bolígrafo, gasa o toallita seca y húmeda y la bolsa para el estoma.

### Elija el tamaño adecuado

Mida su estoma con una guía de medidas y recorte (si es necesario) el apósito al tamaño del estoma. Asegúrese de elegir el tamaño adecuado a fin de que el estoma y la piel circundante se mantengan en buen estado. Para que encaje correctamente, no dejar más de 2 mm entre el estoma y el apósito. Si el tamaño es demasiado grande, las heces lesionarán la piel. Si el tamaño es demasiado pequeño, el apósito dañará el estoma. Con el tiempo, el estoma puede cambiar de tamaño o forma, son por tanto necesario tomar de nuevo medidas de forma periódica para prevenir fugas.

### Prepare la piel

Presione la piel y retire el apósito con cuidado, sujete la piel de detrás del apósito y tire del mismo con precaución, si es necesario utilice una gasa húmeda. Limpie la piel periestomal con agua tibia sin perfumar. No utilice nada que contenga alcohol, perfume o éter para limpiar la piel ya que pueden dañarla. No frote la piel con demasiada fuerza pues puede lesionarla. Seque la piel cuidadosamente y a fondo para asegurar que el apósito se fije bien. Opcional: Si tiene la piel irritada o ulcerada puede utilizar crema protectora, polvos hidrocoloides o toallitas protectoras, que siempre se deben aplicar con suavidad.

### Cierre el tapón de la parte inferior de la bolsa

Primeramente, asegúrese que el tapón queda bien cerrado. Cierre el tapón presionando con firmeza.

### Conectando la bolsa a la bolsa de drenaje nocturna

La bolsa tiene un tapón universal. El tapón se puede conectar a prácticamente todos los tipos y marcas de bolsas de drenaje. Abra el tapón de la bolsa y conecte la bolsa a la bolsa de drenaje mediante el conector de esta, cerciorándose de que la conexión es segura.

### Colocación de la placa

Retire el papel protector de la placa. Estire la piel abdominal con la mano plana y coloque el apósito sobre el estoma en la posición correcta (empiece por abajo y vaya desplazando hacia arriba). Presione suavemente por encima del apósito alrededor del estoma para asegurar que la se adhiere correctamente.

### Colocación de la bolsa

Coloque la bolsa sobre el aro de la placa y presione de abajo a arriba del aro. Asegúrese de la fijación de la bolsa y del sellado complete pasando los dedos.

### Vaciado de la bolsa

Levante el tapón y ábralo. Vacíe el contenido de la bolsa en el inodoro. Cierre de nuevo el tapón asegurándose de que quede bien cerrado.

### Ventana de inspección

La bolsa de ostomía incluye una ventana de inspección que permite ver tanto el estoma como el efluente sin retirar la bolsa. Resulta muy útil para saber si se ha situado bien la bolsa. Aparte el panel de tejido no tejido para inspección.

### Desecho de la bolsa

Retire la bolsa y déjela en la basura. No tire la bolsa por la inodoro pues podría atascar el Sistema de desagüe.

### Frecuencia de cambios de bolsas.

Cambie/vacíe la bolsa siguiendo las recomendaciones del personal sanitario.



## FI - Käyttöohje

### Käyttötarkoitus, tuotekuvaus ja materiaalitiedot

Avannepusseja käytetään ulosteen keräämiseksi kehosta, ja ne kiinnitetään yleensä ihoon kirurgisesti tehdyn avanteen päälle. Zensivin avannevalikoimaan kuuluu 1- ja 2-osaisia avannepusseja sekä erikokoisia ja -muotoisia 2-osaisia kiinnitysrenkaita. Kaikissa 1-osaisissa pusseissa ja 2-osaisissa renkaissa on ihoystävällinen hydrokolloidikiekko kehoon kiinnitystä varten. Ennen käyttöönottoa kiekkoa suojaa irrotuskalvo, jossa on leikkausohje. Tuote on valmistettu hajunestokalvosta, jossa on mukavuutta parantava kuitukerros ja hiiliuodatin hajujen hallintaa varten (ileostomiaa ja kolostomiaa varten). Ileostomiapusseissa on joko rullattava tyhjennysaukko, joka on kiinnitetty kiinteällä tarranauhalla tai vaihtoehtoisesti kunkin pakkauksen mukana tulee kiinnittimiä ja pehmeitä siteitä. Urostomiaa varten pusseissa on pehmeä polymeerihana, joka tekee tyhjentämisestä helppoa. Kaikissa pusseissa on katseluikkuna avanteen tarkistamiseksi tarvittaessa. Joissakin malleissa on kannellinen ilmaventtiili ilman poistamiseksi ulos pussista tai ilman päästämiseksi pussiin tarvittaessa. Zensivin avannetuotteet eivät sisällä lateksia eivätkä eläinperäisiä ainesosia. Tuotteet eivät ole steriilejä, ja niitä voidaan käyttää olosuhteissa, joissa hoitava lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen päättää, että ei-steriiliä tuotetta voidaan käyttää.

### Varoitukset ja varotoimenpiteet

- Pussit on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Älä käytä niitä uudelleen. Uudelleenkäyttö voi johtaa ristikontaminaatioon. - Käytä vain terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. - Lue ohjeet ennen käyttöä. - Lopeta käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos pussin käyttö aiheuttaa allergisia reaktioita tai koet ongelmia pussin käytössä.

### Vasta-aiheet

Henkilöiden, joilla on tiedossa oleva herkkyys polyeteenille, polyamidille, lääkehielle, synteettiselle polymeerille, etyleenivinyylisetaatille, polypropeenille, polyesterille, polyisobuteenille, karboksimeetyyliselluloosalle, pektiinille tai glyserolille, ei tule käyttää näitä laitteita, akryyligeeli, elastaani.

### Varastointiolosuhteet

Tuotteita on parasta säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 0°C - 27°C, kuten tuotteen etiketissä on mainittu.

### Vakavat vaaratilanteet

Jos tuotteen käytöstä seuraa vakava vaaratilanne, ilmoita siitä välittömästi valmistajalle ja asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

### Säilyvyys

Käytä etikettiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

### Kerää tarvittavat materiaalit

Varmista, että kaikki tarvittavat materiaalit ovat käyttövalmiina. Ota mittausopas, sakset, kynä, märkä ja kuiva sideharso sekä avannepuski ja kiinnitysrenkas esille.

### Valitse oikea koko

Mittaa avanteesi mittausohjeiden mukaisesti ja leikkaa (tarvittaessa) rengas oikean kokoiseksi avanteeseen. Varmista, että valitset oikean koon, jotta avanne ja sitä ympäröivä iho pysyvät terveinä. Jätä avanteen ja renkaan väliin enintään 2 mm tilaa turvallisen ja oikean istuvuuden takaamiseksi. Jos koko on liian suuri, ulosteet vahingoittavat ihoa. Jos koko on liian pieni, rengas vahingoittaa avannetta. Ajan myötä avanne voi muuttaa muotoaan tai kokoaan, joten säännöllisiä mittauksia saatetaan edellyttää vuotojen estämiseksi.

### Valmistele iho

Tue ihoa ja poista rengas varovasti. Älä repäise, vaan työnnä ihoa pois renkaasta, ja käytä tarvittaessa märkää sideharsoa. Pese avannetta ympäröivä iho lämpimällä ja hajustamattomalla vedellä. Älä käytä alkoholia, hajusteita tai etteriä sisältäviä aineita ihosi puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa ihoa. Älä hiero ihoa liian voimakkaasti välttääksesi ihovaurioita. Kuivaa iho huolellisesti ja perusteellisesti varmistaaksesi, että pussi tarttuu hyvin. Valinnaisesti: Jos ihosi on ärtynyt ja kipeä, voit käyttää ihon suojaaviteita, hydrokolloidijauhetta tai ihonsuojapyyhkeitä. Levitä jauhetta tai ihovoidetta ympäröivälle iholle tai pyyhi iho varovasti ihonsuojapyyhkeellä.

### Sulje pussin pohjassa oleva hana

Varmista ensin, että hana on suljettu turvallisesti. Sulje hana painamalla sitä tiukasti.

### Pussin liittäminen yösäiliöön

Pussissa on yleishana. Tämä hana voidaan liittää melkein minkä tahansa tyypiseen ja tuotemerkkiseen yösäiliöön. Avaa pussin hana ja liitä se yösäiliön liittimeen ja varmista, että liitos on pitävä.

### Aseta pohjalevy

Irrota pohjalevyn irrotuspaperi. Venytä vatsasi ihoa tasaisella kädellä ja aseta pohjalevy avanteen päälle oikeaan asentoon (aloita alhaalta ja jatka ylöspäin). Työnnä sormillasi pohjalevyn ympäriltä niin, että hydrokolloidit tarttuu hyvin ihoon ja varmista, että levy on tukevasti paikallaan.

### Aseta pussi paikalleen

Napsauta pussi pohjalevyn renkaaseen. Aloita pohjasta ja siirry kohti renkaan yläosaa. Varmista sormiesi avulla, että pussi on kiinnittynyt ja tiivistynyt tukevasti.

### Pussin tyhjennys

Nosta hana ylös ja avaa se. Tyhjennä pussin sisältö wc-istuimeen. Sulje hana uudelleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.

### Katseluikkuna

Avannepuski sisältää katseluikkunan, jonka avulla voidaan tarkastaa avanne sekä avanteen ulostulo. Ikkunan avulla voidaan myös varmistaa pussia asettaessa, että pussi on asetettu avanteen päälle oikein. Nosta katseluikkunan kuitukangasta tarkistaaksesi avanteen.

### Pussin hävittäminen

Irrota pussi ja hävitä se roskien mukana. Älä huuhtelee käytettyä pussia alas wc-istuimesta, sillä se tukkii viemärijärjestelmän.

### Pussien vaihtoväli

Vaihda/tyhjennä pussi terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

## FR - Mode d'emploi

### Notice d'utilisation, description du produit et renseignements sur le matériel

Les poches de colostomie sont utilisées pour recueillir les déchets du corps et sont généralement fixés à la peau sur une stomie opérée. Zensiv Ostomy comporte une gamme de poches et supports 1 pièce et 2 pièces avec différentes tailles et formes. Tous les supports Zensiv sont munis d'une plaquette hydrocolloïde qui assure une bonne adhésion ainsi qu'une bonne tolérance avec la peau. Avant l'utilisation nos supports sont protégés par un film transparent montrant un guide de coupe. Les poches Zensiv sont fabriquées à partir d'un film protecteur d'odeur avec une couche de tissu non tissé de confort et un filtre au carbone pour le contrôle des odeurs (pour l'iléostomie et la colostomie). Les poches d'iléostomie sont munies d'un orifice d'évacuation à enroulement fixé à l'aide d'un velcro intégré. Pour les poches d'urostomie, les sachets sont munis d'un robinet en polymère souple pour un drainage facile. Toutes les poches ont une fenêtre de visualisation pour inspecter la stomie si nécessaire. Certaines gammes disposent d'un évent avec couvercle pour évacuer la poche si nécessaire. Tous les produits Zensiv Ostomy sont sans latex et ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale. Les produits ne sont pas stériles et peuvent être utilisés dans toutes les circonstances appropriées lorsque le médecin traitant ou le professionnel de la santé décide qu'un produit non stérile peut être appliqué.

### Précautions d'emploi

- Chaque poche est destinée à un usage unique, Ne pas la réutiliser car la réutilisation peut entraîner une contamination croisée. - Utilisez uniquement selon les directives de votre professionnel de la santé. - Lisez les instructions avant de les utiliser. - Cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez des réactions allergiques ou des problèmes lors de l'utilisation des poches.

### Contre-Indications

Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés par quiconque ayant une sensibilité connue au polyéthylène, polyamide, charbon médical, polymère synthétique, acétate d'éthylène et de vinyle, polypropylène, polyester, polyisobutylène, carboxyméthylcellulose, pectine ou glycérine, gel acrylique, élasthanne.

### Conditions d'entreposage

Il est préférable de stocker vos produits dans un endroit frais et sec avec un guide de la température de 0°C à 27°C, tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

#### Incidents graves

Si un incident grave survient à la suite de l'utilisation du produit, veuillez le signaler immédiatement au fabricant et à l'autorité compétente du pays où vous résidez.

#### Durée de conservation

Utilisation à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette.

#### Matériel nécessaire pour les poches système 2 pièces

Assurez-vous que tout le matériel nécessaire est prêts à l'emploi. Recueillir un guide de mesure, une paire de ciseaux, stylo, gaze humide et sèche et poche de stomie ainsi que le support.

#### Le choix de la bonne tailles

Mesurez votre stomie avec un guide de mesure et coupez (si nécessaire) le support à la taille de la stomie de sorte que la stomie et la peau environnante restera saine. Prévoyez un espace maximum de 2 mm entre votre stomie et le support pour un ajustement sûr et correct. Si la taille est trop grande, vos selles endommageront la peau et Si la taille est trop petite, la bride endommagera la stomie. Au fil du temps, votre stomie peut changer de forme ou de taille, dans ce cas des mesures périodiques peuvent être nécessaires à nouveau pour éviter toute fuite.

#### Préparer la peau

Soulever légèrement la peau et retirer soigneusement le support en prenant soin de ne pas le déchirer tout en repoussant la peau du support, utiliser une gaze humide si nécessaire. Lavez la peau entourant votre estomac avec de l'eau chaude. N'utilisez rien qui contient de l'alcool, du parfum ou de l'éther pour nettoyer votre peau car elle peut causer des irritations. Ne frottez pas la peau trop fort car cela pourrait l'endommager. Séchez la peau soigneusement pour assurer une bonne adhésion. Facultatif : Si votre peau est irritée, vous pouvez utiliser de la crème de barrière cutanée, de la poudre d'hydrocolloïde ou des lingettes de barrière cutanée. Appliquer la poudre, la crème protectrice de la peau en essuyant doucement la peau environnante.

#### Fermer le robinet à la base de la pochette

Assurez-vous d'abord que le robinet est fermé en toute sécurité. Fermez le robinet en appuyant fermement sur le robinet.

#### Connexion de la poche à une poche de nuit

La poche a un robinet universel. Ce robinet peut être connecté à presque n'importe quel type et marque de poche de nuit. Ouvrir le robinet de la poche et le connecter au connecteur de la poche de nuit et s'assurer que la connexion est sécurisée.

#### Ajustez votre support

Retirer le papier de dégagement de la plaque du support. Étirez la peau de votre abdomen avec une main plate et placez la plaque de base sur votre stomie dans la bonne position (commencez par le bas et travaillez votre chemin vers le haut). Faites travailler vos doigts autour de la plaque de base de sorte que l'hydrocolloïde se lie bien à la peau et assurez-vous que la plaque est sûre.

#### Appliquez votre poche

Prenez votre poche et cliquez sur la poche sur le support. Travaillez votre chemin du bas vers le haut du support. Assurez-vous que votre poche est sécurisée puis contrôlez le joint complet de la poche avec vos doigts.

#### Videz votre pochette

Soulevez le robinet et ouvrez-le. Videz le contenu de votre poche dans les toilettes. Refermez le robinet en vous assurant qu'il est bien fermé.

#### Fenêtre de visualisation

La poche de stomie comprend une fenêtre de visualisation qui permet d'inspecter la stomie ainsi que la sortie de la stomie. Elle est également très utile lors de l'application de la poche pour s'assurer qu'elle est située correctement sur la stomie. Soulever le non-tissé de la fenêtre de visualisation pour l'inspection.

#### Élimination de pochette

Retirez votre sac et jetez-le à la poubelle. Ne jetez pas votre sac usagé dans les toilettes parce que cela bloquera votre système d'égoûts.

#### Fréquence de changement de pochette

Changez/videz votre poche comme conseillé par votre professionnel de la santé.

## GR - Οδηγίες χρήσης

### Προβλεπόμενη Χρήση, Περιγραφή Προϊόντος και Πληροφορίες Υλικού

Οι οσσομικοί σάκοι χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των σωματικών αποβλήτων και στερεώνονται συνήθως στο δέρμα επί μιας χειρουργικά δημιουργηθείσας στομίας. Τα οσσομικά προϊόντα Zensiv περιλαμβάνουν οσσομικούς σάκους 1 και 2 τεμαχίων και βάσεις 2 τεμαχίων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Όλοι οι σάκοι 1 τεμαχίου και οι βάσεις 2 τεμαχίων διαθέτουν φιλικό προς το δέρμα υδροκολλοειδές υλικό για επικόλληση στο σώμα, το οποίο πριν από τη χρήση καλύπτεται με προστατευτική ταινία και φέρει οδηγό κοπής. Ο σάκος είναι κατασκευασμένος από άσμη μεμβράνη και φέρει μη υφασμένο κάλυμμα και φίλτρο άνθρακα για τον έλεγχο των οσμών (ειλεοστομία και κολοστομία). Οι σάκοι ειλεοστομίας διαθέτουν τυλιγόμενη έξοδο αποστράγγισης, με ενσωματωμένο ασφαλιστικό κλείστρο τύπου "velcro" ή πλαστικό κλείστρο ή αυτοκόλλητο έλασμα, που περιέχονται σε κάθε συσκευασία. Στην ουρητηροστομία, οι σάκοι φέρουν βρυσάκι από μαλακό πολυμερές υλικό για εύκολη αποστράγγιση. Οι σάκοι διαθέτουν παράθυρο για την επισκόπηση της στομίας, αν χρειαστεί. Μερικοί σάκοι διαθέτουν έξοδο εξαερισμού με τάπα (vent) για τον αερισμό του σάκου, αν απαιτηθεί. Τα οσσομικά προϊόντα Zensiv δεν περιέχουν λάτεξ και συστατικά ζωικής προέλευσης. Τα προϊόντα είναι μη αποστειρωμένα και εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θεράπων ιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μη αποστειρωμένα προϊόντα.

### Προειδοποιήσεις-Προφυλάξεις

- Κάθε σάκος είναι μίας χρήσης. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση. - Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού. - Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. - Αν αντιμετωπίσετε αλλεργικές αντιδράσεις ή προβλήματα κατά τη χρήση του σάκου, διακόψτε τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας.

### Αντενδείξεις

Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα ακόλουθα υλικά: πολυαιθυλένιο, πολυαμίδιο, ιατρικός άνθρακας, συνθετικά πολυμερή, αιθυλένιο, οξικός βινυλεστέρας, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας, πολυισοβουτυλένιο, καρβοξυμεθυλική κυτταρίνη, πηκτίνη ή γλυκερίνη, Ακρυλικό τζελ, sprandex.

### Συνθήκες Αποθήκευσης

Τα προϊόντα αποθηκεύονται κατά προτίμηση σε δροσερό και ξηρό μέρος, με ένδειξη θερμοκρασίας από 0ο έως 27ο βαθμούς Κελσίου, όπως αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

### Σοβαρά Περιστατικά

Αν παρουσιαστεί σοβαρό περιστατικό, συνεπεία χρήσης του προϊόντος, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή και την Αρχή της χώρας που διαμένετε.

### Διάρκεια ζωής

Συμβουλευτείτε την ημερομηνία λήξης της ετικέτας.

### Συγκεντρώστε τα υλικά σας

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα υλικά είναι έτοιμα για χρήση. Συγκεντρώστε έναν χάρακα, ένα ψαλίδι, ένα στυλό, βρεγμένες και στεγνές γάζες, έναν οσσομικό σάκο και μια βάση.

### Επιλέξτε το σωστό μέγεθος

Μετρήστε τη στομία με τον χάρακα και κόψτε (αν είναι απαραίτητο) τη βάση στο σωστό μέγεθος της στομίας. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό μέγεθος, ώστε η στομία και το περιβάλλον δέρμα να παραμείνουν υγιή. Για σωστή και ασφαλή τοποθέτηση, αφήστε μέγιστο περιθώριο 2 χιλιοστών μεταξύ της στομίας και της βάσης. Αν το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο, τα περιπτώματά σας θα βλάψουν το δέρμα. Αν το μέγεθος είναι πολύ μικρό, η βάση θα τραυματίσει τη στομία. Με τον καιρό, η στομία μπορεί να αλλάξει σχήμα και μέγεθος, οπότε περιοδικές μετρήσεις είναι απαραίτητες για την πρόληψη των διαρροών.



## Προετοιμάστε το δέρμα σας

Στηρίξτε το δέρμα και αφαιρέστε προσεκτικά τη βάση, μην τραβάτε το δέρμα, αλλά σπρώξτε το μακριά από τη βάση, χρησιμοποιώντας μια βρεγμένη γάζα αν είναι απαραίτητο. Ξεπλύνετε το δέρμα γύρω από τη στομία με χλιαρό, μη αρωματισμένο νερό. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν περιέχει οιονδήποτε αρώμα ή αιθέρα για να καθαρίσετε το δέρμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τρίβετε πολύ δυνατά το δέρμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Στεγνώστε επιμελώς το δέρμα για να εξασφαλίσετε την καλή επικόλληση του σάκου. Προαιρετικό: Αν το δέρμα σας είναι ερεθισμένο και επώδυνο, χρησιμοποιήστε μια κρέμα φραγμού, υδροκολλοειδή σκόνη ή μαντηλάκια προστασίας. Εφαρμόστε τη σκόνη ή την κρέμα στο περιβάλλον δέρμα ή σκουπίστε το μαλακά με τα μαντηλάκια.

## Κλείστε το βρυσάκι στη βάση του σάκου

Αρχικά σιγουρευτείτε ότι το βρυσάκι είναι ασφαλισμένο. Κλείστε το βρυσάκι πιέζοντας σφιχτά την τάπα.

## Συνδέστε το σάκο σας σε έναν ουροσυλλέκτη νυκτός

Ο σάκος έχει βρυσάκι γενικού τύπου. Το βρυσάκι αυτό μπορεί να συνδεθεί με ουροσυλλέκτες σχεδόν κάθε τύπου και μάρκας. Ανοίξτε το βρυσάκι του σάκου, ενώστε το στο συνδετικό του ουροσυλλέκτη και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.

## Εφαρμόστε τη βάση σας

Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη βάση. Τεντώστε το δέρμα της κοιλιάς σας με την παλάμη και τοποθετήστε τη βάση στη σωστή θέση πάνω από τη στομία (εφαρμόστε από κάτω προς τα πάνω). Περάστε τα δάχτυλά σας γύρω από τη βάση ώστε το υδροκολλοειδές να κολλήσει καλά στο δέρμα και βεβαιωθείτε ότι η βάση παραμένει σταθερή.

## Εφαρμόστε το σάκο σας

Πάρτε το σάκο σας και ενώστε τον με τον δακτύλιο της βάσης. Ξεκινήστε την εφαρμογή από το κάτω μέρος του δακτυλίου προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος σας είναι σταθερός και ελέγξτε με τα δάχτυλά σας ότι εφαρμόζει πλήρως.

## Αδειάστε το σάκο σας

Ανασηκώστε το βρυσάκι και ανοίξτε την τάπα. Αδειάστε το περιεχόμενο του σάκου σας στην τουαλέτα. Κλείστε ξανά την τάπα και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένη.

## Παράθυρο επισκόπησης

Ο οστομικός σάκος διαθέτει ένα παράθυρο που επιτρέπει την επισκόπηση της στομίας καθώς και του προϊόντος της στομίας. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο, κατά την εφαρμογή του σάκου, για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησής του επί της στομίας. Για την επισκόπηση, ανασηκώστε το μη υφασμένο κάλυμμα του παραθύρου.

## Η απορρόφιση του σάκου σας

Αφαιρέστε το σάκο σας και απορρίψτε τον στα σκουπίδια. Μην απορρίπτετε τον σάκο στην τουαλέτα, γιατί αυτό μπορεί να φράξει το αποχετευτικό σας σύστημα.

## Η συχνότητα αλλαγής του σάκου

Αλλάξτε ή αδειάστε το σάκο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σας.

## HR - Upute za uporabu

### Predviđena uporaba, opis sustava i podaci o materijalu

Vrećice za stomu koriste se za sakupljanje otpadnih tvari iz tijela i obično se privijaju uz kožu preko kirurškim putem napravljene stome. Proizvodi tvrtke Zensiv Ostomy uključuju niz jednostajnih i dvodijelnih vrećica za stomu i dvodijelnih prirubnica u raznim veličinama i oblicima. Sve jednostajne vrećice i dvodijelne prirubnice imaju hidrokoloidnu prijanajuću površinu koja ne oštećuje kožu te je zaštićena filmom s oznakom za rezanje. Vrećica za stomu proizvodi se od materijala otpornog na mirise s netkanim slojem i ugljičnim filtrom za kontrolu mirisa (za ileostomu i kolostomu). Svaka kutija vrećice za ileostomu sadrži i namotani dren pričvršćen remenom „na čičak” ili stezaljke i meke remene. Vrećice za urostomu sadrže mekani čep od polimera za jednostavniju drenažu. Sve vrećice sadrže prozorčić za inspekciju stome prema potrebi. Određeni asortiman sadrži i ventil za prozračivanje stome prema potrebi. Svi proizvodi tvrtke Zensiv Ostomy ne sadrže lateks i sastojke životinjskog podrijetla. Proizvodi su nesterilni i mogu se koristiti u svim slučajevima u kojima je liječnik ili zdravstveni djelatnik odobrio uporabu nesterilnog proizvoda.

### Upozorenja – predostrožnosti

- Sve su vrećice za jednokratnu uporabu. Nemojte ih ponovno upotrebljavati. Ponovna uporaba može dovesti do unakrsne kontaminacije. - Koristite ih samo u skladu s uputama svojeg pružatelja primarne zdravstvene zaštite. - Pročitajte upute prije uporabe. - U slučaju alergijske reakcije ili problema prilikom uporabe vrećica, prestanite ih koristiti i kontaktirajte svojeg pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

### Kontraindikacije

Ovi proizvodi ne bi trebale koristiti osobe koje su osjetljive na: polietilen, poliamid, medicinski ugljen, sintetički polimer, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, polizobutilen, karboksimetilcelulozu, pektin ili glicerol, akrilni gel, spandeks.

### Uvjeti skladištenja

Najbolje je čuvati proizvode na hladnom, suhom mjestu na temperaturi između 0°C i 27°C kako je navedeno na oznaci proizvoda.

### Ozbiljne posljedice

Ukoliko dođe do ozbiljne posljedice uslijed uporabe proizvoda, odmah to prijavite proizvođaču ili nadležnom tijelu u vašoj zemlji boravišta.

### Rok trajanja

Upotrijebiti do roka uporabe na označi proizvoda.

### Pripremite potrebne materijale

Provjerite jesu li svi materijali spremni za uporabu. Pripremite pribor za mjerenje, škare, kemijsku olovku, vlažnu i suhu gazu te vrećicu za stomu i prirubnicu.

### Odaberite ispravnu veličinu

Izmjerite stomu priborom za mjerenje i izrežite prirubnicu (ako je potrebno) na veličinu stome. Provjerite jeste li odabrali ispravnu veličinu kako ne biste oštetili stomu i okolnu kožu. Za sigurnu upotrebu ostavite najmanje 2 mm prostora između stome i prirubnice. Ako je prirubnica prevelika, vaš će izmet oštetiti stomu. Ako je premalena, prirubnica će oštetiti stomu. S vremenom vaša će stoma promijeniti oblik ili veličinu, stoga su potrebna povremena mjerenja kako bi se spriječilo curenje.

### Pripremite kožu

Pridržite kožu i pažljivo uklonite prirubnicu. Nemojte otrgnuti, već odmaknite kožu od prirubnice. Upotrijebite vlažnu gazu ako je potrebno. Operite kožu oko stome mlakom i neparfumiranom vodom. Nemojte koristiti proizvode koji sadrže alkohol, parfem ili eter za čišćenje kože jer je možete oštetiti. Nemojte pretjerano jako trljati kožu jer je možete oštetiti. Pažljivo osušite kožu i temeljito provjerite prijanja li vrećica ispravno. Prema izboru: Ako dođe do iritacije ili oštećenja kože, možete upotrijebiti kremu za njegu kože Barrier, hidrokoloidni prah ili maramice za zaštitu kože Barrier. Na okolnu kožu nježno nanosite prah, kremu za njegu kože Barrier ili je maramicu.

### Zatvorite čep na dnu vrećice

Provjerite je li čep zatvoren. Čvrsto pritisnite čep da biste ga zatvorili.

### Povezivanje vrećice s noćnom vrećicom

Vrećica ima univerzalni čep. Taj se čep može namjestiti na bilo koju vrstu noćne vrećice. Otvorite čep vrećice i povežite ga na priključak noćne vrećice te provjerite je li čvrsto povezan.

### Namjestite podložnu pločicu

Uklonite zaštitni omot podložne pločice. Otvorenim dlanom nategnite kožu abdomena i navucite podložnu pločicu preko stome u ispravni položaj (od gore prema dolje). Prstima provjerite prijanja li hidrokoloidna površina dobro na kožu oko stome te je li podložna pločica pričvršćena.

### Primijenite vrećicu

Uzmite vrećicu i pričvrstite je na prsten podložne pločice. Povlačite prsten od vrha prema dnu. Provjerite je li vrećica pričvršćena i prstima je dokrajite zatvorite.

### Ispraznite vrećicu

Podignite i otvorite čep. Ispraznite sadržaj vrećice u toalet. Ponovno zatvorite čep i provjerite je li dobro zatvoren.

### Prozorčić za inspekciju



Vrećica za stomu sadrži i prozorčić za inspekciju pomoć kojeg možete provjeriti stanje stome kao i sadržaj koji iz nje izlazi. Prilikom primjene vrećice važno je provjeriti je li ispravno položena preko stome. Za provjeru stome podignite netkani dio prozorčića za inspekciju.

#### **Odstranjivanje vrećice**

Skinite vrećicu i odstranite je u otpad. Nemojte pustiti vrećicu niz toalet jer ćete začeptiti odvodni sustav kanalizacije.

#### **Učestalost promjene vrećice**

Promijenite/ispraznite vrećicu u skladu s uputama svog pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

## **ID - Petunjuk Penggunaan**

### **Tujuan Penggunaan, Deskripsi Produk, dan Informasi Material**

Kantong ostomi digunakan untuk mengumpulkan limbah dari tubuh dan biasanya ditempelkan pada kulit di atas stoma yang dibuat dengan pembedahan. Produk Zensiv Ostomy adalah rangkaian kantong ostomi 1 bagian dan 2 bagian serta flensa 2 bagian dalam berbagai ukuran dan bentuk. Semua kantong 1 bagian dan flensa 2 bagian menampilkan wafer hidrokoloid yang ramah kulit untuk adhesi ke tubuh dan ini dilindungi sebelum digunakan dengan film pelepas yang menunjukkan panduan pemotongan. Kantong produk dibuat dari film penghalang bau dengan lapisan non-anyaman yang nyaman dan filter karbon untuk pengendalian bau (untuk ileostomi dan kolostomi). Kantong ileostomi memiliki saluran pembuangan yang digulung yang diamankan dengan penutup tipe 'velcro' integral atau ada klem dan ikatan lunak yang disediakan di setiap kotak. Untuk urostomi, kantong membawa keran polimer lembut untuk drainase yang mudah. Semua kantong memiliki jendela untuk memeriksa stoma jika diperlukan. Beberapa rentang memiliki ventilasi dengan penutup untuk melepaskan isi kantong jika diperlukan. Semua produk Zensiv Ostomy bebas lateks dan tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari hewan. Produk tidak steril dan dapat digunakan dalam keadaan yang sesuai di mana dokter yang merawat atau profesional kesehatan memutuskan produk tidak steril dapat digunakan.

### **Peringatan - Tindakan Pencegahan**

- Setiap kantong hanya untuk sekali pakai. Jangan digunakan kembali. Penggunaan kembali dapat menyebabkan kontaminasi silang. - Gunakan hanya seperti yang diarahkan oleh profesional kesehatan Anda. - Baca petunjuk sebelum digunakan. - Hentikan penggunaan dan hubungi ahli kesehatan Anda jika Anda mengalami reaksi alergi atau masalah saat menggunakan kantong.

### **Kontra indikasi**

Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh siapa pun yang diketahui sensitif terhadap: polietilen, poliamida, arang medis, polimer sintetis, etilena vinil asetat, polipropilena, poliester, poliisobutilena, karboksimetil selulosa, pektin atau gliserin, gel akrilik, spandeks.

### **Ketentuan penyimpanan**

Sebaiknya simpan produk Anda di tempat kering yang sejuk dengan panduan suhu dari 0°C hingga 27°C seperti yang tertera pada label produk.

### **Insiden Serius**

Jika terjadi insiden serius akibat penggunaan produk, harap segera laporkan hal ini kepada produsen dan Otoritas Kompeten di negara tempat Anda tinggal.

### **Umur simpan**

Gunakan sebelum tanggal kedaluwarsa yang tertera pada label.

### **Kumpulkan bahan Anda**

Pastikan semua bahan yang diperlukan sudah siap digunakan. Kumpulkan panduan pengukuran, gunting, pena, kain kasa basah dan kering dan kantong stoma dan flensa.

### **Pilih ukuran yang tepat**

Ukur stoma Anda dengan panduan pengukur dan potong (jika perlu) flensa ke ukuran stoma yang tepat. Pastikan Anda memilih ukuran yang tepat agar stoma dan kulit di sekitarnya tetap sehat. Berikan jarak maksimum 2 mm antara stoma dan flensa Anda untuk pemasangan yang aman dan tepat. Jika ukurannya terlalu besar, kotoran Anda akan merusak kulit. Jika ukurannya terlalu kecil, flange akan merusak stoma. Seiring waktu, stoma Anda dapat berubah bentuk atau ukuran, jadi pengukuran berkala mungkin diperlukan lagi untuk mencegah kebocoran.

### **Siapkan kulitmu**

Topang kulit dan lepaskan flens dengan hati-hati, jangan sobek tetapi dorong kulit kembali dari flensa, gunakan kain kasa basah jika perlu. Cuci kulit di sekitar stoma Anda dengan air hangat dan tanpa pewangi. Jangan gunakan apapun yang mengandung alkohol, parfum atau eter untuk membersihkan kulit Anda karena dapat menyebabkan kerusakan. Jangan menggosok kulit terlalu keras karena dapat menyebabkan kerusakan kulit. Keringkan kulit dengan hati-hati dan menyeluruh untuk memastikan kantong Anda menempel dengan baik. Opsional: Jika kulit Anda teriritasi dan sakit, Anda dapat menggunakan krim pelindung kulit, bubuk hidrokoloid, atau tisu pelindung kulit. Oleskan bedak, krim pelindung kulit atau usap dengan lembut ke kulit di sekitarnya.

### **Tutup keran di dasar kantong**

Pertama-tama pastikan keran ditutup dengan aman. Tutup keran dengan menekan keran dengan kuat.

### **Menghubungkan kantong Anda ke kantong tidur**

Kantong memiliki keran universal. Keran ini bisa disambungkan ke hampir semua jenis dan merek tas malam. Buka keran kantong dan sambungkan ini ke konektor tas malam dan pastikan sambungannya aman.

### **Sesuaikan pelat dasar Anda**

Lepaskan kertas pelepas pelat dasar. Regangkan kulit perut Anda dengan tangan rata dan letakkan pelat dasar di atas stoma Anda ke posisi yang tepat (mulai dari bawah dan lanjutkan ke atas). Gerakkan jari Anda di sekitar pelat dasar sehingga hidrokoloid terikat dengan baik ke kulit dan pastikan pelat terpasang dengan baik.

### **Pasang kantong Anda**

Ambil kantong Anda dan klik kantong ke cincin pelat dasar. Pasang dari bawah ke atas ring. Pastikan kantong Anda aman dan kendalikan segel lengkap kantong dengan jari Anda.

### **Mengosongkan Kantong Anda**

Angkat keran dan buka keran. Kosongkan isi kantong Anda ke dalam toilet. Tutup ketuk lagi untuk memastikan tertutup dengan aman.

### **Jendela tampilan**

Kantong ostomi mencakup jendela tampilan yang memungkinkan untuk memeriksa stoma serta keluaran dari stoma. Ini juga sangat membantu saat mengoleskan kantong untuk memastikannya terletak dengan benar di atas stoma. Angkat non-anyaman dari jendela tampilan untuk diperiksa.

### **Buang kantong Anda**

Keluarkan kantong Anda dan buang ke tempat sampah. Jangan membuang kantong bekas Anda ke toilet karena ini akan menyumbat sistem pembuangan kotoran Anda.

### **Frekuensi penggantian kantong**

Ganti/kosongkan kantong Anda seperti yang disarankan oleh ahli kesehatan Anda.

## **LT - Naudojimo instrukcijos**

### **Paskirtis, gaminio aprašas ir medžiagu informacija**

Ostomijos maišeliai naudojami atliekoms iš kūno surinkti ir paprastai pritvirtinami prie odos per chirurginiu būdu įvestą stoma. „Zensiv Ostomy“ gaminiai yra įvairių dydžių ir formų vienos ir dviejų dalių ostomijos maišeliai su dviejų dalių jungėmis (flanšais). Visuose vienos dalies maišeliuose ir dviejų dalių flanšuose yra odą tausojanti hidrokoloidinė plokštelė, skirta klijuoti prie kūno, ir iki naudojimo ji yra apsaugota nuimama plėvele, kurioje pavaizduota, kaip tiksliai atlikti pjūvį. Gaminio maišelis pagamintas iš kvapus sulaikančios plėvelės su patogiu neaustiniu sluoksniu ir anglies filtru kvapams kontroliuoti (ileostomijai ir kolostomijai). Ileostomijos maišeliai turi arba suvyniojamą išleidimo portą, pritvirtintą integruotu lipniu uždarymo įtaisui, arba kiekvienoje dėžutėje yra pridėdami reikalingi spaustukai ir minkšti dirželiai. Urostomijai skirtuose maišeliuose yra minkštas polimerinis kranelis paprastam drenavimui. Visuose maišeliuose yra stebėjimo langelis stomai apžiūrėti (jei reikia). Kai kuriuose modeliuose yra entiliacijos anga su dangteliu, jei reikėtų išleisti maišelio turinį. Visuose „Zensiv Ostomy“ gaminiuose nėra latekso ir nėra gyvūninės kilmės ingredientų. Gaminiai yra nesterilūs ir gali būti naudojami bet kokiomis tinkamomis aplinkybėmis, kai gydančis gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia, kad galima naudoti nesterilų gaminį.



### **Īspējimai - atsargumo priemonēs**

- Kiekvienas maišelis skirtas tik vienkartiniam naudojumui. Naudoti pakartotinai Pakartotinai naudojant galima kryžminė tarša. - Naudoti tiktai pagal gydytojo nurodymą. - Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas. - Nutraukite naudojimą ir kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą, jei naudojant maišelius pasireiškia alerginės reakcijos ar problemos.

### **Kontraindikacijos**

Šių prietaisų neturėtų naudoti asmenys, kurie yra jautrūs: polietilenui, poliamidui, medicininės medžio angliai, sintetiniam polimerui, etileno vinilacetatui, polipropilenui, poliesteriui, poliizobutilenui, karboksimetilceliuliozei, pektinui arba glicerinui, akrilinis gelis, spandeksas.

### **Laikymo sąlygos**

Geriausia laikyti gaminius vėsioje, sausoje vietoje, kurioje temperatūra būtų nuo 0°C iki 27°C, kaip nurodyta gaminio etiketėje.

### **Rimti incidentai**

Jei naudojant gaminį įvyksta rimtas incidentas, nedelsdami praneškite apie tai gamintojui ir šalies, kurioje gyvenate, kompetentingai institucijai.

### **Tinkamumo laikas**

Tinkamumo laikas, nurodytas ant etiketės.

### **Surinkite visas medžiagas**

Įsitikinkite, kad visos reikalingos medžiagos paruoštos naudoti. Paimkite matavimo kreiptuvą, žirkles, švirškintklį, drėgną ir sausą marlę, stomos maišelį ir jungę.

### **Pasirinkite tinkamą dydį**

Išmatuokite stomą naudodami matavimo kreiptuvą ir nupjaukite (jei reikia) jungę iki reikiamo stomos dydžio. Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą dydį, kad stoma ir aplinkinė oda išliktų sveika. Palikite ne daugiau kaip 2 mm tarpelį tarp stomos ir jungės, kad būtų galima įstatyti saugiai ir tinkamai. Jei dydis per didelis, išmatos gali pažeisti odą. Jei dydis per mažas, jungė sugadins stomą. Laikui bėgant jūsų stomos dydis ar forma gali pasikeisti, todėl gali prireikti periodiškai atlikti matavimus, kad būtų išvengta bet kokio nuotėkio.

### **Paruoškite odą**

Prilaikykite odą ir atsargiai nuimkite jungę, nenuplėškite, o atitraukite odą atgal nuo jungės, jei reikia, naudokite drėgną marlę. Nuplaukite odą aplink stomą šiltu neparfumuotu vandeniu. Odai valyti nenaudokite jokių priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, kvėpalų ar eterio, nes jos gali pažeisti odą. Netrinkite per stipriai, nes tai gali pažeisti odą. Kruopščiai ir kruopščiai nusausinkite odą, kad maišelis gerai prikibtų. Pasirinktinai: Jei oda sudirginta ir skauda, galite naudoti odos barjerinį kremą, hidrokoloidinius miltelius arba odos barjerines servetėles. Užtepkite miltelių, apsauginio odos kremo arba švelniai nušluostykite aplinkinę odą.

### **Uždarykite maišelio apačioje esantį kranelį**

Visada įsitikinkite, kad kranelis saugiai uždarytas. Uždarykite kranelį jį tvirtai paspausdami.

### **Maišelio prijungimas prie naktinio surinkimo maišelio**

Maišelyje yra universalus kranelis. Šį kranelį galima prijungti prie beveik bet kokio tipo ir prekės ženklo naktinio surinkimo maišelio. Atidarykite maišelio kranelį, prijunkite jį prie naktinio surinkimo maišelio jungties ir įsitikinkite, kad jungtis sujungta tvirtai.

### **Pritvirtinkite pagrindo plokštelę**

Nuimkite apsauginę plėvelę nuo pagrindo plokštelės. Ištiestu delnu ištempkite pilvo odą ir uždėkite pagrindo plokštelę virš stomos į reikiamą padėtį (pradėkite nuo apačios ir judėkite į viršų). Pirštus apvyniokite aplink pagrindo plokštelę taip, kad hidrokoloidas gerai priliptų prie odos, ir įsitikinkite, kad plokštelė gerai prisitvirtino.

### **Pritvirtinkite maišelį**

Paimkite maišelį ir spustelėkite jį ant pagrindo plokštelės žiedo. Judėkite nuo žiedo apačios link viršaus. Įsitikinkite, kad maišelis gerai pritvirtintas, ir pirštais patikrinkite visą maišelio sandarumą.

### **Ištuštinkite maišelį**

Pakelkite ir atidarykite kranelį. Išpilkite maišelio turinį į tualetą. Dar kartą uždarykite kranelį ir įsitikinkite, kad jis saugiai uždarytas.

### **Tikrinimo langelis**

Ostomijos maišelyje yra tikrinimo langelis, leidžiantis apžiūrėti stomą ir išėjimą iš stomos. Taip pat labai svarbu uždedant maišelį įsitikinti, kad jis tinkamai uždėtas virš stomos. Kai norite patikrinti vidų, pakelkite neaustinę tikrinimo langelio medžiagą.

### **Maišelio išmetimas**

Nuimkite maišelį ir išmeskite jį su šiukšlėmis. Nepilkite panaudoto maišelio turinio į tualetą, nes tai užkimš nuotekų sistemą.

### **Maišelio keitimo dažnumas**

Pakeiskite/ištuštinkite maišelį taip, kaip nurodė sveikatos priežiūros specialistas.

## **LV - Lietošanas instrukcija**

### **Paredžėtai lietojums, izstrādājuma apraksts un informācija par materiāliem**

Ostomijas maisiņus izmanto urīna un fēču savākšanai, un tos parasti piestiprina pie ādas virs ķirurģiski izveidotas stomas. Zensiv Ostomy izstrādājumi ir dažādi viendalīgi un divdaļīgi ostomijas maisiņi un dažādu izmēru un formu divdaļīgas pamatnes. Visiem viendalīgajiem maisiņiem un divdaļīgajām pamatnēm ir ādu saudzējošs hidrokoloida slānis, kas paredzēts pielīmēšanai pie ķermeņa, un pirms lietošanas to aizsargā noņemama plēvi, uz kuras ir redzama griešanas norāde. Izstrādājuma maisiņš ir izgatavots no smakas aizturošas plēves ar ērtu neaustu slāni un oglekļa filtru smaku neitralizēšanai (ileostomijai un kolostomijai). Ileostomijas maisiņiem ir sarullējama drenāža, kas nostiprināta ar iestrādātu liplentes aizdari, vai arī katrā kārbā ir skavas un mīkstas saites. Urostomijas maisiņiem ir mīksts polimēra krāns, lai varētu viegli veikt drenāžu. Visiem maisiņiem ir skata lodziņš, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārbaudīt stomu. Dažiem izstrādājumiem ir ventilācija ar vāciņu, lai nepieciešamības gadījumā izvēdinātu maisiņu. Visi Zensiv Ostomy izstrādājumi ir bez lateksa un nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Izstrādājumi ir nesterili, un tos var izmantot jebkuros piemērotos apstākļos, kad ārstējošais ārsts vai veselības aprūpes speciālists nolemj lietot nesterilu izstrādājumu.

### **Brīdinājumi—piesardzības pasākumi**

- Katrs maisiņš ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Nelietojiet atkārtoti. Atkārtota lietošana var izraisīt savstarpēju piesārņojumu. - Lietojiet tikai atbilstoši veselības aprūpes speciālista norādījumiem. - Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. - Pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, ja, lietojot maisiņus, rodas alergiskas reakcijas vai problēmas.

### **Kontrindikācijas**

Šīs ierīces nedrīkst lietot personas, kurām ir zināma jutība pret: polietilēnu, poliamīdu, medicīnisko ogli, sintētisko polimēru, etilēna vinilacetātu, polipropilēnu, poliesteru, poliizobutilēnu, karboksimetilcelulozi, pektīnu vai glicerīnu, akrila gēls, elastāns.

### **Glabāšanas nosacījumi**

Izstrādājumus vislabāk glabāt vēsā, sausā vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz 27°C, kā norādīts izstrādājuma etiketē.

### **Nopietni negadījumi**

Ja izstrādājuma lietošanas rezultātā rodas nopietns negadījums, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to ražotājam un kompetentajai iestādei valstī, kurā dzīvojat.

### **Glabāšanas laiks**

Izlietot līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz etiķetes.

### **Paņemiet materiālus**

Pārlicinieties, vai visi nepieciešamie materiāli ir gatavi lietošanai. Paņemiet izmēru rādītāju, šķēres, pildspalvu, mitru un sausu marli, stomas maisiņu un atloku.

### **Pareizā izmēra izvēle**

Izmēriet savu stomu ar izmēru rādītāju un izgrieziet (ja nepieciešams) pamatni atbilstoši stomas izmēram. Pārlicinieties, vai esat izvēlējis pareizo izmēru, lai stoma un apkārtējā āda paliktu vesela. Lai droši un pareizi sastiprinātu stomu un pamatni, atstājiet starp tām ne vairāk kā 2 mm atstarpi. Ja izmērs ir pārāk liels, fēces sabojās ādu. Ja izmērs ir pārāk mazs, pamatne sabojās stomu. Laika gaitā stomas forma vai izmērs var mainīties, tāpēc periodiski var būt nepieciešams atkārtot mērīšanu, lai novērstu jebkādu noplūdi.



## Ådas sagatavošana

Atbalstiet ādu un uzmanīgi noņemiet pamatni; nenoplēšiet, bet atvirziet ādu no pamatnes, ja nepieciešams, izmantojot mitru marli. Nomazgājiet ādu ap stomu ar siltu un nearomatizētu ūdeni. Ādas notīrīšanai nelietojiet neko tādu, kas satur spirtu, parfimu vai ēteri, jo tas var radīt bojājumus. Neberzējiet ādu pārāk stipri, jo tas var izraisīt ādas bojājumus. Rūpīgi un kārtīgi nosusiniet ādu, lai maisiņš labi pieliptu. Pēc izvēles: Ja āda ir iekaisusi un sāpīga, varat izmantot ādas aizsargkrēmu, hidrokoloida pulveri vai ādu aizsargājošas salvetes. Uzklājiet pulveri, ādas aizsargkrēmu vai saudzīgi noslaukiet apkārtnējo ādu.

## Krāna aizvēršana pie maisiņa pamatnes

Vispirms pārliecinieties, vai krāns ir stingri aizvērts. Aizveriet krānu, to stingri piespiežot.

## Maisiņa pievienošana nakts maisiņam

Maisiņam ir universāls krāns. Šo krānu var savienot ar gandrīz jebkura veida un zīmola nakts maisiņu. Atveriet maisiņa krānu, pievienojiet to nakts somas savienotājam un pārliecinieties, vai savienojums ir drošs.

## Pamata plāksnes uzstādīšana

Noņemiet pamata plāksnes aizsargpapīru. Nostiepiet vēdera ādu ar plaukstu un novietojiet pamata plāksni virs stomas pareizajā stāvoklī (sāciet no apakšas un virzieties uz augšu). Ar pirkstiem izlīdziniet pamata plāksni tā, lai hidrokoloids kārtīgi pieliptu pie ādas, un pārliecinieties, vai plāksne ir kārtīgi pielipusi.

## Maisiņa pielikšana

Paņemiet maisiņu un piestipriniet pie pamata plāksnes gredzena tā, lai atskanētu klikšķis. Izlīdziniet maisiņu virzienā no gredzena apakšas uz augšu. Pārliecinieties, vai maisiņš ir kārtīgi piestiprināts un ar pirkstiem pārbaudiet, vai maisiņš ir kārtīgi pielipis.

## Maisiņa iztukšošana

Paceliet krānu un atveriet to. Maisiņa saturu iztukšojiet tualetes podā. Aizveriet krānu un pārliecinieties, vai tas ir droši aizvērts.

## Skata lodziņš

Ostomijas maisiņam ir skata lodziņš, kas ļauj pārbaudīt stomu, kā arī izdalījumus no stomas. Tas ir arī ļoti noderīgs, piestiprinot maisiņu, lai pārliecinātos, vai tas ir pareizi novietots virs stomas. Lai veiktu pārbaudi, paceliet skata lodziņa neaustā auduma aizsegu.

## Maisiņa likvidēšana

Noņemiet maisiņu un izmetiet to atkritumu tvertnē. Neaizskalojiet izlietoto maisiņu tualetes podā, jo tas nosprostos kanalizācijas sistēmu.

## Maisiņa maiņas biežums

Nomainiet/iztukšojiet maisiņu atbilstoši veselības aprūpes speciālista ieteikumiem.

## NO - Bruksanvisning

### Beregnert bruk, produktbeskrivelse og materiell informasjon

Stomiposer brukes for å samle opp avfall fra kroppen og er vanligvis festet på huden over en kirurgisk fremstilt stomi. Zensiv stomiprodukter er en serie stomiposer med 1-dels og 2-dels og plater i forskjellige sorter/varianter, størrelser og former. Alle 1-dels poser og 2-dels plater har en hudvennlig hydrokolloidplate for feste til kroppen og dette blir beskyttet før bruk med en beskyttelsesfilm med utklippsmarkeringer. Produktposen er produsert av en luktkbarrierefilm med et komfortfritt ikke-vevd lag og et karbonfilter for lukt kontroll (for ileostomi og kolostomi). Ileostomi posen har enten en sammenrullbar avløpsport sikret med en integrert «borrelås» lukning, eller det er klemmer og myke bånd som leveres i hver eske. Urostomi posen har en myk polymer kran for enkel drenering. Alle posene har et visningsvindu for å inspisere stomien om nødvendig. Visse poser har en lufteluke for å ventilere posen ved behov. Alle Zensiv stomiprodukter er latexfrie og inneholder ikke ingredienser av animalsk opprinnelse. Produktene er ikke-sterile og kan brukes under alle mulige omstendigheter der den behandlede legen eller omsorgspersonale bestemmer at et ikke-sterilt produkt kan brukes.

### Advarsler-forholdsregler

- Hver pose er kun til engangsbruk. Skal ikke gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til krysskontaminering. - Brukes bare i henhold til instruksjonene fra helsepersonellet. - Les instruksjonene før bruk. - Avbryt bruken og ta kontakt med helsepersonellet om du opplever allergiske reaksjoner, eller problem når du bruker posene.

### Kontraindikasjoner

Disse enheter bør ikke brukes av noen med kjent følsomhet for: polyeten, polyamid, medisinsk kull, syntetisk polymer, etylenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylene, karboximetylcellulosa, pektin eller glycerin, akrylgel, spandex.

### Lagringsforhold

Det er best å lagre dine produktene på en kjølig, tørr plass med en anbefalt temperatur fra 0°C til 27°C, som det angis på produktetiketten.

### Alvorlige hendelser

Om en alvorlig hendelse skulle oppstå som følge av at du bruker produktet, vennligst rapporter dette umiddelbart til leverandøren og til rett myndighet i det landet du bor.

### Holdbarhetstid

Bruk før utløpsdato som er angitt på pakken.

### Forbered dine produkter

Sørg for at alle nødvendige produkter er klare til bruk. Forbered en måleguide, en saks, en penn, våte og tørre gassbind og en stomipose og plate.

### Velg en størrelse

Mål din stomi med en måleguide og klipp (hvis nødvendig) platen til stomistørrelsen. Sørg for at du velger riktig størrelse så stomien og omkringliggende hud holder seg frisk. Tillat 2 mm plass mellom din stomi og plate for en sikker og riktig passform. Om størrelsen er for stor, kommer din avføring til å skade huden. Om størrelsen er for liten, skader platen stomien. Med tiden kan din stomi forandre form eller størrelse, så periodevis kan målinger kreves igjen for å forhindre lekkasje.

### Forbered din hud

Støtt huden og ta bort platen forsiktig, ikke riv den av, men skyv tilbake huden fra platen, bruk et vått gassbind hvis behov. Vask huden rundt stomien med varmt og uparfymert vann. Bruk ikke noe som inneholder alkohol, parfyme, eller eter for å rengjøre huden ettersom det kan forårsake skader. Ikke gni huden for hardt da det kan føre til hudskader. Tørk huden forsiktig og nøye så din pose fester seg bra. Valgfritt: Hvis din hud er irritert og øm kan du bruke hudbarriere krem, hydrokolloidpulver eller hudbarriereservietter. Påfør pulver, hudbarriere krem, eller tørk forsiktig på den omkringliggende huden.

### Steng utløpet ved bunnen av posen

Pass først på at utløpet er stengt på en sikker måte. Steng utløpet gjennom å trykke ordentlig på tappen.

### Koble til din stomipose til en nattpose

Posen har en universalkran. Denne kranen kan kobles til nesten alle typer og merker av nattposer. Åpne kranen på posen og koble den til nattposen og sørg for at tilkoblingen er sikker.

### Monter din basisplate

Ta bort baseplatens beskyttelsesfilm. Strekk huden på magen med en utstrakt hånd og plasser baseplaten over stomien i riktig stilling (begynn lengst nede og arbeid deg opp til toppen). Jobb med fingrene rundt bunnplaten så hydrokolloiden fester godt mot huden og sørg for at platen er sikker.

### Bruk posen din

Ta posen din og fest den til baseplatens ring. Jobb fra bunnen til toppen av ringen. Pass på at posen er sikker og kontrollere posens fullstendige tetning med fingrene.

### Tom posen din

Løft opp kranen og åpne kranen. Tøm innholdet fra posen i toalettet. Steng kranen igjen og pass på at den er ordentlig stengt.

### Inspeksjonsluke

Stomiposen inneholder en inspeksjonsluke som gjør det mulig å inspisere stomien og sekresjonen fra stomien. Det er også veldig nyttig når du setter på posen for å sikre at den er riktig plassert over stomien. Løft det ikke-vevde stoffet til inspeksjonsdøren for inspeksjon.

## **Avfallshåndtering av posen din**

Ta bort posen og kast den i søppelbøtten. Ikke spyl ned din brukte pose i toalettet, da det kan forårsake tilstopping i ditt avløpssystem.

## **Hyppighet for bytting av pose**

Bytt/tøm posen i henhold til råd fra helsepersonellet.

## **PL - Instrukcja użycia**

### **Przewidziane zastosowanie, opis produktu i informacje o materiałach**

Worki stomijne służą do zbierania produktów przemiany materii z organizmu i są zwykle mocowane do skóry nad chirurgicznie wylonioną stomią. Produkty stomijne Zensiv to gama 1-częściowych i 2-częściowych worków stomijnych oraz 2-częściowych kołnierzy w różnych rozmiarach i kształtach. Wszystkie 1-częściowe worki i 2-częściowe kołnierze posiadają przyjazną dla skóry hydrokoloidową płytkę przylegającą do ciała, która przed użyciem jest zabezpieczona folią antyadhezyjną, na której zaznaczono otwór do wycięcia. Worek na produkt jest wykonany z folii antyzapachowej z komfortową warstwą włókniny i filtrem węglowym do neutralizacji zapachu (w przypadku ileostomii i kolostomii). Worki do ileostomii posiadają zwijane ujęście do drenażu zabezpieczone zintegrowanym zamknięciem na rzep, a w każdym opakowaniu znajdują się również zaciski i miękkie opaski. Worki do urostomii posiadają miękki polimerowy kranik ułatwiający drenaż. Wszystkie worki posiadają okienko umożliwiające kontrolę stomii w razie potrzeby. Niektóre gamy produktów posiadają otwór wentylacyjny z pokrywą do odpowietrzania worka w razie potrzeby. Wszystkie produkty stomijne Zensiv są pozbawione lateksu oraz składników pochodzenia zwierzęcego. Produkty te są niesterylne i mogą być stosowane we wszystkich odpowiednich okolicznościach, w których lekarz prowadzący lub pracownik ochrony zdrowia zdecyduje, że można zastosować produkt niesterylny.

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Każdy worek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Ponowne użycie może prowadzić do zanieczyszczenia krzyżowego. - Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami pracownika ochrony zdrowia. - Przed użyciem przeczytać instrukcję. - Jeśli podczas używania worków wystąpią jakiegokolwiek reakcje alergiczne lub problemy, należy przerwać korzystanie z nich i skontaktować się z pracownikiem ochrony zdrowia.

### **Przeciwwskazania**

Urządzenia te nie powinny być używane przez osoby o wrażliwości na: polietylen, poliamid, węgiel medyczny, polimer syntetyczny, octan etylenowy -winylowy, polipropylen, poliester, polioizobutylen, karboksymetylocelulozę, pektynę lub glicerynę, żel akrylowy, spandex.

### **Warunki przechowywania**

Produkty najlepiej przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od 0°C do 27°C, zgodnie z informacją na etykiecie produktu.

### **Poważne wypadki**

Jeżeli w wyniku użytkowania produktu dojdzie do poważnego wypadku, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu producentowi i właściwym władzom w kraju zamieszkania.

### **Okres trwałości**

Użyć przed upływem daty ważności podanej na etykiecie.

### **Przygotowanie wszystkich przedmiotów**

Upewnić się, że wszystkie niezbędne przedmioty są gotowe do użycia. Przygotować miarkę stomijną, nożyczki, długopis, mokrą i suchą gazę, worek stomijny oraz kołnierz.

### **Wybór właściwego rozmiaru**

Zmierzyć stomię za pomocą miarki i przyciąć (jeśli to konieczne) kołnierz do odpowiedniego rozmiaru stomii. Upewnić się, że wybrano właściwy rozmiar, aby stomia i otaczająca ją skóra pozostały zdrowe. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe dopasowanie, należy pozostawić maksymalnie 2 mm wolnej przestrzeni między stomią a kołnierzem. Jeśli rozmiar jest zbyt duży, kał może uszkodzić skórę. Jeśli rozmiar jest zbyt mały, kołnierz może uszkodzić stomię. Z czasem stomia może zmienić swój kształt lub rozmiar, dlatego okresowo mogą być wymagane ponowne pomiary, aby zapobiec przeciekaniu.

### **Przygotowanie skóry**

Przytrzymać skórę i ostrożnie zdjąć kołnierz. Nie odrywać, lecz odsunąć skórę od kołnierza. W razie potrzeby użyć mokrej gazy. Umyć skórę wokół stomii ciepłą, czystą wodą. Nie używać do mycia skóry produktów zawierających alkohol, perfumy lub eter, aby nie uszkodzić skóry. Nie pocierać skóry zbyt mocno, gdyż może dojść do jej uszkodzenia. Osuszyć skórę starannie i dokładnie, aby upewnić się, że worek dobrze przylega. Opcjonalnie: Jeśli skóra jest podrażniona i obolała, można użyć kremu ochronnego, pudru hydrokoloidowego lub gazików ochronnych. Zastosować puder, krem ochronny lub gazik delikatnie na otaczającą skórę.

### **Zamknięcie kraniku u podstawy worka**

Najpierw należy upewnić się, że kranik jest bezpiecznie zamknięty. Zamknąć kranik, mocno go naciskając.

### **Podłączenie worka stomijnego do worka na noc**

Worek posiada uniwersalny kranik. Kranik ten można podłączyć do prawie każdego typu i marki ten worka na noc. Otworzyć kranik worka, podłączyć go do łącznika worka na noc i upewnić się, że połączenie jest bezpieczne.

### **Dopasowywanie płytki**

Zdjąć papier zabezpieczający z płytki. Rozciągnąć skórę brzucha płaską dłonią i umieścić płytkę nad stomią we właściwej pozycji (należy zacząć od dołu i kierować się ku górze). Objąć palcami płytkę, aby hydrokoloid dobrze przylegał do skóry, i upewnić się, że płytka jest dobrze przymocowana.

### **Mocowanie worka**

Wziąć worek i zatrasnąć go na pierścieniu płytki. Zacząć od dołu i kierować się ku górze pierścienia. Upewnić się, że worek jest przymocowany, i sprawdzić palcami, czy dobrze przylega.

### **Opróżnianie worka**

Podnieść kranik i otworzyć go. Opróżnić zawartość worka do toalety. Ponownie zamknąć kranik, upewniając się, że jest szczelnie zamknięty.

### **Okienko**

Worek stomijny posiada okienko, które umożliwia kontrolę stomii oraz jej ujęcia. Jest również bardzo pomocne podczas zakładania worka, aby upewnić się, że jest on prawidłowo umieszczony nad stomią. W celu kontroli należy podnieść warstwę włókniny okienka.

### **Utylizacja worka**

Wyjąć worek i wyrzucić go do kosza. Nie splukiwać zużytego worka w toalecie, ponieważ spowoduje to zablokowanie kanalizacji.

### **Częstotliwość wymiany worka**

Wymieniać/opróżniać worek zgodnie z zaleceniami pracownika ochrony zdrowia.

## **PT - Instruções de uso**

### **Uso pretendido, descrição do produto e informações de materiais**

Bolsas para ostomia são usadas para coletar resíduos do corpo e geralmente são fixadas à pele sobre um estoma realizado cirurgicamente. A gama de produtos Zensiv Ostomy contém bolsas para ostomia de 1 e 2 peças e flanges de 2 peças em vários tamanhos e formas. Todas as bolsas de 1 peça e flanges de 2 peças apresentam um wafer hidrocolóide que não agride a pele, para adesão ao corpo, e, antes do uso, é protegido com uma película de liberação que mostra uma guia de corte. O produto «bolsa» é fabricado em filme de barreira contra odores com uma camada de não-tecido confortável e um filtro de carbono para controle de odores (para ileostomia e colostomia). As bolsas para ileostomia têm uma abertura de drenagem de enrolar, protegida com um fecho do tipo 'velcro' integrado ou existem braçadeiras e laços flexíveis fornecidos em cada caixa. Para urostomia, as bolsas possuem uma torneira de polímero macio para fácil drenagem. Todas as bolsas têm uma janela de visualização para inspecionar o estoma, se necessário. Alguns produtos da linha apresentam um respiradouro com tampa para ventilar a bolsa, se necessário. Todos os produtos Zensiv Ostomy não contêm látex e não contêm ingredientes de origem animal. Os produtos não são estéreis e podem ser usados em quaisquer circunstâncias apropriadas em que o médico assistente ou profissional de saúde decida que um produto não estéril possa ser aplicado.



### **Avisos - Precauções**

- Cada bolsa é para uso único. Não reutilize. A reutilização pode levar a uma contaminação cruzada. - Use somente conforme indicado pelo seu profissional de saúde. - Leia as instruções antes de usar. - Interrompa o uso e entre em contato com o seu profissional de saúde se tiver reações alérgicas ou problemas ao usar as bolsas.

### **Contraindicações**

Esses dispositivos não devem ser usados por ninguém com sensibilidade conhecida a: polietileno, poliamida, carvão medicinal, polímero sintético, etileno acetato de vinila, polipropileno, poliéster, poliisobutileno, carboximetilcelulose, pectina ou glicerina, gel acrílico, spandex.

### **Condições de armazenamento**

É melhor armazenar seus produtos em um local fresco e seco com uma temperatura de 0°C a 27°C conforme indicado no rótulo do produto.

### **Incidentes Graves**

Caso ocorra um incidente grave como resultado do uso do produto, informe imediatamente o fabricante e a autoridade competente do país onde você reside.

### **Validade**

Use dentro do prazo de validade indicada no rótulo.

### **Colete seus materiais**

Certifique-se de que todos os materiais necessários estão prontos para uso. Pegue um guia de medição, uma tesoura, uma caneta, uma gaze húmida e seca e uma bolsa para estoma e flange.

### **Escolha o tamanho certo**

Meça o seu estoma com uma guia de medição e corte (se necessário) o flange no tamanho certo do estoma. Certifique-se de escolher o tamanho certo para que o estoma e a pele ao redor permaneçam saudáveis. Deixe no máximo 2 mm de espaço entre o estoma e o flange para um adapte correto e seguro. Se o tamanho for muito grande, suas fezes danificarão a pele. Se o tamanho for muito pequeno, o flange danificará o estoma. Com o tempo, seu estoma pode mudar de forma ou tamanho, portanto, medições periódicas podem ser necessárias novamente para evitar qualquer vazamento.

### **Prepare sua pele**

Apoie a pele e remova o flange com cuidado, não arranque, mas empurre a pele para trás do flange, use uma gaze húmida, se necessário. Lave a pele ao redor do estoma com água morna e não perfumada. Não use nada que contenha álcool, perfume ou éter para limpar sua pele, pois pode causar danos. Não esfregue a pele com muita força, pois isso pode causar danos à pele. Seque a pele cuidadosa e completamente para garantir que sua bolsa adira bem. Opcional: Se sua pele estiver irritada e dolorida, você pode usar um creme de proteção para a pele, pó de hidrocolóide ou lenços de proteção para a pele. Aplique o pó, creme de proteção para a pele ou limpe suavemente na pele circundante.

### **Feche a torneira na base da bolsa**

Primeiro certifique-se de que a torneira está fechada com segurança. Feche a torneira pressionando-a com firmeza.

### **Conectando sua bolsa a uma bolsa noturna**

A bolsa possui uma torneira universal. Esta torneira pode ser conectada a quase qualquer tipo e marca de bolsa noturna. Abra a torneira da bolsa e conecte-a ao conector da bolsa noturna e verifique se a conexão está firme.

### **Ajuste sua placa de base**

Remova o papel de liberação da placa de base. Estique a pele de seu abdômen com a mão espalmada e coloque a placa de base sobre o seu estoma na posição correta (comece na parte inferior e prossiga até o topo). Passe os dedos ao redor da placa de base para que o hidrocolóide se una bem à pele e certifique-se de que a placa esteja firme.

### **Aplique sua bolsa**

Pegue sua bolsa e encaixe-a no anel da placa de base. Vá trabalhando desde a parte inferior até a parte superior do anel. Certifique-se de que sua bolsa esteja segura e controle a vedação completa da bolsa com os dedos.

### **Esvazie sua bolsa**

Levante a torneira e abra a torneira. Esvazie o conteúdo de sua bolsa no WC. Feche a torneira novamente, certificando-se de que está bem fechada.

### **Janela de visualização**

A bolsa de ostomia inclui uma janela de visualização que permite inspecionar tanto o estoma quanto o que sai do mesmo. Também é muito útil ao aplicar a bolsa para verificar se ela está localizada corretamente sobre o estoma. Levante o não-tecido da janela de visualização para inspeção.

### **Descarte de sua bolsa**

Remova sua bolsa e descarte-a no lixo. Não jogue a bolsa usada no vaso sanitário, pois isso bloqueará o sistema de esgoto.

### **Frequência de troca de bolsa**

Troque/esvazie a bolsa conforme recomendado pelo seu profissional de saúde.

## **RO - Instrucțiuni de folosire**

### **Utilizare, descriere produs și informații despre materiale**

Pungile de ostomie sunt folosite pentru colectarea deșeurilor din corp și sunt de obicei atașate de piele peste stoma produsă chirurgical. Produsele Zensiv Ostomy se regasesc într-o gamă de punți unitare cat și din 2 bucăți (flansa și punga colectoare), în diferite dimensiuni și forme. Toate pungile dintr-o bucată cat și cele din 2 bucăți au o placă hidrocolidă prietenoasă pentru piele pentru aderența la corp iar aceasta este protejată înainte de utilizare cu un film care prezintă un ghid de tăiere. Punga colectoare este acoperită cu un strat nețesut confort și un filtru de carbon pentru controlul mirosului (pentru ileostomie și colostomie). Pungile pentru ileostomie au fie o închidere tip „velcro” (arici), fie sunt furnizate cleme și legături moi în fiecare cutie. Pentru urostomie, pungile prezintă un robinet de evacuare, din polimer moale pentru o scurgere ușoară. Toate pungile au fereastră de vizualizare pentru a inspecta stoma, dacă este nevoie. În cazul în care este necesar, unele game sunt prevăzute cu un capac pentru ventilarea pungii. Toate produsele Zensiv Ostomy nu conțin latex și nu conțin ingrediente de origine animală. Produsele nu sunt sterile și pot fi utilizate în circumstanțe adecvate, la recomandarea unui medic curant sau a profesionistului din domeniul sănătății.

### **Avertismente-Măsuri de precauție**

- Fiecare pungă este de unică utilizare. Nu reutilizați. Reutilizarea poate duce la contaminare încrucișată. - Utilizați conform indicațiilor date de către specialistul dumneavoastră în sanătate. - Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. - Întrerupeți utilizarea și luați legătura cu specialistul în sanătate dacă aveți reacții alergice sau probleme atunci când utilizați pungile.

### **Contraindicații**

Aceste dispozitive nu trebuie utilizate de către persoanele care au o alergie cunoscută la: polietilenă, poliamidă, cărbune medical, polimer sintetic, acetat de etilen vinil, polipropilenă, poliester, polisobutilenă, carboximetilceluloză, pectină sau glicerină, gel acrilic, spandex.

### **Condiții de depozitare**

Cel mai bine este să stocați produsele într-un loc uscat, cu o temperatură variabilă între 0°C și 27°C, așa cum se menționează pe eticheta produsului.

### **Incidente grave**

Dacă apare un incident grav ca urmare a utilizării produsului, raportați-l imediat producătorului și autorității competente din țara în care vă aflați.

### **Termen de valabilitate**

Utilizarea până la data de expirare menționată pe etichetă.

### **Colectați materialele**

Asigurați-vă că toate materialele necesare sunt gata de utilizare. Folosiți sablonul, o pereche de foarfece, un stilou, tifon umed și uscat și o punga de stoma.

### **Alegeți dimensiunea potrivită**

Măsurați-vă colostoma folosind sablonul și tăiați (dacă este necesar) flansa la dimensiunea corectă a stomei. Asigurați-vă că alegeți dimensiunea potrivită când decupați și pielea din jurul stomei o să rămână sănătoasă. Permiteți maximum 2 mm spațiu între stoma și flansa pentru o potrivire



sigurã și corectã. Dacã dimensiunea este prea mare, materiile fecale vor deteriora pielea. Dacã dimensiunea este prea micã, flanșa va deteriora stoma. De-a lungul timpului, stoma dvs. isi poate schimba forma sau dimensiunea, astfel încãt periodic pot fi necesare din nou mãsurațori pentru a preveni orice scurgere.

#### **Pregãtiți-vã pielea**

Sustineți pielea și îndepãrtați flanșa cu atenție, fara miscari bruste, ci împingeți pielea înapoi de pe flanșã, folosiți un tifon umed dacã este necesar. Curatati pielea din jurul stomei cu apã caldută. Nu folosiți produse care conține alcool sau parfum pentru a vã curãța pielea, deoarece pot provoca iritatii. Nu frecati pielea prea tare, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea pielii. Uscați foarte bine pielea pentru a vã asigura cã punga dvs. aderã bine. Opțional: dacã pielea este iritatã și dureroasã, puteți folosi cremã de protecție pentru piele sau praf hidrocolid. Aplicați pudra, crema de protecție pentru piele ștergeți ușor pielea din jur.

#### **Închideți valva de la baza pungii**

Mai întâi asigurați-vã cã valva este foarte bine inchisa, apãsându-o ferm.

#### **Conectarea pungii la un sac colector de urina**

Punga are un valva universalã. Acesta valva poate fi conectata la aproape orice tip și marcã de sac de noapte. Deschideți valva pungii și conectați-o la conectorul sacului de noapte si asigurați-vã cã sunt bine conectate.

#### **Potrivirea flansei**

Scoateți hãrtia protecoate de pe flanșã. Întindeți pielea abdomenului cu o mână și așezați flanșa peste stoma în poziția corectã (începeți în partea de jos și lipiți spre partea de sus). Apãsați flanșa astfel încãt hidrocoloidul sã se lipeascã bine de piele și asigurați-vã cã flanșa este bine lipitã.

#### **Aplicare pungii pe flansa**

Luați-vã punga și apãsați-o pe inelul flansei. Apasați punga peste flanșã incepnad din partea de jos spre partea de sus a inelului. Asigurați-vã cã punga dvs. este bine etanșatã.

#### **Golirea pungii**

Ridicați partea inferioara a pungii și deschideți valva. Goliți conținutul pungii în toaletã. Închideți valva din si asigurați-va cã este bine închisa.

#### **Fereastra de vizualizare**

Punga de colostomie/ileostomie include o fereastrã de vizualizare care face posibilã inspecția stomei. De asemenea, este foarte utilã atunci când aplicați punga pentru a vã asigura cã este localizata corect peste stomã.

#### **Aruncarea pungii**

Îndepãrtați punga și aruncați-o în coșul de gunoi. Nu aruncați punga folositã in toaletã, deoarece acest lucru vã va bloca sistemul de canalizare.

#### **Frecvența de schimbare a pungii**

Schimbați/goliți punga conform indicațiilor specialistului in sanatate.

## **SE - Bruksanvisning**

### **Avsedd användning, produktbeskrivning och materialinformation**

Stomipåsar används för att samla upp avfall från kroppen och är vanligtvis fästa vid huden över en kirurgiskt framställd stomi. Zensiv stomiprodukter är en serie stomipåsar med 1-dels och 2-dels och plattor i olika sorter/varianter, storlekar och former. Alla 1-dels påsar och 2-dels plattor har en hudvänlig hydrokolloidplatta för vidhäftning till kroppen och detta skyddas före användning med en uppklipningsbar skyddsfilm. Stomipåsen är tillverkad av luktkärrärfilm med ett bekvämt non-woven lager och ett kolfilter för luktkontroll (för ileostomi och kolostomi). Ileostomipåsar har antingen ett upprullningsbart lås som är säkrat med ett integrerat "kardborrband" eller så finns klämmor och mjuka band i varje låda. För urostomi har påsarna en mjuk polymerkran för enkel dränering. Alla påsar har ett visningsfönster för inspektion av stomin vid behov. Vissa påsar har en luftningslucka för att ventilera påsen vid behov. Alla Zensiv stomiprodukter är latexfria och innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung. Produkterna är icke-sterila och kan användas under alla lämpliga omständigheter där den behandlande läkaren eller vårdpersonalen beslutar att en icke-steril produkt kan användas.

### **Varningar-försiktighetsåtgärder**

- Varje påse är endast avsedd för engångsbruk. Återanvänd inte. Återanvändning kan leda till korskontaminering. - Använd endast enligt anvisningar från din sjukvårdspersonal. - Läs instruktionerna före användning. - Avbryt användningen och kontakta din sjukvårdspersonal om du upplever allergiska reaktioner eller problem när du använder påsarna.

### **Kontraindikationer**

Dessa enheter bör inte användas av någon med känd känslighet för: polyeten, polyamid, medicinsk kol, syntetisk polymer, etenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylen, karboximetylcellulosa, pektin eller glycerol, akrylgel, spandex.

### **Förvaringsförhållanden**

Det är bäst att förvara dina produkter på en sval, torr plats med en rekommenderad temperatur från 0°C till 27°C, som anges på produktetiketten.

### **Allvarliga incidenter**

Om en allvarlig händelse skulle uppstå till följd av att du använder produkten, vänligen rapportera detta omedelbart till leverantören och den behöriga myndigheten i det land där du bor.

### **Hållbarhetstid**

Använd före utgångsdatumet som anges på förpackningen.

### **Förbered dina produkter**

Se till att alla nödvändiga produkter är färdiga för användning. Förbered en mätguide, en sax, en penna, våta och torra gasbindor och en stomipåse och platta.

### **Välj rätt storlek**

Mät din stomi med en mätguide och klipp (om nödvändigt) plattan till stomistorleken. Se till att du väljer rätt storlek så att stomin och omgivande hud förblir friska. Tillåt 2 mm utrymme mellan din stomi och platta för en säker och korrekt passform. Om storleken är för stor, kommer din avföring att skada huden. Om storleken är för liten skadar plattan stomin. Med tiden kan din stomi ändra form eller storlek, så periodvis kan mätningar krävas igen för att förhindra läckage.

### **Förbered din hud**

Stöd huden och ta bort plattan försiktigt, riv inte av den utan skjut tillbaka huden från plattan, använd vid behov en våt gasbinda. Tvätta huden som omger stomin med varmt och oparfymmerat vatten. Använd inte något som innehåller alkohol, parfym eller eter för att rengöra huden eftersom det kan orsaka skador. Gnid inte huden för hårt eftersom det kan leda till hudskador. Torka huden försiktigt och noggrant så att din påse fäster bra. Valfrritt: Om din hud är irriterad och öm kan du använda hudbarriärkräm, hydrokolloidpulver eller hudbarriärservetter. Applicera pulver, hudbarriärkräm eller torka försiktigt på den omgivande huden.

### **Stäng utloppet vid botten av påsen**

Se först till att utloppet är stängd på ett säkert sätt. Stäng utloppet genom att trycka ordentligt på tappen.

### **Anslut din stomipåse till en nattpåse**

Påsen har en universalkran. Denna kran kan anslutas till nästan alla typer och märken av nattpåsar. Öppna kranen på påsen och anslut den till nattpåsen och se till att anslutningen är säker.

### **Montera din basplatta**

Ta bort basplattans skyddsfilm. Sträck huden på buken med en utsträckt hand och placera basplattan över stomin i rätt läge (börja längst ner och arbeta dig upp till toppen). Arbeta med fingrarna runt bottenplattan så att hydrokolloiden fäster bra mot huden och se till att plattan är säker.

### **Applicera din påse**

Ta din påse och klicka fast påsen på basplattans ring. Arbeta från botten till toppen av ringen. Se till att din påse är säker och kontrollera påsens fullständiga tätning med fingrarna.

### **Töm din påse**

Lyft upp kranen och öppna kranen. Töm innehållet från din påse i toaletten. Stäng kranen igen och se till att den är ordentligt stängd.

### **Inspektionslucka**



Stomipásen innehåller en inspektionslucka som gör det möjligt att inspektera stomin och utsöndring från stomin. Det är också till stor hjälp när du applicerar påsen för att se till att den är korrekt placerad över stomin. Lyft upp non-woven tyget till inspektionsluckan för inspektion.

#### **Avfallshantering av din påse**

Ta bort påsen och kassera den i papperskorgen. Spola inte ner din använda påse i toaletten, eftersom det kan orsaka stopp i ditt avloppssystem.

#### **Frekvens för byte av påse**

Byt/töm påsen enligt råd från din sjukvårdspersonal.

## **SI - Navodila za uporabo**

### **Predvidena uporaba, opis izdelka in bistvene informacije**

Vrečke za stomo omogočajo zbiranje izločkov iz telesa. Običajno se pritrdijo na kožo čez kirurško oblikovano stomo. Vrečke za stomo Zensiv so linija enodelnih in dvodelnih zbiralnih vrečk za stomo in dvodelnih prirobnic različnih velikosti in oblik. Vse enodelne vrečke in dvodelne prirobnice imajo koži prijazno hidrokoloidno podlogo, ki se prilepi na telo, in so pred uporabo zaščitene z zaščitno folijo, na kateri je označen vzorec za izrez. Vrečke so izdelane iz materiala, ki preprečuje širjenje neprijetnih vonjav, z netkanim slojem, ki zagotavlja udobje, in ogljikovim filtrom za obvladovanje neprijetnih vonjav (pri ileostomi in kolostomi). Vrečke za ileostomo imajo odtočno odprtino, ki se zvije in zavaruje z velcro trakom, ali pa je izdelek opremljen s sponkami ali podobnimi pritrdilnimi pripomočki. Vrečke za urostomo imajo odtočno odprtino iz mehkih polimerov, ki omogoča enostavno izpraznjevanje seča. Vse vrečke so opremljene s pregledovalnim okencem, ki omogoča preverjanje stome, če je to potrebno. Nekateri izdelki imajo tudi ventil s pokrovom, ki omogoča zračenje stome, če je to potrebno. Vsi izdelki za oskrbo stome Zensiv so brez lateksa in ne vsebujejo sestavin živalskega izvora. Izdelki so nesterilni in se lahko uporabljajo v vseh ustreznih okoliščinah, ko zdravnik ali medicinski strokovnjak odloči, da je uporaba nesterilnih izdelkov primerna.

### **Opozorila/Previdnostni ukrepi**

- Vsaka vrečka je namenjena le za enkratno uporabo. Vrečk ne uporabljaj te ponovno. Ponovna uporaba lahko vodi do navzkrižne kontaminacije. - Izdelek uporabljajte v skladu z navodili zdravnika. - Pred uporabo preberite navodila. - Če imate zaradi uporabe vrečk alergij sko reakcijo ali druge težave, vrečko prenehajte uporabljati in se obrnite na svojega zdravnika.

### **Kontraindikacije**

Teh pripomočkov ne smejo uporabljati ljudje, ki so občutljivi na: polietilen, poliamid, medicinsko oglje, sintetične polimere, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, poliizobutilen, karboksimetilcelulozo, pektin ali glicerol, akrilni gel, elastan.

### **Pogoji shranjevanja**

Izdelke hranite na hladnem suhem mestu pri temperaturi med 0°C in 27°C, kot zapisano na oznaki izdelka.

### **Resni zapleti**

V primeru, da pride zaradi uporabe tega izdelka do resnih zapletov, to nemudoma javite proizvajalcu in pristojnemu organu države, v kateri prebivate.

### **Rok trajanja**

Rok trajanja je naveden na izdelku.

### **Prilagodite vse potrebne pripomočke**

Prepričajte se, da so vsi potrebni pripomočki pripravljani za uporabo. Potrebujete merilni pripomoček, škarje, pisalo, mokro in suho gazo, vrečko za stomo in prirobnico.

### **Izberite pravo velikost**

Z merilnim pripomočkom izmerite svojo stomo in (po potrebi) odrežite prirobnico, da bo njena velikost ustrezala velikosti vaše stome. Izberite pravo velikost, da bo vaša stoma in koža okoli nje ostala zdrava. Poskrbite za 2 mm razmika med vašo stomo in prirobnico, da zagotovite varno in pravilno namestitvev. Če je prirobnica prevelika, bo blato poškodovalo vašo kožo. Če je prirobnica premajhna, bo poškodovala stomo. S časom se lahko oblika ali velikost vaše stome spreminja, tako da morate stomo redno meriti, da preprečite neželeno iztekanje.

### **Prilagodite svojo kožo**

Podprite kožo in previdno odstranite prirobnico, ne odtrgajte je, temveč počasi potiskajte kožo stran od prirobnice, po potrebi uporabite mokro gazo. Kožo okoli stome umijte s toplo in čisto vodo. Za čiščenje kože ne uporabljajte ničesar, kar vsebuje alkohol, parfum ali eter, saj lahko s tem poškodujete stomo. Kožo ne drgnite premočno, saj lahko to vodi do poškodb kože. Previdno in temeljito posušite kožo, da se bo vrečka dobro prilepila. Poljubno: Če je vaša koža razdražena in boleča, lahko uporabite kremo za zaščito kože, hidrokoloidni gel ali vlažilne robčke. Previdno nanesite kremo ali gel na razdraženo kožo.

### **Zaprte odvodni čep na dnu vrečke**

Prepričajte se, da je čep dobro zaprt. Čep zaprete tako, da ga tesno stisnete.

### **Povežite vašo vrečko za stomo z nočno zbiralno vrečko**

Vrečka ima univerzalen čep. Ta čep lahko povežete s skoraj vsemi vrstami nočnih zbiralnih vrečk raznih proizvajalcev. Odprite čep vrečke in ga povežite s priključkom nočne zbiralne vrečke ter se prepričajte, da stik ne pušča.

### **Namestite podlogo**

Odstranite zaščitni papir podloge. Z dlanjo raztegnite kožo vašega trebuha in podlogo namestite čez vašo stomo na pravilen položaj (začnite na dnu in nadaljujte proti vrhu). S prsti sledite robu podloge, da se hidrokoloid dobro prime na kožo. Prepričajte se, da se podloga tesno prilega.

### **Namestite vrečko**

Vzemite vrečko in jo priključite na obroč podloge. Začnite na dnu in nadaljujte proti vrhu obroča. Prepričajte se, da je vrečka pravilno nameščena in s prsti preverite, če popolnoma tesni.

### **Izpraznite vrečko**

Dvignite čep in ga odprite. Vsebinske vrečke izpraznite v straniščno školjko. Ponovno zaprite čep in preverite, da dobro tesni.

### **Pregledovalno okence**

Vrečke za stomo so opremljene s pregledovalnim okencem, s pomočjo katerega lahko preverite stomo in izločke, ki prihajajo iz nje. Okence pomaga tudi pri tem, da vrečko pravilno namestimo čez stomo. Za ogled stome dvignite netkano površino pregledovalnega okenca.

### **Odstranjevanje vrečk**

Snemite vrečko in jo ustrezno odstranite v smeti. Uporabljene vrečke ne mečite v stranišče, saj boste tako zamašili kanalizacijski sistem.

### **Kako pogosto menjati vrečke**

Vrečke praznite/menjajte v skladu z navodili vašega zdravnika.

## **SK - Instrukcie na používanie**

### **Určené použitie, popis produktu a informácie o materiáli**

Stomické vrečky sa používajú na zachytávanie obsahu čreva a zvyčajne sa priložia na pokožku cez chirurgicky vytvorenú stómiu. Produkty Zensiv Ostomy sú radom jednodielnych a dvojdielnych stomických vreciek a dvojdielnych podložiek v rôznych veľkostiach a tvaroch. Všetky jednodielne vrecká a dvojdielne podložky obsahujú hydrokoloidnú vrstvu šetrnú k pokožke na príľnutie k telu, ktorá je pred použitím chránená ochrannou fóliou s ystrihovacou šablónou. Vrecko je vyrobené z ochranného filmu proti zápachu s príjemnou netkanou vrstvou a uhlíkovým filtrom na kontrolu zápachu (na ileostómiu a kolostómiu). Ileostomické vrecká majú buď rolovací výpusť zabezpečený zavedeným uzáverom zo suchého zipsu alebo sa v každom balení dodávajú svorky a mäkké pásiky. Urostomické vrecká majú výpusť z mäkkého polyméru na jednoduché vypúšťanie. Všetky vrecká majú prehľadnú časť na kontrolovanie stómie v prípade potreby. Niektoré rady produktov obsahujú ventil s krytom na vetranie vrecka, ak je to potrebné. Produkty Zensiv Ostomy neobsahujú latex ani zložky živočíšneho pôvodu. Produkty sú nesterilné a môžu sa použiť za akýchkoľvek vhodných okolností, keď ošetrojúci lekár alebo zdravotnícky pracovník rozhodne, že sa môže použiť nesterilný produkt.

### **Upozornenia a bezpečnostné opatrenia**

- Každé vrecko je určené len na jednorazové použitie. Nepoužívajte ho opakovane. Opakované použitie môže viesť ku križovej kontaminácii. - Používajte len podľa pokynov vášho zdravotníckeho pracovníka. - Pred použitím si prečítajte návod. - Ak sa pri používaní vreciek vyskytnú alergické reakcie alebo problémy, prestaňte vrecká používať a kontaktujte svojho lekára.

## Kontraindikácie

Tieto pomôcky by nemali používať osoby so zná moudcitlivosťou na: polyetylén, polyamid, lekárske uhlie, syntetický polymér, etylénvinylacetát, polypropylén, polyester, polyizobutylén, karboxymetylcelulóza, pektín alebo glycerín, akrylový géľ, spandex.

## Podmienky skladovania

Produkty je najlepšie skladovať na chladnom suchom mieste s regulovaním teploty od 0°C do 27°C, ako je uvedené na obale produktu.

## Závažné nežiaduce udalosti

Ak v dôsledku používania nastane závažná nežiaduca udalosť, ihneď to ohláste výrobcovi a príslušnému orgánu v krajine vášho bydliska.

## Doba použiteľnosti

Používajte do dátumu expirácie uvedeného na obale.

## Pripravte si pomôcky

Uistite sa, že máte pripravené všetky potrebné pomôcky. Pripravte si meraciu šablónu, nožnice, pero, vlhkú a suchú gázu a stomické vrečko a podložku.

## Vyberte si správnu veľkosť

Zmerajte si stómiu pomocou šablóny a (v prípade potreby) vystrihnite podložku na správnu veľkosť stómie. Uistite sa, že ste zvolili správnu veľkosť, aby zostala stómia aj okolitá pokožka zdravá. Medzi stómiou a podložkou nechajte najviac 2 mm na bezpečné a správne používanie. Ak bude podložka príliš veľká, výkaly poškodia pokožku. Ak bude podložka príliš malá, poškodí podložka stómiu. Stómia môže v priebehu času meniť veľkosť a tvar, preto môžu byť potrebné pravidelné merania, aby sa zabránilo úniku.

## Pripravte pokožku

Pridržte pokožku a opatrne odstráňte podložku, nestrhnite ju, ale ťahajte pokožku od podložky, v prípade potreby použite vlhkú gázu. Pokožku okolo stómie umyte teplou vodou bez parfumov. Na umývanie pokožky nepoužívajte žiadne prípravky s obsahom alkoholu, parfumu alebo éteru, pretože môžu pokožku podráždiť. Nešúchajte pokožku príliš silno, aby ste ju nepoškodili. Opatrne a dôkladne osušte pokožku, aby vrečko dobre prilnulo k pokožke. Voliteľné: Ak máte podráždenú alebo bolestivú pokožku, môžete použiť bariérový krém, hydrokoloidný prášok alebo ochranné rúško. Jemne aplikujte prášok, bariérový krém alebo ochranné rúško na okolitú pokožku.

## Uzatvorte výpusť na vrečko

Najskôr sa uistite, že výpusť je bezpečne uzatvorená. Výpusť zatvorte silným stlačením výpustu.

## Pripojenie vrečka k nočnému zbernému vrečku

Vrečko má univerzálny výpusť. Tento výpusť je možné pripojiť takmer ku všetkým typom a značkám nočného zberného vrečka. Otvorte výpusť na vrečko, pripojte ho k otvoru na nočnom vrečku a uistite sa, že spoj je zabezpečený.

## Pripevnite podložku

Odstráňte ochrannú fóliu z podložky. Dlaňou natiahnite pokožku na bruchu a priložte podložku na stómiu do správnej polohy (začnite zospodu a postupne pokračujte nahor). Prstami prítlačajte okolie podložky, aby hydrokoloid dobre prilnol k pokožke, a uistite sa, že podložka je zabezpečená.

## Nasadte si vrečko

Vrečko pripievňte ku krúžku podložky. Prítlačajte zospodu krúžku až nahor. Uistite sa, že vrečko je zabezpečené, a prstami skontrolujte prilnutie vrečka.

## Vyprázdňte vrečko

Zdvihnite výpusť a otvorte uzáver. Vyprázdňte obsah vrečka do toalety. Znova uzatvorte výpusť a uistite sa, že je bezpečne uzatvorená.

## Priehľadný otvor

Stomické vrečko obsahuje priehľadné okienko, vďaka ktorému je možné kontrolovať stómiu, ako aj výtok zo stómie. Tento otvor je tiež veľmi nápomocný pri nasádzaní vrečka, aby bolo umiestnené správne na stómiu. Zdvihnite netkanú časť priehľadného otvoru a skontrolujte stómiu.

## Likvidácia vrečka

Odstráňte vrečko a zahodte ho do koša. Nesplachujte vrečko do toalety, pretože upcháva vašu kanalizáciu.

## Frekvencia vymieňania vrečka

Vymieňajte/vyprázdňujte vrečko podľa pokynov zdravotníckeho pracovníka.

## TR - Kullanım talimatları

### Kullanım Amacı, Ürün Açıklaması ve Malzeme Bilgileri

Ostomi torbaları vücudun atıklarının toplanması için kullanılır ve genellikle cerrahi olarak yapılmış bir stoma üzerinden cilde tutturulur. Zensiv Ostomy ürünleri, çeşitli boyut ve şekillerde 1 parçalı ve 2 parçalı ostomi poşetlerinden ve 2 parçalı flanşlara (NOT: Flanşdan emin değilim, ürünün fotoğrafını bulmaya çalıştım ama olmadı. Kapak, bağlantı, bağ vs. daha doğru olabilir) değişmektedir. Tüm 1 parçalı poşetler ve 2 parçalı flanşlar, vücuda yapışması için cilt dostu bir hidrokoloid tabakaya sahiptir ve bu, kullanımdan önce kesme kılavuzunu gösteren bir ayırma filmi ile korunur. Ürünün poşeti, kokuların kontrol edilmesi amacıyla rahat dokuma olmayan bir katmanlı ve (ileostomi ve kolostomi için) bir karbon filtreli kokuyu engelleyen ince bir tabakadan üretilmiştir. İleostomi torbalarının ya entegre bir 'cirt cirtli' tip kapakla sabitlenmiş bir rulo drenaj portu vardır ya da her kutuda temin edilen kelepçeler ve yumuşak bağlar bulunur. Ürostomide, keseler, kolay drenaj için yumuşak bir polimer musluk taşır. Tüm torbalarda gerektiğinde stomayı incelemek için bir görüntüleme penceresi vardır. Bazı serilerde gerektiğinde poşetin havalandırılması için kapaklı bir havalandırma vardır. Tüm Zensiv Ostomy ürünleri lateks içermez ve hayvansal kökenli bileşenler içermez. Ürünler steril değildir ve ilgili doktorun veya sağlık uzmanının steril olmayan bir ürünün uygulanabileceğine karar verdiği her türlü uygun durumda kullanılabilir.

### Uyarılar - Önemler

- Her kese yalnızca tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayın. Yeniden kullanım çapraz bulaşmaya yol açabilir. - Yalnızca sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde kullanın. - Kullanmadan önce talimatları okuyun. - Torbaları kullanırken herhangi bir alerjik reaksiyon veya sorunla karşılaşırsanız, kullanmayı bırakın ve sağlık uzmanınıza başvurun.

### Kontrendikasyonlar

Bu cihazlar, polietilen, poliamid, tıbbi kömür, sentetik polimer, etilen vinil asetat, polipropilen, polyester, poliizobütülen, karboksimetilselüloz, pektin veya gliserine duyarlılığı olduğu bilinen kişiler tarafından kullanılmamalıdır, akrilik jel, spandex.

### Saklama koşulları

Ürünlerinizi serin ve kuru bir yerde, ürün etiketinde belirtildiği gibi 0°C ile 27°C sıcaklık öğüdüyle saklamanız en doğrusudur.

### Saklama koşulları

Ürünün kullanılması sonucunda ciddi bir olay meydana gelirse, lütfen bunu derhal üreticiye ve ikamet ettiğiniz ülkedeki Yetkili Otoriteye bildirin.

### Raf ömrü

Etiketle belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanın.

### Malzemelerinizi toplayın

Gerekli tüm malzemelerin kullanıma hazır olduğundan emin olun. Bir ölçüm kılavuzu, makas, kalem, ıslak ve kuru gazlı bez ve stoma kesesini ve flanşını bir araya getirin.

### Doğru boyutu seçin

Stomanızı bir ölçüm kılavuzuyla ölçün ve (gerekirse) kulağı stomanın doğru boyutuna göre kesin. Stomanın ve çevresindeki cildin sağlıklı kalması için doğru boyutu seçtiğinizden emin olun. Güvenli ve doğru bir uyum için stomanızla kulak arasında maksimum 2 mm boşluk bırakın. Boyutu çok büyükse dışkıınız cilde zarar verecektir. Boyut çok küçükse flanş stomaya zarar verecektir. Zamanla stomanızın şekli veya boyutu değişebilir, bu nedenle herhangi bir sızıntıyı önlemek için periyodik ölçümlerin tekrar yapılması gerekebilir.

### Cildinizi hazırlayın

Cildi destekleyin ve kulağı dikkatlice çıkarın, yırtmayın, deriyi kulaktan geriye doğru itin, gerekirse ıslak gazlı bez kullanın. Stomanızı çevreleyen cildi ılık ve parfümsüz suyla yıkayın. Cildinizi temizlemek için alkol, parfüm veya eter içeren herhangi bir şey kullanmayın çünkü bu zarar verebilir. Cildi çok sert ovalamayın çünkü bu ciltte hasara yol açabilir. Kesenizin iyice yapıştığından emin olmak için cildi dikkatli ve iyice kurulayın. İsteğe bağlı: Cildiniz tahriş olmuş ve ağrıyorsa cilt bariyer kremi, hidrokoloid toz veya cilt bariyeri mendillerini kullanabilirsiniz. Tozu, cilt bariyeri kremi uygulayın veya çevredeki cilde nazıkçe silin.

### **Torbanin tabanındaki musluğu kapatın**

Öncelikle musluğun güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun. Musluğa kuvvetlice basarak musluğu kapatın.

### **Torbanızı gece çantasına bağlama**

Kesenin evrensel bir musluğu vardır. Bu musluk hemen hemen her tür ve markadaki gece çantasına bağlanabilir. Torbanın musluğunu açın ve bunu gece çantasının konektörüne bağlayın ve bağlantısının sağlam olduğundan emin olun.

### **Taban plakasını takın**

Taban plakasının yapışkanlı kağıdını çıkarın. Elinizi düzleştirerek, karnınızın derisini gerin ve taban plakasını stomanızın üzerine doğru konuma yerleştirin (alttan başlayın ve yukarıya doğru ilerleyin). Hidrokolloidin cilde iyice yapışması için parmaklarınızı taban plakasının etrafında gezdirin ve plakanın ayrılmayacağından emin olun.

### **Torbanızı uygulayın**

Keseni alın ve keseyi taban plakasının halkasına oturtun. Halkanın altından tepesine kadar ilerleyin. Kesenin sağlam olduğundan emin olun ve kesenin tamamen kapandığını parmaklarınızla kontrol edin.

### **Torbanızı boşaltın**

Musluğu kaldırın ve musluğu açın. Kesenin içindekileri tuvalete boşaltın. Güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olarak musluğu tekrar kapatın.

### **Görüntüleme penceresi**

Ostomi torbası, stomanın yanı sıra stomadan çıkan çıktının da incelenmesini mümkün kılan bir görüntüleme penceresi içerir. Ayrıca poşeti uygularken stomanın üzerine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak da çok faydalıdır. İnceleme için görüntüleme penceresinin dokunma olmayan yüzeyini kaldırın.

### **Torbanızın imha edilmesi**

Torbanızı çıkarın ve çöpe atın. Kullanılmış keseni tuvalete atmayın çünkü bu, kanalizasyon sisteminizi tıkayacaktır.

### **Torba değiştirme sıklığı**

Torbanızı sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde değiştirin/boşaltın.

## **UA - Інструкція із застосування**

### **Показання, опис продукту, інформація про склад**

Калоприймачі стомічні призначені для збору кишкових виділень, що виділяються з тіла людини. Калоприймач зазвичай кріпиться навколо стоми, яка сформована хірургічним шляхом. Калоприймачі Zensiv (Зенсів) можуть бути однокомпонентні та двокомпонентні. Пластини двокомпонентних калоприймачів можуть бути різних розмірів та форм. Всі пластини одно- та двокомпонентних калоприймачів вирізняються наявністю сприятливого для шкіри гідроколоїдного адгезиву, що забезпечує приклеювання. Адгезив пластини покритий захисною плівкою, на якій нанесені направляючі лінії для вирізання отвору. Мішок калоприймача виготовлений із плівки, що не пропускає запах і комфортного нетканого покриття та має вбудований карбоновий фільтр для контролю запаху. Ілеостомні калоприймачі можуть закриватись на вбудовану застібку на липучках (велкро), на жорсткий затискач (кліпсу) або на гнучкий затискач, якими комплектується кожна коробка (упаковка). Уростомний мішок обладнаний м'яким полімерним краном для легкого випорожнення. Всі мішки калоприймачів обладнані вікном для інспекції при необхідності. Деякі калоприймачі мають вентиляційний отвір для вентиляції за потреби. Вся стомічна продукція Zensiv (Зенсів) не містить латексу та складових тваринного походження. Продукція є нестерильною і може бути застосована при відповідних обставинах за рішенням терапевта або іншого лікаря про можливість використовувати нестерильну продукцію.

### **Попередження - Застереження**

- Кожний калоприймач – одноразового використання. Не використовуйте виріб повторно. Повторне використання може призвести до перехресного забруднення. - Використовуйте у спосіб, призначений лікарем. - Прочитайте інструкцію перед використанням. - Не використовуйте виріб та проконсультуйтеся з лікарем у разі виникнення алергічних реакцій або інших проблем під час використання.

### **Протипоказання**

Дані виробу не повинні застосовувати люди, у яких була виявлена чутливість до: поліетилену, поліамідів, медичного деревного вугілля, синтетичного полімеру, етиленвінілацетату, поліпропілену, поліестеру, поліізобутилену, карбоксиметилцелюлози, пектину або гліцерину, акриловий гель, спандекс.

### **Умови зберігання**

Найкращі умови для зберігання продукції – прохолодне сухе місце з температурою від 0°C до 27°C, як це зазначено на продуктивій етикетці.

### **Серйозні випадки**

У разі серйозного випадку, пов'язаного з використанням продукції, просимо вас негайно повідомити виробника та компетентні органи вашої країни.

### **Термін придатності**

Кінцева дата (Вжити до) терміну придатності вказана на етикетці продукту.

### **Приготуйте все необхідне**

Переконайтесь, що всі необхідні засоби готові до використання. Приготуйте шаблон для вирізання отвору, ножиці, олівець, вологі та сухі серветки, пластину та мішок стомічний.

### **Визначте правильний розмір**

Виміряйте вашу стому за допомогою шаблону та виріжте (якщо це необхідно) отвір, що відповідає розміру стоми. Переконайтеся, що ви зробили отвір, який відповідає розміру стоми, і шкіра біля стоми буде захищена. Різниця в розмірі отворів стоми та отвору пластини не більше 2 мм є відповідною та безпечною. Якщо отвір буде більшим, кишкові виділення можуть пошкодити шкіру. Якщо отвір буде меншим за розмір стоми, є вірогідність травмування стоми пластиною калоприймача. З часом ваша стома може змінити форму та розмір, періодичне вимірювання необхідне для попередження підтікання кишкових виділень під пластину калоприймача.

### **Підготуйте вашу шкіру**

Притримуючи шкіру, відклейте обережно пластину. Відклеюйте шкіру від пластини, а не відривайте пластину від шкіри. Використовуйте вологі серветки за потреби. Очистіть шкіру навколо стоми теплою чистою водою. Не використовуйте для очищення шкіри нічого, що містить спирт, парфуми чи ефір, оскільки це може завдати шкоди шкірі. Не тріть шкіру занадто сильно, оскільки це може спричинити пошкодження шкіри. Просушіть обережно та ретельно шкіру, щоб забезпечити хорошу адгезію (приклеювання) калоприймача зі шкірою. Додаткова інформація: якщо ваша шкіра подразнена або має ознаки запалення, ви можете використовувати захисний крем-бар'єр, гідроколоїдний абсорбуючий порошок (пудру) або захисні серветки. Нанесіть абсорбуючий порошок чи захисний крем-бар'єр, або легко протріть захисними серветками шкіру навколо стоми.

### **Закрийте дренажний кран для зливу сечі вниз уростомного мішка**

Переконайтесь, що кран закритий надійно. Для надійного закриття міцно натисніть на кран.

### **З'єднання уростомного мішка з нічним сечоприймачем**

Уростомний мішок має універсальний дренажний кран. Цей тип дренажного крану може бути поєднаний майже з усіма типами нічних сечоприймачів. Відкрийте дренажний кран і під'єднайте уростомний мішок до конектора нічного сечоприймача, переконайтеся, що уростомний мішок та нічний сечоприймач з'єднані надійно.

### **Підготуйте пластину**

Видаліть захисну плівку з пластини двокомпонентного калоприймача. Розладьте шкіру навколо стоми рукою і розмістіть пластину в правильне положення (розмістіть спочатку нижню частину пластини, а потім верхню). Притисніть пальцями пластину навколо стоми таким чином, щоб гідроколоїд гарно приклеївся до шкіри, переконайтеся, що пластина приклеєна надійно.

### **Кріплення мішка до пластини**

Візьміть ваш мішок і вдягніть на пластину таким чином, щоб кільце на мішку поєдналось з кільцем на пластині. Починайте вдягати мішок знизу і рухайтеся доверху. Переконайтеся, що мішок надійно прикріплений до пластини та перевірте пальцями, чи надійно вдягнений мішок на пластину по всьому контуру кільця.

**Випорожнення мішка**

Відкрийте дренажний кран. Випорожніть вміст мішка в туалет. Закрийте дренажний кран та переконайтесь, що він закритий надійно.

**Оглядове вікно**

Стомічний мішок обладнаний оглядовим вікном, що дозволяє зробити інспекцію стоми та кишкових виділень. Через оглядове вікно зручно контролювати чи правильно приклеєна пластина калоприймача навколо стоми. Відігніть неткану поверхню вікна для інспекції.

**Утилізація калоприймачів**

Відклейте ваш калоприймач та викиньте його до сміттового баку. Не викидайте використаний калоприймач до туалету (унітазу), бо це спричинить блокування каналізаційної системи.

**Частота заміни калоприймача**

Змінійте/випорожняйте мішок відповідно до рекомендації вашого лікаря.

# 2-PIECE UROSTOMY

